

# ブレスケール

## 鼻息量測定ツール

鼻呼吸の診査・診断がチェアサイドで簡単にできます。  
患者さんや保護者が結果を数値で見ることができるので、  
悪習慣である口呼吸の改善指導をする際に役立ちます。



幼少期から学童期の子供の20～30%が口呼吸をしているとの報告もあり治療の一環として役立ちます。開口と口呼吸は歯列に大きく影響する悪習癖です。




### 使用方法

1. 鼻の下に当てて、口を閉じた状態で鼻息を直接スケールに当てます。
2. 曇り具合を数値でみて、目盛りの数字をカルテに記録します。



- 鼻息が無理なくスムーズに出ているか
- 左右均等に出ているのか
- 量はどのくらいでているのか

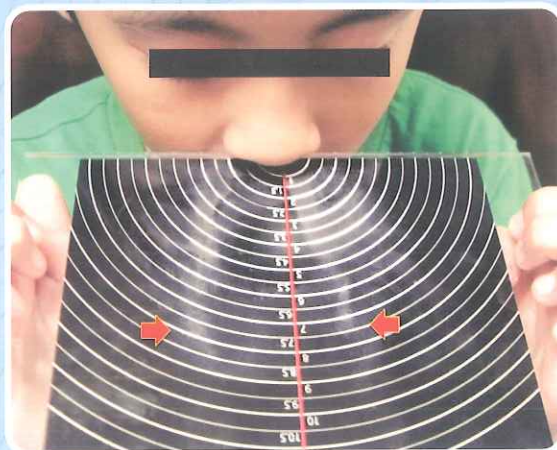

※鼻息が確認しづらい場合は本体を冷却するか、シリンジのエアを当てた後に計測を行ってください。

ブレスケール(1枚) 価格 ¥5,000

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京 本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪 支店：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810  
高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号  
第二種医療機器製造販売業 許可番号13B2X10260

ご用命は