

## 《舌筋力測定器》

見えない舌の筋力を数値で可視化。

「たんたんめーたー」を使用して舌の筋力を数値で測定します。



**たんたんめーたー**  
Tongue Tongue Meter  
ノーマル

### ■仕様

本体 42×120mm

包装	価格
本体1個 ケース 舌筋力記録帳1枚	¥6,300

一般的名称 口腔・嚥下機能訓練器具  
機器の種類 一般医療機器  
医療機器届出番号 13B2X10260000016

### たんたんめーたーでできること

- ✓「舌の機能」をチェック
- ✓「舌の筋力」を数値で評価


### 飲み込む力

食べものがうまく飲み込めない、のどにつかえる感じがする、口が閉じてなく舌が下がっている、口で呼吸をしているようなことがある場合は、舌の機能と筋力がたりない可能性があります。

### 舌の正しい位置

口が閉じているときの舌の位置を意識してみましょう。

舌の正しい位置を知っていますか？

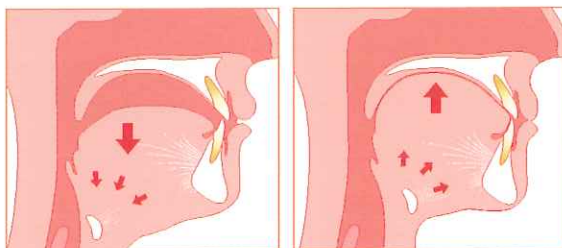

舌が下がっている状態

正しい位置

舌の先が上の前歯に軽く付いて、舌が上顎に沿ってくっついている状態です。舌が下がると、気道狭窄、舌骨低位、二重あごなどが起こり、舌根が沈下すると、いびき・無呼吸症候群の発症原因にもなります。


### 舌圧の基準値

年齢とともに舌などの筋力は落ちていきます。正常値として2Kg以上を目安にしましょう。

### たんたんめーたーの使い方



①測定器本体の目盛りを0に設定します。必ず毎回測定する前に指で目盛りを0に戻してください。

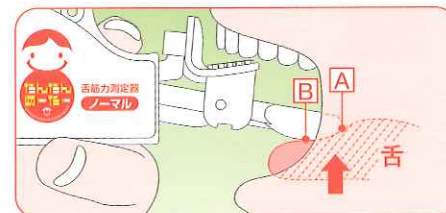

②本体をまっすぐ持ち、スプーンの曲面を軽く舌の上のせでデコボコ面に上の前歯を軽く置きます。口は開けたまま舌だけの力でスプーンのAからBの部分をつゅくりと押し上げ、つらいところで押し上げるのをやめます。



③測定器本体の目盛りの位置が舌筋力の値です。3回測定して真ん中の数値を記録帳に記入します。

※トレーニング用の器具ではありません。  
※保険算定はできません。

## たんたんめーたーの関連製品

### 製品のカバーとしておすすめです!

ディスポーザブルで患者様ごとに交換でき衛生的です。



たんたんめーたーがぴったり入ります。

### ディクシー衛生カバーⅡ

【お取り扱い先】株式会社ジーシー

■仕様 65×220mm

包装	価格
1箱 300枚入り	¥12,800

※株式会社ジーシーと機械製品の取引がある歯科材料販売業者よりご購入頂けます。出入りの歯科材料販売業者等にお問い合わせくださいませ。

### 製品付属の便利ツール




1つ購入ごとに上記販促ツールが付属  
患者用リーフレット1部(B5)  
ポスター2種各1部(A4)

## オーラルアカデミーその他の関連製品

### 口唇閉鎖力を測定!

トレーニング器具としても使用できます。

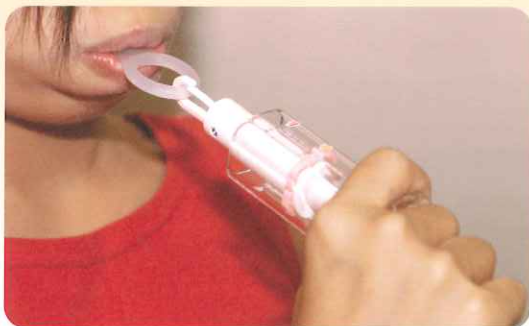

歯科用口唇筋力固定装置

### リットレメーターMedical

■仕様

ハード(ホワイト)、ソフト(ゴールド)

包装	価格
測定器本体1個、 リットレMP(マウスピース)大小 各1個	¥3,200

一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器  
医療機器届出番号 13B2X10260000003

■別売品

包装	価格
リットレMP マウスピース大2個 マウスピース小2個	各¥1,250

一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器  
医療機器届出番号 13B2X10260000004

保険適用

### 口唇閉鎖力・口輪筋・舌筋のトレーニングに



とじろーくんMメディカル

あげろーくんMメディカル

歯科用口唇筋力固定装置

### とじろーくんMメディカル/あげろーくんMメディカル

■仕様

とじろーくんMメディカル

カラー:グリーン

フリーサイズ

あげろーくんMメディカル

Sサイズ(ピンク)マウスピースサイズ:縦31×横24mm

Mサイズ(ブルー)マウスピースサイズ:縦40×横29mm

包装	価格
本体1個、パネ(100g/200g/400g)各1個、六角レンチ1個	¥2,800

とじろーくんMメディカル 一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10260000002  
あげろーくんMメディカル 一般的名称 歯科用口唇筋力固定装置 機器の種類 一般医療機器 医療機器届出番号 13B2X10260000001

### 口唇閉鎖不全・ 口唇ポスチャーの 改善トレーニングに

くわえるだけの  
簡単トレーニング



OITA(口腔免疫トレーニング装置)

### ポカンX

包装	価格
50個 (ホワイト、イエロー、ピンク、 グリーン、ラベンダー各10個)	¥1,800

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京 本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪 支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-30-15 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810  
高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号  
第二種医療機器製造販売業 許可番号 13B2X10260

ご用命は

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。