




マウスピース矯正に！



マンチーズ Munchies® はマウスピースを正しく装着させるための補助アイテムです！

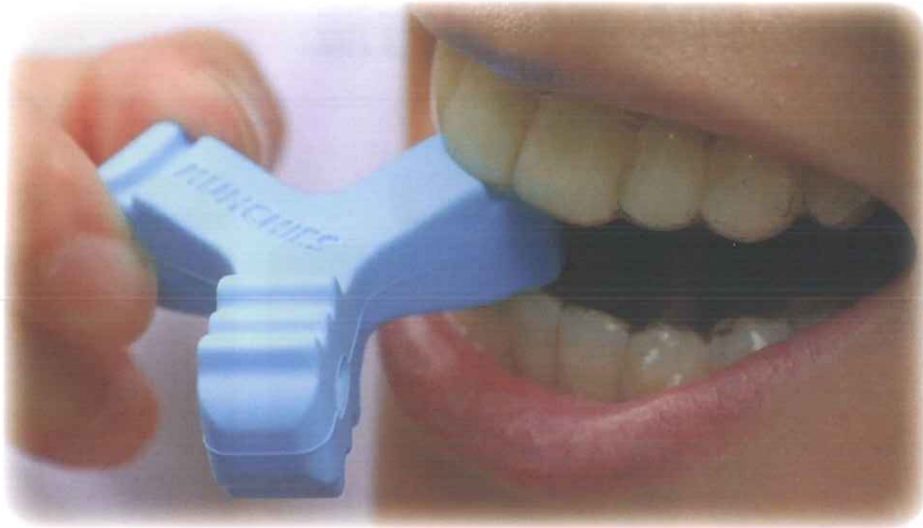

マンチーズ MUNCHIES® キャンペーン

2024年3月21日(木)～6月19日(水)

2個入 キャンペーン



- ・マンチーズ EPS アソート 2個入 キャンペーン (ピンク1個・ブルー1個)
- ・マンチーズ EPS ピンク 2個入 キャンペーン
- ・マンチーズ EPS ブルー 2個入 キャンペーン
- ・マンチーズ メンテナンス ブラック 2個入 キャンペーン

歯科医院様参考価格 各 **¥2,800**

キャンペーン
特別価格

バルクパック 24個入 キャンペーン



- ・マンチーズ EPS アソート 24個入 バルクパック キャンペーン (ピンク12個・ブルー12個)
- ・マンチーズ EPS ピンク 24個入 バルクパック キャンペーン
- ・マンチーズ EPS ブルー 24個入 バルクパック キャンペーン
- ・マンチーズ メンテナンス ブラック 24個入 バルクパック キャンペーン

歯科医院様参考価格 各 **¥30,000**

キャンペーン
特別価格

マウスピース（アライナー）が
正しく装着されていしないと、誤った部位に力が加わり、
思うように歯牙が動かないことがあります。


マンチーズ
Munchies[®] は、マウスピース（アライナー）を
正しく装着させるために、3つのアームがあります。



✓ マンチーズ Munchies[®] EPS ご使用方法


マウスピース（アライナー）を手で口腔内に装着します。

犬歯用

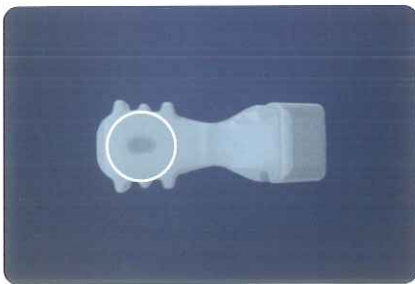

必要に応じて、犬歯用の溝を使用して、マウスピース（アライナー）をフィットさせます。

小白歯用

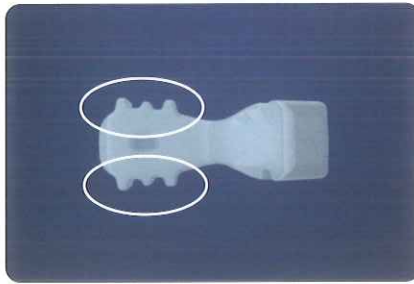


小白歯用アームを、左右の小白歯で各 30 秒間ずつ、噛み込みます。




上顎前歯用

&

下顎前歯用

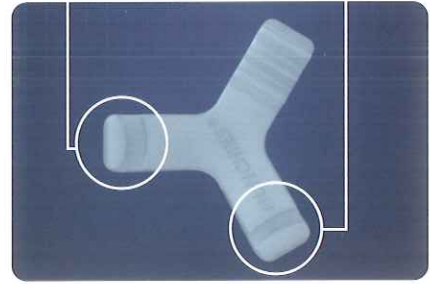

上顎前歯用の溝を上顎前歯にフィットさせて、30 秒間、下顎前歯用の溝を下顎前歯にフィットさせて、30 秒間、噛み込みます。

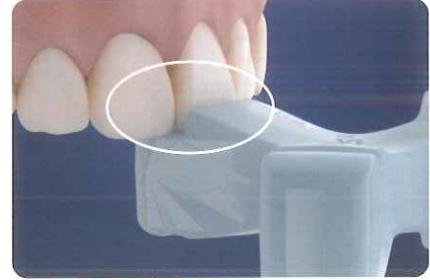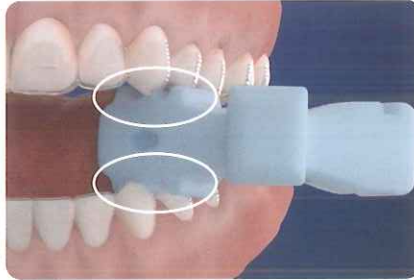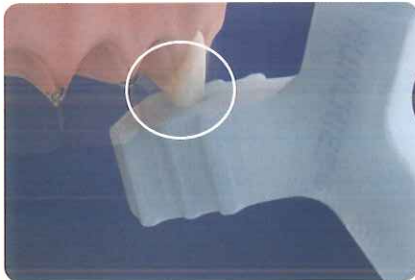

マウスピース（アライナー）を口腔内に装着する度（1日 5～7 回目安）に、Munchies[®] を使用してください。

✓ マンチーズ Munchies[®] メンテナンス

マウスピース（アライナー）治療後、
リテーナーに切り替わったら、
Munchies[®] メンテナンスを使用します。
Munchies[®] EPS より硬く、リテーナーを正しく装着するのを助けます。
使用法は Munchies[®] EPS と同じです。

本紙に掲載されている価格は2024年2月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することができます。



Munchies[®] の
動画は
コチラから



MORIMURA

株式会社 **モリムラ**

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10

TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351

http://www.morimura-jpn.co.jp

●製品に関するご用命は