

SAM friend Tooth Brush 2Way

歯科用




歯ブラシ1本で歯間・歯頸部・歯面のプラークを落とせたらいいな・・・
“2Way”はそんな歯科衛生士さんの願いから生まれました



超極細テーパース毛

ラウンドエンド毛

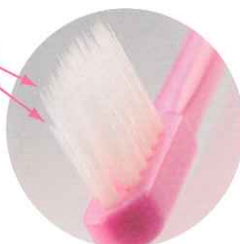

2段植毛

超極細テーパース毛を歯間に挿入すると、自然とラウンドエンド毛が歯面に当たります。



2列植毛

歯頸部の形態にフィットするのでムダなく、歯間乳頭を傷つけることなく隣接面を磨くことができます。

2Wayの使用例



2wayを歯頸部に直角に当てます。歯牙の方に力をかけるとテーパース毛は歯間部に入り、ラウンドエンド毛は歯面に当たります。

叢生や矯正装置・インプラント周辺など通常のブラシでは届きにくい部位へも容易に毛先が届きます。

Point



✕ ポケットに入れようと力をかけると痛みが出ます。



○ ブラシを歯に直角にあててください。毛先は自然とポケットの方向に向きます。



←詳しい使い方は
コチラから



サムフレンド歯ブラシ 2Way

患者参考価格 1本 250円(税込275円)
販売単位 1箱12本入

毛の硬さ：ふつう 毛の太さ：先端0.02mm 根元0.17mm 材質：毛/飽和ポリエステル樹脂 柄/ポリプロピレン 耐熱温度：80℃