

ruscello

輝き続ける白い歯に

GC



ブラッシングで美白する。

それは誰もが待ち望んだ

初めての体験。

white
ruscello

ルシェロ歯ブラシ W-10

美白のために処方する。

「ルシェロ歯ブラシ W-10」は、歯にやさしく効率的なステイン除去を目的に様々な角度から検証し誕生した、美白のための歯ブラシです。さらに「ルシェロ歯みがきペースト ホワイト」と組み合わせて使用することで、「ルシェロ歯ブラシ W-10」の美白効果が最大限に引き出されます。



美白のための歯みがきペースト「ホワイト」には、
美白のための歯ブラシ「W-10」を推奨します。

※詳しくは「ルシェロ歯みがきペースト ホワイト」のリーフレットをご覧ください。


ルシェロ
歯みがきペースト
ホワイト
4つの力

- 弱アルカリ性(汚れを落としやすくする)
- ×
- Lime粒子™(歯にやさしい)
- ×
- PEG400(薬用成分)
- +
- フッ素(薬用成分)

特長 1

毛先エッジ × サイドエッジ


ステイン除去性に優れたひし形毛

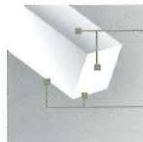

ラウンド毛と比較してひし形毛は毛が平面なので接触面積が大きくステインを効率良くかき取ります。
エッジにかかる力が大きいため、ステインを効率良くかき取ります。

ひし形毛のエッジ部が歯面・歯間に付着したステインを効率的に除去します。

● 毛の形状によるステイン除去力の違い

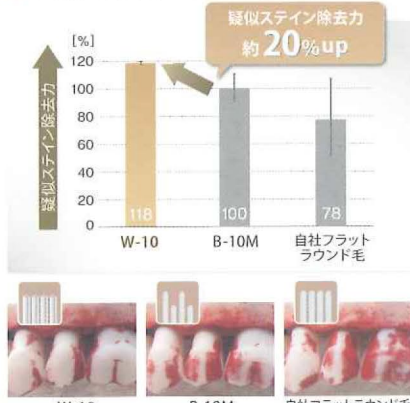


【試験方法】歯牙模型に疑似ステインを塗布し、「ルシェロ歯みがきペースト ホワイト」を用いて、試験用機器(各歯ブラシ最適荷重、5秒間)にてブラッシングを実施(ジーシー研究所)

特長 2

フラット × しなやか × 軽い力


歯にやさしくフィット

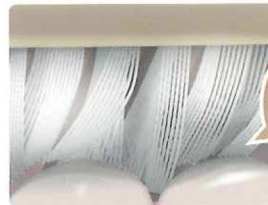

軽い力で
毛先がしなり
歯間へ入る

歯面に軽く当てて動かすだけで、全ての毛先が歯の豊隆部や歯間部の隅々までフィットして、ステインを除去します。


● 歯間への入りやすさ

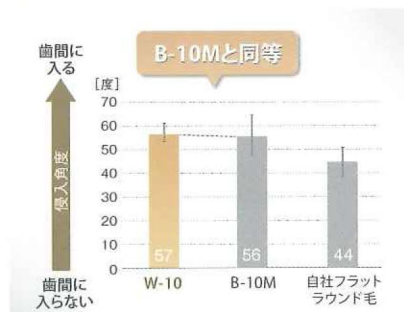


【試験方法】丸棒に疑似ステインを塗布した試験体用機器にてブラッシングし、疑似ステインの落ちた部分の侵入角度を算出(ジーシー研究所)

臨床モニターでも高い評価

着色(タバコの「やに」・茶渋・黄ばみ)は落ちたと感じますか? (n=60名)

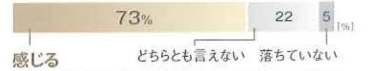

歯磨き後の歯面の舌触りは? (n=64名)

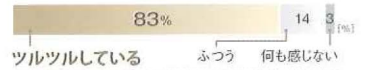

歯ブラシの磨き心地は? (n=64名)



継続使用したいですか? (n=60名)



※使用直磨剤:ルシェロ歯みがきペースト ホワイト(ジーシー調べ)

● ブラッシング時のワンポイント“軽い力”

適正荷重: 100g以下



使用の際は、100g以下の軽い力で磨いてください。力を入れ過ぎると、歯や歯面を傷つけ、毛先が開きやすくなる恐れがあります。

【販売名】
ルシェロ歯ブラシ W-10

【包装・価格】
●6本1函: 希望医院価格○1函(各色3本)
希望患者価格○1函(各色3本)
●1本: 希望患者価格○1本

【色調】2色=パールホワイト,パールゴールド
※ラバー1色=ホワイト

【毛のかたさ】やわらかめ

【販売名】
ルシェロ歯みがきペースト
ホワイト

【包装・価格】
希望医院価格○1本
希望患者価格○1本

【内容量】100g <薬用ハミガキ>

【医薬部外品】歯科医院用



毎日のブラッシングで美白に。 ※写真は製品の効果を保証するものではありません。

●ルシェロシリーズの詳細情報はこちら
<http://www.gcdental.co.jp/ruscello/>



※ 色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ 掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2017年1月現在のものです。
※ 希望医院価格には消費税は含まれておりません。

ご使用に際しましては、必ず使用上の注意事項をお読みください。

発売元 株式会社 ジーシー
東京都文京区本郷3丁目2番14号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
お客様窓口 ☎0120-416480
受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祭日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
営業所
●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286