

PHILIPS

sonicare

キッズ

歯科医院専売

対象年齢：4歳以上

日本学校
歯科医会
推薦品



優れたプラーク除去効果と
お子様のブラッシング
モチベーションの向上に
ソニックケア キッズ



手磨きより最大で75%^{*1} 多くの歯垢を除去!

新しいソニックアーキッズは毎秒約500回^{*2}の振動と振幅の組み合わせで音波水流を発生。お口の汚れをしっかり落とします。

お手持ちのスマートフォンやタブレット^{*3}に「ソニックアーキッズ」アプリをインストールして、ハンドルに内蔵のBluetooth®と連携すれば、アプリがお子様 zu 上手な歯磨き方法を指導。朝と夜、各2分間^{*4}の歯磨き習慣を楽しく身につけることができます。

*1 Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate J. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1

*2 フィリップス調べ

*3 ※iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。


※App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

*4 「さらにやさしいモード」では始めは1分間に設定。2分間まで徐々に長くなっていきます。

ソニックアーキッズの臨床データ


■ フィリップス ソニックアーキッズ ■ 手用歯ブラシ

優れた歯垢除去効果

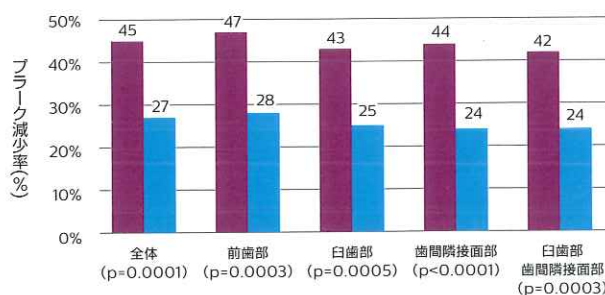

Milleman J, Putt M, Olson M, Master A, Jenkins W, Schmitt P, Strate J. Comparative Plaque Removal Efficacy of Two Power Toothbrushes in Children. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1


より長いブラッシング時間

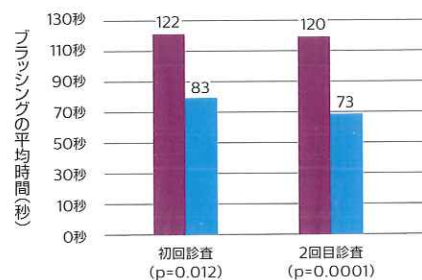

Defenbaugh J, Schmitt P, Master A, Jenkins W, Strate J. Comparative Plaque Removal Efficacy of Two Power Toothbrushes in Children. International J Pediatric Dent. 2009; 19:s1



お子様の自分歯磨きを ソニックケア キッズがサポート

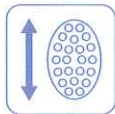

お子様のお口の大きさに合ったブラシヘッド

※同梱しているのはミニサイズのブラシです。



キッズペーサー機能

ブラッシング時間の区切りを短い音でお知らせします

キッズタイマー機能

2分で終了をお知らせします*4



握りやすいハンドル

お子様の小さな手でも使いやすいハンドル形状



押しやすい電源スイッチ

大きめで押しやすく、オンオフのみで操作も簡単



選べる2つのモード設定


やさしいモード

ひとりで歯磨きができるお子様向けの標準モードです。

さらにやさしいモード

振動に慣れないお子様のために振動の大きさを抑えた特別モードです。

※ブラッシング時間は始めは1分間に設定され、朝晩1日2回のご使用で約90日間かけて2分間まで徐々に長くなっていきます。

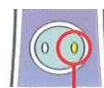

やさしいモード



さらにやさしいモード



8種類のハンドルステッカーとボーナスステッカーで自分用にカスタマイズ

HX6391 / 03



アプリで楽しく、正しい歯磨き習慣を身につける



歯磨きのコツを
教えてくれます



画面のガイドに合わせて
歯を磨けます



歯磨きの後は、
プレゼントがもらえます



「App Store」で「ソニックケア キッズ」と検索

アプリについて詳しくは、
ソニックケア キッズの
WEBサイトをご覧ください。

こちらからもアクセスできます→



※iPad Pro等一部の機種では正常に動作しない場合があります。
※App StoreもしくはGoogle Playにアクセスして、お手持ちのデバイスが対応機種であることをご確認ください。

<http://www.philips.co.jp/c-m-pe/sonicarekids>



フィリップス ソニックアー キッズ

Philips Sonicare for Kids

HX6391/03

【本体仕様】

- 商品名：フィリップス
ソニックアー キッズ
- 質量(本体+ノズル)：135.4g
- 寸法：高さ232mm×奥行34mm×
幅34mm
- 定格電圧：AC100V、50/60Hz
- 消費電力：充電器0.4W(充電時・100V使用時)
- 充電時間：約24時間(フル充電の場合)
- 使用時間：2週間(1日2回、2分間ブラッシングした場合)

【セット内容】

- 本体 ●キッズブラシヘッド(ミニサイズ)
- 充電器 ●前面パネル
- ハンドルステッカー×8 ●ボーナスステッカーシート



ソニックアー キッズ用 替ブラシ

ミニサイズ

HX6031 /08 (1本入)



レギュラーサイズ

HX6041 /08 (1本入)



ブラシの交換について

最良のブラッシング効果を得るために、替ブラシは3ヶ月ごとに交換してください。また、破損の兆候が見えた場合は、速やかにお取り換えください。そのまま使用を続けると口腔内に傷をつける恐れがあります。

患者様に安心してお奨めいただけます。

①2年間保証

(ハンドル・充電器のみに適用)

②30日間返金保証

患者様がご購入後30日間で使用になられても効果を実感いただけない場合は、ソニックアー事務局よりご購入代金を患者様へ直接返金いたします。

③修理対応


患者様からの修理のご依頼をソニックアーコールが直接承ります。

※患者様からの修理品の発送費はソニックアー事務局が負担いたします

ソニックアーコール **0120-418-608**

【受付】月曜日～金曜日 9:00～18:00(祝日を除く)

より詳しい情報、トライアル製品をご希望の場合は、お出入りのディーラー様、または下記へご連絡ください。

販売店：  株式会社モリタ お客様相談センター 0800-222-8020

製造元・輸入元：株式会社フィリップス・ジャパン

ディーラー様名

© 2019 Philips Japan, Ltd. All rights reserved.

記載されている製品名などの固有名称は、Koninklijke Philips N.V. の商標または登録商標です。Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc. が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V. またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します。



2019年3月

PUB No.M5431.2.1902.108,183L.SU 208530289