

YOSHIDA

CURAPROX

矯正治療を行っている医院様へ

歯科専用

「柔らかいブラシ毛」で好評 CURAPROXの
音波式電動歯ブラシ

HYDROSONIC

PRO クラブロックス ハイドロソニック プロ
歯科専用

- 1分間に22,000~42,000回の音波振動:7つの強度レベル
- 1つのボタンで簡単操作:オン/オフを切り替え/強度レベルの変更
- 1回の充電:1日4分で2週間使用できるロングバッテリー搭載

ワイヤー矯正にオススメの
セルフケアツールのご紹介!

あらゆる口腔環境において、安定した性能を発揮します。



炎症時



齧生部位



インプラント治療時



矯正治療中



修復補綴領域

※センシティブブラシヘッド / シングルブラシヘッド使用時



スイス生まれの
イノベーションが
日本に上陸

SWISS PREMIUM ORAL CARE



HYDROSONIC PRO

クラブロックス ハイドロソニック プロ

「矯正歯科治療中の歯と歯肉を守る」 セルフケアツール

詳しくはこちら




YouTube

独自開発のクーレン繊維

歯面を傷つけず、しっかり汚れを除去し歯面や歯肉へのオーバーブラッシング防止が可能です。



CUREN® 繊維は歯磨きに適したやわらかさと弾力性を備え安定した性能を発揮します。*

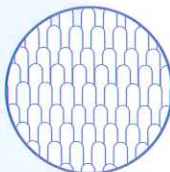

Point.1

オススメ
ポイント!

7段階の音波振動モード

部位によって自分好みのモード選択ができるので、多くのユーザーに長く愛用してもらえます。

Point.2

オススメ
ポイント!

ON / OFF・MODE 1つのボタンで簡単操作

電源のON/OFF。電源が入っている状態の長押しで、7段階の音波振動モード変更ができます。




*次回使用する際は、最後に選択されたモードで起動します。

MEDCHANICS カ学

音波振動

音波振動による振幅運動が、歯や歯肉を傷つけずにしっかりと汚れを落とすことができます。

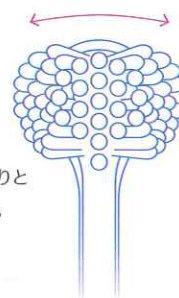


流体カ学

毛先の高速振動によって、口腔内で唾液と歯磨き粉が混ざりあったところに乱流が生じます。この乱流により、毛先が届かなかった場所のデンタルバイオフィームを取り除くことができます。

RUBBER GRIP ラバーグリップ

人間工学に基づき設計された把持しやすいラバーグリップ。自然な持ち方で、歯磨きに理想的な角度を保ちます。

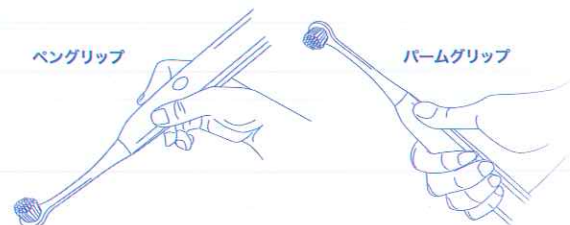

CHARGING 充電



フル充電
10時間
1日4分
2週間使用可*

*使用環境によって時間は前後します。本体LEDが青ではなく赤の場合、バッテリーの充電残量は20%未満です。充電状況の確認は、充電器からハイドロソニック プロを取り外した時や、スイッチを切った時に充電状況を確認することができます。

3つのブラシヘッド (パワー・センシティブ・シングル)


Point.3

オススメ
ポイント!

しずく型のブラシ形状がブラケットごと歯面を立体的に包み込み、ブラケット自体とその周りもしっかりと磨くことができます。

〈パワー〉ブラシヘッド

しっかりパワフルな毛質健康な歯肉の方に

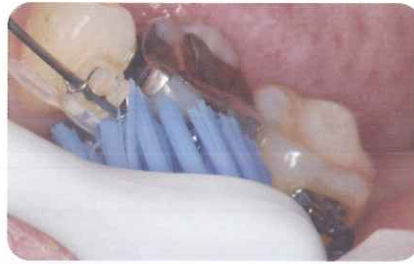

大臼歯ブラケット 歯をすっぽり包み磨き。



毛先の形状や束感が独特なのがわかる。

〈センシティブ〉ブラシヘッド

非常に柔らかい毛質歯肉に炎症がある方に



歯肉の薄い下顎前歯には強く押し当てず安全磨き。



前歯部口蓋側舌側歯面もすっぽり包み磨き。

〈シングル〉ブラシヘッド

全てのリスク部位へのアプローチに



ブラケットとパワーチェーンが重なって
汚れを落としにくい部位にも。



15度のクラカーブで届きにくい大臼歯部や
その隣接面の汚れを落としにくい部位にも。



ブラケット周りや隣接面、歯頸部にも。



カリエールモーション装着時、
隣接面や装置装着面の汚れが落としにくい部位にも。



音波が舌側ブラケットのどの部位にも効果的。




音波が舌側ブラケット歯頸部フックの
汚れを落ちやすくする。

CURACURVE®

人間工学に基づいた
ブラシヘッドの角度

人間工学に基づいた角度は
磨きにくい部位にも簡単に行き届きます。

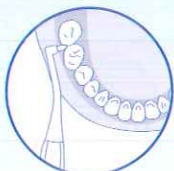

web体感セミナーのご案内

セミナーの日時に都合がつかない、もっと気軽に製品情報が知りたい、
セミナー会場だと質問しづらい等...webセミナーがこんなお悩みを解決!

お持ちのPCやタブレットでご自身の歯科医院にしながら
スタッフさんとお気軽にセミナーを受けることができます。



webなら
一人でも気軽に
受講可能!

受講料 無料

日時指定 OK

HYDROSONIC
PRO クラブロックス ハイドロソニック プロ
歯科専用



クラブロックス ハイドロソニック プロを体感したい方はこちらから!

Step.1

お申し込み



Access!



上のQRコードからお申し込みください。

Step.2

詳細確認TEL



お申し込み後、担当者から確認のお電話をさせていただきます。

Step.3

サンプル、見本品送付



セミナーに使用する製品サンプル、
見本品を事前にお届けします。

Step.4

Webセミナー実施



お持ちのPCやタブレットで
Webセミナーを受講いただけます。

Step.5

見本品返却*



セミナーに使用した見本品を
ご返却いただけます。

*製品によって返却不要なものもございます。

CURAPROX

+ SWISS PREMIUM ORAL CARE

〈販売元〉  株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9

ユニット・歯科材料・滅菌機器などのお問い合わせ:0800-170-5541



C02591/2024年2月/3/@1/新