

新感覚

舌ブラシ したつつみ

NEO

舌苔
除去

口臭
ケア


広島大学と
共同研究



ブラシの使い方

舌上面の場合

舌側面の場合

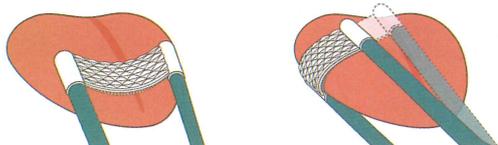

軸幅を狭めて舌の細部までフィットさせます。


機能的な両面ブラシ



リバーシブル
ブラシ

カギブラシ

ヘラブラシ

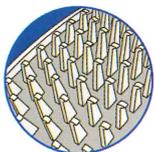

深い部分の舌苔を
しっかりとかき出します。



表面の舌苔を
優しく取り除きます。




カギブラシ 舌 舌苔



ヘラブラシ 舌 舌苔

ご使用方法

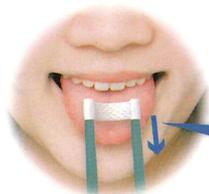

舌の奥の方から舌先に向かって
数回なでるように動かして
舌苔を除去してください。

ブラシを引く動きで
汚れをかき出します

したつつみNEOの特徴

◆ 2本の軸がしなり、舌の形状に応じて
軸幅を自由に変更できます。

◆ ブラシは柔らかい合成樹脂で
舌に優しくフィットします。

◆ ブラシはカギブラシとヘラブラシの2面があり、
お好みに応じて使用できます。



カギブラシ

ヘラブラシ

◆ 使用後は立てて置けるので衛生的です。



- 材質 : 本体 MBS樹脂、ブラシ部 エラストマ
- カラー : アオミドリ、アカネ

販売店 :

販売元 :  株式会社 大平製作所

〒720-0074 広島県福山市北本庄1-8-14 084-924-0650