

キャンペーン期間

2026.10.21▶11.20 **〈数量限定〉**

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「ヒステクト™ 発売記念 知覚過敏をWケアキャンペーン 第2弾」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。



**最短
30秒※で**

知覚過敏 症状に アプローチ

※使用時間：こすり塗り30秒または
トレイ装着10分（最長60分）

知覚過敏症状の
刺激を抑制

歯面にやさしい
中性(pH7.2)のジェル

セルフケアにも
使用できる



知覚過敏を

歯科医院でも 家でも

Wケア ダブル キャンペーン 第2弾

ご希望に応じて
再実施!

New

保険適用 常温保管

歯科用知覚過敏抑制材料

ヒステクト™

内容量●2.5mL

包装・希望患者価格●1函：1本＝¥3,280（税込）

歯科用知覚過敏抑制材料
ジーシー ヒステクト
管理医療機器
307AKBZX00062000

1 本

「ヒステクト™」1本と、キャンペーンセット品「ヒステクト患者説明ツール」1セットを
組み合わせ価格にてご提供します

キャンペーンセット品

ヒステクト患者説明ツール

1
セット

知覚過敏の説明から患者さんの家での使用方法まで
分かりやすくお伝えすることができるサポートツールです！



ヒステクト™ の特長は裏面をご覧ください ➡

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2026年10月21日～11月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引/販売店	ご担当者
	様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ヒステクト™ 1本	ヒステクト 患者説明ツール 1セット	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。

歯科医院でも



家でも



歯科用知覚過敏抑制材料

ヒステクト™

保険適用



最短30秒※で知覚過敏症状にアプローチ

※使用時間：こすり塗り30秒またはトレー装着10分（最長60分）





エアブロー
不要




常温保管
OK

知覚過敏症状の刺激を抑制

親水性のジェルの働きによって、有効成分が歯面に効率よく行き渡り、知覚過敏症状を抑制します。

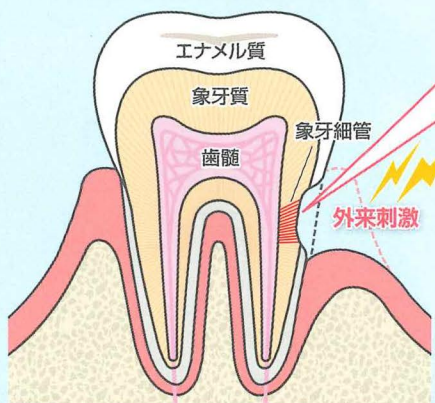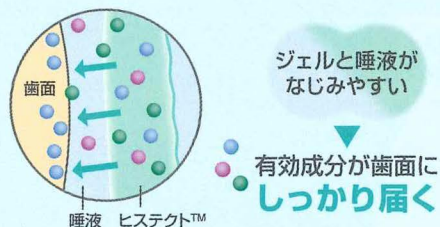

複数成分を配合したジェルが象牙細管を封鎖

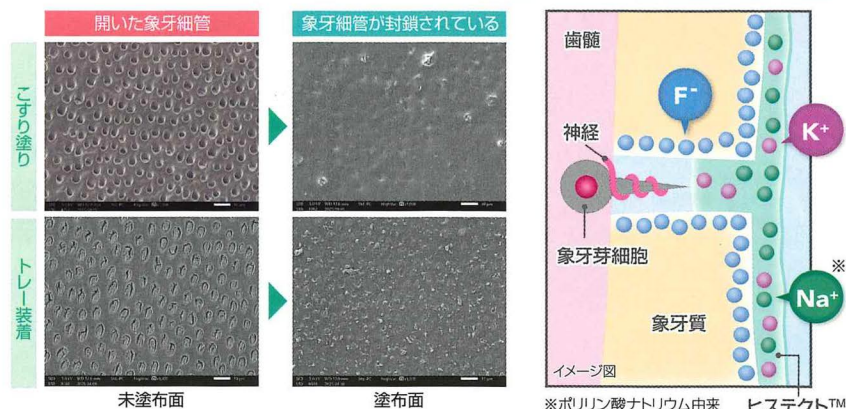

【試験方法】

1. 耐水研磨紙を用いて牛歯象牙質を研磨した試験片を準備
2. 試験片にキャビティコンディショナーで20秒間処理を行い、歯面を水洗
3. こすり塗り：PTCカップ(1,000rpm)で 30秒間こすりつけるように塗布
トレー装着：ヒステクト™をのせた歯面をトレーシートで覆い、軽く圧接し10分間静置
4. こすり塗り：水洗
トレー装着：トレーシートを除去し、水洗
5. 試験片を乾燥させ、ヒステクト™未塗布面と塗布面を電子顕微鏡で観察

ジーシー研究所試験結果

K⁺ 硝酸カリウム5%

知覚過敏症状を抑えます。

F⁻ フッ化ナトリウム0.25% (1130ppmF)

歯質に作用します。

Na⁺ ポリリン酸ナトリウム

再着色しにくくなります。

歯面にやさしい

中性 (pH7.2) のジェルで、歯面や補綴装置などの金属への影響が少なくなっています。

セルフケアにも使用できる

セルフケアに取り入れることで、継続した知覚過敏症状対策ができます。

院内での使い方




塗布部位の唾液やプラークを可能な限り綿球等で拭う。



ラバーカップ※や綿球等にヒステクト™を適量取り、歯面に30秒間こすり塗る。



※回転数目安：1,000rpm程度

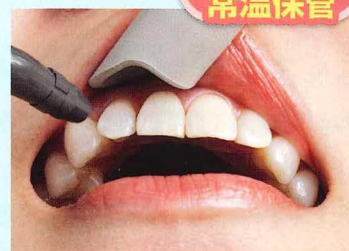

水洗する。

こすり塗り
30秒

使用後は
常温保管



歯科用知覚過敏抑制材料

ジーシー ヒステクト™

常温保管

内容量 ● 2.5mL

包装・希望患者価格 ● 1函：1本=¥3,280(税込)

歯科用知覚過敏抑制材料 ジーシー ヒステクト
管理医療機器 307AKBZX00062000

株式会社 ジーシー

支店 ● 東京 (03) 3813-5751
● 大阪 (06) 4790-7333
営業所 ● 北海道 (011) 729-2130
● 東北 (022) 785-8040
● 名古屋 (052) 757-5722
● 九州 (092) 441-1286

ご用命は