

ボンディング材の常識を変える。

G-BOND Universal

NEW G-ボンド ユニバーサル | 1液性マルチボンディング材 保険適用

エアブローなしでもOK

秘密はウォーターフリー


- ・接着を妨げる水を含まず少量の溶媒で構成された、新発想の1液性ボンディング材
- ・水の代わりに歯質への浸透性を高める新モノマーを配合

エアブロー条件に依存しない接着性能

ボンディング層の厚みに影響されない接着強度

水を含まないため、エアブローなし／弱圧／強圧、どの条件下でもより安定した接着力を期待できる。
エアブロー条件を撤廃することで、術者の違いで起こるテクニカルエラーを低減。

■各エアブロー条件下の接着強さ

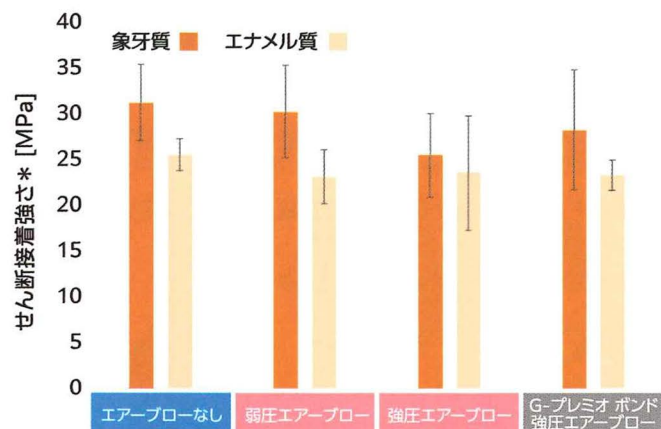

*ISO 23022:2013を部分的に引用し測定
*エナメル質・象牙質それぞれの条件における一元配置分散分析(ANOVA, $\alpha=0.05$)にて統計処理を実施。有意差なし。
ジーシー研究所測定データ

製品詳細はこちら



エアブローなしはこんな時に！

- ・エアブローの圧力で出血リスクがある場合
- ・エアをかけると浸出液が窩洞に入りそうな場合
- ・ボンディング液を飛び散らせたくない場合
- ・知覚過敏がある場合
- ・歯肉縁下などコンタミ予防が難しい場合
- ・小児や高齢者など長時間の開口が難しい場合 など

■各エアブロー条件下の被膜厚さ

	エアブローなし	弱圧エアブロー	強圧エアブロー	G-プレミオ ボンド 強圧エアブロー
コンポジットレジン				
ボンディング層				
歯(象牙質)				
被膜厚さ	~10μm	~5μm	~1μm	~3μm

マルチに使える



※組み合わせ使用できるセメント：ジーセム ユニバーサル、ジーセムONE neo、ジーセムONE EM、ジーセムリンクエース

シランカップリング剤配合

10-MDP配合

HEMAフリー

- ・ガラスセラミックスや各種補綴材料への使用も可能
- ・水を含まないため、ボトル内で成分が長期間にわたり安定した性能を保持

▼Web申込はこちら

2026年度 GC友の会歯科医師会員 入会申込書

ご入会者にジーセム ユニバーサル・G-ボンド ユニバーサルを含む会員特典をお届けします *詳細は本チラシ中面を参照ください



【必ずすべてご記入ください】 ※GC友の会 会期更新は会期更新システムを採用しています。なお、会期更新時期には更新のご意思確認のためのご案内状をお送りいたします。

ふりがな	(男・女)	生年月日	西暦	年	月	日
ご入会者名		出身校	卒業年 年			
友の会ID (メールアドレス)	※コンテンツ視聴やイベント申込時に必要です。					
貴医院名	お取引販売店	(本支店名)				
医院ご住所 〒	TEL					
	FAX					

お取引の歯科販売店を通じてお申し込みください。

歯科販売店の方へ 本申込書をジーシーにお渡しください。(FAXでも受付します：03-3815-3421)

【個人情報の取り扱いについて】●ご記入いただいた個人情報は、本申込みに係るご連絡並びにGC友の会の運営に活用させていただきます。また、ジーシー取扱商品やセミナー・講演会開催のご案内などに活用させていただく場合もあります。なお、ご記入内容に不足がある、お申し込みと支障が生ずる場合があります。●個人情報は、業務委託先に預託する場合がありますが、個人情報の安全管理体制が整備された業務委託先を選定し、かつ業務委託先を適切に監督いたします。また、法令等による場合を除いて、第三者(弊社グループ会社、特約店又はお取扱販売店を除きます)に提供することはありません。●個人情報の開示・訂正・削除に関するお問い合わせは以下の窓口へご連絡ください。●最高個人情報管理責任者 総務部担当 役員
*上記を確認し、ご承諾いただいた上で、申込書にご記入ください。

株式会社 ジーシー

カスタマーサービスセンター ▶ お客様窓口 ☎0120-416480 受付時間 9:00a.m.～5:00p.m. (土曜日、日曜日、祝日を除く)
DIC (デンタルインフォメーションセンター) ▶ 〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14 TEL (03) 3815-1511 FAX (03) 3815-3421

GC友の会歯科医師会員に入会すると、下記特典をお届け・ご参加いただけます

会費：8,000円 (税別) *製品代 7,000円を含む

会期：2026年4月1日～2027年3月31日

ジーセム ユニバーサル・G-ボンド ユニバーサルをお得に試せる



ユニバーサルレジンセメント
ジーセム ユニバーサル

【友の会仕様】

- ・ジーセム ユニバーサル (2.7mL) 1本 (色調)ユニバーサル(U)
- ・EMミキシングチップC 8個
- ・EMミキシングチップP 2個
- ・EMミキシングチップ用ノズルRC 2個
- ・テクニックガイド 1部

歯科接着用レジンセメント ジーセム ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00104000

製造販売元 株式会社 ジーシー
東京都板橋区蓮沼町76番1号



ユニバーサルアドヒーズ
G-ボンド ユニバーサルセット

【友の会仕様】

- ・G-ボンド ユニバーサル ボトル(2mL) 1本
- ・ディスポーザブルアプリーケーターII グリーン(30本)
- ・ディスポーザブル採取皿10枚
- ・テクニックガイド1部

歯科用象牙質接着材/歯科金属用接着材料/歯科セラミックス用接着材料/歯科用知覚過敏抑制材料/歯科用シーリング・コーティング材/歯面コーティング材
ジーシー G-ボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00104000

製造販売元 株式会社 ジーシーデンタルプロダクツ
愛知県春日井市島居松町2丁目285番地

[参考]通常製品(友の会仕様と同量)の希望医院価格

ジーセム ユニバーサル

*2シリンジの希望医院価格から算出

¥7,920

G-ボンド ユニバーサル

*5mLボトルの希望医院価格から算出

¥5,500

Total ¥13,420

¥8,000

GC友の会歯科医師会会員費

*すべて税別表記

お得な
キャンペーンも
2027.2.20

ジーセム ユニバーサル・G-ボンド ユニバーサルの理解が深まる会報誌が届く

研究者と臨床家が、新製品特典2製品を解説

GCサークルNo.198・No.199 臨床座談

《No.198：G-ボンド ユニバーサル / No.199：ジーセム ユニバーサル》



佐氏 英介 先生 (司会：東京都品川区 サウジ歯科クリニック)
宮崎 真至 先生 (日本大学歯学部 保存学教室修復学講座 特任教授)
高見澤 俊樹 先生 (日本大学歯学部 保存学教室修復学講座 教授)
井畑 信彦 先生 (東京都品川区 いばた歯科)

G-ボンド ユニバーサルを活用したホワイトスポット治療を解説

GCサークルNo.198 ケースプレゼンテーション

高木 仲人 先生 (門前仲町高木歯科)




G-ボンド ユニバーサルの特長を症例付きで解説

GCサークルNo.199 ケースプレゼンテーション



島田 康史 先生 (東京科学大学大学院医歯学総合研究科歯制御学分野 教授)
井上 剛 先生 (東京科学大学大学院医歯学総合研究科歯制御学分野 講師)
畑山 貴志 先生 (東京科学大学大学院医歯学総合研究科歯制御学分野 助教)

今アップデートしたい“支台歯形成”に関する冊子が届く

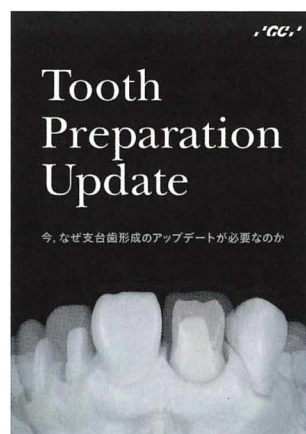

動画付き！今学び直したい、形成の勘所を解説

Tooth Preparation Update—今、なぜ支台歯形成のアップデートが必要なのか—

- 補綴治療のパラダイム・シフト
- 補綴装置別 支台歯形成の勘所
 - ・メタルインレー ・セラミックインレー ・クラウン ・リテーナー接着ブリッジ
- Design first, preparation second
 - ・臼歯部オーバーレイ ・前歯部ラミネートベニア

お試し閲覧は
こちら



青島 徹児 先生 (青島デンタルオフィス)
大谷 一紀 先生 (大谷歯科クリニック)
南野 卓也 先生 (医療法人 一祥会Nao歯科・矯正歯科)

新技術についてハンズオンセミナー/Webinarで学べる

好評につき定員増枠

Lecture & Hands-on

2026 11.15 日 10:30-13:30 @ GC Corporate Center

ホワイトスポット・ブラウンスポット治療 [実習付き]—レジンインフィルトレーションを成功に導く診査・診断と臨床手段—

- 治せる白斑・治しにくい白斑を見極める診査・診断力を養う
- レジンインフィルトレーションの手順を体験し、防湿・乾燥・浸潤操作など、臨床で失敗しやすいポイントを理解する

白斑部へのレジン浸潤のイメージ



高木 仲人 先生

▼申込はこちら



会員限定！受講料無料

Webinar (再配信)

2027 1.14 木 ▶ 1.27 水

エアーがいらないってホント!? 科学で紐解く新・接着技術×CR修復の勘所

- データでみる各種接着システムの評価
- G-ボンド ユニバーサルを用いた症例

受講者の声

- 接着に関する復習と新たな知識が得られた
- ボンディングの使い分けが良くわかった
- データを交えた講演で腑に落ちた
- 講演時間もちょうど良く、簡潔でわかりやすかった

▼申込はこちら



島田 康史 先生

会員限定！受講料無料

Webinar

2027 1.27 水 20:00-21:30 @ Zoom配信

左記、GC友の会オリジナル特典冊子 連動Webinar

- 冊子特典「Tooth Preparation Update—今、なぜ支台歯形成のアップデートが必要なのか—」を深掘り
- 新製品特典ジーセム ユニバーサル・G-ボンド ユニバーサルに関するデータを
用いた評価

▼申込はこちら



高見澤 俊樹 先生 南野 卓也 先生

シンプル操作で、より安定した接着へ。


G-CEM Universal

NEW ジーセム ユニバーサル | ユニバーサルレジンセメント 保険適用

接着強度とセメントアウトのしやすさを両立

プライマーなしでも安定した接着強さ

せん断接着強さ

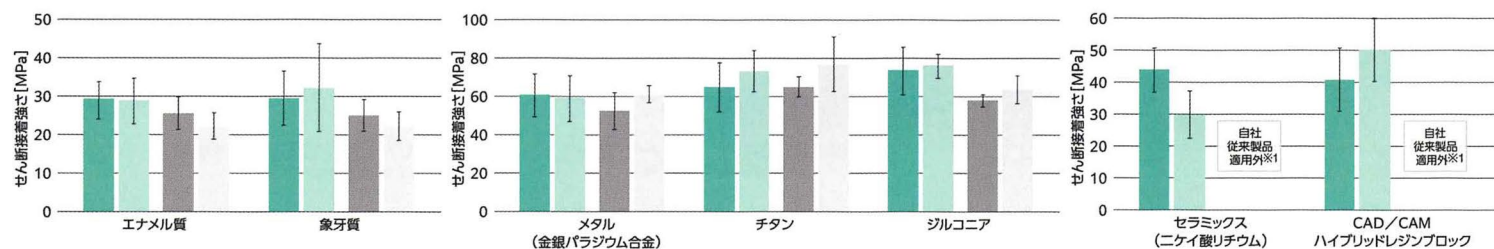

ジーセム ユニバーサル
24時間後
サーマルサイクル5,000回後

自社従来製品
24時間後
サーマルサイクル5,000回後

【試験方法】
● エナメル質・象牙質：JIS T 6611準拠、耐水研磨紙#600研磨
● 金属・チタン・ジルコニア：JIS T 6611参考、耐水研磨紙#120研磨、0.4MPaアルミナ・サンドブラスト処理
● セラミックス：JIS T 6611参考、耐水研磨紙#320研磨
● CAD/CAM/ハイブリッドレジンブロック：JIS T 6611参考、耐水研磨紙#320研磨、0.15MPaアルミナ・サンドブラスト処理
● 24時間後：37°Cの100%R.H.で1時間静置後、37°Cの水に23時間浸漬
サーマルサイクル5,000回後：24時間後サーマルサイクル5,000回(5-55°C、各30秒)

全てジーシー研究所測定データ

※1 自社従来製品は、セラミックス、CAD/CAMハイブリッドレジンブロックの接着に使用する際は歯科セラミックス用接着材料（G-マルチプライマーなど）の使用必須

一塊でスムーズに余剰セメントを除去できる


口腔内装着
↓
余剰セメント除去
光照射：2～3秒※2
化学重合：装着後1分～1分30秒
↓
口腔内保持：4分※3



※2 光照射器の性能や照射出力により異なる
※3 光透過性の高い補綴装置の場合は、光重合での最終硬化が可能

光が届きにくい金属や根管内でも安定した接着をサポート

■光照射なし・ありの場合のせん断接着強さ

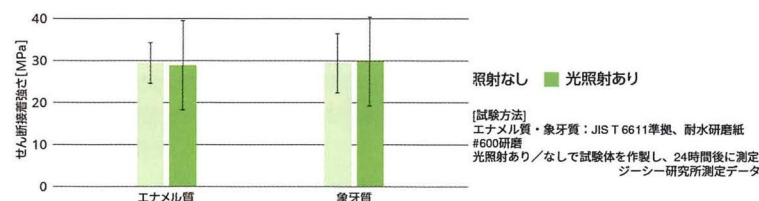

使いやすいペースト性状

被膜厚さ※4
5μm
浮き上がりがほとんどない
軽い力でペーストが薄く広がる
※4 被膜厚さの値は、小さいほど薄く広がっている（セメント被膜厚さが薄い）ことを示す



垂れにくい

製品詳細はこちら



プライマーなしでもOK※5

保険から自費まで、これ1本で幅広い症例に適応

・金属			・ジルコニア セラミックス (ニッケイ酸リチウム系・長石系) ハイブリッドレジン			・CAD/CAM ハイブリッド レジンブロック			・PEEK※6		
インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	ペニア※7	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	クラウン				

※5 PEEK材を除く ※6 G-ボンド ユニバーサルをプライマーとして使用（詳細は電子添文を参照ください） ※7 単冠に限る ※8 10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate

シランカップリング剤配合

10-MDP※8 配合

HEMAフリー

より安定した接着を求める場合、G-ボンド ユニバーサルと併用可

補綴装置内面も窩洞・支台歯もG-ボンド ユニバーサルでOK

ジーセム ユニバーサルとG-ボンド ユニバーサルが接触している界面から重合開始（タッチキュア）

▶ 水分の影響を受けやすい状況でも、より安定した接着をサポート ▶ 厚いセメント層でも、接着界面の安定性と接着強さを維持

*G-ボンド ユニバーサルの詳細は本チラシ裏面を参照ください

