

【キャンペーン期間】

2026.
8.21▶9.20

数量限定

歯科用知覚過敏抑制材料

ヒステクト™ 発売記念

歯科医院でも

家でも

ダブル

知覚過敏をWケア キャンペーン



平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「ヒステクト™ 発売記念 知覚過敏をWケアキャンペーン」を実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

「ヒステクト™」1本と、キャンペーンセット品「ヒステクト患者説明ツール」

1セットを組み合わせ価格にてご提供します

最短30秒※で
知覚過敏症状に
アプローチ

※使用時間：こすり塗り30秒または
トレー装着10分(最長60分)

知覚過敏症状の
刺激を抑制



クラック

酸蝕症

くさび状
欠損

ホワイト
ニング後

歯肉退縮

New

歯科用知覚過敏抑制材料

ヒステクト™

保険適用
常温保管

1本

内容量 2.5mL

包装・希望医院価格 1函：1本＝¥2,450

包装・希望患者価格 1函：1本＝¥3,280(税込)

歯科用知覚過敏抑制材料 ジーシー ヒステクト
管理医療機器 307AKBZX00062000

歯面にやさしい 中性(pH7.2)のジェル

セルフケアにも使用できる

キャンペーンセット品

ヒステクト患者説明ツール

1
セット

【期間限定販売品】希望医院価格：¥1,000 A4版

知覚過敏の説明から患者さんの家での使用方法まで
分かりやすくお伝えすることができるサポートツールです！

ヒステクト™の特長は裏面をご覧ください➡

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2026年8月21日～9月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引/販売店	ご担当者様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ヒステクト™ 1本	ヒステクト 患者説明ツール 1セット	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。



最短30秒※で知覚過敏症状にアプローチ

※使用時間：こすり塗り30秒またはトレー装着10分（最長60分）




エアブロー
不要




常温保管
OK

知覚過敏症状の刺激を抑制

親水性のジェルの働きによって、有効成分が歯面に効率よく行き渡り、知覚過敏症状を抑制します。

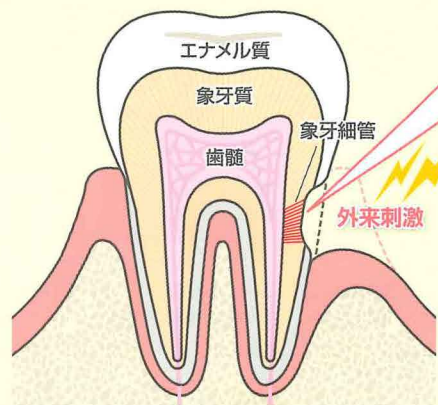

複数成分を配合したジェルが象牙細管を封鎖

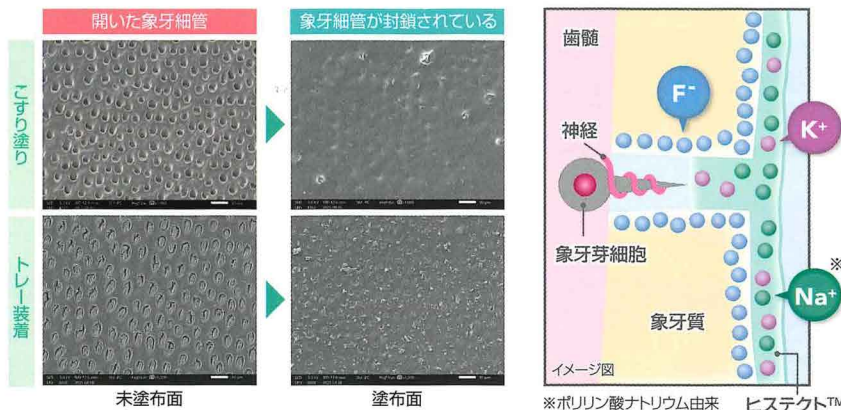

【試験方法】

1. 耐水研磨紙を用いて牛歯象牙質を研磨した試験片を準備
2. 試験片にキャビティコンディショナーで20秒間処理を行い、歯面を水洗
3. こすり塗り：PTCカップ(1,000rpm)で トレー装着：ヒステクト™をのせた歯面をトレーシートで覆い、30秒間こすりつけるように塗布 軽く圧接し10分間静置
4. こすり塗り：水洗 トレー装着：トレーシートを除去し、水洗
5. 試験片を乾燥させ、ヒステクト™未塗布面と塗布面を電子顕微鏡で観察

ジーシー研究所試験結果

K+ 硝酸カリウム5%

知覚過敏症状を抑えます。

F- フッ化ナトリウム0.25% (1130ppmF)

歯質に作用します。

Na+ ポリリン酸ナトリウム

再着色しにくくなります。

歯面にやさしい

中性(pH7.2)のジェルで、歯面や補綴装置などの金属への影響が少なくなっています。

セルフケアにも使用できる

セルフケアに取り入れることで、継続した知覚過敏症状対策ができます。




院内での使い方



塗布部位の唾液やプラークを可能な限り綿球等で拭う。



ラバーカップ※や綿球にヒステクト™を適量取り、歯面に30秒間こすり塗りする。
※回転数目安：1,000 rpm程度

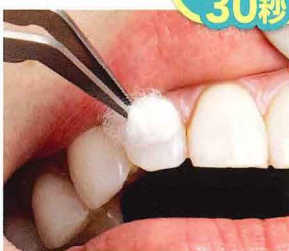

こすり塗り
30秒



水洗する。

使用後は
常温保管



歯科用知覚過敏抑制材料

ジーシー ヒステクト™

常温保管

内容量●2.5mL
包装・希望医院価格●1函：1本＝¥2,450
包装・希望患者価格●1函：1本＝¥3,280(税込)

歯科用知覚過敏抑制材料 ジーシー ヒステクト
管理医療機器 307AKBZX00062000

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
営業所 ●北海道(011)729-2130
●東北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は