

— 強く美しく。

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® V5

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® ベニア LC



管理医療機器
歯科用セメントキット


パナビア[®] V5

for Crown

*厚さ0.25mm

ユニバーサル クリア ブラウン ブリーチ オペーク

象牙質接着力、当社従来品比3倍^{※2}

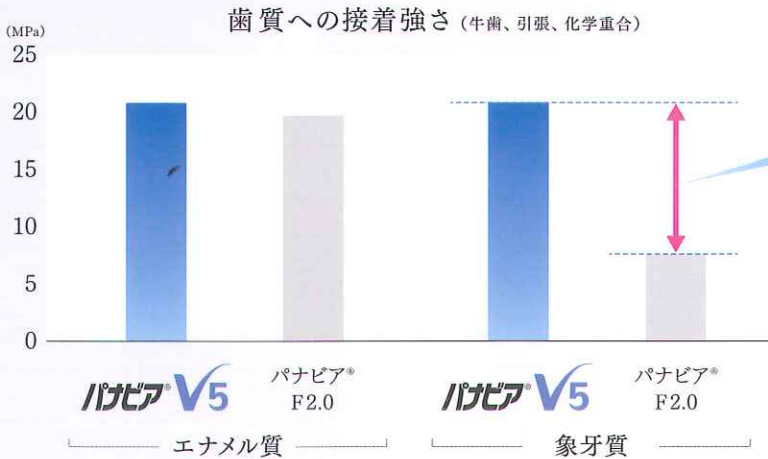

3倍の
象牙質
接着力!!

測定条件:
牛歯#1000研磨面、被着面積3mmφ、
化学硬化37℃水中に1日浸漬後、測定
測定装置:
オートグラフ AG-100kN(島津製作所)
クロスヘッドスピード:2mm/min
クラレノリタケデンタル(株)測定:
条件により数値は異なります。

化学重合のみでも、高い接着力


高活性の化学重合触媒^{※3}の採用により、化学重合のみでも優れた歯質接着性を実現。ポストやコアと根管象牙質の接着にも性能を発揮し、重合・硬化の不足による脱離リスクを軽減します。



写真提供: 山手通り歯科 森田 誠 先生

硬化物の色調が安定

“アミンフリー”の化学重合触媒^{※3}を導入。アミンを触媒成分として含有する当社従来製品と比較して、優れた色調安定性を発現します。

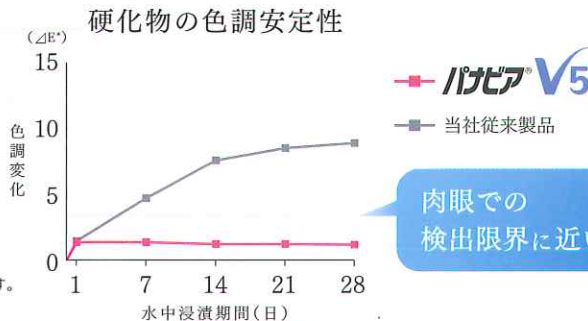

肉眼での
検出限界に近い

測定条件: 厚さ0.25mm、70℃水中浸漬後、白背景で測定
測定装置: 分光色差計 SE6000(日本電色)、光源:D65/2
クラレノリタケデンタル(株)測定:条件により数値は異なります。



「カタナ[®]クリーナー」で清掃

唾液や血液などの汚染により、歯科用接着材の接着力は低下します。「カタナ[®]クリーナー」で歯質・補綴装置を清掃することで、併用する接着材料の接着力の向上が期待できます。



●高い洗浄効果 色素結合法を用いた染色試験(人工唾液汚染)



測定条件: シルコニア板(「ノリタケカタナ[®]シルコニア」HT)を人工唾液に浸漬(1分間)人工唾液に含まれるタンパク質と結合する染色剤による染色度で汚染度を評価
データ測定: クラレノリタケデンタル株式会社 *測定条件により染色度は異なります。



詳しい
製品情報は
こちら

※1 オペークのみ化学重合 ※2 牛歯象牙質に対する引張接着強さ(グラフ参照) ※3 添付文書記載の化学重合開始剤、重合促進剤を指す

共通の接

支台

パナビ
トウース

歯質だけでなく
メタルコアや
レジンコアにも

光照射

補綴

クリア
セラミック プ

※4
幅広い素材に
優れた接着力

塗布後エ
待ち時

オプション

支台歯・補綴装

カタナ[®]

口腔内でも
使用可能な
弱酸性

接着阻
浮かし

for Veneer

管理医療機器
歯科用セメントキット

パナビア® ベニア LC



違うのは、ペーストだけ

各シェードの色調は「パナビア® V5」と同じで、試適用のトライインペーストは共通です。接着システムも共通で、ペーストを「パナビア® ベニア LC ペースト」に置き換えるだけで、ラミネートベニア※5に、より適した接着操作を行うことができます。

※5 十分な透光性を有する、2mm未満のラミネートベニア。使用できる材料は添付文書をご確認ください。



こだわりの操作性


“流れやすさ”と“垂れにくさ”を両立

真球状シリカフィラー※6・ナノクラスターフィラー※7・X線造影性フィラー※8を高密度に配合し、補綴装置内面に流れやすく、支台歯へのセット時は垂れにくいバランスの良いペーストです。

流れやすい



垂れにくい

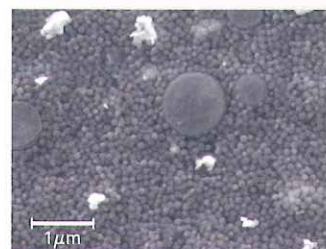

※6 球状微粒子シリカ
※7 表面処理シリカ系マイクロフィラー
※8 フッ化イッテルピウム

余剰ペーストが取りやすい

余剰ペースト1か所につき1秒以内の光照射※9で、半硬化したペーストを一塊で除去できます。(ブラシ等により除去することもできます)


※9 半硬化までの時間は照射器の種類や光量により異なります

取りやすい



良好な滑沢耐久性

歯ブラシ摩耗試験による光沢度の変化

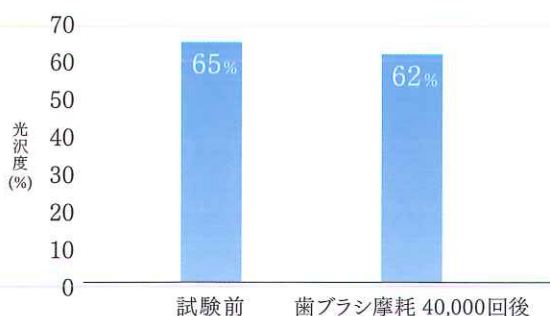

微細なフィラーを高密度に配合しているため、滑沢耐久性に優れ、歯ブラシ摩耗による光沢の減少を低減しています。

測定条件: 試験片φ10mm、厚み2mm。
#1000から#3000の耐水研磨紙にて表面を平滑化の後、ラッピングフィルム(3μm、ピンク)で最終研磨を行い研磨面の初期光沢度を60%前後の状態に研磨。
○歯ブラシ摩耗(荷重250g、30回ストローク/分、10wt%歯磨剤を用いて40,000回後の光沢度を測定※)
※光沢計VG 2000(日本電色工業)を用い、角度60°で測定
クラレノリタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

着システム

歯に

ア® V5
プライマー



付不要

表置に

フィル®
プライマー プラス



セラミックス、
ニア、金属

ブローまで
間なし

置の清掃に

クリーナー



害因子を
て流す

「パナビア® V5」の接着ステップ

※「パナビア® V5」の添付文書に記載の使用用途「1」クラウン、ブリッジ、インレー、アンレーの接着を示します。
写真提供：高輪歯科 加藤正治 先生



「パナビア® ベニア LC」の接着ステップ

※「パナビア® ベニア LC」の添付文書に記載の使用用途を示します。
写真提供：鶴見大学歯学部有床義歯補綴学講座 佐藤洋平 先生



※1 写真は光硬化によって半硬化させ除去する方法を示します。(「パナビア® V5 ペースト」オペークの場合はガーゼ・小筆等で拭き取ってください)
※2 写真は小筆により除去する方法を示します。



医療機器認証番号：226ABBZX00106000

コンプリートキット

メーカー希望小売価格 **57,000円** 202430600

- ・パナビア® V5 ペースト(ユニバーサル) 半量タイプ 4.2g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ペースト(クリア) 半量タイプ 4.2g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ペースト(ブラウン) 半量タイプ 4.2g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ペースト(ブリーチ) 半量タイプ 4.2g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 ペースト(オペーク) 半量タイプ 4.2g (2.4 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(ユニバーサル) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(クリア) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(ブラウン) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(ブリーチ) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(オペーク) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
- ・付属品：ミキシングチップ(合着用) 30個、ミキシングチップ(エンド用) 10個、ガイドチップ(エンド用細) 10個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファインシルバー) 50本、デイスボ小筆ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個



スターターキット(ユニバーサル)

メーカー希望小売価格 **23,000円** 202430601

- ・パナビア® V5 ペースト(ユニバーサル) 8.1g (4.6 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト(ユニバーサル) 2.4g (1.8 mL) ×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー 2 mL ×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス 2 mL ×1本
- ・K エッチャント シリンジ 3 mL ×1本
- ・付属品：ミキシングチップ(合着用) 15個、ミキシングチップ(エンド用) 5個、ガイドチップ(エンド用細) 5個、ニードルチップ(E) 20個、アプリケーションブラシ(ファインシルバー) 50本、デイスボ小筆ブラシ(黒) 50個、小筆ホルダー(黒) ×1本、混和血(FPN) ×1個



管理医療機器 歯科用コンジットレジンセメント

パナビア® V5 ペースト

医療機器認証番号：226ABBZX00102000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)
・8.1g (4.6 mL) ×1本 ・ミキシングチップ(合着用) 20個
メーカー希望小売価格 各 **12,000円** 202430611~202430615

ミキシングチップ(合着用)

・20個 メーカー希望小売価格 **1,570円** 202430626

ミキシングチップ(エンド用)

・20個 メーカー希望小売価格 **1,050円** 202430627

ガイドチップ(エンド用細)

・20個 メーカー希望小売価格 **520円** 202430628

管理医療機器 歯科用セメントキット

パナビア® ベニア LC

医療機器認証番号：303ABBZX00060000

管理医療機器 歯科用コンジットレジンセメント

パナビア® ベニア LC ペースト

医療機器認証番号：303ABBZX00035000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ)
・各2.6g (1.5 mL) ×1本 ・アプリケーションチップ(16G) 5個
メーカー希望小売価格 各 **8,000円** 202440505~202440508



アプリケーションチップ(16G)
・20個 メーカー希望小売価格 **1,300円**
202440513

管理医療機器 歯科用エッチング材

K エッチャント シリンジ

医療機器認証番号：226ABBZX00089000
・容量：3mL
メーカー希望小売価格 **3,000円** 202430252



管理医療機器 歯科用色調適合確認材料

パナビア® V5 トライイン ペースト

医療機器認証番号：226ABBZX00103000
(ユニバーサル、クリア、ブラウン、ブリーチ、オペーク)
・トライインペースト 2.4g (1.8 mL) ×1本
メーカー希望小売価格 各 **3,000円** 202430621~202430625



管理医療機器 歯面処理材
(歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料)
パナビア® V5 トゥース プライマー
医療機器認証番号：226ABBZX00104000
・容量：4mL
メーカー希望小売価格 **4,000円** 202430635



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料)
クリアフィル® セラミック プライマー プラス
医療機器認証番号：226ABBZX00105000
・容量：4mL
メーカー希望小売価格 **7,000円** 202430637

●関連製品



管理医療機器 歯科セラミックス用接着材料
(歯科金属用接着材料、歯面処理材)
カタナ® クリーナー
医療機器認証番号：301ABBZX00015000
・容量：4mL
メーカー希望小売価格 **4,200円** 202430970

製品の添付文書情報はこちら
◎医薬品医療機器総合機構



- メーカー希望小売価格の後の9ケタの数字は株式会社モリタの商品コードです。
 - 掲載商品のメーカー希望小売価格は2022年5月現在のものです。メーカー希望小売価格には消費税等は含まれておりません。
 - データは全てクラレノリタケデンタル株式会社測定です。条件などにより数値は異なります。
 - 印刷のため実際の色調と異なる場合があります。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。
 - 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
- パナビア® F2.0 管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：224ABBZX00029000
ノリタケ カタナ® シルコニア 管理医療機器 歯科切削加工用セラミックス 医療機器認証番号：223AFBZX00185000

製品・各種技術に関するお問い合わせ

クラレノリタケデンタル インフォメーションダイヤル

0120-330-922

月曜～金曜 10:00～17:00

ホームページ

www.kuraraynoritake.jp

連絡先 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4 常盤橋タワー
フリーダイヤル：0120-330-922

製造販売元 **クラレノリタケデンタル株式会社**

〒959-2653 新潟県胎内市倉敷2-28

販売元 **株式会社モリタ**

〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL.(06) 6380-2525
〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL.(03) 3834-6161
お客様相談センター：0800-222-8020 (医療従事者様向け窓口)
<http://www.dental-plaza.com>

クラレノリタケデンタル公式アプリ



Download on the
App Store

Google Play
で手に入れよう

クラレノリタケデンタル

検索

推奨 OS バージョン iOS13.7 以上 / Android9.0 以上