

あっ!
簡単!

6倍希釈

1本で
実用液6L分

剥離型トレークリーナー

Advance

- ✓ 予め印象体を削り落とす手間いらず
- ✓ 楽にはがせる
- ✓ 印象体を溶かさず容易な廃液処理
- ✓ トレーが錆びにくく長持ち
- ✓ 6倍希釈だから経済的 実用液1L1300円

ペーストタイプのアルギン酸塩印象材にも使えます

剥離
専用

MITSUBISHI
TRAY CLEANER **A**dvance


アルギン酸塩印象材専用剥離材



3つの楽ポイント！

当社溶解タイプトレークリーナーと比較

1. 印象採得トレーは予め印象体を削り落とさず**そのまま浸けるだけ**
2. 印象体が柔らかくなり**楽にはがせます**
3. 印象体を溶かさないので**実用液が濁らず後処理簡単**※

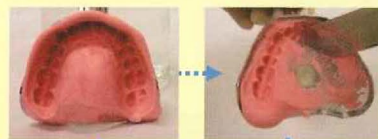

●三菱トレークリーナーA
予め印象体を削り落とす
手間がありません。



＜浸漬前＞

●溶解タイプの場合
予め印象体を削り落とす
必要があります。
硬化後の印象体は硬く
なり大変な作業です。

印象体が柔らかくなり
楽にはがせます。

印象体がついたま
ま浸漬します。

印象体の大きな固
まりを取り除いて
から浸漬します。



＜浸漬開始＞

＜試験環境＞
室温：25℃
液量：各500ml
印象材：アルフレックスダストフリー ノーマル
トレー：網トレー（全額上顎）

印象体が溶けないの
で、実用液が濁らず
綺麗です。

印象体が溶けて、実用
液の濁り、沈殿物が見
られます。



＜浸漬2時間後＞

※）お使いの印象材によっては、液交換近くで液が濁り出
すことがあります。剥離性能も低下している時なので、新液
に交換してください。

左：三菱トレークリーナーA 右：当社溶解タイプトレークリーナー

高い剥離性能

粉タイプのアルギン酸塩印象材も、
ペーストタイプのアルギン酸塩印象
材も、6倍希釈液で高い剥離性能を
発揮します。

すぐれた除菌力

歯科医院で2週間使用した実用液を用
いて細菌試験（生菌数測定）した結果、
生菌は確認されませんでした。
（測定：日本食品分析センター）

器具を守る防錆力

各種トレーに対して優れた防錆力
を有しています。
※液との接触面積が多く、印象体の剥離に
有効な網トレーの使用を推奨します。

アルギン酸塩印象材専用剥離材 三菱トレークリーナーA

アドバンス
Advance

新発売記念キャンペーン

スターターセット

●三菱トレークリーナーA：1本 ●専用浸漬容器：1箱
202330222

■三菱トレークリーナーAdvance 1000mL
202330223

■専用浸漬容器

202330224

6倍希釈

実用液6L分

- 標準価格の後の数字は品目コードです。
- 掲載商品の標準価格は、2017年11月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。
- 仕様及び外観は、製品改良のため予告なく変更する事がありますので予めご了承ください。
- ご使用に際しましては製品の注意事項を必ずお読みください。

製造 株式会社菱化デンタル

本社 三重県四日市市富士町1番150号

TEL：059-334-2588

発売 株式会社モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町3-33-18

東京本社 東京都台東区上野2-11-15

http://www.dental-plaza.com

TEL：06-6380-2525

TEL：03-3834-6161