



自己接着性レジンセメント
ビューティリンク SA



ビューティリンク SA

操作がスピーディな
オートミキシングタイプ

無駄なく使える
ハンドミキシングタイプ



前処理材不要!※
CAD/CAM冠や
金属冠など各種補綴装置に

マルチに 対応

※ CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合は、窩洞または支台歯に対してビューティボンド Xtremelによる前処理を行う事を推奨します。

※ PEEK材を除く



★^{プラス} 前処理材でPEEK材にも対応!



※ 前処理にCAD/CAMレジン用アドヒーズンをお使いいただくことで、PEEK材の接着にもお使いいただけます。



ビューティリンク SA
について動画でcheck!



SHOFU INC.

各種補綴装置に前処理材無し※で接着可能

※PEEK材を除く

新規高反応性シランカップリング剤および松風独自の接着性モノマーの配合により、ガラスセラミックスやCAD/CAM用レジン材料をはじめとする各種補綴装置に対し高い接着強度が得られます。




プラス
★+前処理材でPEEK材にも対応!
※ 前処理にCAD/CAMレジン用アドヒーズをお使いいただくことで、PEEK材の接着にもおしいただけます。



■各種補綴装置への接着強さ(MPa)

(代表値)
(自社試験)

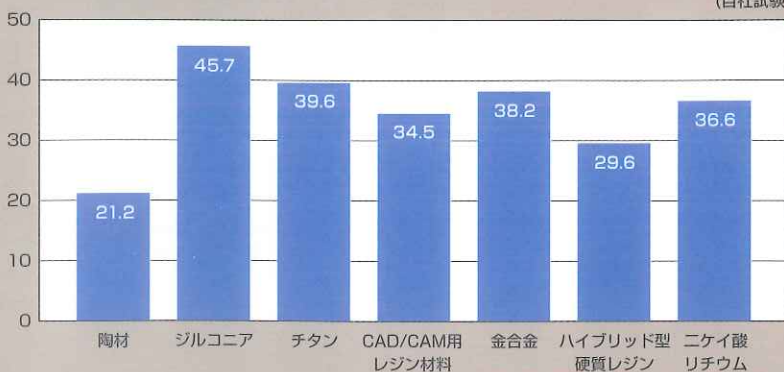

常温保管可能 **チェアサイドでの保管が可能**

新規化学重合開始剤の配合により、保存安定性が向上。1～25℃での保管が可能になりました。

★夏場など室温が25℃を超える場合は冷蔵庫で保管してください。

用途・お好みに合わせて 2 種類のシリンジをご用意

自動練和でスピーディに操作できる／

オートミキシング



無駄なく使え、経済的／

ハンドミキシング




無駄が少ない
ミキサーチップ(ショート)採用

ポストセメンテーション
にもお使いいただけます


接着直後から
高い接着強さを
発現

練和しやすく、
塗布しやすいペースト性状

チップ内の
残存ペースト量
30%削減

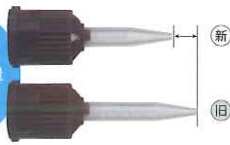

※ 別売の松風ミキシングセットミキサー&ノズル(細)が必要です。

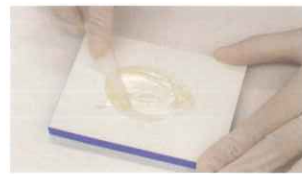

余剰セメントの
除去動画をCHECK!



色調は 3 色からお選びいただけます

色調は用途に応じて3色から 選択可能


Point 遮蔽性の高いオパーク色



透明性が高い色調
支台歯及び補綴装置の
審美性が最大限に発現できます。



A2相当の色調
マージンラインが視認される症例に
適しています。

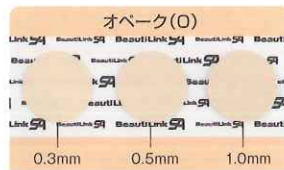

A3相当の色調
金属または変色歯の遮蔽に。
薄い被膜でも高い遮蔽性を示します。



補綴装置装着後のことも考えたいから



口腔内環境の健全化をサポートする

ビューティリンク SAに含まれるS-PRGフィラーは、
松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。
6種類のイオンリリースにより、右に示すような特長を有します。

特長
1

イオンリリース & フッ化物リチャージ機能

S-PRGフィラーからフッ化物をはじめとする6種類のイオンが
持続的にリリースします。また、フッ化物含有歯磨きジェルを
使用することで、口腔内のフッ化物イオンをリチャージします。

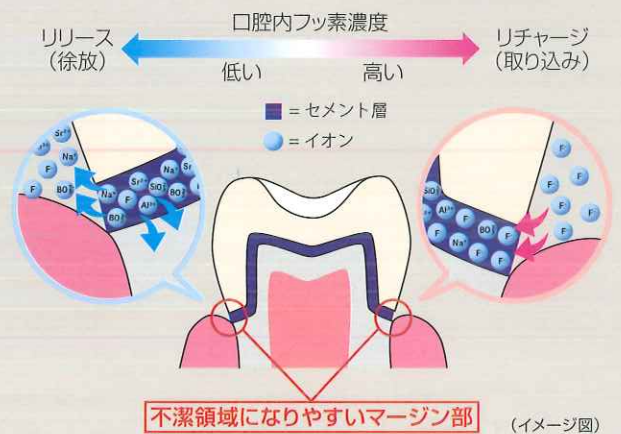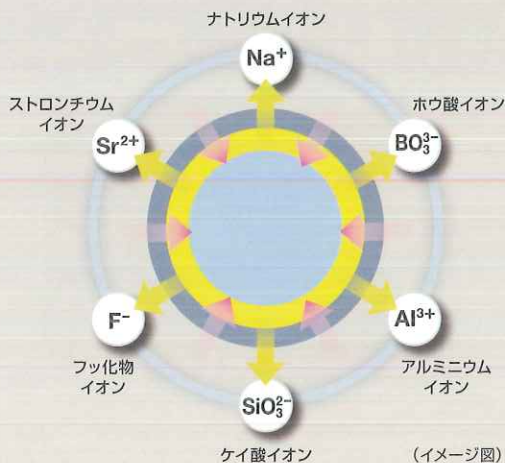

不潔領域になりやすいマージン部 (イメージ図)

簡便な操作ステップ 操作を覚えやすく簡単に使用できます。

1 前処理



窩洞・支台歯の清掃
補綴装置のサンドブラスト処理

2 練和



ペーストを排出し10秒間練和



補綴装置に塗布



②
ミキサーチップを装着



①
補綴装置に塗布

3 装着



1~2秒間照射し、
半硬化した余剰セメントを除去*1



マージン部を含む
各方向から照射**2
(LED10秒間、ハロゲン20秒間)



マージン部を研磨、
咬合調整

H ハンドミキシング
A オートミキシング


余剰セメントは簡単に除去可能



⚠ オバーク色に関する注意

本品のオバーク色は過敏性が高いため、お使いの際は下記の点にご注意ください。
 ※1 余剰セメントの除去について
 硬化前に綿球等で除去するか、2~3分放置し、半硬化させて除去してください。
 周辺温度によって硬化状況は変わるため、探針等で硬化具合を確認してください。
 ※2 セメントの硬化について
 光照射だけでは硬化が不十分な恐れがあります。光照射後、5分間静置してください。

★ 十分なセメント操作時間を確保しつつもシャープに硬化し、チェアタイムの短縮を実現

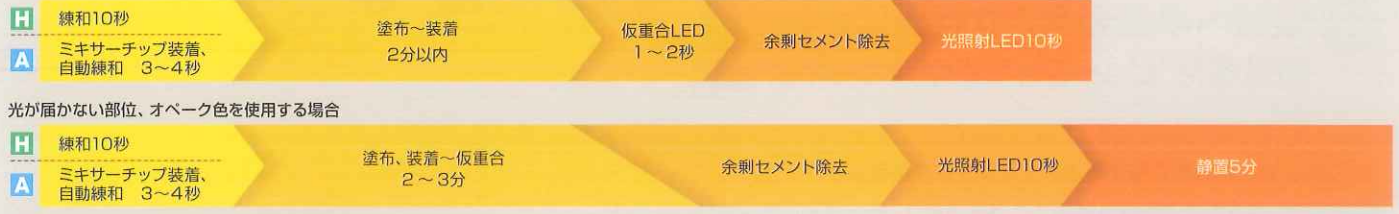

CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合 は、窩洞または支台歯に対してビューティボンド Xtremeによる前処理を行う事を推奨します。

●臨床写真(CAD/CAMレジンブロック冠の補綴修復)

1



支台歯形成

2



支台歯の前処理

3



補綴装置の前処理

4



ペースト塗布・圧接

5



LED1~2秒照射後
余剰セメント除去

6



最終硬化

ビューティボンド Xtremeを塗布・エア乾燥(弱圧3秒→強圧)・光照射(LED5秒)



CAD/CAM冠等の接着強さが求められる症例には前処理を推奨

前処理不要ですが、行う事でCAD/CAM冠の内面処理加算が得られます(45点)


PEEK材の前処理には



CAD/CAMレジン用
アドヒーズが必要です。
詳しくはこちら



S-PRGフィラーを含有

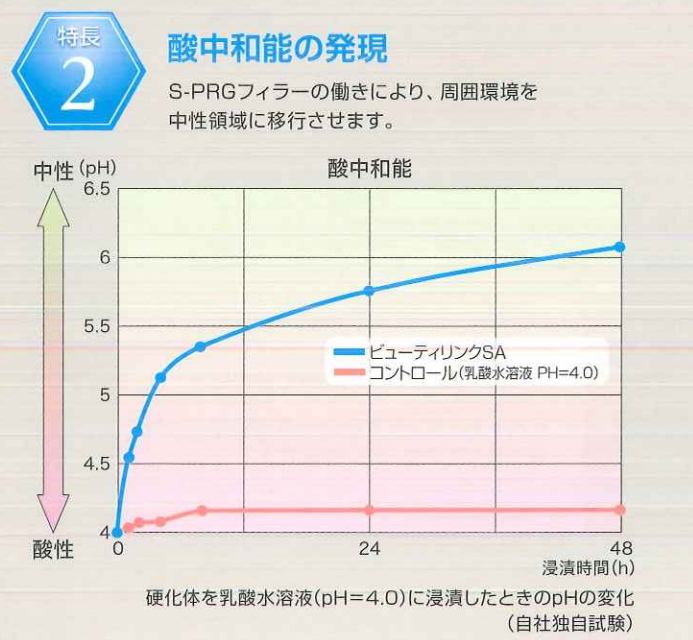


特長 3

抗プラーク付着性(学会報告)


日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

口腔内におけるプラーク形成状況の観察(24時間ブラッシングなし)

S-PRGフィラー配合コンポジットレジン(ビューティフィルII等)の表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって再形成され、持続的にプラーク形成を抑制するといわれています。

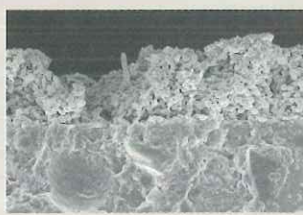

S-PRGフィラー未配合自社コンポジットレジン

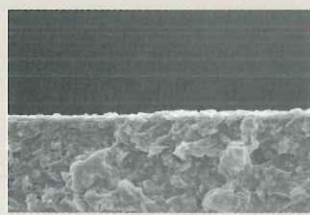

ビューティフィルII (S-PRGフィラー配合)


(参考: 朝日大学 歯学部歯科保存学分野/第117から123回日本歯科保存学会報告)

CAD/CAM冠の脱離が心配な方におすすめ

CAD/CAM用レジンブロックが広く臨床使用されるようになり10年以上経過していますが、未だ脱離発生のリスクは存在します。本品はCAD/CAM冠の脱離を減らすため、次のような特長を有しています。

1 接着直後から高い接着強さを発現



脱離は極めて早期に発生することが多いと報告されています。^{※1}そこで、本品はCAD/CAM冠に対し、**接着直後から高い接着強さを発現**するよう設計しました。

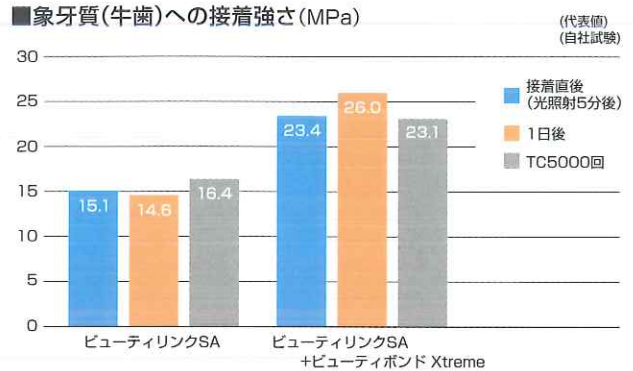

2 歯質への接着をより強固にする前処理材“ビューティボンド Xtreme”



CAD/CAM冠は他の補綴装置より厚みがあるため、支台歯を形成する際に歯質を多めに切削する必要があります。そのため、**支台歯表面の管間および管周象牙質の面積が小さい上、象牙質からの浸出液の影響も考慮する必要があります**、高い接着性が求められます。^{※2}また、支台歯側のより高い接着性を求めるために、前処理材(ボンディング材)の使用が必要と言われています。^{※3}本品は、CAD/CAM冠の接着に対し、**歯質側への前処理材としてビューティボンド Xtremeを推奨**しています。ビューティボンド Xtremeをお使いいただくことで**接着強度が向上し、脱離のリスクを低減**できます。

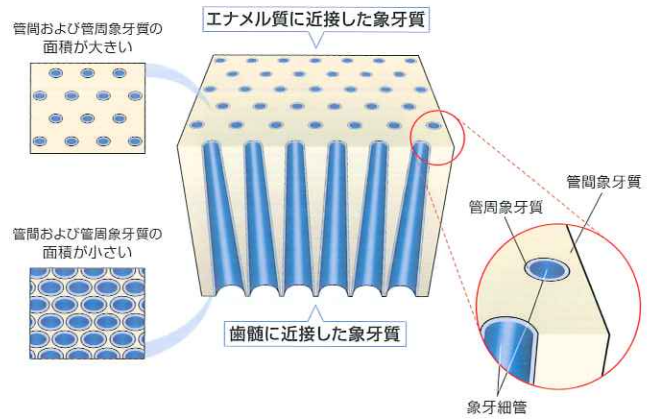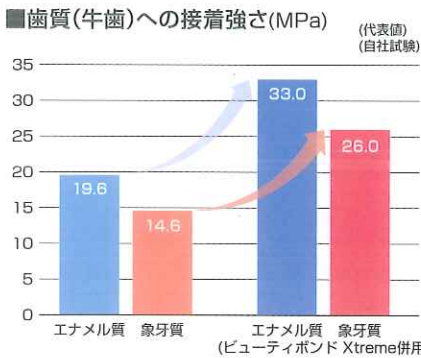


〈イメージ図※2〉

【出典】

- ※1 日補綴会誌 Ann Jpn Prosthodont Soc 14 : 115-123, 2022(P118)
- ※2 松風カラーアトラス「デジタルデンティストリーホントのところ、どうなの?」(P44)
- ※3 日補綴会誌 Ann Jpn Prosthodont Soc 14 : 115-123, 2022(P117)

Point 薄い被膜厚さ

★ビューティボンド Xtremeとセットでの使用時に補綴装置浮き上がり心配な方へ

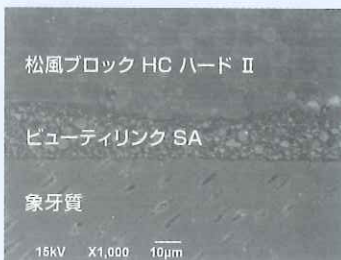

被膜厚さ約14μm



ビューティボンド Xtremeの被膜厚さ：5μm以下

ビューティボンド Xtremeの被膜厚さは薄く、液だまりになりにくい性状です。

販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ビューティリンク SA	歯科接着用レジンセメント	管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00032000

包装・価格



歯科用合着・接着材料
(レジン系・自動練和型)

38
点



歯科用合着・接着材料
(レジン系・標準型)

17
点

お得に購入!



ビューティリンク SA
ハンドミキシング
ダブルパック…¥21,600

【内容】
ペースト 9mL×2、スパチュラ 1、
紙練板 1、ステップカード 1
【色調】1色(アイボリー)

ビューティリンク SA
オートミキシング
5mL(8.6g)… ¥12,000

【内容】
ペースト 5mL、松風ミキサーチップ(ショート)10、
ステップカード 1
【色調】3色(クリア、アイボリー、オパール)

ビューティリンク SA
ハンドミキシング
9mL(15.6g)… ¥12,000

【内容】
ペースト 9mL、スパチュラ 1、紙練板 1、
ステップカード 1
【色調】3色(クリア、アイボリー、オパール)

●製品概要

X線造影性あり
保管温度 1～25℃ 被膜厚さ 14μm
シリンジ1本あたりの使用可能回数：
オートミキシング22回、ハンドミキシング120回
※第一小臼歯クラウン接着を想定

関連製品



CAD/CAM冠等、より高い接着強さを求める場合に前処理材としてお使いください



管理医療機器 認証番号
302AKBZX00026000
歯科用象牙質接着材
ビューティボンド Xtreme
1セット… ¥16,000

【内容】ビューティボンド Xtreme 5.0mL
ティスポブラシ ファイン(ピンク) 50、松風Vティッシュ 25

- ・1本で各種被着体に接着可能なアドヒーシブ
- ・知覚過敏抑制や象牙質レジンコーティングにも

お得な
トリプルパックも
ご用意



ビューティボンド Xtreme
トリプルパック
5.0mL×3本… ¥38,000



PEEK材と接着する場合、前処理材として
補綴装置側にCAD/CAMレジン用アドヒーシブを
塗布してください



管理医療機器 認証番号
304AKBZX00039000
歯科レジン用接着材料
CAD/CAMレジン用アドヒーシブ
5mL… ¥8,400



▶ポストセメンテーション用
ビューティリンク SAオートミキシングに
装着してお使いください



一般医療機器 届出番号
26B1X00004000229
歯科用練成器具
松風ミキシングセット
ミキサー 40個… ¥2,200
ノズル(細) 40個… ¥1,320

取扱い店

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。