

消毒・滅菌を確実に行う上で「洗浄」は重要な工程です

医療機器などの再生処理において、消毒・滅菌処理だけを行い洗浄が不十分では、適切な処理とは言えません。洗浄は医療機器などの表面の微生物や、消毒・滅菌の妨げとなる有機物を除去する手段として、非常に有効です。洗浄する医療機器などの種類やその材質により、洗浄剤の種類や洗浄方法を適切に選ぶことが大切です。

SafeOne セーフワン

INSTRUMENT 器具・器材用

基材適合性	ステンレススチール アルミニウム	銅 ポリ塩化ビニル(PVC)	ポリプロピレン(PP) ポリエチレンテレフタレート(PET)	ABS樹脂 シリコン
成分	酵素(サチライシン、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ、ペクチナーゼ、 α -グルコシダーゼ)、酵素保護剤、界面活性剤、キレート剤、pH調整剤、防腐剤、色素、溶剤			
性状	液体(中性)			

SPITTOON スピットン・バキューム用

基材適合性	ステンレススチール アルミニウム	銅 ポリ塩化ビニル(PVC)	ポリプロピレン(PP) ポリエチレンテレフタレート(PET)	ABS樹脂 シリコン
成分	酵素(サチライシン、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ)、酵素保護剤、界面活性剤、抗菌剤、キレート剤、pH調整剤、色素、溶剤			
性状	液体(中性)			

PRE-SOAK FOAM 予備洗浄用フォーム

基材適合性	ステンレススチール アルミニウム	銅 ポリ塩化ビニル(PVC)	ポリプロピレン(PP) ポリエチレンテレフタレート(PET)	ABS樹脂 シリコン	ゴム ガラス
成分	酵素(サチライシン、アミラーゼ、リパーゼ、セルラーゼ)、酵素保護剤、界面活性剤、発泡剤、安定剤、防錆剤、抗菌防腐剤、キレート剤、pH調整剤、色素、溶剤				
性状	液体(中性)				

より良い再生処理のための
医療用洗浄剤ブランド

セーフワン

SafeOne

[中性多酵素洗浄剤]

INSTRUMENT

SRITTOON

PRE-SOAK FOAM

Pride in Protection™

私たちメディコムジャパンは感染管理で社会に貢献します。

メディコムジャパン(A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド)は、カナダのモントリオールを本社とし、医療現場になくてはならない感染管理のための製品を製造販売するヘルスケア企業です。感染管理の先進国である北米の基準や知識が反映された、高い品質と洗練されたデザインが特徴であるメディコムの製品群は、世界約100カ国に提供されています。



製造販売元 **A.R.メディコム・インク・アジア・リミテッド**

〒650-0023 神戸市中央区栄町通1丁目2-10 読売神戸ビル9F

【代 表】TEL:078-327-2333 FAX:078-327-2323

【メディカル事業部】TEL:078-327-2444 FAX:078-327-2112

【デンタル事業部】TEL:078-327-3366 FAX:078-333-0074

【コンシューマー/インダストリアル事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

【Eコマース/カタログ事業部】TEL:078-958-7788 FAX:078-327-2323

✉ info@medicom-japan.com 地球 www.medicom-japan.com



サイトはこちらから▲

※パッケージデザイン・掲載の内容は予告なく変更する場合がございます。※使用している写真、図、イラストはイメージです。 2026.08.24

Medicomの医療用洗浄剤ブランド

SafeOne セーフワン

医療用洗浄剤における多酵素含有の有効性

「さまざまな汚れ」に対応するには 「それぞれに適した酵素」がポイントです

酵素は、タンパク質、脂肪、でんぷん、食物繊維などの汚れを分解する能力を持つ生物由来物質です。酵素は基質特異性を持ち、それぞれ特定の汚れの種類(基質)にのみ作用します。医療現場で使われた医療機器などには、血液・唾液・粘液・皮脂・胆汁・バイオフィームなど、さまざまな汚れが組み合わさって付着しています。そのため、複数の酵素を配合することで幅広い汚れに対応が可能になり、バイオフィーム対策にもつながります。

酵素名	基質	洗浄効果	予備洗浄用	器具・器材用	スピットン・バキューム用
 プロテアーゼ(サチライシン)	タンパク質	● 血液や組織のタンパク質汚れの除去 ● 器具表面の洗浄効率向上	●	●	●
 アミラーゼ	糖(でんぷん)	● 粘着性のある炭水化物などの食品残渣汚れの除去 ● バイオフィームなど多糖類の除去	●	●	●
 リパーゼ	脂質	● 皮脂や脂肪・軟膏などの脂汚れの除去	●	●	●
 セルラーゼ	セルロース(不溶性食物繊維)	● 糖鎖や粘性多糖の徹底的分解 ● バイオフィームの除去 ● 内視鏡や歯科器材・細管器具の洗浄向上	●	●	●
 ペクチナーゼ	ペクチン(水溶性食物繊維)	● 果物残渣など植物系汚れの除去や粘性の低下 ● 印象材やジェルの洗浄に効果的		●	
 α-グルコシダーゼ	糖(オリゴ糖)	● 粘性の高い糖タンパク汚れや分泌物の洗浄を補助		●	

PRE-SOAK FOAM 予備洗浄用フォーム

4つの酵素と除菌成分を配合し、72時間湿潤状態を保ちます

- タンパク質分解酵素を含む4つの酵素が高い洗浄力を発揮します。
- 除菌成分配合で大腸菌やカンジダを99.9%以上減少させます。
- 72時間湿潤状態を保持、すぐに洗浄できないときにスプレーしておけば、後で都合の良いタイミングで洗浄できるため業務改善につながります。
- 医療機器などにダメージを与えにくい中性です。
- 泡タイプのため湿潤状態がわかりやすく、視認性に優れます。

除菌 発泡性 泡


セーフワンでお悩み解決!



品名:セーフワン 予備洗浄用フォーム

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JDE010058	500mL	12本	4894476041614

使用方法

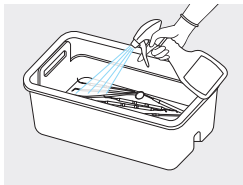

医療機器などを使用後は、速やかに原液を全体にムラなくスプレーしてください。




INSTRUMENT 器具・器材用

6つの酵素が高い洗浄力を発揮、多様な洗浄方式にも対応します


- 6つの酵素がそれぞれ対応した汚れを分解し、高い洗浄力を発揮します。
- 多様な洗浄方式(用手、浸漬、超音波、WD など)に対応し、医療機器などにダメージを与えにくい中性です。
- 高い希釈倍率(例:浸漬洗浄200倍)で経済的です。
- 低泡性のためすすぎやすく、泡による針刺しリスクを軽減します。



使用方法(例:浸漬洗浄)

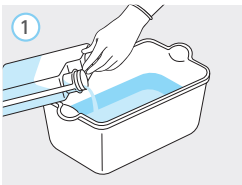

常温の水またはゆるま湯で200倍に希釈してください。

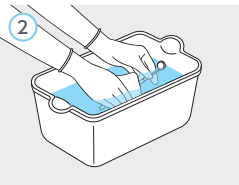

10分以上浸漬してください。浸漬後は十分にすすいでください。

低発泡性 濃縮

品名:セーフワン 器具・器材用

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JDE010055	1L	4本	4894476041294
JDE010056	5L		4894476041287

※5Lは専用ポンプ付(1プッシュ30mL) ※1Lの容器は変更になる場合があります。

希釈例

用手洗浄:200倍希釈(原液 30mL/水 6L)
浸漬洗浄:200倍希釈(原液 30mL/水 6L)
超音波洗浄:200倍~500倍希釈(原液 30mL/水 6~15L)
WD:200倍~500倍(原液 30mL/水 6~15L)

※汚れに応じて濃度や時間、温度を調整してください。
※洗浄液は連続して使用することが可能ですが、少なくとも1日に1回は交換を行ってください。

SPITTOON スピットン・バキューム用

4つの酵素と除菌成分を配合、洗浄と除菌を1ステップで行えます

- 4つの酵素が高い洗浄力を発揮します。
- 配合された除菌成分が腸球菌を99.9%以上減少させます。
- 除菌と洗浄を1ステップで行えるため利便性に優れます。
- 高い希釈倍率(50倍)で経済的です。



除菌 低発泡性 濃縮

品名:セーフワン スピットン・バキューム用

品番	サイズ(内容量)	入り数(ケース)	JANコード
JDE010057	5L	4本	4894476041300

※専用ポンプ付(1プッシュ30mL)

使用方法



例:スピットン・排水パイプ
診療終了後、コップ1杯(約200mL)の希釈液を流し、翌朝まで放置してください。
翌朝、診療開始前に水を流して汚れを落とします。



例:バキューム・排管
診療終了後、コップ1杯(約200mL)の希釈液を吸引させ、翌朝まで放置してください。
翌朝、診療開始前に水を充分吸引させて汚れを落とします。

希釈例

50倍希釈(原液 30mL/水 1.5L)

※汚れに応じて濃度や時間、温度を調整してください。
※希釈用の専用容器はありません。市販の使いやすい容器などをお使いください。