

New!

シランカップリング剤
配合

GC



新テクノロジー採用の レジンセメント



高いユーザビリティ

保険から自費まで
これひとつ!



オートミックスタイプ

歯科用接着・接着材料I
自動練和型 **36点**

歯科接着用レジンセメント
ジーセム ジーセム ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00104000



ハンドミックスタイプ

歯科用接着・接着材料I
標準型 **17点**

歯科接着用レジンセメント
ジーセム ジーセム ユニバーサル カートリッジ
管理医療機器 307AKBZX00105000

シランカップリング剤配合

シランカップリング剤を水から守る新たなテクノロジー

SilaneKeeper Tech

ジーセム ユニバーサルでは、シランカップリング剤を水から
守る「**SilaneKeeper Tech**(シランキーパー テック)」を採用。

**シランカップリング剤は水と反応すると加水分解し、
シランカップリング効果が低下します。**


本製品はペースト内に配合した安定剤により、長期保管中に
シリンジ・カートリッジ内へ混入する水との反応を抑制。
安定剤が水と優先的に反応することで、シランカップリング剤の
加水分解を抑制し、長期保管後もより安定した
シランカップリング効果が期待できます。

「安定剤」が配合されていないレジンセメント



→ シランカップリング効果が**低下**

ジーセム ユニバーサル

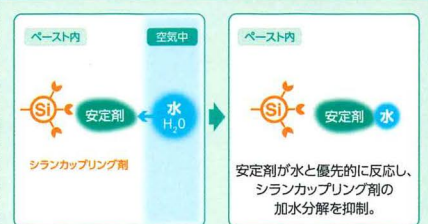

→ シランカップリング効果が**安定**

ユニバーサルレジンセメント

ジーセム ユニバーサル

発売記念キャンペーン

製品の詳細はこちら



平素はジーセム製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。
この度、「ジーセム ユニバーサル 発売記念キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にご用命ください。

キャンペーン期間中、対象製品を **特別価格** にてご提供いたします。

対象製品

ジーセム ユニバーサル 2シリンジ / ジーセム ユニバーサル バリューストック(5シリンジ) /
ジーセム ユニバーサル カートリッジ 1カートリッジ / ジーセム ユニバーサル カートリッジ バリューストック(3カートリッジ)

2026 11/24 - 2027 1/20

〈数量限定〉

製品特長・ご注文書は裏面へ!

ペースト内に**シランカップリング剤**と**機能性モノマー**（10-MDP※）を配合。
メタル、ジルコニアはもちろんハイブリッドレジン、セラミックスなど
様々な材質の補綴装置に接着*します。

※10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
*より安定した接着を求める場合には、窩洞または支台歯にG-ボンド ユニバーサルを使用

適応症例

・メタル		・ジルコニア ・セラミックス （ニッケイ酸リチウム系・長石系） ・ハイブリッドレジン		・CAD/CAM ハイブリッド レジンブロック	・PEEK※1
インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ	インレー/ アンレー	クラウン/ ブリッジ

※1 G-ボンド ユニバーサルをプライマーとして使用します。詳しくは電子添文をご確認ください。 ※2 単冠に限る。

高いユーザビリティ

操作性向上でもっと使いやすく

タックキュアの光照射時間を**2～3秒※**に設定。また、タックキュア後の余剰セメントはゴム状の時間を自社従来製品より長く設定し、
余裕を持った余剰セメント除去が可能になりました。 ※光照射器の性能や照射時間により異なります。

◆スムーズな余剰セメント除去

除去しにくい隣接面などの余剰セメントも
一塊でスムーズに除去可能です。

◆使いやすいペースト性状

チキソトロピー性を改良し、
使いやすいペースト性状になりました。

被膜厚さ*
5μm

補綴装置セット時

軽い力でペーストが薄く広がるため、
浮き上がりりがほとんどない

※被膜厚さの値は、小さいほど薄く広がっている（セメント被膜厚さが薄い）ことを示す

より安定した接着へ

ジーセム ユニバーサル × G-BOND Universal

より安定した接着を追求したユニバーサルシステム

直接修復に使用できるG-ボンド ユニバーサルとの併用により、さらに幅広い症例に適応。

補綴装置内面も窩洞・支台歯も“G-ボンド ユニバーサル”1本でOK。
ウォーターフリーのボンディング材のため、エアブローなしでも使用可能です。

ジーセム ユニバーサル

G-ボンド ユニバーサル



歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 /
歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材 / 歯面コーティング材
ジーシー G-ボンド ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00014000

キャンペーン期間中、対象製品を**特別価格**にてご提供いたします。

対象製品



ユニバーサルレジンセメント
ジーセム ユニバーサル

〈2シリンジ〉
包装・希望医院価格●1函：シリンジ（2.7mL）2本、EMミキシングチップC 15個、
EMミキシングチップP 5個、EMミキシングチップ用ノズルRC 5個、テクニクガイド 1部＝¥11,000
色調●トランスルーセント（TR）、ユニバーサル（U）、オペーク（O）、ホワイトオペーク（WO）

〈バリューバック（5シリンジ）〉
包装・希望医院価格●1函：シリンジ（2.7mL）5本、
EMミキシングチップC 40個、EMミキシングチップP 5個、
EMミキシングチップ用ノズルRC 5個、
テクニクガイド 1部＝¥23,200
色調●ユニバーサル（U）

歯科接着用レジンセメント ジーシー
ジーセム ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00104000



バリューバック（5シリンジ）



シリンジ1本当たりの使用回数UP！
コストダウンを実現！



ユニバーサルレジンセメント
ジーセム ユニバーサル カートリッジ

〈1カートリッジ〉
包装・希望医院価格●1函：カートリッジ（7.6mL）1本、練和紙（No.22）1冊、テクニクガイド 1部＝¥6,660
色調●トランスルーセント（TR）、ユニバーサル（U）、オペーク（O）、ホワイトオペーク（WO）

〈バリューバック（3カートリッジ）〉
包装・希望医院価格●1函：カートリッジ（7.6mL）3本、練和紙（No.22）1冊、テクニクガイド 1部＝¥17,400
色調●ユニバーサル（U）、オペーク（O）、ホワイトオペーク（WO）

歯科接着用レジンセメント ジーシー ジーセム ユニバーサル カートリッジ
管理医療機器 307AKBZX00105000

色調	トランスルーセント (TR)	ユニバーサル (U)	オペーク (O)	ホワイトオペーク (WO)
おすすめ	セラミックスや CAD/CAMの インレーに	メタルからセラミックス、 CAD/CAM冠まで 幅広く使用可能	メタルコアに CAD/CAM冠を 装着する症例に	変色歯の症例に

X線造影性あり

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2026年11月24日～2027年1月20日

対象製品		ご注文数			
		トランスルーセント（TR）	ユニバーサル（U）	オペーク（O）	ホワイトオペーク（WO）
ジーセム ユニバーサル	2シリンジ				
	バリューバック（5シリンジ）				
ジーセム ユニバーサル カートリッジ	1カートリッジ				
	バリューバック（3カートリッジ）				

貴医院名

ご住所 〒

TEL ()

お取引販売店

ご担当者

様

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。
また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 785-8040
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286