

コメット Ni-Tiロータリーファイル

# エンドリスタート

ENDO ReStart



古いガッタパーチャでも

サクッ  
サクッ

と削ります!



1



根管上部用  
Step1



2



根管下部用  
Step2



資料ご提供  
フリーランス歯内療法専門医  
寺岡 寛 先生

ご愛用感謝 キャンペーン

24.3/21(木) - 24.5/20(月)

すべて対象

エンドリスタートオープナー  
単品

エンドリスタートファイル  
21mm, 25mm 単品

スターターセット #4680

## 特別価格

にてご提供

製品動画はこちら

東京都港区ご開業  
赤坂TK デンタル  
山内 隆守 先生





# Pointは 先端形状 × ダイナミックツイスト

## スルスル入る先端形状


古い充填材も入り易いようサイド部分に  
カッティングブレードを付与

### エンドリスタート オープナー

※ピンク部分に  
ブレードを付与



### エンドリスタート ファイル

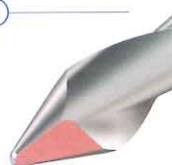

## 効率的に除去する Dynamic Twist

充填材を掻き出しやすいようにブレード先端部分の溝幅は狭く、  
シャンクに近づくにつれてブレードの溝間隔を広く設計

通常品

通常品



エンドリスタートファイル

エンドリスタートファイル

先端はセーフエンド  
パーフォレーションやレッジを抑制

## オープナーとファイルを 特別価格 でご提供！

### キャンペーン内容

#### エンドリスタート オープナー単品

RE10L15-030(6本)

硬いガッタパーチャにも  
サクサク入るオープナー

#### エンドリスタート ファイル単品 (21mm/25mm)

RE05L21-025(6本)

根尖近くにも届きやすい  
便利な25mm をご用意

RE05L25-025(6本)

#### エンドリスタート スターターセット



オープナー (2本) + 25mm (4本)

オープナーと 25mm ファイル  
が入ったスターターセット！

### 製品規格

※実物大ではございません

品番	RE10L15-030	RE05L21-025	RE05L25-025	#4680 (スターターセット)
作業長	15	21	25	
ブレード長	5	14.9	14.9	RE10L15-030(2本)
先端直径	0.3	0.25	0.25	RE05L25-025(4本)
テーパ	10%	5%	5%	

標準医院価格：¥10,800

入数：6入 (単品・セット共に共通) シャンク：CA

推奨回転数：300回転 最高回転数：500回転 トルク：1.8N/cm

医療機器の分類：管理医療機器  
一般的名称：電動式歯科用螺旋状除去器  
販売名：コメット エンドリスタート  
認証番号：303AKBZ00107000

※エンドリスタートオープナー：滅菌可能  
※エンドリスタートファイル：単回使用

製造販売元

株式会社モモセ歯科商会



本社・大阪営業所  
東京営業所  
九州営業所

〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333(代)  
〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)  
〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)

URL：http://www.momose-dm.co.jp/

お問い合わせ