

カルフィー・ペースト 新規・ご愛用感謝 キャンペーン

キャンペーン期間

2024.4/22(月)～5/20(月)

期間・数量限定

対象製品

除去性と操作性にこだわって開発された
水酸化カルシウム水性ペースト



水酸化カルシウム水性ペースト
カルフィー・ペースト

希望医院価格 **¥3,980**

包装 ●1函:シリンジ3g 1本、エンド用チップ 10本

水酸化カルシウム系歯科根管充填材料
ジーシー カルフィー・ペースト
高度管理医療機器 21500BZZ00134000

水酸化
カルシウム濃度

36%

カルフィー・ペースト 1函と

キャンペーンセット品 エンド用チップ 10本入1袋を

組み合わせ価格にてご提供

キャンペーンセット品

- 根管内に挿入しやすいカーブタイプのチップ!
- 細いチップでも押し出しやすい!



単回使用

エンド用チップ

包装・希望医院価格●1袋:10本=¥1,050

歯科用充填・修復材補助器具(歯科用注入器具)
ジーシー エンド用チップ
一般医療機器 13B1X10160000033


Q. ペーストの流動性は
いかがでしょうか?

n=320



Q. 根管からの除去性は
いかがでしょうか?

n=316

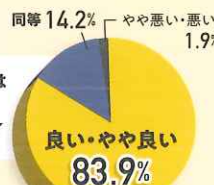

ユーザー様からのご意見

- 操作性が良く、除去しやすい。
- チップの角度が付与されるので使いやすい。
- フロアに慣れるまで時間がかかりそう。

GCサークル187号 42ページより

製品特長は
裏面 Check!

ご注文書

キャンペーン期間: 2024年4月22日(月)～5月20日(月)

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL (_____) _____

お取引販売店 _____ ご担当者 _____ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
カルフィー・ペースト 1函	エンド用チップ10本入 1袋	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)207-3370
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286



除去性と操作性にこだわって開発された 水酸化カルシウム水性ペースト


根管からスムーズに **除去** できる

医薬品メーカーとして
長年培った技術を応用した
APポリマー配合ペースト

(Amphiphilic Polymer = 両親媒性高分子)

▶ APポリマーとは？

水になじみやすい親水基と、なじみにくい疎水基をあわせもった成分です。これにより、ペースト性状を保ちながら、除去時にはAPポリマーが水分を吸収することでペーストの水分量が増え、ペーストを除去しやすくなります。

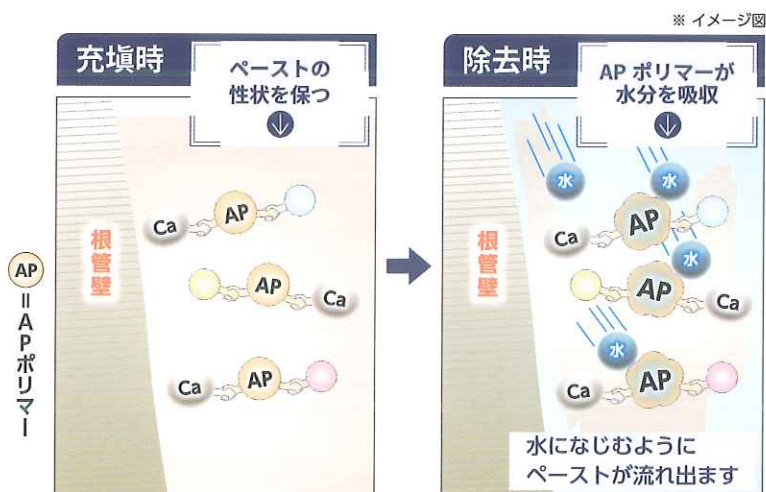

スムーズに **充填** できる

根管に挿入しやすい
カーブタイプの細いチップ

押し出しやすい
なめらかなペースト



⚠ 根尖孔外への押し出し禁止



正しい充填方法



プランジャーは
軽い力でゆっくり押す



注入と同時に
チップを引き上げる



誤った充填方法



チップの先端を
根尖部に押し込む



根尖孔外に向けてペーストを
強く押し出す