

# ヒューフレディ スケーラー・検査 キャンペーン!

対象期間: 2025. 4/21(月) ▶ 6/20(金)

キャンペーン対象商品は**特別価格**にて  
ご提供いたします。是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。  
ご購入の際はお出りの歯科商店に注文してください。

5つの質問で  
グレイシーキュレットが  
簡単に選べるよ!

LINE グレイシーキュレット  
かんたんセレクト



ヒューフレディキャラクター  
Sidekick(サイドキック)

チラシ内にわたしたちが隠れているよ!  
全部で何体いるか教えてみてね!  
答えは「個人防護具キャンペーン」の  
チラシに載ってるよ!

※上記製品左上から PCVNCKIT6,  
SAS17/18XE2, MIR5DSHD, MH6

## 掲載製品

- グレイシーキュレット
- シックルスケーラー
- ユニバーサルキュレット
- インプラントスケーラー チタン
- インプラケアII
- カラービュープローブ
- HDミラー
- ロジウムコーティングミラー
- エクスプローラー(探針)
- カラーコードプローブ
- ピンセット
- インスツルメントシャープニング  
・サイドキック  
・ダイヤモンドシャープニングカード  
・デュアルストーン

ヒューフレディキャラクター  
Nevi(ネビィ)

FriedyGroup

# HARMONY™

## ハーモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

## 歯牙に加わる圧力を40.9%低減※

※ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値  
 ハーモニー エルゴノミック スケーラー及びキュレットは、  
 スケーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、  
 患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。

表1: スケーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

ハンドルの種類	ピーク圧時点の平均値 (N)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー(#XE2)	1.20	—
角柄(#2)	2.03	40.9%



## シャープさがさらに長持ち! コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験※1結果において、  
**エバーエッジ (EverEdge™) 2.0**のCuttingエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、  
 開封時に約6ニュートン(約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン(約700g)という結果でした。  
 エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のCuttingエッジが付与されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミック  
 スケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスケーリング操作ができ、術者は疲れにくく、  
 患者様の負担も軽減されます。


※1: 測定用に調整されたシリコンストリップにブレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどブレードが鋭利なことを示し、ストロークによってブレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力を加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

## あらゆる方向から確実に 素早い把持が可能

シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、  
 より**確実且つ鋭敏に把持が可能**になりました。  
 グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から把持しても  
 しっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMS シグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

## グレイシーキュレット/シックルスケーラー 一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)

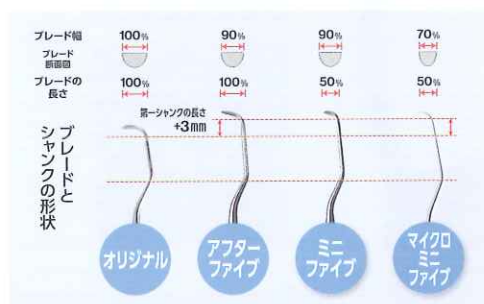

スタンダード: 細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。  
 超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングや  
 ルートプレーニングに使用。  
 リジッド: スタンダードシャングクに比べて頑丈。  
 比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。

作業部の材質	エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)	
	ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーの <b>エッジのシャープさをより持続するために開発した</b> 優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。	
ハンドルオプション	<b>ハーモニー (Harmony™) #XE2</b>  人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。 6,600円	<b>エバーエッジ (EverEdge™) #9E2</b>  人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着) 6,200円

グレイシーキュレット	スタンダード/リジッド	スタンダード/リジッド
<b>オリジナル</b> 現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャングク・ブレードの長さ・幅。	<b>スタンダード/リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	<b>スタンダード/リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)
<b>アフターファイブ</b> 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し第一シャングクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。	<b>スタンダード/リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	<b>スタンダード/リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
<b>ミニファイブ</b> 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャングクが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。	<b>スタンダード</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) ↑ハーモニーで新たにラインナップされました!!	<b>スタンダード/リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
<b>マイクロミニファイブ</b> (シャングクが細くて硬いリジッドタイプ) 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャングクとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。	<b>リジッド</b> 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	<b>リジッド</b> 1/2, 7/8, 11/12, 13/14
シックルスケーラー	<b>ネビィ</b> 1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
	<b>衛生士用</b> H5/33, H6/H7	H5/33, H6/H7
	<b>前歯用、臼歯用</b> 204S, 204SD, モース 0/00	204S, 204SD, モース 0/00

# 把持力が57.3%低減\*

\*ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2: スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値 (歯牙に加わった圧力が最大値時)

ハンドルの種類	親指、人差し指、中指の総把持力の平均値 (kPa)	ハーモニーエルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー (#XE2)	29.75	-
角柄 (#2)	69.69	57.3%

# 280万を超えるデータを収集

(世界各国のDHの方々が参加した試験結果の合計)

スケーリング時の手の動きをデータ化して、より把持しやすいようにデザインされたハンドル




## 重すぎず軽すぎない、『バランスの良い』重さのハンドル

ハーモニーエルゴノミック スケーラーのハンドルはエバーエッジハンドル(#9E2)と同様『バランスの良い』重量感で、砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。

## 信頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、手指感覚を向上、疲労を軽減します。

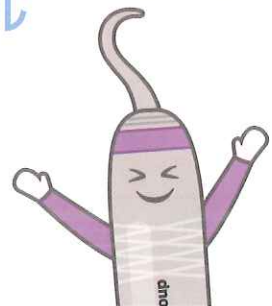

シャープさがさらに長持ち!!  
コーティングなしの高性能

### イミュニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2



ジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。ハンドルと同色のグリップを標準装着

6,000円

サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7



シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)

5,800円

サテンスチール (Satin Steel™) #6



力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。

5,600円

角柄 #2



8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

5,200円

タンダード/リジッド

1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ

スタンダード/リジッド

1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)

タンダード/リジッド

1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)

スタンダード/リジッド

1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)

タンダード/リジッド

1/3, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)

スタンダード/リジッド

1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)

2, 3, 4

1, 2

5/33, H6/H7


H5/33, H6/H7

14S, 204SD, モース 0/00

204SD

※標準価格は全て税抜

## グレーシーキュレット

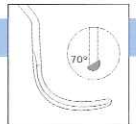

15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)はシャングの角度を大きくしているため、対合歯に干渉される事なく、より良くフィットします。



通常の11/12

通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャングを固定することが困難な場合があります。



15/16 (FIT11/12)

15/16 (FIT11/12)はシャングの角度を大きく取ったことにより、インストルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。



通常の13/14

通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。



17/18 (FIT13/14)

17/18 (FIT13/14)はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

## シックルスクレーパー

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に...  
医院に1本は必需品です!



ネビィ1(前歯用)★

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。



ネビィ2(臼歯用)

大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。




ネビィ3(臼歯用)★

コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスクレーピング向き。



ネビィ4(臼歯用)

ネビィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。

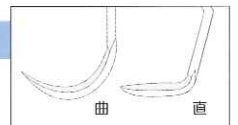

衛生士用 H5/33

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスクレーピングに適用。



衛生士用 H6/H7

超薄型コントラングルのデザイン。隣接歯間部に適用。シャングのアングルにより前歯および小臼歯に対応。



204S

臼歯歯肉縁上の隣接歯間部用。



204SD

コントラングルのシャングデザインにより、臼歯部近遠心面に適用。



モース 0/00

叢生歯や細かい操作に向いている前歯部用の小型ブレード。

ヒューフレディで克服しよう!  
苦手シリーズもチェックしてね!  
(YouTube)


15/16 17/18 ネビィ1 ネビィ3

## ユニバーサルキュレット



マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。

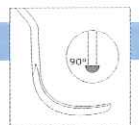

ランガー 1/2 ★

下顎臼歯用



ランガー 3/4

上顎臼歯用



ランガー 5/6

前歯用



ランガー 17/18

上下顎臼歯用



コロンビア大学型 2R/2L



コロンビア大学型 4R/4L

臼歯部で高度に沈着してしまった歯石の除去に特に適用。



コロンビア大学型 13/14

浅いポケットの歯肉縁上・縁下の歯石除去、小児にも適用。



ランガー ミニファイブ 1/2 ★

下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 3/4

上顎臼歯用



ランガー ミニファイブ 5/6



前歯用

### ランガー ミニファイブ

- 第一シャングは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ (Mini Five™) はブレードの長さが通常の半分のサイズで、狭いポケットや根分岐部に適用。


## グレーシーキュレット バイोजェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

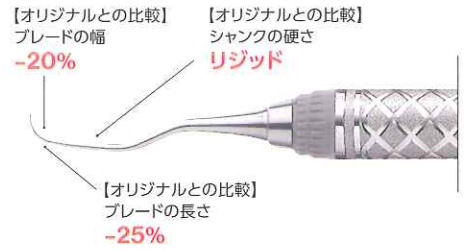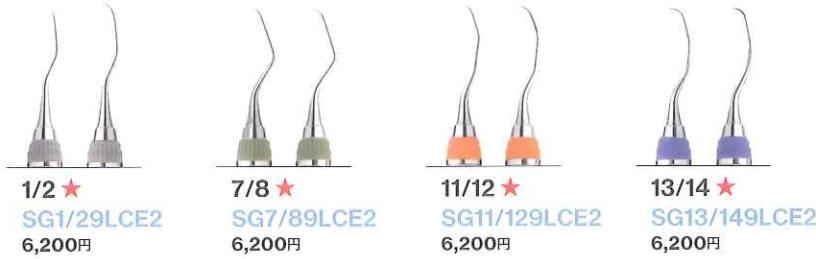

※グレーシーキュレット バイोजェントのハンドルはエバーエッジ(#9E2)のみになります。

## インプラントスケーラー チタン

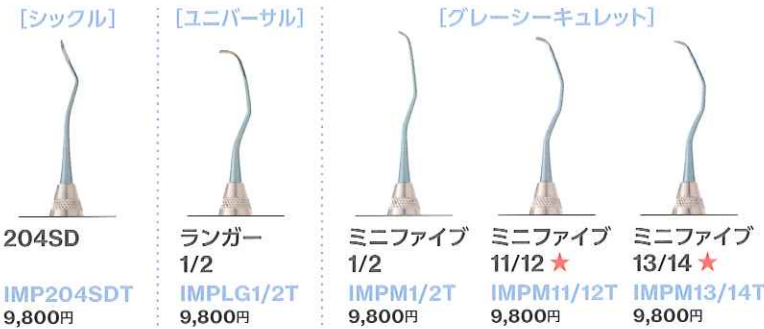

- 視認性の向上: 通常のスケーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現: 陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- シャーピング可能: シャーピングを行うことで、シャープさを復元することが可能 (チタンスケーラーのみに使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化: インプラントの歯石やバイオフィルムの除去などのメンテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮: ためでウォーターウェーブ柄のしっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用



## インプラケアII

チタン製のインプラント体やアパットメントを傷つけずに、プラークを除去できる、ディスプレイブルのレジンスケーラーです。(オートクレーブ滅菌してからご使用ください。)



**[ユニバーサルキュレット]**  
ブレード相当部の先端が丸みを帯びているので、インプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



キット (ハンドル1本&チップ12組) 11,600円  
チップ (チップ12組) 9,900円

**[シックルスケーラー]**  
ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



ハンドル (単品) #6 IMPHDL6 2,000円

## カラービュープローブ



カラービュー CP11 ★  
キット PCV11KIT6  
チップ PCV11PT

カラービュー CP12  
キット PCV12KIT6  
チップ PCV12PT

1-2-3-4-  
5-6-7-8-9-  
10-11-12

カラービュー UNC12 ★  
キット PCVNCKIT6  
チップ PCVUNC12PT

キット (ハンドル1本&チップ7入) 8,900円  
チップ (チップ12入) 13,000円

ハンドル (単品) PH6 2,300円

## HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(176℃以下でオートクレーブ可)



### HDミラーとは...

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%**向上\*
  - 他の表面ミラーより、明るさが**50%**向上\*
  - 傷がつきにくく、長時間使用できる
- ※社内資料

### コーンソケットハンドル



## エキスポローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

この形状に曲げても  
折れないほどの弾力性!!



3A 歯肉縁上用  
#6 EXS3A6 2,300円  
#7 EXS3A7 2,500円



DURASPOND™  
(デュラスポンド)

グレーシーキュレット11/12と同型の探針で  
歯肉縁下の歯石探知におすすめ

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、  
より深いポケットの探知におすすめ



11/12 根面用  
#6 EXD11/126 3,100円  
#7 EXD11/127 3,300円

特に臼歯部隣接面のポケット内の歯石探査に適しています。  
1本で全顎の探査ができるデザインです。



アフターファイブ 11/12 深い根面用  
#6 EXD11/12A6 3,100円  
#7 EXD11/12A7 3,300円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、  
より深いポケットの歯石探査に適しています。



5 歯肉縁上及び縁下用  
#6 EXD56 3,100円  
#7 EXD57 3,300円



## カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

圧倒的なマーキングの  
見やすさ!!!



ネイバーズ Q2N  
#6 PQ2N6 6,400円  
#7 PQ2N7 6,600円  
#31 PQ2N 6,200円



基本の3-3-2-3の  
プローブ



3-6-8-11

CP11

#6 PCP116 4,400円  
#7 PCP117 4,600円  
#30 PCP11 4,200円



3-6-9-12

CP12

#6 PCP126 4,400円  
#7 PCP127 4,600円  
#30 PCP12 4,200円



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

CPUNC12

#6 PCPUNC126 4,400円  
#7 PCPUNC127 4,600円  
#30 PCPUNC12 4,200円



1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

CPUNC15

#6 PCPUNC156 4,400円  
#7 PCPUNC157 4,600円  
#30 PCPUNC15 4,200円

【ハンドル 略称】 #6…サテンスチール #7…サテンスチールカラー (黒いシリコングリップ付) #30/#31…細丸

## ピンセット



コーク型18JSII ギザなし DP18JS-II 3,600円



ピンセット汎用 DPU17 4,200円

## インストゥルメントシャープニング

### 電動タイプ

#### サイドキック ★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。

SDKKIT  
72,600円



サイドキックの  
使い方を動画で  
CHECK!!



### カードタイプ

#### ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持!  
超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応!  
クレジットカードサイズのシャープナー!!



超細目  
(EXTRA FINE)  
DSCXFINE  
7,000円

細目 ★  
(FINE)  
DSCFINE  
7,000円

中目  
(MEDIUM)  
DSCMED  
7,000円

### ストーン

#### デュアルストーン ★

極度に鈍化したスクレーラーの  
研磨や修正用の粗目の青色面と、  
日常のメンテナンス用の細目の  
白色面をひとつに組み合わせた  
セラミックストーン。

SSDGRIT  
5,200円



スクレーラーやキュレットの  
ハンドシャープニングの  
方法についてはこちら!



商品名	ハンドルの種類	ハーモニー	エパーエッジ	レジン8カラー	サテンスチールカラー	サテンスチール	角柄		
	標準価格	#XE2 6,600円	#9E2 6,200円	#C8E2 6,000円	#7 5,800円	#6 5,600円	#2 5,200円		
オリジナル	スタンダード	1/2	SG1/2XE2	SG1/29E2	SG1/2C8E2	SG1/27	SG1/26	SG1/2	
		3/4	SG3/4XE2	SG3/49E2	SG3/4C8E2	SG3/47	SG3/46	SG3/4	
		5/6	SG5/6XE2	SG5/69E2	SG5/6C8E2	SG5/67	SG5/66	SG5/6	
		7/8	SG7/8XE2	SG7/89E2	SG7/8C8E2	SG7/87	SG7/86	SG7/8	
		9/10	SG9/10XE2	SG9/109E2	SG9/10C8E2	SG9/107	SG9/106	SG9/10	
		11/12	SG11/12XE2	SG11/129E2	SG11/12C8E2	SG11/127	SG11/126	SG11/12	
		13/14	SG13/14XE2	SG13/149E2	SG13/14C8E2	SG13/147	SG13/146	SG13/14	
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2	SG15/169E2	SG15/16C8E2	SG15/167	SG15/166	SG15/16	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2	SG17/189E2	SG17/18C8E2	SG17/187	SG17/186	SG17/18	
	リッド	1/2	SG1/2RXE2	SG1/2R9E2	SG1/2RC8E2	SG1/2R7	SG1/2R6	SGR1/2R	
		3/4	SG3/4RXE2	SG3/4R9E2	SG3/4RC8E2	SG3/4R7	SG3/4R6	SGR3/4R	
		5/6	SG5/6RXE2	SG5/6R9E2	SG5/6RC8E2	SG5/6R7	SG5/6R6	SGR5/6R	
		7/8	SG7/8RXE2	SG7/8R9E2	SG7/8RC8E2	SG7/8R7	SG7/8R6	SGR7/8R	
		9/10	SG9/10RXE2	SG9/10R9E2		SG9/10R7	SG9/10R6	SGR9/10R	
		11/12	SG11/12RXE2	SG11/12R9E2	SG11/12RC8E2	SG11/12R7	SG11/12R6	SGR11/12R	
		13/14	SG13/14RXE2	SG13/14R9E2	SG13/14RC8E2	SG13/14R7	SG13/14R6	SGR13/14R	
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16RXE2	SG15/16R9E2	SG15/16RC8E2	SG15/16R7	SG15/16R6	SGR15/16R	
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18RXE2	SG17/18R9E2	SG17/18RC8E2	SG17/18R7	SG17/18R6	SGR17/18R	
アフターファイブ	スタンダード	1/2	SRPG1/2XE2	SRPG1/29E2	SRPG1/2C8E2	SRPG1/27	SRPG1/26	SRPG1/2	
		3/4	SRPG3/4XE2	SRPG3/49E2	SRPG3/4C8E2	SRPG3/47	SRPG3/46	SRPG3/4	
		5/6	SRPG5/6XE2	SRPG5/69E2	SRPG5/6C8E2	SRPG5/67	SRPG5/66	SRPG5/6	
		7/8	SRPG7/8XE2	SRPG7/89E2	SRPG7/8C8E2	SRPG7/87	SRPG7/86	SRPG7/8	
		11/12	SRPG11/12XE2	SRPG11/129E2	SRPG11/12C8E2	SRPG11/127	SRPG11/126	SRPG11/12	
		13/14	SRPG13/14XE2	SRPG13/149E2	SRPG13/14C8E2	SRPG13/147	SRPG13/146	SRPG13/14	
		15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2	SRPG15/169E2	SRPG15/16C8E2	SRPG15/167	SRPG15/166	SRPG15/16	
		リッド	1/2	SRP1/2RXE2	SRP1/2R9E2	SRP1/2RC8E2	SRP1/2R7	SRP1/2R6	SRPG1/2R
			3/4	SRP3/4RXE2	SRP3/4R9E2	SRP3/4RC8E2	SRP3/4R7	SRP3/4R6	SRPG3/4R
	5/6		SRP5/6RXE2	SRP5/6R9E2	SRP5/6RC8E2	SRP5/6R7	SRP5/6R6	SRPG5/6R	
	7/8		SRP7/8RXE2	SRP7/8R9E2	SRP7/8RC8E2	SRP7/8R7	SRP7/8R6	SRPG7/8R	
	11/12		SRP11/12RXE2	SRP11/12R9E2	SRP11/12RC8E2	SRP11/12R7	SRP11/12R6	SRPG11/12R	
	13/14		SRP13/14RXE2	SRP13/14R9E2	SRP13/14RC8E2	SRP13/14R7	SRP13/14R6	SRPG13/14R	
	15/16(FIT 11/12)		SRP15/16RXE2	SRP15/16R9E2	SRP15/16RC8E2	SRP15/16R7	SRP15/16R6	SRPG15/16R	
	スリム		1/2	SAS1/2XE2	SAS1/29E2	SAS1/2C8E2	SAS1/27	SAS1/26	SAS1/2
			3/4	SAS3/4XE2	SAS3/49E2	SAS3/4C8E2	SAS3/47	SAS3/46	SAS3/4
		5/6	SAS5/6XE2	SAS5/69E2	SAS5/6C8E2	SAS5/67	SAS5/66	SAS5/6	
		7/8	SAS7/8XE2	SAS7/89E2	SAS7/8C8E2	SAS7/87	SAS7/86	SAS7/8	
11/12		SAS11/12XE2	SAS11/129E2	SAS11/12C8E2	SAS11/127	SAS11/126	SAS11/12		
13/14		SAS13/14XE2	SAS13/149E2	SAS13/14C8E2	SAS13/147	SAS13/146	SAS13/14		
15/16(FIT 11/12)		SAS15/16XE2	SAS15/169E2	SAS15/16C8E2	SAS15/167	SAS15/166	SAS15/16		
リッド		1/2	SAS1/2RXE2	SAS1/2R9E2	SAS1/2RC8E2	SAS1/2R7	SAS1/2R6	SAS1/2R	
		3/4	SAS3/4RXE2	SAS3/4R9E2	SAS3/4RC8E2	SAS3/4R7	SAS3/4R6	SAS3/4R	
	5/6	SAS5/6RXE2	SAS5/6R9E2	SAS5/6RC8E2	SAS5/6R7	SAS5/6R6	SAS5/6R		
	7/8	SAS7/8RXE2	SAS7/8R9E2	SAS7/8RC8E2	SAS7/8R7	SAS7/8R6	SAS7/8R		
	11/12	SAS11/12RXE2	SAS11/12R9E2	SAS11/12RC8E2	SAS11/12R7	SAS11/12R6	SAS11/12R		
	13/14	SAS13/14RXE2	SAS13/14R9E2	SAS13/14RC8E2	SAS13/14R7	SAS13/14R6	SAS13/14R		
	15/16(FIT 11/12)	SAS15/16RXE2	SAS15/16R9E2	SAS15/16RC8E2	SAS15/16R7	SAS15/16R6	SAS15/16R		
	リッド	1/2	SMS1/2XE2	SMS1/29E2					
		7/8	SMS7/8XE2	SMS7/89E2					
11/12		SMS11/12XE2	SMS11/129E2						
13/14		SMS13/14XE2	SMS13/149E2						
ソニックフルスケラー	ネビィ	1前歯用	SCNEVI1XE2	SCNEVI19E2	SCNEVI1C8E2	SCNEVI17	SCNEVI1		
		2臼歯用	SCNEVI2XE2	SCNEVI29E2	SCNEVI2C8E2	SCNEVI27	SCNEVI2		
		3臼歯用	SCNEVI3XE2	SCNEVI39E2	SCNEVI3C8E2				
		4臼歯用	SCNEVI4XE2	SCNEVI49E2	SCNEVI4C8E2				
	衛生士用	H5/33	SH5/33XE2	SH5/339E2	SH5/33C8E2	SH5/337	SH5/336	SH5/33	
		H6/H7	SH6/7XE2	SH6/79E2	SH6/7C8E2	SH6/77	SH6/76	SH6/7	
		204S	S204SXE2	S204S9E2	S204SC8E2				
臼歯用	204SD	S204SDXE2	S204SD9E2	S204SDC8E2	S204SD7	S204SD6	S204SD2		
前歯用	モース0/00	SM0/00XE2	SM0/009E2	SM0/00C8E2					
ユニバーサル	マッコール	17/18	SM17/18XE2	SM17/189E2					
	ランガー	1/2	SL1/2XE2	SL1/29E2	SL1/2C8E2				
		3/4	SL3/4XE2	SL3/49E2	SL3/4C8E2				
		5/6	SL5/6XE2	SL5/69E2	SL5/6C8E2				
		17/18	SL17/18XE2	SL17/189E2	SL17/18C8E2				
	コロンビア 大学型	2R/2L	SC2R/2LXE2						
		4R/4L	SC4R/4LXE2	SC4R/4L9E2	SC4R/4LC8E2				
	13/14	SC13/14XE2	SC13/149E2	SC13/14C8E2					
	ランガー ミニ ファイブ	1/2		SL1/2MF9E2					
		3/4		SL3/4MF9E2					
5/6			SL5/6MF9E2						
バイオン アン アッシュ	リ エ ジ ン	1/2		SG1/29LCE2					
		7/8		SG7/89LCE2					
		11/12		SG11/129LCE2					
		13/14		SG13/149LCE2					

LINEでもっと便利に、簡単に!

グレーシーキュレット  
かんたんセレクト!




ヒューフレディ スケーラー・検査キャンペーン 注文書

掲載製品全て特別価格!!

期間: 2025年4月21日(月)~6月20日(金)

\* 標準価格は全て税抜

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量	
インプラント スケーラー チタン	204SD	IMP204SDT	9,800		
	ランガー 1/2	IMPLG1/2T	9,800		
	ミニファイブ1/2	IMPM1/2T	9,800		
	ミニファイブ11/12	IMPM11/12T	9,800		
	ミニファイブ13/14	IMPM13/14T	9,800		
インプラケアII	キット ハンドル 1本 チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/26	11,600	
		コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L6	11,600	
		衛生土用 H6/H7	IMPLH6/76	11,600	
	チップ 12組	白歯用 204S	IMPL204S6	11,600	
		ランガー 1/2	IMPLLG1/2	9,900	
		コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L	9,900	
	ハンドル(単品) #6	衛生土用 H6/H7	IMPLH6/7	9,900	
		白歯用 204S	IMPL204S	9,900	
			IMPHDL6	2,000	
	カラービュー プローブ	キット ハンドル 1本 チップ 7入	CP11	PCV11KIT6	8,900
CP12			PCV12KIT6	8,900	
UNC12			PCVNCKIT6	8,900	
チップ 12入		CP11	PCV11PT	13,000	
		CP12	PCV12PT	13,000	
		UNC12	PCVUNC12PT	13,000	
ハンドル(単品)		PH6	2,300		
ミラートップ HD コーティング		片面 1入	3 (φ20mm)	MIR3HD	1,500
			4 (φ22mm)	MIR4HD	1,500
			5 (φ24mm)	MIR5HD	1,500
	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4HD3	4,000	
		5 (φ24mm)	MIR5HD3	4,000	
	片面 12入	4 (φ22mm)	MIR4HD12	15,500	
		5 (φ24mm)	MIR5HD12	15,500	
	両面 1入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD	1,700	
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD	1,700	
	両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD6	9,700	
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD6	9,700	
	ミラートップ ロジウム コーティング	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4/3	2,900
5 (φ24mm)			MIR5/3	2,900	
両面 3入		4 (φ22mm)	MIR4DS/3	4,000	
		5 (φ24mm)	MIR5DS/3	4,000	
コーンソケット ハンドル	#1	MH1	2,300		
	#6	MH6	2,700		
	#7	MH7	2,700		

商品名		パートコード	標準価格(円)	数量	
エキス ブローラー	片頭	3A #6	EXS3A6	2,300	
		#7	EXS3A7	2,500	
	両頭	11/12 #6	EXD11/126	3,100	
		#7	EXD11/127	3,300	
		アフター ファイブ 11/12 #6	EXD11/12A6	3,100	
		#7	EXD11/12A7	3,300	
		5 #6	EXD56	3,100	
		#7	EXD57	3,300	
	カラー コード プローブ	両頭	ネイバース Q2N #6	PQ2N6	6,400
			#7	PQ2N7	6,600
#31			PQ2N	6,200	
片頭		CP11 #6	PCP116	4,400	
		#7	PCP117	4,600	
		#30	PCP11	4,200	
		CP12 #6	PCP126	4,400	
		#7	PCP127	4,600	
		#30	PCP12	4,200	
		CPUNC 12 #6	PCPUNC126	4,400	
		#7	PCPUNC127	4,600	
		#30	PCPUNC12	4,200	
		CPUNC 15 #6	PCPUNC156	4,400	
		#7	PCPUNC157	4,600	
		#30	PCPUNC15	4,200	
ピンセット	コーク型18JSII	DP18JS-II	3,600		
	ピンセット汎用	DPUI7	4,200		
サイドキック		SDKKIT	72,600		
ダイヤモンド シャープニング カード	超細目	DSCXFINE	7,000		
	細目	DSCFINE	7,000		
	中目	DSCMED	7,000		
デュアルストーン		SSDGRIT	5,200		

現在一部の製品につきましては、ご注文を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。  
キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2025年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。  
販売名: インプラケアII (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02103  
販売名: インプラントスケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02107  
販売名: エクスプローラー (一般的名称: 歯科用探針) 医療機器届出番号: 13B3X10195G05101  
販売名: カラーコードプローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B3X10195G07101  
販売名: カラービュープローブ (一般的名称: 歯周ポケットプローブ) 医療機器届出番号: 13B3X10195G07103  
販売名: グレーシーキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G01101  
販売名: スケーラー (一般的名称: 歯科用スケーラー) 医療機器届出番号: 13B3X10195G02101  
販売名: ピンセット (一般的名称: ピンセット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G34102  
販売名: ミラー (一般的名称: 歯鏡) 医療機器届出番号: 13B3X10195G22101  
販売名: ユニバーサルキュレット (一般的名称: 歯周用キュレット) 医療機器届出番号: 13B3X10195G01102  
【商標について】 以下はヒューフレディグループまたはその関連会社の商標です:  
Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, ImplanCare, Micro Mini Five, Mini Five, Satin Steel, Sidekick, True Fit  
●医療機器の分類: 一般医療機器 (クラスI)

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 [Hu-Friedy.co.jp](http://Hu-Friedy.co.jp)

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております。

Instagram



Facebook



YouTube



LINE



ネビィとサイドキックの  
LINE スタンプ販売中!



■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL

【歯科商店名】