

クリストバライト ご愛顧感謝キャンペーン

期間

2025年5月21日～6月20日

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリストバライト ご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。



表面性状の滑沢性を向上させ、ツヤのある鑄造体へ。
後工程の研磨時間短縮に繋がります。

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF-Ex 3kg 1箱を

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

■標準価格

3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050770


特別価格にてご提供!

●販売名 クリストバライト FF-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
●医療機器届出番号 15B1X10001302104 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

鑄造体の良好な表面性状と掘り出しやすさを両立

●現行FF

●FF-Ex

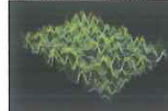

鑄造体の表面性状(マイクロスコープ撮影)

●水中崩壊性実験



700℃ 60分焼成後、常温へ戻し、
水に入れて30秒後の状態。



鑄型強度が強く埋没材の面が細かいため、鑄造面がきれいになる埋没材

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト フォルテ-Ex 3kg 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050790

特別価格にてご提供!

線硬化膨張(0.80%)と線熱膨張(0.90%)のバランスと安定性により、メタルコアから、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの鑄造体を得ることができます。

●販売名 クリストバライト フォルテ-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302106 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

30分
タイプ


※埋没後30分の
急速加熱が可能。

クリストバライト フォルテ-EXを使用した鑄造後

4本ブリッジ



単冠

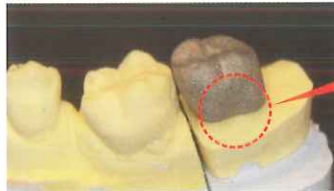

適合精度

4本ブリッジ咬合面



4本ブリッジ内面




鑄造面

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 ☎959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 ☎564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 ☎110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

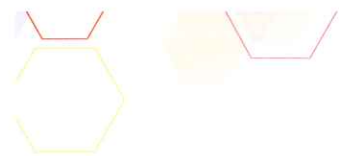


クラレノリタケデンタルのクリストバライト埋没材は
硬化時間、膨張率により铸造精度やフィット感の調整が可能です。



ノリタケ クリストバライトシリーズ

総膨張率の比較表
(水/粉の比率 標準35%)

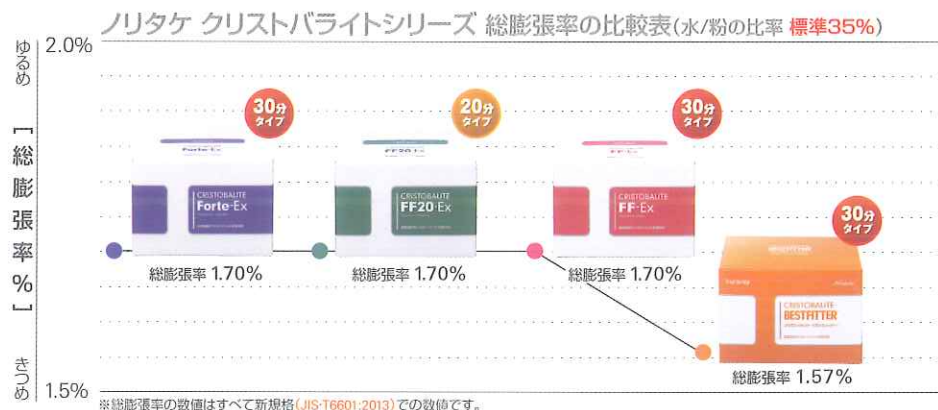

埋没20分後の急速加熱可能

歯科铸造用石こう系埋没材

クリストバライト FF20-Ex 3kg 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050780

特別価格にてご提供!

20分
タイプ

※埋没後20分の
急速加熱が可能。

適度な流動性を兼ね備え、铸造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、焼き
圧縮強さを向上させることで(0.90MPa)、「バリ」「崩れ」の発生を抑制、良好な铸造体の製作が可能です。

●販売名 クリストバライト FF20-Ex ●一般的名称 歯科铸造用石こう系埋没材 ●医歯機器製造番号 15B1X10001302105 ●医歯機器の分類 一般医歯機器(クラスI)



タイトな適合性を追求した埋没材

歯科铸造用石こう系埋没材

クリストバライト ベストフィッター 3kg 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050795

特別価格にてご提供!

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

該当規格 JIS-T6601:2013

湿水量(mL) <粉100gに対して>	硬化時間(分)	総硬化膨張(%) <30分後>	総熱膨張(%)	総膨張率(%)	圧縮強さ (2時間後)MPa
35	11	0.55	1.05	1.57	7.5

●販売名 クリストバライト ベストフィッター ●一般的名称 歯科铸造用石こう系埋没材 ●医歯機器製造番号 15B1X10001302107 ●医歯機器の分類 一般医歯機器(クラスI)

セラミックリボン



関連商品

- ロックウール製のリボンです。
リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)は
含有しておりません。
- 適切な吸水力を持ちます。
- クリストバライトFF-Ex、FF20-Ex、フォルテ-Ex、
ベストフィッターと
組み合わせてお使いいただくのに最適です。
- セラミックリボンの厚みは0.7mmです。

■標準価格

30mm×10m	2,900円	202050940
30mm×30m	6,400円	202050941
40mm×10m	3,800円	202050942
40mm×30m	8,300円	202050943
50mm×10m	4,200円	202050944
50mm×30m	8,700円	202050945

ノリタケワックスクリーナー



- 歯科用ワックス及びゴム製
印象材の表面処理材です。
- 霧の細かいミストタイプでフレキシビ
リに大変優れており、均一に塗布することが
できます。
- 埋没材・石膏とのなじみも良いので、
滑らかな铸造体及び模型を作製を
することができます。

ポンプ式 スプレータイプ(ボトル)
容量 120mL

■標準価格 1,600円 202280923

補充用

容量 300mL

■標準価格 3,100円 202280924