



SHOFU ORTHODONTIC PRODUCTS

# Summer Campaign

松風矯正製品 夏期お買い得キャンペーン

2025 5/21 (Wed.) ▶ 7/18 (Fri.)

歯列矯正用審美ワイヤー

オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト

## ◆ Superior Esthetics and Durability ◆

審美性と耐久性に優れたホワイトワイヤー

特長

- ▶ 全面コーティングによる優れた審美性
- ▶ 均一な膜厚制御が可能な独自コーティング技術
- ▶ 高い機械的特性と耐酸性を有するPEN樹脂をコーティング層に採用

※PEN：ポリエチレンナフタレート(エンジニアリングプラスチック)



### TI-Ni SE200

- .012 .014 .016 .018
- .016 × .016 .018 × .018
- .016 × .022 .017 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025

### ステンレスチール

- .016 .018
- .016 × .016 .018 × .018
- .016 × .022 .017 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025

標準価格

ラウンド(10入) ￥11,000 ▶ **￥8,800**

レクタングュラー(10入) ￥12,000 ▶ **￥9,600**

標準価格

ラウンド(10入) ￥10,500 ▶ **￥8,400**

レクタングュラー(10入) ￥11,000 ▶ **￥8,800**

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00038000  
管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00037000



製品詳細

SHOFU INC.

NEW  
RELEASE

歯列矯正用ブラケット

プレシ クリスタル

PRECI CRYSTAL

Translucent Ceramic Brackets



## 松風オリジナルSWA審美ブラケット

1991年に松風がSWA(ストレートワイヤー アプライアンス)を紹介してから30年以上。  
ストレートワイヤーテクニックに精通したドクターのご意見を取り入れ、プレシ クリスタルは誕生しました。  
SWAのコンセプトを守り、Andrews、Roth、McLaughlinセットアップをラインナップ。  
こだわりを持って作られたプレシ クリスタルは、より良い治療を目指す先生方のご要望にお応えします。

### Andrews、Roth、McLaughlinセットアップをラインナップ

U1  
torque

7°



Andrews

U1  
torque

12°



Roth

U1  
torque

17°



McLaughlin



#### ツインウィング

・片側タイなども可能です。



#### 一体成型で製造されたブラケットボディ

- ・患者さまの快適性のための丸みを帯びた滑らかで平らなタイウィング
- ・トルクインベース
- ・正確なトルクコントロール



#### Angled Debonding Feature

- ・ディボンディングしやすいよう、近遠心のベース面を面取り加工しています。



#### "BUTTERFLY" 型タイウィングデザイン

- ・近遠心のタイウィングにエラスティックや結さつ線をかけやすいデザイン



#### Excellent Sliding Mechanics

- ・ワイヤースロットの入り口に丸みをもたせ、ワイヤーのスライディング性の向上とノッチング（引っ掛かり）を抑制します。



PCCM コンサルテーションモデル プレシ クリスタル ¥45,000 ▶ ¥31,500



# 機能と審美性の調和

## Function and Esthetics

PRECICRYSTAL

標準価格

特別価格

単品(10入)

¥14,000

¥9,800 (1粒あたり ¥980)

1症例キット(20入)

¥29,000

¥20,300

### マクロフリンセットアップ

| 部 位  |         | フック | トルク  | アンギュレーション | 幅 径    | .018スロット |        | .022スロット |        |
|------|---------|-----|------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      |         |     |      |           |        | 左        | 右      | 左        | 右      |
| U1   | 上顎中切歯   | 無し  | 17°  | 4°        | 3.18mm | M21180   | M11180 | M21220   | M11220 |
| U2   | 上顎側切歯   | 無し  | 10°  | 8°        | 3.18mm | M22180   | M12180 | M22220   | M12220 |
| U3   | 上顎犬歯    | 無し  | 0°   | 8°        | 3.05mm | M23180   | M13180 | M23220   | M13220 |
| U3   | 上顎犬歯    | 付き  | 0°   | 8°        | 3.05mm | M23181   | M13181 | M23221   | M13221 |
| U4&5 | 上顎小臼歯   | 無し  | -7°  | 0°        | 3.05mm | M15180   |        | M15220   |        |
| L1&2 | 下顎切歯    | 無し  | -6°  | 0°        | 3.05mm | M31180   |        | M31220   |        |
| L3   | 下顎犬歯    | 無し  | 0°   | 3°        | 3.00mm | M33180   | M43180 | M33220   | M43220 |
| L3   | 下顎犬歯    | 付き  | 0°   | 3°        | 3.00mm | M33181   | M43181 | M33221   | M43221 |
| L4   | 下顎第一小臼歯 | 無し  | -12° | 0°        | 3.00mm | M34180   |        | M34220   |        |
| L5   | 下顎第二小臼歯 | 無し  | -17° | 0°        | 3.00mm | M35180   |        | M35220   |        |

### 1症例キット

| 1症例キット内容 |         |  |  | .018スロット | .022スロット |
|----------|---------|--|--|----------|----------|
| 上下顎5-5   | 犬歯フック無し |  |  | M1ULKWO  | M2ULKWO  |
| 上下顎5-5   | 犬歯フック付き |  |  | M1ULKWH  | M2ULKWH  |

### オプション

| 部 位 |      | フック | トルク | アンギュレーション | 幅 径    | .018スロット |        | .022スロット |        |
|-----|------|-----|-----|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|     |      |     |     |           |        | 左        | 右      | 左        | 右      |
| U3  | 上顎犬歯 | 無し  | -7° | 8°        | 3.05mm | M23187   | M13187 | M23227   | M13227 |
| L3  | 下顎犬歯 | 無し  | -6° | 3°        | 3.00mm | M33186   | M43186 | M33226   | M43226 |

### ロスセットアップ

| 部 位  |         | フック | トルク  | アンギュレーション | 幅 径    | .018スロット |        | .022スロット |        |
|------|---------|-----|------|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|      |         |     |      |           |        | 左        | 右      | 左        | 右      |
| U1   | 上顎中切歯   | 無し  | 12°  | 5°        | 3.18mm | R21180   | R11180 | R21220   | R11220 |
| U2   | 上顎側切歯   | 無し  | 8°   | 9°        | 3.18mm | R22180   | R12180 | R22220   | R12220 |
| U3   | 上顎犬歯    | 無し  | -2°  | 11°       | 3.05mm | R23180   | R13180 | R23220   | R13220 |
| U3   | 上顎犬歯    | 付き  | -2°  | 11°       | 3.05mm | R23181   | R13181 | R23221   | R13221 |
| U4&5 | 上顎小臼歯   | 無し  | -7°  | 0°        | 3.05mm | R15180   |        | R15220   |        |
| L1&2 | 下顎切歯    | 無し  | -1°  | 0°        | 3.05mm | R31180   |        | R31220   |        |
| L3   | 下顎犬歯    | 無し  | -11° | 5°        | 3.00mm | R33180   | R43180 | R33220   | R43220 |
| L3   | 下顎犬歯    | 付き  | -11° | 5°        | 3.00mm | R33181   | R43181 | R33221   | R43221 |
| L4   | 下顎第一小臼歯 | 無し  | -17° | 0°        | 3.00mm | R34180   |        | R34220   |        |
| L5   | 下顎第二小臼歯 | 無し  | -22° | 0°        | 3.00mm | R35180   |        | R35220   |        |

### 1症例キット

| 1症例キット内容 |         |  |  | .018スロット | .022スロット |
|----------|---------|--|--|----------|----------|
| 上下顎5-5   | 犬歯フック無し |  |  | R1ULKWO  | R2ULKWO  |
| 上下顎5-5   | 犬歯フック付き |  |  | R1ULKWH  | R2ULKWH  |

### アンドリュースセットアップ

| 部 位 |       | フック | トルク | アンギュレーション | 幅 径    | .018スロット |        | .022スロット |        |
|-----|-------|-----|-----|-----------|--------|----------|--------|----------|--------|
|     |       |     |     |           |        | 左        | 右      | 左        | 右      |
| U1  | 上顎中切歯 | 無し  | 7°  | 5°        | 3.18mm | A21180   | A11180 | A21220   | A11220 |
| U2  | 上顎側切歯 | 無し  | 3°  | 9°        | 3.18mm | A22180   | A12180 | A22220   | A12220 |

# BeautiBand Cement

Dual-cure Orthodontic Band Cement



デュアルキュア、ライトブルー色のペースト。

口腔内環境の健全化をサポートする、S-PRGフィラーを含有した  
歯質にも、術者にもやさしい歯科矯正用バンドセメント。



常温保管可能

チェアサイドでの  
保管が可能

新規化学重合開始剤の配合により、保存安定性が向上。  
1~25℃での保管が可能になりました。

★夏場など室温が25℃を超える場合は冷蔵庫で保管してください。

X線  
造影性

4136

ビューティバンドセメント 1セット

【内容】  
ビューティバンドセメント(5.0mL) 2本  
ミキサーチップ ショート 20個

標準価格

¥12,000

特別価格

¥9,600

## 特長

### 垂れにくく・広がりやすいペースト性状



適度な固さで、バンドに広げやすい性状です。  
また、シリンジの押し出し感も軽く、  
ミキサーチップにより簡単に練和が可能です。

### ペーストロスが少なく、操作性の高いミキサーチップ





松風ミキサーチップ(ショート)

付属のミキサーチップはショートタイプを  
採用しているので、ミキサーチップ内の  
ペーストロス量が少なく、コストパフォーマンスに  
優れます。



### 光の届きにくい内部まで硬化するデュアルキュアタイプ

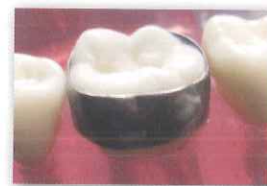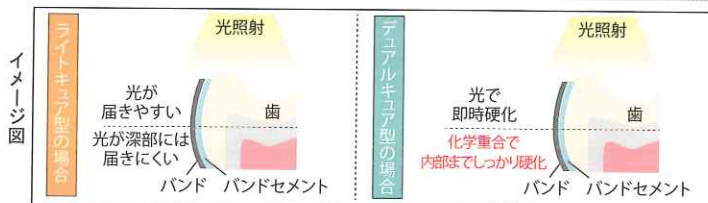

デュアルキュアタイプなので光を通しにくい深部までしっかり硬化します。また、防湿しづらい部位にも優れた接着力を発揮します。

### バンディングに適した長い操作余裕時間

練和

操作余裕時間  
5分以上

光照射

操作余裕時間が長いので、  
バンドの多数個セットが可能です。  
光照射によって好きなタイミングで  
即時硬化させることができます。

### 視認性に優れたライトブルー色のペースト

歯質と区別のしやすいブルー色のペーストなので、  
ディバンディング後に残存したペーストが視認しやすく、  
除去が行いやすいです。



### S-PRGフィラーを含有

ビューティバンドセメントには、松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラー“S-PRGフィラー”が含まれています。  
6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性や酸中和能、イオンリリース&フッ化物リチャージ機能などを発現し、  
治療中の口腔内環境の健全化をサポートします。




矯正治療期間中のことも考えたいから

## 口腔内環境の健全化をサポートする S-PRGフィラーを含有

### S-PRGフィラーから

### 6種類のイオンリリース

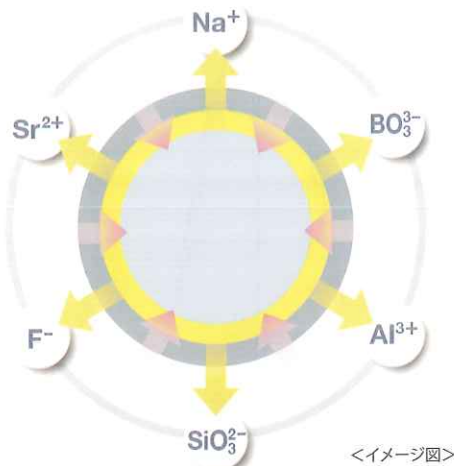

#### S-PRGフィラーって？

ビューティバンドセメントには、松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラー“S-PRGフィラー”が含まれています。6種類のイオンリリースにより次の特長を有します。

#### 抗プラーク付着性 (学会報告)

日本歯科保存学会にて下記内容が報告されています。

口腔内におけるプラーク形成状況の観察(24時間ブラッシングなし)



S-PRGフィラー非配合自社コンポジットレジン  
成熟したプラーク形成



ビューティバンドII (S-PRGフィラー配合)  
点状化したプラーク形成

S-PRGフィラー配合コンポジットレジンの表面はだ液と接触することによって、マテリアルフィルム層ができ、これがコンポジットレジン表面への細菌の付着および増殖を抑制し、成熟したプラークを形成しにくくすると報告されています。また、この層はブラッシング等により脱離するものの、再度だ液との接触によって形成され、**持続的にプラークの成熟化を抑制する**といわれています。

(参考：朝日大学 歯学部歯科保存学分野／第117～123回日本歯科保存学会報告)

#### イオンリリース&フッ化物リチャージ機能

S-PRGフィラーからフッ化物をはじめとする6種類のイオンが持続的にリリースします。また、フッ化物含有歯磨きジェルを使用することで、口腔内のフッ化物イオンをリチャージします。

#### 酸中和能の発現

S-PRGフィラーの働きにより、周囲環境を酸性領域から中性領域に移行させます。

#### エナメル質の脱灰を抑制

S-PRGフィラー含有のPRGバリアコートを塗布した試験体では、コーティングした直下のエナメル質だけでなく、コーティングした周囲の露出エナメル質においても脱灰の像は認められず、PRGバリアコートの塗布により、エナメル質の脱灰が抑制されると報告されています。

(資料提供：大阪歯科大学)

#### 使用方法

##### 1. 歯面清掃



オーソティースクリーナー  
(ノンフッ素歯面研磨材)などで歯面清掃

##### 2. 水洗・乾燥



水洗・乾燥

##### 3. ミキサーチップ装着



ミキサーチップを装着

##### 4. ペースト塗布




バンド内面にペースト塗布

##### 5. 装着・余剰ペースト除去



コットンまたはガーゼ等で  
余剰ペーストを除去

##### 6. 光照射

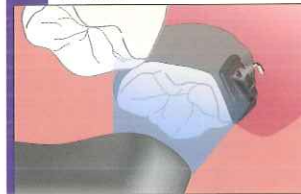


咬合面側の各面に光照射  
ハロゲン:20秒  
LED (1,000mW/cm<sup>2</sup>以上):10秒  
LED (2,100mW/cm<sup>2</sup>以上):3秒×2回  
例:VALOオーソ(エキストラパワー)


## リングワイヤー




**Ti-Ni  
SE200**

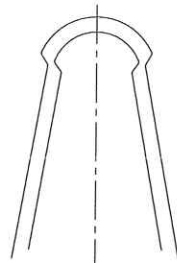

SMALL

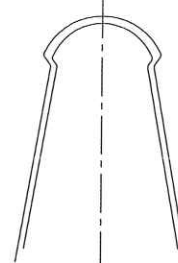

MEDIUM

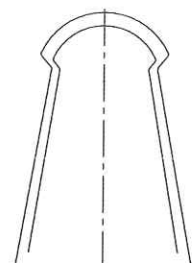

LARGE

### プリフォームドリング

インセットバンドの入ったリング用ワイヤーです。  
サイズは3種類、上顎用・下顎用からご選択いただけます。

**Ti-Ni SE200** (各10入)

.010 .013 .016  
(アーチフォーム大きさ : S、M、L)

¥11,800

1本あたり¥826


¥ 8,260




ニッケルフリーの  
ベータチタンワイヤーに  
スタンダードリング  
タイプが新登場！

**Ti-Ni  
SE200**


**β-III**

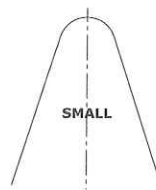


SMALL

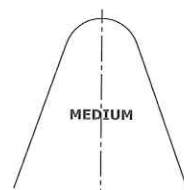

MEDIUM

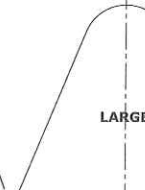

LARGE

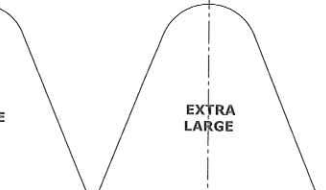

EXTRA  
LARGE

### スタンダードリング

アーチブランクのリング用ワイヤーです。  
材質はニッケルフリーのベータⅢ、  
弱く持続的な力をかけられるTi-Ni SE200  
の2種類からご選択いただけます。

**ベータⅢ** (各10入)

.016 .0175 × .0175  
(アーチフォーム大きさ : S、M、L、XL)

¥11,000

1本あたり¥770

¥ 7,700

**Ti-Ni SE200** (各10入)

.010 .012 .014 .016  
.016 × .022 .017 × .017

(アーチフォーム大きさ : S、M、L、XL)

¥7,000

1本あたり¥490

¥ 4,900

管理医療機器 医療機器認証番号 306AKBZX00026000



## トルクドワイヤー

あらかじめ前歯部に20°のトルクが組み込まれており、2-2の幅に応じて3種類からご選択いただけます。  
ワイヤーの向きを変えることでプラストルク、マイナストルクをかけることができ、  
Ⅱ級2類症例、前突の強い症例などにおいて、早期にトルクコントロールを行えます。  
ステンレススチールワイヤーと比べ、弱く持続的なトルクをかける力を発現します。

**トルクドタイプ** Pre-Torqued (各10入)

.016 × .022 .016 × .025 .017 × .025 .018 × .025  
.019 × .025 .021 × .025

(トルク部長さ 上顎: 34mm、38mm、下顎: 28mm)  
※ .016 × .025は上顎: 34mm、38mmのみ

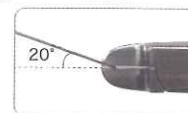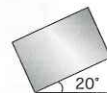


20° torque

¥14,000

1本あたり¥980

¥ 9,800

管理医療機器 医療機器認証番号 304AKBZX00050000

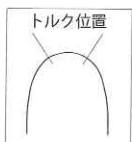



トルク位置



## ループワイヤー

ベータⅢ：マッシュルームループ ステンレススチール：キーホールループ

β-Ⅲ

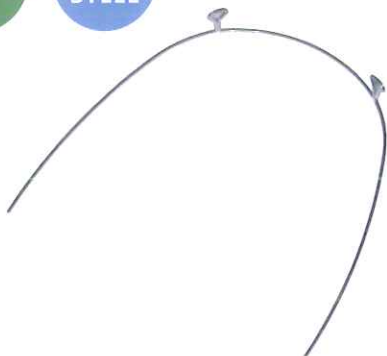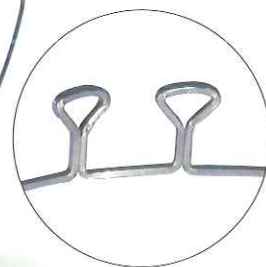
STAINLESS  
STEELSTAINLESS  
STEEL

ループメカニクスによるスペースクローズなどにご使用いただけます。

ループワイヤーには熱処理をしております。

2ループは、ニッケルフリーでステンレススチールよりも穏やかな力を発現するベータチタンの材質がございます。

## 2ループ

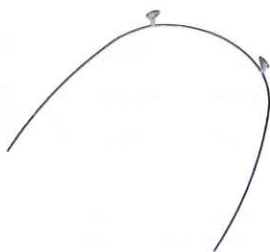

マッシュルームループ



キーホールループ

## ベータⅢ (各5入)

レクタングュラー ループ間距離

.016 × .022

.017 × .025

.019 × .025

上顎 32mm 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 46mm 52mm※56mm※

下顎 24mm 26mm 28mm 30mm

ニッケルフリー！  
ステンレススチールよりも穏やかな力を発現！

¥12,000

1本あたり¥1680

¥8,400

※受注発注品

## ステンレススチール (各10入)

レクタングュラー ループ間距離

.016 × .022

.019 × .025

上顎 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 44mm

下顎 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm

¥4,300

1本あたり¥301

¥3,010

## 4ループ

ダブルキーホールループ(DKL)



キーホールループ

## ステンレススチール (各10入)

レクタングュラー ループ間距離

.016 × .022

.019 × .025

上顎 34mm 36mm 38mm 40mm 42mm 44mm

下顎 22mm 24mm 26mm 28mm 30mm 32mm

¥4,800

1本あたり¥336

¥3,360

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00020000

## ホワイトワイヤー

全面コーティングによる優れた審美性。

均一な膜厚制御が可能な独自コーティング技術。

高い機械的特性と耐酸性を有するPEN樹脂をコーティング層に採用。

※PEN：ポリエチレンナフタレート(エンジニアリングプラスチック)

## Ti-Ni SE200

● .012 .014 .016 .018

■ .016 × .016 .018 × .018

■ .016 × .022 .017 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025

## ステンレススチール

● .016 .018

■ .016 × .016 .018 × .018

■ .016 × .022 .017 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025



標準価格

ラウンド(10入) ¥11,000 ¥8,800

レクタングュラー(10入) ¥12,000 ¥9,600

標準価格

ラウンド(10入) ¥10,500 ¥8,400

レクタングュラー(10入) ¥11,000 ¥8,800



製品詳細

## オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ / オーソラインアーチワイヤーⅡ ベータⅢ (歯列矯正用ワイヤ)

ご希望の多かった **.016×.016サイズ** をついにラインアップ!

- ベンディング可能
- ステンレススチールと比べて柔らかいため、**おだやかな力でトルクコントロールやディテールリングが可能です。**
- 組成にニッケルを含んでいませんので、**ニッケルアレルギーの患者さまにもご使用いただけます。**
- 通常のSアーチよりも遠心端が長くなっている「ロングタイプ」になっています。シビアな前突ケースなどアーチが大きな症例への使用や、クロージングループやオメガグループなどのバンドが可能です。

## サイズラインナップ

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ラウンド                   | .016 .018                                                                                            |
| レクタングュラー               | .016 × .016 .016 × .022 .016 × .025 .017 × .025<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .021 × .025   |
| ラウンド ストレート             | .016 .018                                                                                            |
| ラウンド ストレート (技工用)       | .027(0.7mm) .032(0.8mm) .036(0.9mm)                                                                  |
| レクタングュラー (ストレート/14インチ) | .016 × .016 .016 × .022 .017 × .025 .0175 × .0175<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .021 × .025 |

1本あたり¥574!

(技工用を除く)

## Sアーチ エッチング

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥8,200 → <b>¥5,740</b><br>(1本あたり¥574) |
| ■レクタングュラー 10入 |                                       |

## ストレート 14インチ (約35cm)

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥8,200 → <b>¥5,740</b><br>(1本あたり¥574) |
| ■レクタングュラー 10入 |                                       |

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ●ラウンド 10入 (技工用) | ¥11,800 → <b>¥8,260</b><br>(1本あたり¥826) |
|-----------------|----------------------------------------|

※「オーソラインアーチワイヤー ベータⅢ」は在庫なくなり次第、販売終了となり、新たに「オーソラインアーチワイヤーⅡ ベータⅢ」の販売を開始いたします。  
今回、販売開始となる「オーソラインアーチワイヤーⅡ」は薬機法の改正に対応したものであり、「オーソラインアーチワイヤー」と製品の仕様に変更はございません。  
「オーソラインアーチワイヤーⅡ」でご注文いただいた場合でも、「オーソラインアーチワイヤー」の在庫が残っている場合はこちらでのご用意となりますこと、あらかじめご了承ください。  
ご不明点ございましたら、(株)松風 矯正課までお問合せをお願い申し上げます。(03-3832-1824)

管理医療機器 医療機器認証番号:308AKBZX00026000

管理医療機器 医療機器承認番号:21500BZY00361000

## オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール (歯列矯正用ワイヤ)

- Sアーチは熱処理済みのため**高い剛性**を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

## ロングタイプ

- 通常のSアーチよりも遠心端が長くなっている「ロングタイプ」をご用意。シビアな前突ケースなどアーチが大きな症例への使用や、クロージングループやオメガグループなどのバンドが可能です。

## サイズラインナップ

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sアーチ                   |                                                                                                                            |
| ラウンド                   | .014 .016 .018 .020                                                                                                        |
| レクタングュラー               | .016 × .016 .016 × .022 .017 × .022 .017 × .025<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .021 × .025                         |
| ラウンド ストレート             | .014 .016 .018 .020(0.5mm)                                                                                                 |
| ラウンド ストレート (技工用)       | .024(0.6mm) .028(0.7mm) .032(0.8mm) .036(0.9mm)                                                                            |
| レクタングュラー (ストレート/14インチ) | .016 × .016 .016 × .022 .016 × .024 .017 × .022 .017 × .025<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .020 × .020 .021 × .025 |

## Sアーチ エッチング

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| ●ラウンド 20入     | ¥1,600 → <b>¥1,120</b><br>(1本あたり¥56) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥1,400 → <b>¥980</b><br>(1本あたり¥98)   |

## ストレート 14インチ (約35cm)

|                 |                                        |
|-----------------|----------------------------------------|
| ●ラウンド 25入       | ¥2,300 → <b>¥1,610</b><br>(1本あたり¥64.4) |
| ●ラウンド 25入 (技工用) | ¥2,800 → <b>¥1,960</b><br>(1本あたり¥78.4) |
| ■レクタングュラー 10入   | ¥1,600 → <b>¥1,120</b><br>(1本あたり¥112)  |

## ロングタイプ

※通常のSアーチよりも遠心端が長くあり、オメガグループなどのバンドが可能です。

|               |                                      |
|---------------|--------------------------------------|
| ●ラウンド 20入     | ¥1,600 → <b>¥1,120</b><br>(1本あたり¥56) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥1,400 → <b>¥980</b><br>(1本あたり¥98)   |

※ロングタイプには.017×.022、.018×.018、.018×.022のラインナップはございません。

管理医療機器 医療機器認証番号:305AKBZX00022000

## オーソラインアーチワイヤー マルチストランド (歯列矯正用ワイヤ)

- 柔らかく、治療の初期段階のインisialワイヤーや、リンガルリテーナー用のワイヤーとして使用できます。
- ラウンドはコアとなるシングルストランドの周りを5本のステンレススチールワイヤーで巻き合わせてつくられています。
- レクタングュラーは8本のステンレススチールワイヤーを編み上げて作られています。  
※ラウンドSアーチについては臼歯部の幅が若干細めのアーチフォームとなります。

## サイズラインナップ

|                  |                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------|
| ラウンド (Sアーチ)      | .0155 .0175 .0195                                           |
| レクタングュラー (Sアーチ)  | .016 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025 .021 × .025 |
| ラウンド (ストレート)     | .0155 .0175 .0195 .0215                                     |
| レクタングュラー (ストレート) | .016 × .016 .016 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025 |

## Sアーチ エッチング

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | 各¥3,500 → <b>各¥2,450</b><br>(1本あたり¥245) |
| ■レクタングュラー 10入 | 各¥4,200 → <b>各¥2,940</b><br>(1本あたり¥294) |

## ストレート 14インチ (約35cm)

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | 各¥2,600 → <b>各¥1,820</b><br>(1本あたり¥182) |
| ■レクタングュラー 10入 | 各¥4,900 → <b>各¥3,430</b><br>(1本あたり¥343) |

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00471000

Ti-Ni SE200、およびウルトラサーモではセンターマークを選択可能です。

## ディンプル



ディンプルは垂直的に付与しています。  
セルフライゲーションブラケットでも、ワイヤーのズレを抑えられます。

## エッチング



エッチングは、センターマークが上顎には3本、下顎は1本刻印され識別ができます。



# E SERIES

—使いやすさを追求—

## オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni ウルトラサーモ (歯列矯正用ワイヤ)



- 3種類のTi-Niワイヤーの中で最も力の弱いワイヤーです。
- やわらかく、体温で矯正力を発現します。
- セルフライゲーションブラケットにオススメの2サイズを追加ラインナップ！
- 初期の角ワイヤーから積極的なトルク・ローテーションコントロールが可能です。

### サイズラインナップ

|          |                                                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ラウンド     | .012 .014 .016 .018 .020                                                                                                   |
| レクタングュラー | .014 × .025 .016 × .016 .016 × .022 .016 × .025 .017 × .025<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .020 × .020 .021 × .025 |

### エッチング

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥3,200 → <b>¥2,240</b><br>(1本あたり¥224) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥4,200 → <b>¥2,940</b><br>(1本あたり¥294) |

### ディンプル

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥3,800 → <b>¥2,660</b><br>(1本あたり¥266) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥4,800 → <b>¥3,360</b><br>(1本あたり¥336) |

管理医療機器 医療機器認証番号: 223AKBZX00233000

## オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 (歯列矯正用ワイヤ)



- 当社Ti-Niシリーズ売り上げNo.1。
- 3種類のTi-Niワイヤーの中で中間の力のワイヤーです。
- 弱く持続的な力を発現します。
- 新たにセルフライゲーションブラケットにオススメの4サイズを追加ラインナップ！

### サイズラインナップ

|          |                                                                                                                                                    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ラウンド     | .012 .013 .014 .016 .018 .020                                                                                                                      |
| レクタングュラー | .014 × .025 .016 × .016 .016 × .022 .016 × .025 .017 × .022 .017 × .025<br>.018 × .018 .018 × .025 .019 × .025 .020 × .020 .021 × .025 .022 × .028 |

### エッチング

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥2,600 → <b>¥1,820</b><br>(1本あたり¥182) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥3,600 → <b>¥2,520</b><br>(1本あたり¥252) |

### ディンプル

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥3,200 → <b>¥2,240</b><br>(1本あたり¥224) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥4,200 → <b>¥2,940</b><br>(1本あたり¥294) |

管理医療機器 医療機器認証番号: 304AKBZX00060000

## オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni (歯列矯正用ワイヤ)



- 3種類のTi-Niワイヤーの中で最も力の強いワイヤーです。
- 他のTi-Niワイヤーに比べてベンドしやすいのが特徴です。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

### サイズラインナップ

|          |                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|
| ラウンド     | .012 .014 .016 .018 .020                                                   |
| レクタングュラー | .016 × .016 .016 × .022 .017 × .025 .018 × .025<br>.019 × .025 .021 × .025 |

### ディンプル

|               |                                       |
|---------------|---------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | ¥3,200 → <b>¥2,240</b><br>(1本あたり¥224) |
| ■レクタングュラー 10入 | ¥4,200 → <b>¥2,940</b><br>(1本あたり¥294) |

管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00556000

## オーソラインアーチワイヤー Ti-Ni RCS (歯列矯正用ワイヤ)



- あらかじめリバースカーブが付与されています。
- Ti-Niの持続的な力は、スピーカーブを矯正し、初期のバイトオープニング、レベリング、アライニング等に適しています。

### サイズラインナップ

|          |                                                                       |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| ラウンド     | .016 .018                                                             |
| レクタングュラー | .016 × .022 .017 × .025 .018 × .025 .019 × .025<br>※.018 × .025は下顎のみ。 |

|               |                                         |
|---------------|-----------------------------------------|
| ●ラウンド 10入     | 各¥5,900 → <b>各¥4,130</b><br>(1本あたり¥413) |
| ■レクタングュラー 10入 | 各¥6,900 → <b>各¥4,830</b><br>(1本あたり¥483) |

### ディンプル



リバースカーブが付与されたワイヤーです。



管理医療機器 医療機器承認番号 21500BZY00556000

弾性力の異なる3つのTi-Niをご用意



柔

Ti-Ni ウルトラサーモ



Ti-Ni SE200

硬



Ti-Ni

# GENIUS SYSTEM™

Self-Ligating Passive System



## GENIUS SYSTEM

パッシブ × .021スロット という新しいコンセプト

前歯部に .018スロット、オプション JETsystemを追加  
バイディメンショナルテクニックに対応

### パッシブセルフライゲーションブラケット

開閉式のシャッターにより4つの面でワイヤーを効率的にコントロールします。  
結さつ不要なためケアタイムの削減、患者さまの負担軽減につながります。

### .021スロット

スロットとワイヤーの遊びを減少させ、ワイヤーの力を効率的に伝えます。

※使用するワイヤーは、ラウンド .020、レクタングュラー .019 × .025インチ以下を使用。



### 優れた審美性

ブラケットボディ、スロット、シャッターがセラミック製です(ジニアス クリスタル)。

幅の広いシャッター

丸みのあるデザイン

簡便なオープン/クローズ機構

スロットエッジ部のラウンド加工



結さつ可能なタイウィングスペース

ベース面デザイン



リガチャーワイヤーで結さつ



結さつ線+エラスティックチェーン



結さつ線+エラスティックチェーン



ジニアス クリスタル



ジニアス メタル



# GENIUS CRYSTAL™



ジニアスシステムのセラミック製の審美ブラケットです。  
シャッターまでセラミック製のため、審美性に優れています。  
タイウィングスペースも備えており結さつも可能です。

## ジニアス クリスタル

包装・特別価格

単品 10入 ¥24,000 → **¥16,800**  
(1粒あたり¥1,680)

30%  
OFF!!

| 1症例キット 内容                         | スロット | 製品番号    | 標準医院価格  | 特別標準医院価格       |
|-----------------------------------|------|---------|---------|----------------|
| 上下顎 3-3 犬歯フック付き                   | .021 | C3W3H   | ¥29,800 | <b>¥20,860</b> |
| 上下顎 5-5 (下顎4-5メタル) 犬歯フック付き        | .021 | CU5L33H | ¥45,800 | <b>¥32,060</b> |
| 上下顎 3-3 (ハイトルク/JETsystem) 犬歯フック付き | .018 | A3JTHTQ | ¥29,800 | <b>¥20,860</b> |

Pick Up!



シャッターもセラミック製！  
スロットもシャッターで覆われるため、審美的です。



導入しやすい  
1症例キットもご用意。  
(下顎小臼歯はメタルになります)

## オプション JETsystem スペック表

| 部 位              | フック | トルク | ティップ | .018スロット 左 | .018スロット 右 |
|------------------|-----|-----|------|------------|------------|
| U1 上顎中切歯 (ハイトルク) | 無し  | 22° | 5°   | GSC5210    | GSC5110    |
| U2 上顎側切歯 (ハイトルク) | 無し  | 15° | 9°   | GSC5220    | GSC5120    |
| U3 上顎犬歯 (ハイトルク)  | 付き  | 11° | 8°   | GSC5231    | GSC5131    |

## JETsystem®

短期集中治療を可能にする4ステップ同時治療により、抜歯症例で1年以内に矯正治療を終えることを目的とした矯正治療システムです。

## JETsystem® セミナー開催決定!

JETsystem開発者の成田信一先生による2025年のセミナー日程が決定いたしました！  
日程などセミナーの詳細は右のQRコードよりご確認ください。



# GENIUS METAL™



コバルトクロム合金(Ni 0.00~0.50wt%)製のメタルブラケットです。  
シャッターで開閉する6番用もラインナップ！  
コンバーチブルキャップを外す際の脱落リスクを避けられます。



Lフックタイプ(犬歯用)

## ジニアス メタル

包装・特別価格

単品 10入 ¥16,000 → **¥11,200**  
(1粒あたり¥1,120)

30%  
OFF!!

| 1症例キット 内容           | .021スロット | 標準医院価格  | 特別標準医院価格       |
|---------------------|----------|---------|----------------|
| 上下顎 5-5 フック無し       | M5WO     | ¥33,000 | <b>¥23,100</b> |
| 上下顎 5-5 犬歯フック付き     | M5W3H    | ¥33,000 | <b>¥23,100</b> |
| 上下顎 5-5 犬歯・小臼歯フック付き | M5WH     | ¥33,000 | <b>¥23,100</b> |

ジニアス メタル/ジニアス クリスタル共通インストルメント  
BD32001 ブラケットオープニングドライバー

標準医院価格 ¥4,500  
特別標準医院価格 **¥3,150**

30%  
OFF!!



GSCCM  
コンサルテーションモデル ジニアスクリスタル

標準医院価格 ¥58,000  
特別標準医院価格 **¥40,600**



GSMCM  
コンサルテーションモデル ジニアスメタル

標準医院価格 ¥48,000  
特別標準医院価格 **¥33,600**



| ▲Maxillary Arch | Torq. | Ang. | Rot. |
|-----------------|-------|------|------|
| Central         | +14°  | +5°  |      |
| Lateral         | +6°   | +9°  |      |
| Cuspid          | +3°   | +5°  |      |
| bicuspid        | -7°   | +2°  |      |
| 1st Molar       | -17°  | 0°   | +6°  |

| ▼Mandibular Arch | Torq. | Ang. | Rot. |
|------------------|-------|------|------|
| Anterior         | -6°   | 0°   |      |
| Cuspid           | +3°   | +5°  |      |
| 1st Bicuspid     | -11°  | +4°  |      |
| 2nd Bicuspid     | -16°  | +2°  |      |
| 1st Molar        | -20°  | +2°  | +2°  |

製品カタログを  
ご覧になりたい方は  
こちらから！  
(PDFが開きます)





# アブソアンカーⅢ

アブソアンカーⅢは、斜め打ちがしやすい、豊富なラインナップなどといったアブソアンカーⅡの特長はそのままに、滅菌済みパッケージの採用、サイズラインナップの追加を実現した歯科矯正用アンカースクリューです。



| 標準医院価格  | 特別標準医院価格 |
|---------|----------|
| ¥11,600 | ¥9,280   |

20% OFF!!

(1PK/2本入)

## Point!

- ① 滅菌済みパッケージの採用  
滅菌済みのため、開封後そのままドライバーに装着し使用可能
- ② φ1.3とφ2.0の新しいサイズが新登場  
ご要望が多かった1.3mm径、2.0mm径を追加しました
- ③ インストルメント類は「アブソアンカーⅡ」と共用  
ドライバーやドリルなどは全てそのままお使いいただけます
- ④ 直接コイルスプリングがかけやすい!  
コイルスプリングを直接かけられるヘッドサイズです



### スモールヘッドタイプ (SH)

| シリーズ        | ネジ部直径φ (mm) | ネジ部長さ   |         |         |         |         |         |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |             | 5mm     | 6mm     | 7mm     | 8mm     | 10mm    | 12mm    |
| new! 13シリーズ | φ 1.3       | C131205 | C131206 | C131207 | C131208 | C131210 | C131212 |
| 14シリーズ      | φ 1.4       | C141305 | C141306 | C141307 | C141308 | C141310 | C141312 |
| 15シリーズ      | φ 1.5       | C151405 | C151406 | C151407 | C151408 | C151410 | C151412 |
| 16シリーズ      | φ 1.6       | C161505 | C161506 | C161507 | C161508 | C161510 | C161512 |

### スモールヘッドタイプ (SH-L)

| シリーズ        | ネジ部直径φ (mm) | ネジ部長さ   |         |         |         |         |         |
|-------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|             |             | 5mm     | 6mm     | 7mm     | 8mm     | 10mm    | 12mm    |
| new! 20シリーズ | φ 2.0       | D201805 | D201806 | D201807 | D201808 | D201810 | D201812 |

※ご注意 スモールヘッドタイプLに対応するシャフトチップ、ドライバーチップ、エンジンドライバーはラージのタイプになりますのでご注意ください。

### 細いスクリューを使ってみませんか?

直径1.3mm追加!



歯根間に植立する場合、そのスペースはわずかです。  
最細1.3mmからのラインナップ、スムーズなネック形状のため、狭い歯根間にも植立しやすく、根尖方向の広いスペースへ安全に植立することがアブソアンカーでは可能です!  
斜めに植立することで、歯根との接触リスクを低減できます。

### フィクセーションヘッドタイプ (FH)

| シリーズ   | ネジ部直径φ (mm) | ネジ部長さ   |         |         |         |         |
|--------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        |             | 6mm     | 7mm     | 8mm     | 9mm     | 10mm    |
| 17シリーズ | φ 1.7       | E171606 | E171607 | E171608 | E171609 | E171610 |
| 18シリーズ | φ 1.8       | E181706 | E181707 | E181708 | E181709 | E181710 |

### 初回導入例①

ドライバーやドリル類をリーズナブルにまとめて購入し、さまざまな症例に対応したい先生に!

#### アブソアンカー インストルメントキット



¥89,200 → ¥71,360

#### アブソアンカーⅢ

ご希望のサイズをご指定ください。



(1PK/2本入)

¥11,600 → ¥9,280

20% OFF!!

特別標準医院価格

¥80,640

### 初回導入例②

最低限のコストで埋入を行いたい先生に!

#### ニューロングハンドドライバー ボディ



¥16,000 → ¥12,800

#### シャフトチップ

ご使用になるアブソアンカーⅢに応じてスモール(STS)からラージ(STL)をご選択下さい。



¥12,000 → ¥9,600

#### アブソアンカーⅢ

ご希望のサイズをご指定ください。



(1PK/2本入)

¥11,600 → ¥9,280

#### パイロットドリル

ご使用になるアブソアンカーⅢに応じてドリルの長さ・太さをご選択下さい。



¥12,000 → ¥9,600

20% OFF!!

特別標準医院価格

¥41,280



インスツルメント類 20%OFF!

## インスツルメントキット



キットのケースが  
リニューアル!

ケース寸法

約37mm  
(蓋を含めると約70mm)

初回導入にはインスツルメントキットをオススメしております。  
オートクレーブ滅菌可能なケースにドライバー、ドリル類がまとめられており、  
全てのアブソアンカースクリューが使用可能となります。単品でご購入いただくよりも価格的にもお得です。

標準医院価格

¥89,200

特別標準医院価格

¥71,360

20%

OFF!!

【キット内容】

ロングハンドドライバー:1(LHDB)、  
ドライバーチップ:2(DTS/DTL)、ショートハンドドライバー:2(SHDS/SHDL)、  
エンジンドライバー:2(ED19S/ED19L)、パイロットドリル:2(PD2411/PD2511)、  
ニューケース:1(ANC)

## -AbsoAnchor Instruments-

インスツルメント単品各種も

20%

OFF!!



ロングハンドドライバー



ドライバーチップ



ショートハンドドライバー



エンジンドライバー



パイロットドリル



ニューロングハンドドライバー



シャフトチップ



デントスハンドコントラアングルドライバー



ミニケース

| 品目                  | 標準医院価格  | 特別標準医院価格 |
|---------------------|---------|----------|
| ロングハンドドライバー         | ¥10,000 | ¥8,000   |
| ドライバーチップ (スモール/ラージ) | ¥10,000 | ¥8,000   |
| ニューロングハンドドライバー      | ¥16,000 | ¥12,800  |
| シャフトチップ (スモール/ラージ)  | ¥12,000 | ¥9,600   |
| ニューケース              | ¥24,000 | ¥19,200  |


| 品目                      | 標準医院価格  | 特別標準医院価格 |
|-------------------------|---------|----------|
| ショートハンドドライバー (スモール/ラージ) | ¥15,000 | ¥12,000  |
| パイロットドリル 各種             | ¥12,000 | ¥9,600   |
| エンジンドライバー 各種            | ¥10,000 | ¥8,000   |
| デントス ハンドコントラアングルドライバー   | ¥30,000 | ¥24,000  |
| ミニケース                   | ¥15,000 | ¥12,000  |



上顎第一大臼歯の圧下症例  
(写真提供: 加治 初彦先生)



シザースパイトの治療症例  
(『矯正用アンカースクリューを用いた矯正歯科治療』より)

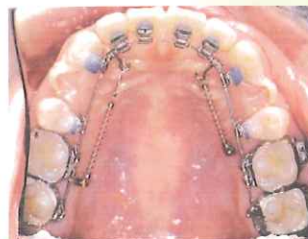


舌側矯正での使用例  
(『実践インプラント固定による矯正歯科治療』より)

歯列矯正用スプリング

## デントス NT コイルスプリング

かけやすい!

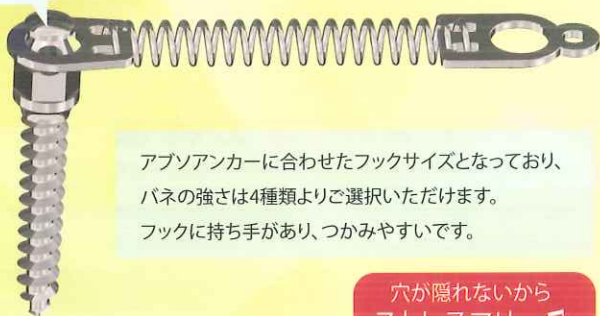


アブソアンカーに合わせたフックサイズとなっており、  
バネの強さは4種類よりご選択いただけます。  
フックに持ち手があり、つかみやすいです。

穴が隠れないから  
ストレスフリー!



アブソアンカーⅢのヘッドに  
直接かけることができます。

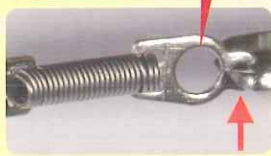

プライヤーで把持できる持ち手があり  
穴が隠れないため、クリンパブルフックに  
かけやすくなっております。

AbsoAnchor

| 対象      | ホール内径<br>(フックサイズ) | 長さ   | フォース    | 識別色 | 商品番号    |
|---------|-------------------|------|---------|-----|---------|
| スモールヘッド | φ1.5              | 8mm  | ウルトラライト | ●   | N1U1508 |
|         |                   |      | ライト     | ●   | N2L1508 |
|         |                   | 13mm | ミディアム   | ●   | N3M1508 |
|         |                   |      | ヘビー     | ●   | N4H1508 |
|         | φ2.0              | 8mm  | ウルトラライト | ●   | N1U2508 |
|         |                   |      | ライト     | ●   | N2L2508 |
|         |                   | 13mm | ミディアム   | ●   | N3M2508 |
|         |                   |      | ヘビー     | ●   | N4H2508 |

| 対象              | ホール内径<br>(フックサイズ) | 長さ   | フォース    | 識別色 | 商品番号    |
|-----------------|-------------------|------|---------|-----|---------|
| フィクセーション<br>ヘッド | φ1.5              | 8mm  | ウルトラライト | ●   | N1U1513 |
|                 |                   |      | ライト     | ●   | N2L1513 |
|                 |                   | 13mm | ミディアム   | ●   | N3M1513 |
|                 |                   |      | ヘビー     | ●   | N4H1513 |
|                 | φ2.0              | 8mm  | ウルトラライト | ●   | N1U2513 |
|                 |                   |      | ライト     | ●   | N2L2513 |
|                 |                   | 13mm | ミディアム   | ●   | N3M2513 |
|                 |                   |      | ヘビー     | ●   | N4H2513 |

※ホール内径(フックサイズ)φ2.0の製品もセール対象です。

30%

OFF!!

商品名/種類

単品 各種(1PK/10入)

通常標準医院価格

¥7,800

特別標準医院価格

¥5,460

(一個あたり¥546)



リン酸エッチングが不要の **一液タイプ** セルフエッチングプライマーと、マルチイオンリリース能を有した「S-PRGフィラー」配合の光重合型ペーストからなる新世代の矯正用接着材です。

プライマー性状を改良しテクニカルエラーが起こりにくなりました。30秒放置→水洗・乾燥の必要なリン酸エッチング(インパーバボンド エッチングゲル)よりもスピーディな**10秒放置→エアブロー**で処理完了です。

まずはこちらの導入用トライアルセットから!!

2388

ビューティオーソ ボンドⅡ トライアルセット

【内容】

ペースト(3g) 1、ペースト ビスコス(3g) 1、フロアブルペースト(1.9g) 1  
フロアブルペースト ブルー(1.9g) 1、セルフエッチングプライマー(3.0mL) 1、  
松風Vディッシュ 25枚、ティスボラシファイン イエロー50本入、  
松風ニードルチップ25入

標準医院価格

¥ 21,000

特別標準医院価格

¥ 16,800

20%  
OFF

## エッチング・水洗不要のセルフエッチングプライマー

ご質問の多いエアブローのポイント



リン酸エッチング・水洗が不要なため、  
チェックタイムの短縮に繋がります!

## 粘稠度や色調の異なる4種類のペースト

◆ ペースト



ブラケットの接着に使用

◆ ペースト ビスコス



◆ フロアブル ペースト



インダイレクトボンディングやフィックスリテーナーなど様々な用途に使用可能  
※フロアブルペーストは2色とも同じ粘稠度です。

◆ フロアブル ペースト ブルー

フロアブルペースト 使用例



インダイレクトボンディング



フィックスリテーナー

高

粘 稠 度

低

## ペースト類に含有された「S-PRG<sup>※</sup> フィラー」の特徴

※S-PRG フィラーって? 松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラーです。6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性の他、酸中和能の発現や、エナメル質の脱灰を抑制する特長を有します。

フッ素リリース&リチャージ

酸 中 和 能 の 発 現

抗プラーク付着性(学会報告)

エナメル質の脱灰を抑制

単品各種は全て20%OFF!!

20%  
OFF!

| 品目コード  | 品名            | 医院価格   | 特別価格   |
|--------|---------------|--------|--------|
| 236102 | ペースト          | ¥4,900 | ¥3,920 |
| 236103 | ペースト ビスコス     | ¥4,900 | ¥3,920 |
| 236105 | フロアブルペースト     | ¥4,300 | ¥3,440 |
| 236106 | フロアブルペースト ブルー | ¥4,300 | ¥3,440 |

| 品目コード  | 品名               | 医院価格   | 特別価格   |
|--------|------------------|--------|--------|
| 236101 | セルフエッチングプライマー    | ¥6,000 | ¥4,800 |
| 236104 | プラスチックブラケットプライマー | ¥6,000 | ¥4,800 |



# opal<sup>®</sup> band<sup>™</sup> cement

オパールバンドセメント

デュアルキュアによる優れた操作性と硬化性、  
ガラスアイオノマーからのフッ素徐放効果を備えた  
光重合型バンドセメントです。

20%  
OFF!!



## 500-000 オパールバンドセメント キット

|                   |     |
|-------------------|-----|
| オパールバンドセメント(8.3g) | 4本  |
| セメントミキシングチップ      | 50個 |

標準医院価格 特別標準医院価格

¥30,500 → **¥24,400**

デュアルキュアタイプのペーストを採用

防湿にくい場合でも使用可能

ガラスアイオノマーによるフッ素徐放

適度な固さで塗布、セメント除去も容易



管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00130000

# opal<sup>®</sup> ADHESIVES

オパールアドヒーズ

適度な粘度で垂れにくいオパールエッチ、フッ素リリース&リチャージ機能を有したオパールシール、  
垂れにくくポジショニングしやすいオパールボンドMV、  
様々な用途に使用可能なオパールボンドフロー/オパールボンドブルーから成る、光重合型接着材です。  
オパールシールが高い機械的保持力を発揮し、安定したブラケット接着を可能にします。  
※「オパールエッチ」はキャンペーン対象外になります。

## opal<sup>®</sup> seal オパールシール

20%  
OFF!!



### エッチング後の歯面に塗布するボンディング材

ガラスアイオノマー&ナノフィラーにより  
高い機械的保持力と持続性を発揮します。

フッ素リリース&リチャージ効果により矯正治療中の歯面を守ります。  
薄く均一に塗布できる使い捨てチップを採用しています。

### Pick Up! 矯正治療中の歯面に

～オパールシールのフッ素リリース&リチャージ効果～



オパールシールをエッチング後の歯面に塗布することで  
エナメル質をコーティングした状態でブラケットの接着ができます。  
また、ガラスアイオノマーからのフッ素リリース&リチャージ効果も  
期待できます。

## 500-061 オパールシールキット

|                    |     |
|--------------------|-----|
| オパールシール シリンジ(1.7g) | 4本  |
| メタルオパールシールチップ      | 60個 |

標準医院価格 特別標準医院価格

¥22,000 → **¥17,600**

## 500-094 メタルオパールシールチップ

|               |     |
|---------------|-----|
| メタルオパールシールチップ | 20個 |
|---------------|-----|

標準医院価格 特別標準医院価格

¥3,400 → **¥2,720**

## 710 インスパイラルブラシチップ

|               |     |
|---------------|-----|
| インスパイラルブラシチップ | 20個 |
|---------------|-----|

標準医院価格

¥2,900

※インスパイラルブラシチップはキャンペーンの対象外になります。

管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00026000 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000014 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000059

## opal<sup>®</sup> bond MV オパールボンド MV

20%  
OFF!!



### ブラケット用のレジンペースト

ブラケットメッシュに塗布しやすい適度な粘度。  
垂れにくくポジショニング後のブラケットのズレを抑えることができます。  
自然光による硬化を抑え、**操作時間が長く、変色しづらい**です。



人間工学に基づいた、直接塗布しやすい  
角度のコントラアングルシリンジを採用。

## 500-067 オパールボンドMV シリンジキット

|                      |    |
|----------------------|----|
| オパールボンドMV シリンジ(0.9g) | 8本 |
|----------------------|----|

標準医院価格 特別標準医院価格

¥17,800 → **¥14,240**

管理医療機器 医療機器認証番号 223AKBZX00026000

## opal<sup>®</sup> bond flow オパールボンドフロー

20%  
OFF!!



マルチな用途にご使用いただけるフロアブルレジンは。  
専用チップにより容易に塗布が可能で、硬化後も滑沢な  
レジンを維持します。

## 500-041 オパールボンドフロー キット

|                  |     |
|------------------|-----|
| オパールボンドフロー(2.3g) | 2本  |
| オパールボンドフローチップ    | 20個 |

標準医院価格 特別標準医院価格

¥14,500 → **¥11,600**

## 500-082 オパールボンドフローブルー キット

|                      |     |
|----------------------|-----|
| オパールボンドフロー ブルー(2.3g) | 2本  |
| オパールボンドフローチップ        | 20個 |

標準医院価格 特別標準医院価格

¥14,500 → **¥11,600**

## 500-079 オパールボンドフロー チップ

|               |     |
|---------------|-----|
| オパールボンドフローチップ | 20個 |
|---------------|-----|

標準医院価格 特別標準医院価格

¥4,100 → **¥3,280**



咬合挙上用のバイトランブに

舌側のフィックスリテーナーに

管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00069000 一般医療機器 医療機器届出番号 13B1X10086000054



# VALOオーソコードレス (歯科重合用光照射器)

2,100mW/cm<sup>2</sup>のハイパワー。深く浸透する光。

ブラケットのボンディングにも**わずか3秒**のスピード重合。

## エキストラワークオドラントモード を搭載

ブラケット接着のための**連続照射モード**です。

VALOオーソ最大の特徴であるこのモードは、スタートボタンを1回押すだけで5歯分を連続的に照射でき、**ボタンを何度も押す手間を軽減**できます。



ブラケット仮着後の本着用として、インダイレクトボンディングの重合用として、使いやすいモードです。



幅広い波長域により、さまざまな光重合歯科材料に使用可能



- 異なる波長のLEDパネルを搭載することで、**395~480nmの幅広い波長域**を実現しました。
- 矯正だけでなくホワイトニング材、シーラント材などにも使用可能です。
- VALOオーソ1台でほとんどの歯科材料に対応でき、**診療効率をアップ**できます。

光源が先端にあるため、光の直進性が高く、強力な光が拡散せず垂直に深く浸透します。

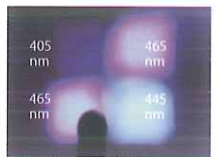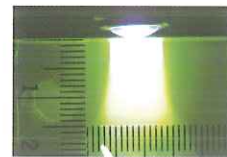

口腔内で操作しやすいコンパクトなヘッド形状

- ロープロファイルなヘッド形状により、ライトガイドタイプの照射器ではアプローチしにくかった**7番遠心部**へも容易に照射でき、口腔内での使用がしやすくなっております。また、開口量の少ない患者さまの診療にもご使用いただけます。

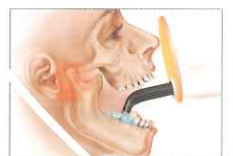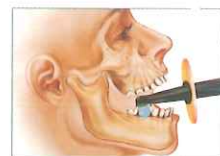

レンズ直径 約 10 mm

- ヘッドはコンパクトですが、**直径約 10 mm**のレンズを採用。ブラケットの上からでも光照射が可能です。



インダイレクトボンディングに

- ハイパワーで深くまで浸透する光により、インダイレクトボンディングを行う際など、トランスファートレー越しでも十分な光照射が可能です。



VALO

ORTHO・CORDLESS

5942 VALOオーソ コードレス キット

標準医院価格

¥ 208,000

特別標準医院価格

¥ 188,000

※保証期間: 2年(電池・バリアスリップなど付属品は90日)

医療機器届出番号 13B1X10086000057

## VALO電池・充電機器を安全にご使用いただくためのお願い



リチウムイオン電池は使用方法を誤ると異常に発熱したり、発火につながる恐れがあります。スタッフの皆様で右記の点に注意してご使用ください。

### 充電方法についてのご注意

- ・ VALO 専用の充電型電池以外は使用しないでください。
- ・ 充電が完了したら、すぐにACアダプターをコンセントから外してください。また、電池は充電器から外して保管してください。
- ・ 診療終了後や不在時には充電を行わないでください。

VALO<sup>®</sup> 専用電池

他社製




2入・定価 ¥2,200

## ギシグー(粘膜保護用シリコーン)

20% OFF!



ブラケットやアンカースクリューなどの矯正装置が舌や頬粘膜に当たり、痛みを訴える患者さまにオススメです。患者さまにお渡しして、ご自身で付けていただく商品です。使い方は、シリンジから出して、指で練って付けるだけの簡単ステップです。

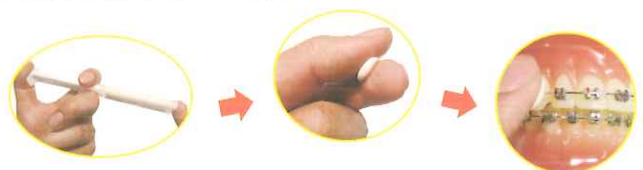

ギシグー ホワイト(トウスカラー)  
1PK/10本入

標準医院価格

¥ 13,000

特別標準医院価格

¥ 10,400  
(一本あたり ¥1,040)



リバースブルマスク

(上顎前方牽引装置)



| 標準医院価格 | 特別標準医院価格 |
|--------|----------|
| ¥9,800 | ¥7,840   |

洗濯できるストラップタイプ!

| サイズ   | 縦×横       | 内容量  | ブラック    | ブルー     | ピンク     |
|-------|-----------|------|---------|---------|---------|
| スモール  | 15cm×14cm | 1セット | 401-011 | 401-012 | 401-013 |
| ミディアム | 16cm×14cm | 1セット | 401-021 | 401-022 | 401-023 |

1個あたり¥784

ハイブルヘッドキャップ



耐久性に優れたナイロン製



| 標準医院価格 | 特別標準医院価格              |
|--------|-----------------------|
| ¥9,800 | ¥7,840<br>(1個あたり¥784) |

| 色調   | 商品番号    | 内容                       | 内容量 |
|------|---------|--------------------------|-----|
| アソート | 900-210 | ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド 各2 | 10入 |
| ブラック | 900-208 | ブラック                     | 10入 |

サービカルネックパッド



フィット感の良い薄生地を使用



1個あたり¥624

| 標準医院価格 | 特別標準医院価格              |
|--------|-----------------------|
| ¥7,800 | ¥6,240<br>(1個あたり¥624) |

| 色調   | 商品番号    | 内容                       | 内容量 |
|------|---------|--------------------------|-----|
| アソート | 900-122 | ブルー、ピンク、ティール、パープル、レッド 各2 | 10入 |
| ブラック | 900-104 | ブラック                     | 10入 |

セーフティリリースモジュール

1症例あたり¥1,024



| 標準医院価格 | 特別標準医院価格                 |
|--------|--------------------------|
| ¥6,400 | ¥5,120<br>(1症例あたり¥1,024) |

| 色調   | 商品番号    | フォース  | 内容量         |
|------|---------|-------|-------------|
| ブラック | 150-010 | ライト   | 450g/cm 10入 |
|      | 150-020 | ミディアム | 600g/cm 10入 |
|      | 150-030 | ヘビー   | 750g/cm 10入 |



| 標準医院価格 | 特別標準医院価格                 |
|--------|--------------------------|
| ¥6,400 | ¥5,120<br>(1症例あたり¥1,024) |

| 色調                                            | 商品番号    | フォース  | 内容量         |
|-----------------------------------------------|---------|-------|-------------|
| ネオンカラーアソート<br>(ブルー、ピンク、グリーン、<br>イエロー、オレンジ 各2) | 150-110 | ライト   | 450g/cm 10入 |
|                                               | 150-120 | ミディアム | 600g/cm 10入 |
|                                               | 150-130 | ヘビー   | 750g/cm 10入 |

1症例キットもございます!

20%OFF!



ハイブルヘッドキャップ キット

| 標準医院価格 | 特別標準医院価格 |
|--------|----------|
| ¥3,000 | ¥2,400   |

| 色調   | 商品番号    | 内容                                               | 内容量  |
|------|---------|--------------------------------------------------|------|
| ブラック | 800-020 | ハイブルヘッドキャップ(ブラック)1<br>セーフティリリースモジュールミディアム(ブラック)2 | 1セット |



サービカルネックパッド キット

| 標準医院価格 | 特別標準医院価格 |
|--------|----------|
| ¥2,800 | ¥2,240   |

| 色調   | 商品番号    | 内容                                               | 内容量  |
|------|---------|--------------------------------------------------|------|
| ブラック | 810-020 | サービカルネックパッド(ブラック)1<br>セーフティリリースモジュールミディアム(ブラック)2 | 1セット |

## ジェットカーバイトバー CA (歯科用カーバイトバー)

20%  
OFF!



残存レジンの  
除去に!!



使用イメージ

|         |  |  |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bur No. | 3                                                                                   | 7                                                                                   | 1171                                                                                | 1172                                                                                |
| ISO#    | 012                                                                                 | 021                                                                                 | 012                                                                                 | 016                                                                                 |
| 商品番号    | CA3P                                                                                | CA7P                                                                                | CA1171P                                                                             | CA1172P                                                                             |

低速で使用するジェットカーバイトバーのCA用は、  
ブラケット除去後の歯面に残存したボンディング材除去に適しています。  
ラウンドタイプに2種類、テーパーフィッシャーに2種類の形態があり、  
用途によって選択ができます。

ジェットカーバイトバー CA  
1PK/5本入

標準医院価格  
¥2,700

特別標準医院価格  
**¥2,160**  
(一本あたり¥432)

一般医療機器 医療機器届出番号: 26B1X00004000101

## 松風オーソモデル

20%  
OFF!



- ・代表的な8種類の咬合状態を忠実に再現
- ・ブラケット装着や矯正装置製作の実習用や  
患者様へのコンサルテーション時の説明用に  
ご使用いただけます。
- ・歯牙には自然な審美性を備えた機能的形態を採用。

Point!



頬側・口蓋側からも噛み合わせの説明がしやすい!

### 【治療前模型】アングルの不正咬合分類に基づいた5種類



CLASS I 上下顎前突  
I 級 上下顎前突症例  
商品番号 CL1B



CLASS I 叢生  
I 級 叢生症例  
商品番号 CL1C



CLASS II DIV.1  
II 級 下顎遠心咬合  
上顎前歯の唇側傾斜を伴う症例  
商品番号 CL21



CLASS II DIV.2  
II 級 下顎遠心咬合  
上顎前歯の唇側傾斜を含まない症例  
商品番号 CL22



CLASS III  
III 級 下顎近心咬合症例  
商品番号 CL3

### 【治療後模型】代表的な治療例3種類



非拔牙治療症例  
非拔牙治療症例  
商品番号 NEXT



上下顎拔牙治療症例  
上下顎左右第一小臼歯拔牙治療症例  
商品番号 UL4EXT



片顎拔牙治療症例  
上顎左右第一小臼歯拔牙治療症例  
商品番号 U4EXT

標準医院価格  
¥15,000



特別標準医院価格  
**¥12,000**  
(1PK/1個入)

## 関連製品



### CM コンサルテーションモデル プレーン

シンプルなコンサルテーションモデルです。  
上下顎は、開閉可能なプラスチック板でネジ留めされており、ボンディング実習や患者説明用に使用いただけます。  
歯間は離れておりますので、バンドセットも可能です。

標準医院価格  
¥18,000



特別標準医院価格  
**¥14,400**  
(1PK/1個入)



## エラスティックチェーンTS (歯列矯正用エラスチック器材)

30%  
OFF!



ライトフォース

持続性、耐久性に優れた熱硬化型ポリウレタン製**ライトフォース**チェーンです。  
厚さ0.4mm。やわらかく、おだやかな力をかけることができます。  
経済的な2m巻きのパッケージ。


| スパン   | イメージ | 商品番号    | 内容量 | 標準医院価格 | 特別標準医院価格      |
|-------|------|---------|-----|--------|---------------|
| ナロー   |      | W042001 | 2m  | ¥2,400 | <b>¥1,680</b> |
| ミディアム |      | W042002 |     |        |               |

1mあたり  
**¥840!**

管理医療機器 医療機器承認番号: 223ADBZX0008A0

## T i - N i コイルスプリング (歯列矯正用スプリング)

### T i - N i クローズドコイルスプリング (10入)

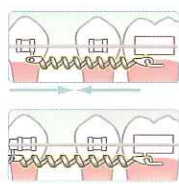

| 標準医院価格  | 特別標準医院価格       |
|---------|----------------|
| 各¥7,800 | <b>各¥5,460</b> |

### T i - N i オープンコイルスプリング (約38cm)



| 標準医院価格  | 特別標準医院価格       |
|---------|----------------|
| 各¥3,200 | <b>各¥2,240</b> |

30%  
OFF!

| フォース     | ワイヤー直径×<br>コイル内径 | サイズ     |         |         |         |
|----------|------------------|---------|---------|---------|---------|
|          |                  | 6mm     | 9mm     | 12mm    | 15mm    |
| ライト      | .010 × .030      | T211030 | T221030 | T231030 | T241030 |
| ミディアムライト | .011 × .030      | T211130 | T221130 | T231130 | T241130 |
| ミディアム    | .012 × .030      | T211230 | T221230 | T231230 | T241230 |

| フォース     | ワイヤー直径×コイル内径 | 商品番号    |
|----------|--------------|---------|
| スーパーライト  | .009 × .030  | T190930 |
| ライト      | .010 × .030  | T191030 |
| ミディアムライト | .011 × .030  | T191130 |
| ミディアム    | .012 × .030  | T191230 |
| ヘビー      | .014 × .030  | T191430 |

管理医療機器 医療機器承認番号: 21700BZY00350000

## ワイヤープロダクト (歯列矯正用結さつ材)

※ワイヤープロダクトはセラー対象外です。

### リガチャーワイヤー プリフォーム

(シングルバック/1000入)

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 標準医院価格        |
|-------------------|---------|---------------|
| .008 (0.20)       | X110810 | <b>¥5,200</b> |
| .009 (0.23)       | X110910 |               |
| .010 (0.25)       | X111010 |               |
| .011 (0.28)       | X111110 |               |
| .012 (0.30)       | X111210 |               |

1本あたりのコスト@5.2円

### コバヤシフック プリフォーム

(シングルバック/100入)

先端にループ状に加工されたフックが形成されています。

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 標準医院価格        |
|-------------------|---------|---------------|
| .010 (0.25)       | X211001 | <b>¥3,600</b> |
| .012 (0.30)       | X211201 |               |
| .014 (0.36)       | X211401 |               |

1本あたりのコスト@36.0円

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 標準医院価格        |
|-------------------|---------|---------------|
| .010 (0.25)       | X121005 | <b>¥4,500</b> |

1本あたりのコスト@9.0円

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 標準医院価格        |
|-------------------|---------|---------------|
| .012(0.30)        | X221201 | <b>¥4,900</b> |
| .014(0.36)        | X221401 |               |

1本あたりのコスト@49.0円

ツイストタイプもございます!  
(500本入り/シングルバックのみ)

ツイストタイプもございます!  
(100本入り/シングルバックのみ)

まとめ買いなら10個PKが断然オトク!!

### リガチャーワイヤー プリフォーム

(お徳用バック/1000入×10)

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 標準医院価格         |
|-------------------|---------|----------------|
| .008 (0.20)       | X110899 | <b>¥50,000</b> |
| .009 (0.23)       | X110999 |                |
| .010 (0.25)       | X111099 |                |

1本あたりのコスト@5.00円

### コバヤシフック プリフォーム

(お徳用バック/100入×10)

| ワイヤー直径<br>インチ(mm) | 商品番号    | 特別標準医院価格       |
|-------------------|---------|----------------|
| .012 (0.30)       | X211299 | <b>¥30,000</b> |

1本あたりのコスト@30.0円

管理医療機器 医療機器承認番号: 21700BZY00521000

レベリング クリアアタッチメント

30%  
OFF!

.018×.025の

レクタングュラスロットを備えた

新しいアタッチメント



各部寸法  
縦 : 約2.2ミリ(ヘッド約1.6ミリ)  
横 : 約2.4ミリ(ヘッド約2.4ミリ)  
高さ : 約2.0ミリ  
1PK/20粒入



レベリングにホワイトワイヤーと合わせて使用

一粒あたり  
¥175

標準価格

¥5,000  
(一粒あたり¥250)

特別価格

¥3,500  
(一粒あたり¥175)

ご注文数

PK

管理医療機器 医療機器認証番号 226AFBZX00119000

リンガルボタンとして使える!

透明で目立たない!

チェーンで牽引できる!

光重合接着材で接着できる!

.016以上の太いラウンドワイヤーや、  
角ワイヤーが挿入できる!



.018×.025  
レクタングュラ  
スロット



メカニカルベース



牽引可能なヘッド形状

口座振替サービス  
が始まりました!



＼ お支払いが簡単に! ／

お振込み作業時間 0 秒!

お振込み手数料 0 円!

お申込方法の詳細は  
弊社ホームページをご参照ください。



or

松風矯正

検索

インフォメーション  
⇒お支払いについて  
の項目をご参照ください。

| 商品名 | 商品番号 | 数量 | 商品名 | 商品番号 | 数量 |
|-----|------|----|-----|------|----|
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |
|     |      |    |     |      |    |

|      |         |
|------|---------|
| お客様名 | ご担当者様   |
| ご住所  | TEL - - |
| 〒    | FAX - - |

通信欄

記載の価格は全て税抜き価格になります。

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先  
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル  
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682  
http://www.shofu.co.jp