



山八齒材工業株式会社

ヤマハチファイバーポスト

Cytec
eco

ご愛顧キャンペーン

期 間 2025年 数量限定!
7月1日(火)▶7月31日(木)

Point 1

各サイズのポストドリルを取りそろえる事により形状にあった最終形成ができます。

※ドリル軸部直径は全て2.35mmとなります。

Point 2

良好な光透過性を有しておりアルミニウム2mm相当以上のX線造影性があります。
健保適用品になります。

Point 3

使いやすい小分け包装。保管も衛生的にできます。



健保適用 管理医療機器 歯科根管ポスト成形品キット ヤマハチ ファイバーポスト 医療機器認証番号 228AFBZX00094000



ファイバー ポスト

(単位: mm)

種類	全長	先端部外径
φ 1.0mm	20	0.5
φ 1.2mm	20	0.6
φ 1.4mm	20	0.8
φ 1.6mm	20	0.9
φ 1.8mm	20	1.0
φ 2.1mm	20	1.2

包装単位 各種 5本入/バック
標準価格 ¥5,600

▶ 期間限定 特別価格でご提供!!

拡大・
形成用
ドリル



ポストドリル

<寸法> 軸部直径:2.35mm (単位: mm)

種類	全長	刃部長さ	刃部外径	カラー
φ 1.0mm	32	11	1.1	赤
φ 1.2mm	32	13	1.3	白
φ 1.4mm	32	13	1.5	黄
φ 1.6mm	32	13	1.7	緑
φ 1.8mm	32	13	1.9	青
φ 2.1mm	32	13	2.2	黒

包装単位 1本入/バック
標準価格 ¥3,000

▶ 期間限定 特別価格でご提供!!



ガイドドリル

(単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
32	5	0.95

包装単位 1本入/バック
標準価格 ¥3,000

▶ 期間限定 特別価格でご提供!!



カットドリル

(単位: mm)

全長	刃部長さ	刃部外径
31.5	4.5	0.95

包装単位 1本入/バック
標準価格 ¥3,000

▶ 期間限定 特別価格でご提供!!



セット

<セット内容>

- ポスト(φ 1.0mm・φ 1.2mm・φ 1.4mm・φ 1.6mm・φ 1.8mm・φ 2.1mm)・・・各5本
- ポストドリル(φ 1.0mm・φ 1.2mm・φ 1.4mm・φ 1.6mm・φ 1.8mm・φ 2.1mm)・・・各1本
- ガイドドリル・・・1本
- カットドリル・・・1本

包装単位 1セット
標準価格 ¥48,000

▶ 期間限定 特別価格でご提供!!

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

グラビティバイト

ご愛顧
キャンペーン

期間 7月1日(火)
2025年 7月31日(木)



歯科咬合採得用材料 一般医療機器 医療機器届出番号 23B1X10001C06007

咬合採得用付加型シリコーン印象材

GRAVITY BITE グラビティバイト

容量 カートリッジ50ml ×4

標準価格 ¥6,000

期間限定 特別価格
でご提供!!

POINT 1


高いショアA硬度

短時間で急速に硬化する事により咬合位のずれを軽減し、高精度の咬合採得を可能にします。

ショアA硬度95まで到達し

トリミングのしやすさ、寸法安定性にも優れたバイト材です。

時間対硬化グラフ

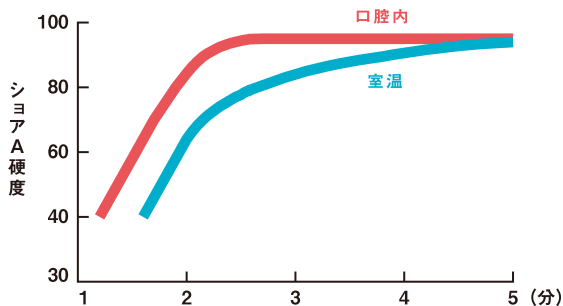

※「口腔内」のデータは37℃の板上で測定、咬合時は上下から37℃の熱が加わるため、実際はもう少し速く固まります。

※「室温」のデータは23℃環境で測定しております。

POINT 2

適度な作業時間

操作余裕時間45秒、口腔内保持45秒と

患者様にとっても術者様にとっても

丁度良いワークタイムを目指しました。

また、操作性の良い流動性を有し、

スムーズな押し出しを可能にします。



※使用イメージ

POINT 3

コスト低減

カートリッジのみ4本入で販売する

事により低コストを実現しました。



***ミキシングチップは既存のチップをご使用下さい。**

テクニカルデータ (社内実測値含む)

操作余裕時間	45秒	細線再現性	20μm
口腔内保持時間	45秒	弾性ひずみ	0.8%
ショアA硬度	95	色調	スカイブルー
寸法変化	-0.04%		

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております) <https://yamahachi-dental.co.jp/>

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764

Home Page <https://yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp