

ジルコニア ニケイ酸リチウム 研削研磨 キャンペーン

2025 7/22(Tue) ▶ 9/19(Fri)

ジルコニアやニケイ酸リチウムの形態修整、
仕上げ研磨におすすめの研削材を特別価格でご提供します。
是非この機会にお求めください。

研削・研磨ステップを動画でご紹介

研削・研磨材には製品ごとにそれぞれ
特長があり、作業にあったものを正しく
選び、使い方をすることで作業の効率化や
品質の向上に繋がります。
そこで、各ステップをわかりやすく
ご紹介した動画を作成しました。
是非、日々の作業にお役立てください。



カーボランダムポイント



ビトリファイドダイヤ



まずは
コチラ!

形態修整から 最終仕上げまで 松風ジルコニア 研磨キット

ジルコニア・ニケイ酸リチウム
製補綴装置の口腔内における
形態修整から最終仕上げ研磨
を行えるキットです。



形態修整に

ビトリファイドダイヤ

ダイヤモンドポイントのような研
削力を持ちながら、カーボラン
ダムポイントのような滑らかな
切削感。硬度の高いジルコニ
ア、ニケイ酸リチウムをスムーズ
に研削していただけます。



中仕上げから 最終仕上げに

グロスマスター ZR

ダイヤモンド砥粒を含有したゴ
ム製研磨材。ミディアム→ファ
インの2ステップで効率よく研
磨ができます。



最終仕上げに ワックスタイプの ジルグロス

除去性、ブラシへの塗布性にす
ぐれた飛散しにくいワックスで
す。短時間でキズを取り、艶や
かな表面性状に仕上がります。



ジルコニア・ニケイ酸リチウム 鏡面研磨へ おすすめの研削・研磨ステップ

形態修整

中仕上げ

最終仕上げ

松風 ビトリファイドダイヤ

グロスマスター ZR ミディアム

ジルグロス
or
グロスマスター ZR ファイン

松風ジルコニア研磨キット

※当キャンペーンは数量限定です。期間中でも限定数に達し次第、キャンペーンを終了させていただきますので、お早めにご用命ください。

注文書 ジルコニア研削・研磨キャンペーン 2025年7/22(火)～9/19(金)

*表中の「—」はラインアップがございませんので、ご注文いただけません。予めご了承ください。

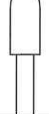
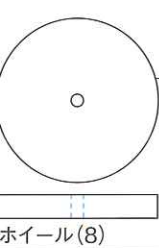
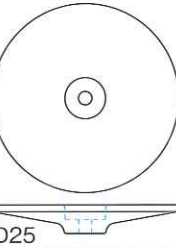
松風 ビトリファイドダイヤ

歯科用研削器具材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000226

									
FG	—	—	—	箱	箱	—	—	—	—
CA	—	—	—	—	箱	箱	—	箱	—
HP	箱	箱	箱	—	箱	箱	箱	箱	箱
標準医院価格	2本¥4,820	2本¥3,100	3本¥4,820	3本¥3,100	3本¥3,100	3本¥3,100	3本¥3,100	3本¥3,100	2本¥4,820
特別医院価格	特別価格								

グロスマスター ZR

歯科用ゴム製研磨材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000296

						
CAミディアム	箱	箱	—	—	—	—
CAファイン	箱	箱	—	—	—	—
HPミディアム	箱	—	箱	箱	箱	箱
HPファイン	箱	—	箱	箱	—	—
標準医院価格	3本¥4,500		3本¥5,000	2本¥5,500	1個¥5,500	1個¥5,000
特別医院価格	特別価格					

※ホイール(8)、D25はマンドレル(HP)が1本付属します。

ジルグロス

歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000269

20g	40g
個	個
¥11,550	¥15,400
特別価格	

松風ジルコニア研磨キット

歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000297

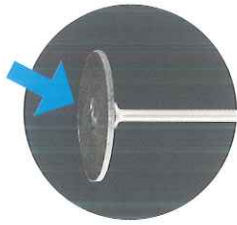
<キット内容>

松風ビトリファイドダイヤ CA 28 1本、
松風ビトリファイドダイヤ CA 29 1本、
グロスマスター-ZR ミディアム CA 28 1本、
グロスマスター-ZR ミディアム CA 29S 1本、
グロスマスター-ZR ファイン CA 28 1本、
グロスマスター-ZR ファイン CA 29S 1本、
パーステーションII(ブルー) 1個

個
標準医院価格 ¥7,000
特別価格

ラボサイドにおススメ新形態“D25”

D25は中心近くは厚みがあり外側に向けて薄くなる形態をしているため、先端を薄くドレッシングしても研磨圧に負けない弾力性を有し、先端付近をたわませながら側面を補綴装置の形態にフィットさせることができます。



D25を薄くドレッシングすることで、側面を使いながら切り込みの深い上部や下部鼓形空隙などにも形態修整を兼ねて研磨ができます。

貴医院名 / 貴技工所名

ご住所 〒

TEL.

()

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

価格は2025年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、弊社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

● 本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11 お客様サポート窓口(075)778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く) www.shofu.co.jp

● 支社: 東京(03)3832-4366 ● 営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/京都(075)757-6968/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

2506CFJSw-01