

技工編

👉 技工士さん必見!

クリストバライト3kg単品 ご愛顧感謝キャンペーン

期間 数量限定
2025年10月21日～11月20日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリストバライト3kg単品 ご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。



表面性状の滑沢性を向上させ、ツヤのある鑄造体へ。
後工程の研磨時間短縮に繋がります。

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF-Ex 3kg 1箱を

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

■標準価格

3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050770

クリストバライトは急速加熱による短時間鑄造法に使用可能です。
リングファーンスを700℃に設定しておけるので、昇温・降温のタイムロスがなく、作業時間を短縮できます。

特別価格にてご提供!

●販売名 クリストバライト FF-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
●医療機器届出番号 15B1X10001302104 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)



鑄型強度が強く埋没材の面が細かいため、鑄造面がきれいになる埋没材

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト フォルテ-Ex 3kg 1箱を

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050790

特別価格にてご提供!

線硬化膨張(0.80%)と線熱膨張(0.90%)のバランスと安定性により、メタルコアから、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの鑄造体を得ることができます。

●販売名 クリストバライト フォルテ-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302106 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)



埋没20分後の急速加熱可能

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF20-Ex 3kg 1箱を

20分
タイプ

※埋没後20分の
急速加熱が可能。

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050780

特別価格にてご提供!

適度な流動性を兼ね備え、鑄造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、焼き圧縮強さを向上させることで(0.90MPa)、「バリ」「崩れ」の発生を抑制、良好な鑄造体の製作が可能です。

●販売名 クリストバライト FF20-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302105 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)



タイトな適合性を追求した埋没材

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト ベストフィッター 3kg 1箱を

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050795

特別価格にてご提供!

該当規格 JIS-T6601:2013 (線硬化膨張(%)は JIS-T6601:2005)


混水量(mL) <約100gに対して>	硬化時間(分)	線硬化膨張(%) <30分後>	線熱膨張(%)	総膨張率(%)	圧縮強さ (2時間後)Mpa
35	11	0.45	1.12	1.57	7.5

●販売名 クリストバライト ベストフィッター ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302107 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスⅠ)

クラレノリタケデンタルのクリストバライト埋没材は
硬化時間、膨張率により鑄造精度やフィット感の調整が可能です。




ノリタケ
クリストバライトシリーズ
総膨張率の比較表
(水/粉の比率 標準35%)


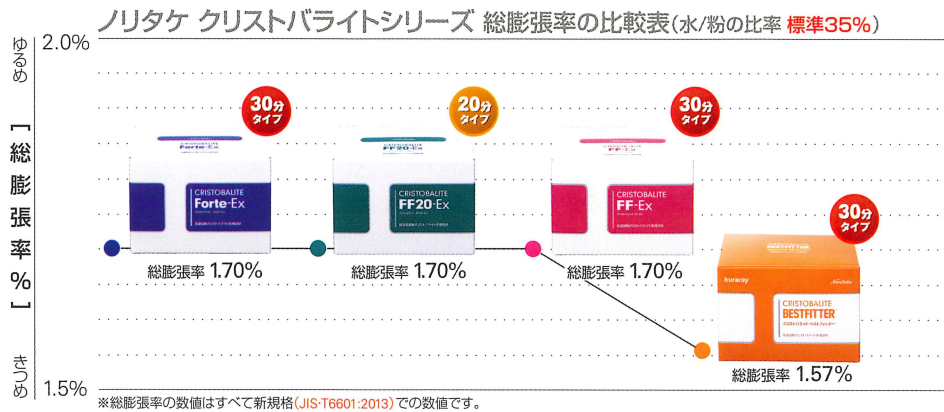


クリストバライト フォルテ-EXを使用した鑄造後

適合精度

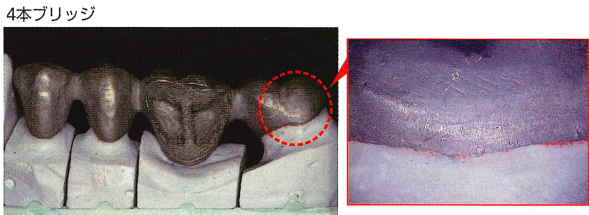

鑄造面

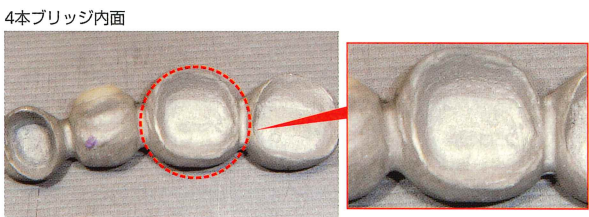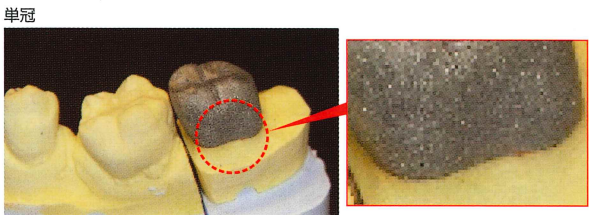

セラミックリボン

- ロックウール製のリボンです。リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)は含有しておりません。
- 適切な吸水力を持ちます。
- クリストバライトFF-EX、FF20-Fx、フォルテ-EX、ベストフィッターと組み合わせてお使いいただくのに最適です。
- セラミックリボンの厚みは0.7mmです。

■標準価格	
幅30mm×10m	2,900円 202050940
幅30mm×30m	6,400円 202050941
幅40mm×10m	3,800円 202050942
幅40mm×30m	8,300円 202050943
幅50mm×10m	4,200円 202050944
幅50mm×30m	8,700円 202050945



石膏模型表面硬化材
ノリタケ ストンハードナー

- 被膜を作らずに模型表面を強化させ、歯型を保護します。
- 石こう面を滑沢にするので、陶材用分離材の下地として分離効果を向上させます。

容量 100mL
■標準価格 3,600円 202280925



ノリタケワックスクリナー

- 歯科用ワックス及びゴム製印象材の表面処理材です。
- 霧の細かいミストタイプでスレ性に大変優れており、均一に塗布することができます。
- 埋没材・石膏とのなじみも良いので、滑沢な鑄造体及び模型を作製することができます。

ポンプ式 スプレータイプ(ボトル)
容量 120mL
■標準価格 1,600円 202280923

補充用
容量 300mL
■標準価格 3,100円 202280924



ワックス分離材
ノリタケ ワックスセップ

- 保温性に優れており、安定した粘性・適度な被膜厚さを保持します。
- 石膏・金属・プラスチック等の歯型材に使用可能です。

容量 120mL+20mL筆付
■標準価格 2,000円 202280920
容量 300mL
■標準価格 3,000円 202280921



●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2025年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com