

ミーレ PWD シリーズ キャンペーン

ジェットウォッシャー

期間中、ミーレ ジェットウォッシャー PWD シリーズご購入時に、
ミーレ ジェットウォッシャー PWD アクセサリーセットを特別価格にてご提供いたします。

循環水量
500ℓ/分の
強力洗浄

本体とアクセサリ
セットで購入すると
20.7万円 (税別)
おトク! 得

受注期間

2026.

3.23 (月)

6.19 (金)

※2026年9月18日(金)までに
取付が完了する場合に限り、
キャンペーン特典が適用されます。

ミーレ ジェットウォッシャー
PWD8692

ドライプラス (ホットエアー乾燥機能)

熱風乾燥の温度が100℃前後なので、
タービンハンドピースや
コントラアングルも熱による損傷を
受けるリスクが小さくなっています。

ミーレ ジェットウォッシャー
PWD8682

エコドライ (余熱乾燥機能)

洗浄槽の温度が70℃以下になると
ドアが自動的に開き、余熱乾燥を行います。

PLUS


ミーレ ジェットウォッシャー
PWD アクセサリーセット

PLUS

セット内容

- ・A105/1 上段ラック HP 洗浄機能付
- ・A151 下段ラック
- ・ワイヤーメッシュバスケット A-146 × 2個
- ・ワイヤーメッシュバスケット S-379 × 1個


商品コード 46801230

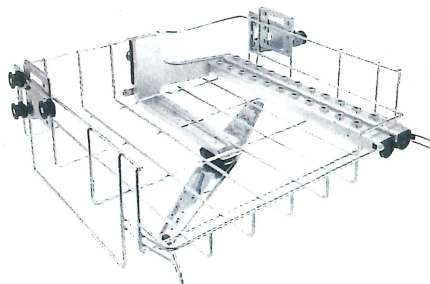


A105/1 上段ラック HP 洗浄機能付




ワイヤーメッシュバスケット S-379
(ハンドルツキバスケット)

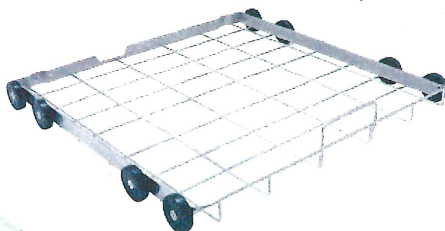

A151 下段ラック

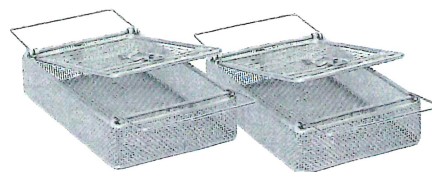

ワイヤーメッシュバスケット A-146
(蓋ツキバスケット)

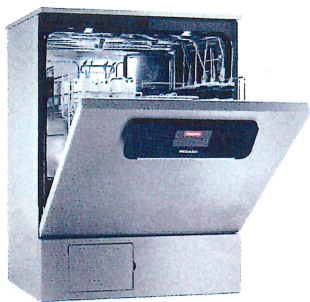


Vario TD プログラム

Vario TDプログラムは、医療機器の再生処理に関する国際規格「ISO 15883」に適合した、洗浄および消毒のための標準プログラムです。

このプログラムでは、まず低温の水による予備洗浄を行い、その後、洗剤を用いて55℃で5分間の本洗浄を実施します。最終段階では、90℃の熱水を使用して5分間の消毒を行います。


ミーレ ジェットウォッシャーは、このVario TDプログラムを採用しており、医療機器の確実な洗浄および消毒に適しています。

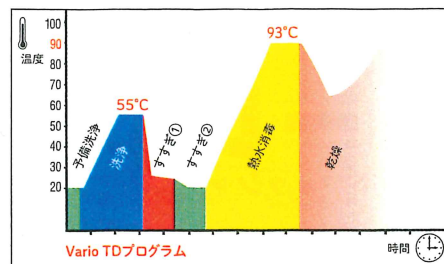

製品詳細


製品名	ミーレ ジェットウォッシャー PWD8692	ミーレ ジェットウォッシャー PWD8682
循環ポンプ能力	500ℓ/分	
外形寸法	【天板付】 W600×D600×H835 【天板無】 W600×D600×H820	
電源電圧	3相 200V(20A) 50Hz or 60Hz	
給水	3/4inch 1~8bar	
排水	2inch SGP ※排水時は、高温水が排水されますので、排水温度低減タンク（排水トラップ）をご使用ください。	
重量	約 81 kg	約 74 kg
乾燥方式	ドライプラス (スチームコンデンサー+内蔵型ドライヤーによる熱風乾燥)	エコドライ (スチームコンデンサー+オートドアオープンによる余熱乾燥)
洗剤の供給	液体洗剤、自動供給システム内蔵	
軟水化装置	内蔵	
製造販売届出番号	13B2X10362000022 一般医療機器	13B2X10362000020 一般医療機器

見やすく、迷わない。タッチパネル搭載

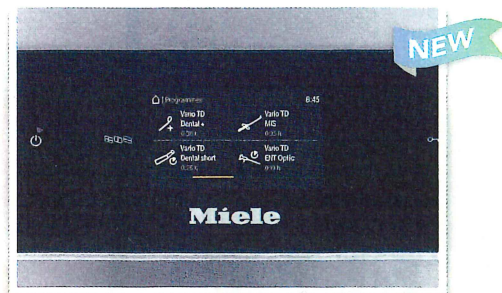

複雑な操作もワンタッチで。
タッチパネル搭載で、視覚的にわかりやすい操作と
確実なプロセス管理が可能に。

庫内の状態がひと目でわかる！安心のLEDライト

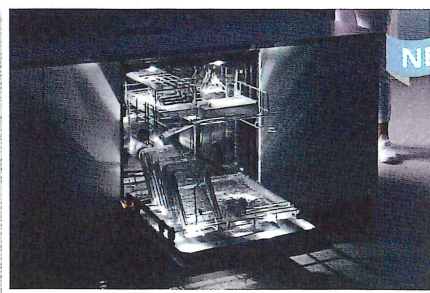

明るい庫内で、器具のセットミスや見落としを防止。
一つひとつの作業が、よりスマートに。

洗浄・消毒から滅菌へ - 理想的な感染予防サイクル -



治療 → 器具の汚染

予備洗浄 → 洗浄 → すすぎ① → すすぎ② → 熱水消毒 → 乾燥



保管

クラスBオートクレーブ リサ
『クラスBオートクレーブ リサ』は、ヨーロッパ規格 EN13060 に適合した高性能オートクレーブです。
医療機器認証番号 228ALBZX00008000
管理医療機器 特定保守管理医療機器


滅菌

ヒートシーラー Seal2
EN/ISO 規格に適合した幅 12mm のシーリングがたった 2 秒で完了します。



包装

注油

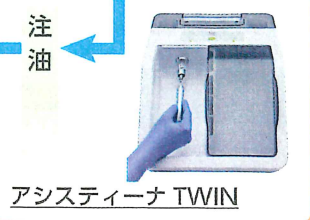

Miele

製造業者 Miele & Cie. KG
製造販売業者 ミーレ・ジャパン株式会社

HAKUSUI

札幌 | 札幌市中央区北4条西20-2-1 Nord 420BLD1階 (011)616-5814
関東北 | さいたま市南区南浦和3-34-2 (048)884-3951
東京 | 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12階 (03)5217-4618
名古屋 | 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2階 (052)733-1877
本社 | 大阪府大阪市淀川区新高1-1-15 (06)6396-4400
広島 | 広島市南区西蟹屋3-2-1 日通ビル1階 (082)207-2870
福岡 | 福岡市博多区博多駅東2-18-30 八重洲博多ビル5階 (092)432-4618
白水貿易株式会社 <https://www.hakusui-trading.co.jp/> 2026.01.13,000 K08