

ネビィさんまちがい探し!!

このネビィさんと、  
「PPEキャンペーン」チラシの  
表紙のネビィさんに3つの  
違いがあるよ!  
答えは「PPEキャンペーン」  
チラシの裏面を見てね!

# ヒューフレディ スクレーラー・検査 キャンペーン!

対象期間:2026.4/21(火)▶6/19(金)

キャンペーン対象商品は  
**特別価格**にてご提供いたします。  
是非ご活用ください。

現在一部の製品につきましては、  
ご注文を多くいただいているため、  
お届けまで時間を要する製品がございます。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。  
ご購入の際はお出りの歯科商店に注文してください。



ヒューフレディキャラクター  
Nevi(ネビィ)

5つの質問で  
グレーシー  
キュレットが  
簡単に選べるよ!

LINE グレーシーキュレット  
かんたんセレクト



ヒューフレディキャラクター  
Sidekick(サイドキック)

※上記製品左上から PCVNCKIT6SAS17/18XE2、MIR5DSDH、MH6

## 掲載製品

- グレーシーキュレット
- シングルスクレーラー
- ユニバーサルキュレット
- インプラントスクレーラー チタン
- インプラケアII
- カラービュープローブ
- HDミラー・  
ロジウムコーティングミラー
- エクスプローラー(探針)
- カラーコードプローブ
- ピンセット
- インストゥルメントシャープニング
  - ・サイドキック
  - ・ダイヤモンドシャープニングカード
  - ・デュアルストーン

# HARMONY™

## ハーモニー エルゴノミック スケーラー

Designed with TrueFit™ Technology

### 歯牙に加わる圧力を40.9%低減※

※ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

ハーモニー エルゴノミック スケーラー及びキュレットは、スケーリング時に歯牙に加わる圧力を小さくできるため、患者様の快適さを高め、術者の疲労も軽減することができます。

表1: スケーリング時に歯牙に加わった圧力の平均値

ハンドルの種類	ピーク圧時点の平均値 (N)	ハーモニー エルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー (#XE2)	1.20	-
角柄 (#2)	2.03	40.9%



### シャープさがさらに長持ち! コーティングなしの高性能!!

刃物の調査機関CATRA (Cutlery and Allied Trades Research Association) の試験※1結果において、エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカuttingエッジが試験用のシリコンストリップに加えた圧力は、開封時に約6ニュートン(約600g)、500回のストローク後も約7ニュートン(約700g)という結果でした。エバーエッジ (EverEdge™) 2.0のカuttingエッジが付与されたハーモニー (Harmony™) エルゴノミック スケーラーはシャープさが持続するため、軽い力で効率よくスケーリング操作ができ、術者は疲れにくく、患者様の負担も軽減されます。

※1: 測定用に調整されたシリコンストリップにブレードを反復して押し当て、ストリップを突き抜いた際の圧力を測定(加えられた圧力が低いほどブレードが鋭利なことを示し、ストロークによってブレードの鋭利さが低減すると、より多くの圧力加える必要があるためニュートンの数値は増加する)

### あらゆる方向から確実に 素早い把持が可能

シリコングリップが従来品と比較して30%長くなり、より確実且つ鋭敏に把持が可能になりました。グリップ部分の幾何学模様はあらゆる方向から把持してもしっかりと操作できるように設計されています。

※従来のIMSシグネチャーグリップはサイズが異なるためご使用いただけません。

### グレイシーキュレット/シクルスケーラー 一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)

		エバーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)	
<p>ブレード幅 ブレード断面図 ブレードの長さ</p> <p>ブレードの形状 シャングの長さ シャングの形状</p> <p>スタンダード: 細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スケーリング後の仕上げとして細かなスケーリングやルートプレーニングに使用。 リジッド: スタンダードシャングに比べて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。</p>		<p>作業部の材質</p> <p>ヒューフレディグループがキュレット・スケーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。</p>	
<p>ハンドルのオプション</p>		<p>ハーモニー (Harmony™) #XE2</p> <p>人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。</p> <p>6,600円</p>	<p>エバーエッジ (EverEdge™) #9E2</p> <p>人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着)</p> <p>6,200円</p>
グレイシーキュレット	オリジナル 現在世界のグレイシーキュレットの基準となっている、グレイシー博士が考案した当初のシャング・ブレードの長さ・幅。	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)
	アフターファイブ 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。オリジナルと比較し第一シャングが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
	ミニファイブ 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。ブレードはオリジナルとアフターファイブの半分の長さで、狭いポケットや根分岐部での使用に適用。オリジナルと比較し第一シャングが3mm長く、ブレードが10%細いため、歯肉への挿入が容易で組織への負担を軽減。	スタンダード 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)
	マイクロミニファイブ (シャングが細くて硬いリジッドタイプ) 5mm以上の深い歯周ポケットや根面に到達。シャングとブレードの長さは、ミニファイブと同等だが、幅がオリジナルと比較し30%細いため、歯肉への挿入がさらに容易で組織への負担を軽減。	リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14	リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14
スケーラー	ネビィ 衛生士用 前歯用、臼歯用	1, 2, 3, 4 H5/33, H6/H7 204S, 204SD, モース 0/00	1, 2, 3, 4 H5/33, H6/H7 204S, 204SD, モース 0/00

# 把持力が57.3%低減\*

※ヒューフレディグループ製角柄ハンドル(#2)との比較での平均値

軽い力でインスツルメントを把持できるため、反復動作による手の疲労や手根管症候群などのリスクを軽減することができます。

表2: スケーリング時の親指・人差し指・中指の総把持力の平均値 (歯牙に加わった圧力が最大値時)

ハンドルの種類	親指、人差し指、中指の総把持力の平均値 (kPa)	ハーモニーエルゴノミック スケーラーハンドルとの差 (増分)
ハーモニー(#XE2)	29.75	—
角柄(#2)	69.69	57.3%

# 280万を超えるデータを収集

(世界各国のDHの方々が参加した試験結果の合計)

スケーリング時の手の動きをデータ化して、より把持しやすいようにデザインされたハンドル



## 重すぎず軽すぎない、『バランスの良い』重さのハンドル

ハーモニー エルゴノミック スケーラーのハンドルは、エパーエッジハンドル(#9E2)と同様『バランスの良い』重量感で、砂時計の形状をしたハンドルは術者の手によりフィットするよう設計されています。

## 信頼感のあるメタルハンドル

耐久性が高く洗浄が容易なメタルハンドルを採用しています。滑りにくい2重らせんデザインのハンドルは、手指感覚を向上、疲労を軽減します。



シャープさがさらに長持ち!!  
コーティングなしの高性能

### イムニティスチール (Immunity Steel™)

ヒューフレディグループで独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙のバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。

#### レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2



レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スケーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着)

6,000円

#### サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7



シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着)

5,800円

#### サテンスチール (Satin Steel™) #6



力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことができる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。

5,600円

#### 角柄 #2



8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。

5,200円

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、9/10、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)

#### スタンダード/リジッド

1/2、3/4、5/6、7/8、11/12、13/14、15/16 (FIT11/12)

1、2、3、4

H5/33、H6/H7

204S、204SD、モース 0/00


1、2

H5/33、H6/H7

204SD

※標準価格は全て税抜

## グレーシーキュレット

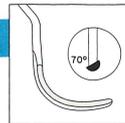

15/16 (FIT11/12)、17/18 (FIT13/14)はシャングの角度を大きくしているため、対合歯に干渉される事なく、より良くフィットします。




通常の11/12

通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャングを固定することが困難な場合があります。



15/16 (FIT11/12)

15/16 (FIT11/12)はシャングの角度を大きく取ったことにより、インストゥルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。

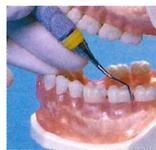

通常の13/14


通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。



17/18 (FIT13/14)

17/18 (FIT13/14)はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

## シクルスケーラー

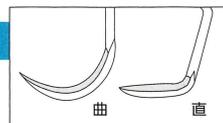

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に…  
医院に1本は必需品です!



### ネヴィ1(前歯用)★

コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。

### ネヴィ2(臼歯用)

大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。

### ネヴィ3(臼歯用)★

コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスケールリング向き。

### ネヴィ4(臼歯用)

ネヴィシリーズで最大サイズ且つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。

### 衛生士用 H5/33

非常に薄い曲と直のブレードのコンビネーション。前歯の歯頸部や歯間部のスケールリングに適用。

### 衛生士用 H6/H7

超薄型コントラアングルのデザイン。隣接歯間部に適用。シャングのアングルにより前歯および小臼歯に対応。

### 204S

臼歯歯肉縁上の隣接歯間部用。

### 204SD

コントラアングルのシャングデザインにより、臼歯部近遠心面に適用。

### モース 0/00


叢生歯や細かい操作に向いている前歯部用の小型ブレード。

ヒューフレディで克服しよう!  
苦手シリーズもチェックしてね!  
(YouTube)

15/16 17/18 ネヴィ1 ネヴィ3



## ユニバーサルキュレット

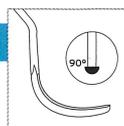

### マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



### ランガー 1/2 ★

下顎臼歯用

### ランガー 3/4

上顎臼歯用

### ランガー 5/6

前歯用

### ランガー 17/18

上下顎臼歯用

### コロンビア大学型 2R/2L

### コロンビア大学型 4R/4L

臼歯部で高度に沈着してしまった歯石の除去に特に適用。

### コロンビア大学型 13/14

浅いポケットの歯肉縁上・縁下の歯石除去、小児にも適用。



### ランガー ミニファイブ 1/2 ★

下顎臼歯用



### ランガー ミニファイブ 3/4

上顎臼歯用



### ランガー ミニファイブ 5/6

前歯用



### ランガー ミニファイブ

- 第一シャングは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ (Mini Five™) はブレードの長さが通常の半分サイズの、狭いポケットや根分岐部に適用。

※お求めの規格のハンドルの種類は7ページの注文書をご確認ください。


## グレーシーキュレット バイオジェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!
- 歯周治療の世界的名医 コーテリーニ先生ご考案!

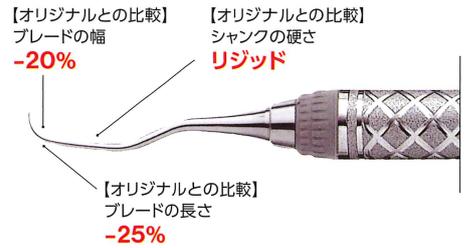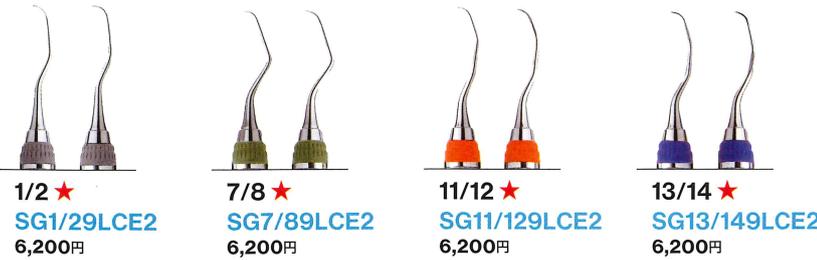

※グレーシーキュレット バイオジェントのハンドルはエバーエッジ(#9E2)のみになります。

## インプラントスケーラー チタン

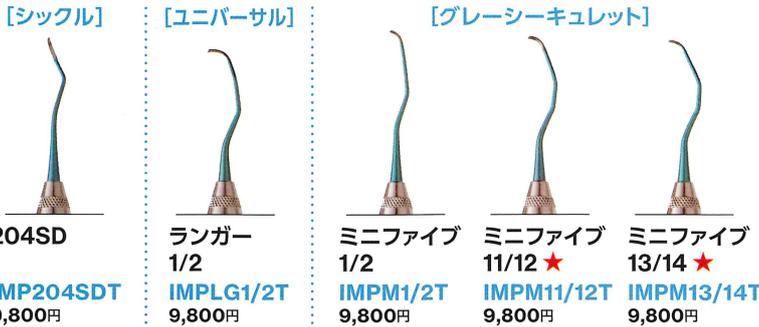

- 視認性の向上: 通常のスケーラーとの違いを一目で識別できるティール色陽極酸化チタンを採用
- シャープな切れ味を実現: 陽極酸化処理後に精巧に研磨し鋭利に仕上げたカッティングエッジ
- シャーピング可能: シャーピングを行うことで、シャープさを復元することが可能 (チタンスケーラーのみに使用するストーンをご準備いただくことを推奨)
- 機能を強化: インプラントの歯石やバイオフィルムの除去などのメンテナンスが可能
- 人間工学的な使いやすさに配慮: 太めでウォーターウェーブ柄のしっかりと把持出来るサテンスチールハンドルを採用



## インプラケアII

チタン製のインプラント体やアバットメントを傷つけずに、プラークを除去できる、ディスポーザブルのレジンスケーラーです。(オートクレーブ滅菌してからご使用ください。)



**[ユニバーサルキュレット]**  
ブレード相当部の先端が丸みを帯びているので、インプラント周囲の全てのエリアの清掃が行えます。



ランガー 1/2 ★    コロンビア大学型 4R/4L  
キット **IMPLLG1/26**    キット **IMPL4R/4L6**  
チップ **IMPLLG1/2**    チップ **IMPL4R/4L**

キット (ハンドル1本&チップ12組)    **11,600円**  
チップ (チップ12組)    **9,900円**


**[シックススケーラー]**  
ブレード相当部は先端に向かって細くなっており、歯冠修復部の除石に適用です。



衛生士用 H6/H7    臼歯用 204S  
キット **IMPLH6/76**    キット **IMPL204S6**  
チップ **IMPLH6/7**    チップ **IMPL204S**

ハンドル (単品) #6 **IMPHDL6**    **2,000円**

## カラービュープローブ

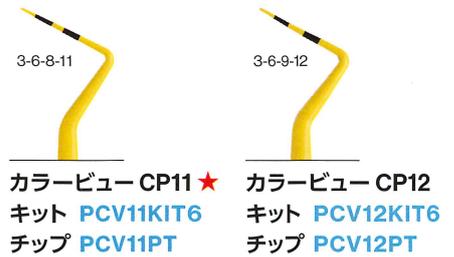

カラービュー CP11 ★    カラービュー CP12  
キット **PCV11KIT6**    キット **PCV12KIT6**  
チップ **PCV11PT**    チップ **PCV12PT**



カラービュー UNC12 ★  
キット **PCVNKIT6**  
チップ **PCVUNC12PT**

キット (ハンドル1本&チップ7入)    **8,900円**  
チップ (チップ12入)    **13,000円**

ハンドル (単品) **PH6**    **2,300円**

## HDミラー・ロジウムコーティングミラー

両面タイプはチークリトラクターとして使用しながら口腔内を照らすことが可能。ミラートップはダイレクトミラーのため2重3重に見えない。30°のオフセット。(176°C以下でオートクレーブ可)

	片面3 φ20mm	片面4 ★ φ22mm	片面5 φ24mm	両面4 ★ φ22mm	両面5 φ24mm
	1入 <b>MIR3HD</b> 1,500円	1入 <b>MIR4HD</b> 1,500円	1入 <b>MIR5HD</b> 1,500円	1入 <b>MIR4DSHD</b> 1,700円	1入 <b>MIR5DSHD</b> 1,700円
	3入	3入 <b>MIR4HD3</b> 4,000円	3入 <b>MIR5HD3</b> 4,000円		
HD コーティング	6入			6入 <b>MIR4DSHD6</b> 9,700円	6入 <b>MIR5DSHD6</b> 9,700円
	12入	12入 <b>MIR4HD12</b> 15,500円	12入 <b>MIR5HD12</b> 15,500円		
ロジウム コーティング	3入	3入 <b>MIR4/3</b> 2,900円	3入 <b>MIR5/3</b> 2,900円	3入 <b>MIR4DS/3</b> 4,000円	3入 <b>MIR5DS/3</b> 4,000円

### HDミラーとは...

- ロジウムコーティングのミラーより明るさが**38.5%**向上\*
  - 他の表面ミラーより、明るさが**50%**向上\*
  - 傷がつきにくく、長時間使用できる
- ※社内資料

### コーンソケットハンドル



#1 **MH1**    2,300円

#6 **MH6**    2,700円

#7 **MH7**    2,700円



## エキスプローラー (探針)

特殊配合スチール合金「デュラスポンド」を使用、柔軟性と弾力性、さらに従来品よりも高い触覚感度を発揮し、高精度の診断を実現します。

この形状に曲げても  
折れないほどの弾力性!!



- 3A 歯肉縁上用
- #6 EXS3A6 2,300円
- #7 EXS3A7 2,500円



DURASPOND™  
(デュラスポンド)

グレーシーキュレット11/12と同型の探針で  
歯肉縁下の歯石探知におすすめ

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、  
より深いポケットの探知におすすめ



- 11/12 根面用
- #6 EXD11/126 3,100円
- #7 EXD11/127 3,300円

特に臼歯部隣接面のポケット内の歯石探査に適しています。  
1本で全顎の探査ができるデザインです。




- アフターファイブ 11/12 深い根面用
- #6 EXD11/12A6 3,100円
- #7 EXD11/12A7 3,300円

EXD11/12より第一シャンクが3mm長いため、  
より深いポケットの歯石探査に適しています。



- 5 歯肉縁上及び縁下用
- #6 EXD56 3,100円
- #7 EXD57 3,300円

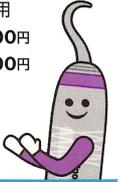

## カラーコードプローブ

繰り返し使用しても、消えにくいマーキング (Qulix™) を採用しています。

圧倒的なマーキングの  
見やすさ!!!



- ネイバース Q2N
- #6 PQ2N6 6,400円
- #7 PQ2N7 6,600円
- #31 PQ2N 6,200円



基本の3-3-2-3の  
プローブ



3-6-8-11

CP11


- #6 PCP116 4,400円
- #7 PCP117 4,600円
- #30 PCP11 4,200円



3-6-9-12

CP12


- #6 PCP126 4,400円
- #7 PCP127 4,600円
- #30 PCP12 4,200円

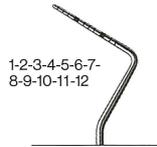

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12

CPUNC12

- #6 PCPUNC126 4,400円
- #7 PCPUNC127 4,600円
- #30 PCPUNC12 4,200円

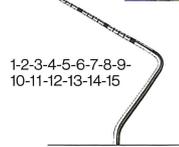

1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15

CPUNC15

- #6 PCPUNC156 4,400円
- #7 PCPUNC157 4,600円
- #30 PCPUNC15 4,200円

【ハンドル 略称】 #6…サテンスチール #7…サテンスチールカラー(黒いシリコングリップ付) #30/#31…細丸

## ピンセット



コーク型18JSII ギザなし DP18JS-II 3,600円



ピンセット汎用 DPU17 4,200円

## インストゥルメントシャープニング

### 電動タイプ

#### サイドキック ★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。

SDKKIT  
72,600円



サイドキックの  
使い方を動画で  
CHECK!!



### カードタイプ

#### ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持!  
超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応!  
クレジットカードサイズのシャープナー!!



超細目  
(EXTRA FINE)  
DSCXFINE  
7,000円

細目 ★  
(FINE)  
DSCFINE  
7,000円

中目  
(MEDIUM)  
DSCMED  
7,000円

### ストーン

#### デュアルストーン ★

極度に鈍化したスクレーラーの研磨や修正用の粗目の青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面をひとつに組み合わせたセラミックストーン。

SSDGRIT  
5,200円



スクレーラーやキュレットの  
ハンドシャープニングの  
方法についてはこちら!



商品名		ハンドルの種類 標準価格	ハーモニー #XE2 6,600円	数量	エパーエッジ #9E2 6,200円	数量	レジン8カラー #C8E2 6,000円	数量	サテンスチールカラー #7 5,800円	数量	サテンスチール #6 5,600円	数量	角柄 #2 5,200円	数量		
オリジナル	スタンダード	1/2	SG1/2XE2		SG1/29E2		SG1/2C8E2		SG1/27		SG1/26		SG1/2			
		3/4	SG3/4XE2		SG3/49E2		SG3/4C8E2		SG3/47		SG3/46		SG3/4			
		5/6	SG5/6XE2		SG5/69E2		SG5/6C8E2		SG5/67		SG5/66		SG5/6			
		7/8	SG7/8XE2		SG7/89E2		SG7/8C8E2		SG7/87		SG7/86		SG7/8			
		9/10	SG9/10XE2		SG9/109E2		SG9/10C8E2		SG9/107		SG9/106		SG9/10			
		11/12	SG11/12XE2		SG11/129E2		SG11/12C8E2		SG11/127		SG11/126		SG11/12			
		13/14	SG13/14XE2		SG13/149E2		SG13/14C8E2		SG13/147		SG13/146		SG13/14			
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2		SG15/169E2		SG15/16C8E2		SG15/167		SG15/166		SG15/16			
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2		SG17/189E2		SG17/18C8E2		SG17/187		SG17/186		SG17/18			
	ドレッジ	1/2	SG1/2RXE2		SG1/2R9E2		SG1/2RC8E2		SG1/2R7		SG1/2R6		SGR1/2R			
		3/4	SG3/4RXE2		SG3/4R9E2		SG3/4RC8E2		SG3/4R7		SG3/4R6		SGR3/4R			
		5/6	SG5/6RXE2		SG5/6R9E2		SG5/6RC8E2		SG5/6R7		SG5/6R6		SGR5/6R			
		7/8	SG7/8RXE2		SG7/8R9E2		SG7/8RC8E2		SG7/8R7		SG7/8R6		SGR7/8R			
		9/10	SG9/10RXE2		SG9/10R9E2				SG9/10R7		SG9/10R6		SGR9/10R			
		11/12	SG11/12RXE2		SG11/12R9E2		SG11/12RC8E2		SG11/12R7		SG11/12R6		SGR11/12R			
		13/14	SG13/14RXE2		SG13/14R9E2		SG13/14RC8E2		SG13/14R7		SG13/14R6		SGR13/14R			
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16RXE2		SG15/16R9E2		SG15/16RC8E2		SG15/16R7		SG15/16R6		SGR15/16R			
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18RXE2		SG17/18R9E2		SG17/18RC8E2		SG17/18R7		SG17/18R6		SGR17/18R			
アフターファイブ	スタンダード	1/2	SRPG1/2XE2		SRPG1/29E2		SRPG1/2C8E2		SRPG1/27		SRPG1/26		SRPG1/2			
		3/4	SRPG3/4XE2		SRPG3/49E2		SRPG3/4C8E2		SRPG3/47		SRPG3/46		SRPG3/4			
		5/6	SRPG5/6XE2		SRPG5/69E2		SRPG5/6C8E2		SRPG5/67		SRPG5/66		SRPG5/6			
		7/8	SRPG7/8XE2		SRPG7/89E2		SRPG7/8C8E2		SRPG7/87		SRPG7/86		SRPG7/8			
		11/12	SRPG11/12XE2		SRPG11/129E2		SRPG11/12C8E2		SRPG11/127		SRPG11/126		SRPG11/12			
		13/14	SRPG13/14XE2		SRPG13/149E2		SRPG13/14C8E2		SRPG13/147		SRPG13/146		SRPG13/14			
		15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2		SRPG15/169E2		SRPG15/16C8E2		SRPG15/167		SRPG15/166		SRPG15/16			
		ドレッジ	1/2	SRP1/2RXE2		SRP1/2R9E2		SRP1/2RC8E2		SRP1/2R7		SRP1/2R6		SRPG1/2R		
			3/4	SRP3/4RXE2		SRP3/4R9E2		SRP3/4RC8E2		SRP3/4R7		SRP3/4R6		SRPG3/4R		
	5/6		SRP5/6RXE2		SRP5/6R9E2		SRP5/6RC8E2		SRP5/6R7		SRP5/6R6		SRPG5/6R			
	7/8		SRP7/8RXE2		SRP7/8R9E2		SRP7/8RC8E2		SRP7/8R7		SRP7/8R6		SRPG7/8R			
	11/12		SRP11/12RXE2		SRP11/12R9E2		SRP11/12RC8E2		SRP11/12R7		SRP11/12R6		SRPG11/12R			
	13/14		SRP13/14RXE2		SRP13/14R9E2		SRP13/14RC8E2		SRP13/14R7		SRP13/14R6		SRPG13/14R			
	15/16(FIT 11/12)		SRP15/16RXE2		SRP15/16R9E2		SRP15/16RC8E2		SRP15/16R7		SRP15/16R6		SRPG15/16R			
	ライヤルIII		スタンダード	1/2	SAS1/2XE2		SAS1/29E2		SAS1/2C8E2		SAS1/27		SAS1/26		SAS1/2	
				3/4	SAS3/4XE2		SAS3/49E2		SAS3/4C8E2		SAS3/47		SAS3/46		SAS3/4	
		5/6		SAS5/6XE2		SAS5/69E2		SAS5/6C8E2		SAS5/67		SAS5/66		SAS5/6		
		7/8		SAS7/8XE2		SAS7/89E2		SAS7/8C8E2		SAS7/87		SAS7/86		SAS7/8		
11/12		SAS11/12XE2			SAS11/129E2		SAS11/12C8E2		SAS11/127		SAS11/126		SAS11/12			
13/14		SAS13/14XE2			SAS13/149E2		SAS13/14C8E2		SAS13/147		SAS13/146		SAS13/14			
15/16(FIT 11/12)		SAS15/16XE2			SAS15/169E2		SAS15/16C8E2		SAS15/167		SAS15/166		SAS15/16			
17/18(FIT 13/14)		SAS17/18XE2														
ドレッジ		1/2		SAS1/2RXE2		SAS1/2R9E2		SAS1/2RC8E2		SAS1/2R7		SAS1/2R6		SAS1/2R		
		3/4	SAS3/4RXE2		SAS3/4R9E2		SAS3/4RC8E2		SAS3/4R7		SAS3/4R6		SAS3/4R			
		5/6	SAS5/6RXE2		SAS5/6R9E2		SAS5/6RC8E2		SAS5/6R7		SAS5/6R6		SAS5/6R			
		7/8	SAS7/8RXE2		SAS7/8R9E2		SAS7/8RC8E2		SAS7/8R7		SAS7/8R6		SAS7/8R			
		11/12	SAS11/12RXE2		SAS11/12R9E2		SAS11/12RC8E2		SAS11/12R7		SAS11/12R6		SAS11/12R			
		13/14	SAS13/14RXE2		SAS13/14R9E2		SAS13/14RC8E2		SAS13/14R7		SAS13/14R6		SAS13/14R			
		15/16(FIT 11/12)	SAS15/16RXE2		SAS15/16R9E2		SAS15/16RC8E2		SAS15/16R7		SAS15/16R6		SAS15/16R			
		ドレッジ	1/2	SMS1/2XE2		SMS1/29E2										
			7/8	SMS7/8XE2		SMS7/89E2										
11/12			SMS11/12XE2		SMS11/129E2											
シッフルスケラー	ネビィ	1前歯用	SCNEVI1XE2		SCNEVI19E2		SCNEVI1C8E2		SCNEVI17		SCNEVI1					
		2臼歯用	SCNEVI2XE2		SCNEVI29E2		SCNEVI2C8E2		SCNEVI27		SCNEVI2					
		3臼歯用	SCNEVI3XE2		SCNEVI39E2		SCNEVI3C8E2									
		4臼歯用	SCNEVI4XE2		SCNEVI49E2		SCNEVI4C8E2									
	衛生士用	H5/33	SH5/33XE2		SH5/339E2		SH5/33C8E2		SH5/337		SH5/336		SH5/33			
		H6/H7	SH6/7XE2		SH6/79E2		SH6/7C8E2		SH6/77		SH6/76		SH6/7			
	臼歯用	204S	S204SXE2		S204S9E2		S204SC8E2									
		204SD	S204SDXE2		S204SD9E2		S204SDC8E2		S204SD7		S204SD6		S204SD2			
	前歯用	モー ス 0/00	SM0/00XE2		SM0/009E2		SM0/00C8E2									
	ニハールキリシト	マッコール	17/18	SM17/18XE2		SM17/189E2										
			1/2	SL1/2XE2		SL1/29E2		SL1/2C8E2								
		ランガー	3/4	SL3/4XE2		SL3/49E2		SL3/4C8E2								
			5/6	SL5/6XE2		SL5/69E2		SL5/6C8E2								
			17/18	SL17/18XE2		SL17/189E2		SL17/18C8E2								
		コロンビア 大宇型	2R/2L	SC2R/2LXE2												
			4R/4L	SC4R/4LXE2		SC4R/4L9E2		SC4R/4LC8E2								
		ランガー ミニ ファイブ	13/14	SC13/14XE2		SC13/149E2		SC13/14C8E2								
			1/2			SL1/2MF9E2										
3/4					SL3/4MF9E2											
ハイオキシ ド	リジッド	5/6			SL5/6MF9E2											
		1/2			SG1/29LCE2											
		7/8			SG7/89LCE2											
		11/12			SG11/129LCE2											
					SG13/149LCE2											

**LINE**でもっと便利に、簡単に!

グレーシーキュレット  
かんたんセレクト!




ヒューフレディ スケーラー・検査キャンペーン 注文書

掲載製品全て特別価格!!

期間：2026年4月21日(火)～6月19日(金)

※標準価格は全て税抜

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量	
インプラント スケーラー チタン	204SD	IMP204SDT	9,800	
	ランガー 1/2	IMPLG1/2T	9,800	
	ミニファイブ 1/2	IMPM1/2T	9,800	
	ミニファイブ 11/12	IMPM11/12T	9,800	
	ミニファイブ 13/14	IMPM13/14T	9,800	
インプラケアII	キット ハンドル 1本 チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/26	11,600
		コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L6	11,600
		衛生士用 H6/H7	IMPLH6/76	11,600
		臼歯用 204S	IMPL204S6	11,600
	チップ 12組	ランガー 1/2	IMPLLG1/2	9,900
		コロンビア大学型 4R/4L	IMPL4R/4L	9,900
		衛生士用 H6/H7	IMPLH6/7	9,900
		臼歯用 204S	IMPL204S	9,900
	ハンドル(単品) #6	IMPHDL6	2,000	
	カラービュー プローブ	キット ハンドル 1本 チップ 7入	CP11	PCV11KIT6
CP12			PCV12KIT6	8,900
UNC12			PCVNCKIT6	8,900
チップ 12入		CP11	PCV11PT	13,000
		CP12	PCV12PT	13,000
		UNC12	PCVUNC12PT	13,000
ハンドル(単品)		PH6	2,300	
ミラートップ HD コーティング	片面 1入	3 (φ20mm)	MIR3HD	1,500
		4 (φ22mm)	MIR4HD	1,500
		5 (φ24mm)	MIR5HD	1,500
	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4HD3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5HD3	4,000
	片面 12入	4 (φ22mm)	MIR4HD12	15,500
		5 (φ24mm)	MIR5HD12	15,500
	両面 1入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD	1,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD	1,700
	両面 6入	4 (φ22mm)	MIR4DSHD6	9,700
		5 (φ24mm)	MIR5DSHD6	9,700
	ミラートップ ロジウム コーティング	片面 3入	4 (φ22mm)	MIR4/3
5 (φ24mm)			MIR5/3	2,900
両面 4入		4 (φ22mm)	MIR4DS/3	4,000
		5 (φ24mm)	MIR5DS/3	4,000

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量		
コーン ソケット ハンドル	#1	MH1	2,300		
	#6	MH6	2,700		
	#7	MH7	2,700		
エキス プロローパー	片頭	3A #6	EXS3A6	2,300	
		#7	EXS3A7	2,500	
	両頭	11/12 #6	EXD11/126	3,100	
		#7	EXD11/127	3,300	
		アフター ファイブ 11/12 #6	EXD11/12A6	3,100	
		#7	EXD11/12A7	3,300	
	5 #6	EXD56	3,100		
		#7	EXD57	3,300	
	カラー コード プローブ	両頭	#6	PQ2N6	6,400
			#7	PQ2N7	6,600
#31			PQ2N	6,200	
片頭		#6	PCP116	4,400	
		CP11 #7	PCP117	4,600	
		#30	PCP11	4,200	
		#6	PCP126	4,400	
		CP12 #7	PCP127	4,600	
		#30	PCP12	4,200	
		CPUNC 12 #6	PCPUNC126	4,400	
#7	PCPUNC127	4,600			
#30	PCPUNC12	4,200			
CPUNC 15 #6	PCPUNC156	4,400			
	#7	PCPUNC157	4,600		
	#30	PCPUNC15	4,200		
ピンセット		コーク型18JSII	DP18JS-II	3,600	
		ピンセット 汎用	DPU17	4,200	
サイドキック			SDKKIT	72,600	
ダイヤモンド シャープニング カード	超細目	DSCXFINE	7,000		
	細目	DSCFINE	7,000		
	中目	DSCMED	7,000		
デュアルストーン			SSDGRIT	5,200	

現在一部の製品につきましては、ご発注を多くいただいているため、お届けまで時間を要する製品もございます。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。

キャンペーンを実施していない地域がございます。予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2026年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。

こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値となります。ヒューフレディグループ製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

【製造販売元・製品に関するお問い合わせ先】

ヒューフレディ・ジャパン合同会社 **Hu-Friedy.co.jp**

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-13-10 プロステック秋葉原6F

Tel 03-4550-0660 【受付時間】9:00~17:00(土・日・祝祭日を除く)

【製造元】Hu-Friedy Mfg. Co., LLC

ヒューフレディ オフィシャルSNSでは様々な情報を発信しております。

Instagram



Facebook



YouTube



LINE



ネビとサイドキックの  
LINE スタンプ販売中!



■ 歯科医院名

■ お名前

■ ご住所 〒

TEL

【歯科商店名】