

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料 **健 保 適 用**

MSコート™ Hysブロック™ジェル トリプルパックキャンペーン

2026年 7月 21日 (tue) ~ 8月 20日 (thu)

数 量 限 定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、

ジェルタイプの知覚過敏抑制材料

「MSコート Hysブロックジェルトリプルパックキャンペーン」

を企画いたしました。

期間中、対象商品を特別価格にてご提供いたします。

ぜひ、この機会をご利用ください。

ダイレクト塗布

シリンジから
そのまま塗布可能



使いやすいシリンジ

フランジが
大きく
指を掛け
やすい

ジェルの
残量が見える

こすり塗り不要

ジェルを歯面に30秒間
静置するだけ

歯面にとどまりやすい


ジェルタイプなので垂れずにとどまる

Features 01

ホワイトニング時の知覚過敏抑制効果

ホワイトニング後の知覚過敏抑制にも高い効果が期待できます。


ホワイトニング前に塗布しても漂白効果を阻害しません。

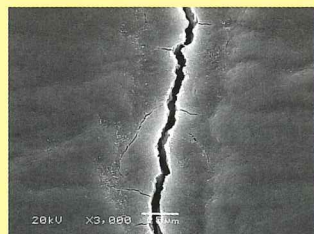

ホワイトニング後のマイクロクラック



「MSコート Hysブロックジェル」により封鎖を確認

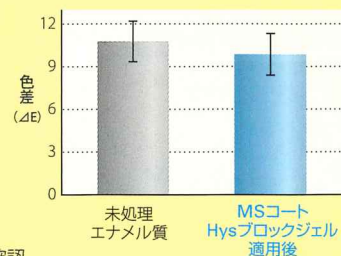

「MSコート Hysブロックジェル」適用後でも未処理エナメル質と同等の漂白効果が確認できる。

※サンメディカル社測定データ

製品の詳細ページも
ぜひご覧ください。



不安を和らげる
ポップなデザイン

MSコート™
Hysブロック™
ジェル

MSコート Hysブロックジェル 1本(3mL)

プラスチックニードル 10本(ニードルキャップ(グレー)1個付き)

標準価格 8,400円 204610726

注文数 個

お得な増量パック! /

キャンペーン
限定パック

MSコート™
Hysブロック™ジェル
トリプルパック

MSコート Hysブロックジェル 1本(3mL)×3

プラスチックニードル 30本(ニードルキャップ(グレー)3個付き)

標準価格 21,780円 204610740

注文数 個

特別価格にてご提供!

特別価格のお問い合わせについては、お出りのディーラーまでお願いします。

Hint!

適用部位が広い場合には？

幅広い箇所に塗布する場合は、
ラバーカップの使用をおすすめします！



Features02

MSコート™シリーズの実績を継承


高い知覚過敏抑制効果

MSポリマー


しゅう酸

カリウム塩


「MSコート Hysブロックジェル」はMSコートシリーズの高い知覚過敏抑制効果の継承に加え、カリウム塩を配合しました。ナノサイズのMSポリマーとしゅう酸が歯質のカルシウムと反応し、フッ化物とカリウム塩を含んだ保護被膜を形成します。さらに、ジェルタイプになったことで歯面にとどまりやすく、象牙細管を緊密に封鎖します。

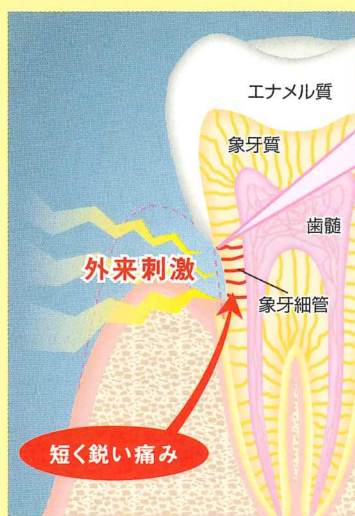


象牙細管

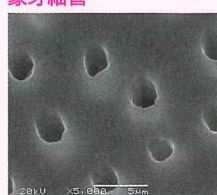


MSコート
Hysブロックジェル適用後

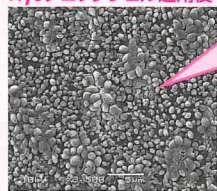

適用後の象牙質断面図 (塗布30秒後)

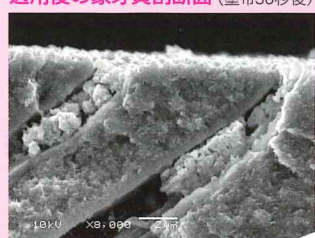

カルシウムと反応し、形成された保護被膜が象牙細管を緊密に封鎖します。

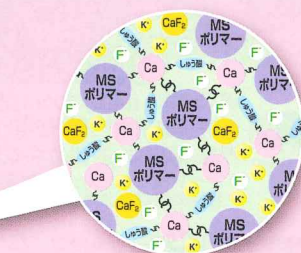

神経線維周囲のカリウムイオンの増加が神経伝達の阻害に有効であることが報告されています*。

*Kim S. Hypersensitive teeth: desensitization of pulpal sensory nerves, J Endod 12, 482-485, 1986.
*Peacock JM, Orchardson R. Effects of potassium ions on action potential conduction in A- and C-fibers of rat spinal nerves, J Dent Res 74, 634-641, 1995.

Features03


フッ化ナトリウムによるMSポリマー被膜の

耐酸性効果

フッ化ナトリウム


フッ化ナトリウムによりMSポリマー被膜の耐酸性がさらに向上します。それにより適用歯面の酸による脱灰を抑制します。

●コーラ飲料に10分浸漬後の適用歯面

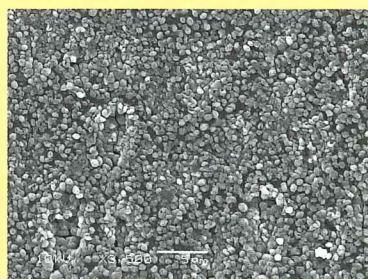

MSポリマー被膜の残存を確認

象牙質に対するフッ素の深さ方向への取り込み量

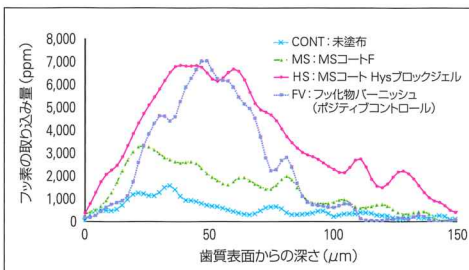

すべての材料でフッ素を取り込む傾向を示すことが明らかとなった。さらに、「MSコート Hysブロックジェル」は深部へフッ素を供給することが明らかとなった。

松田康裕ほか：フッ化物含有知覚過敏抑制材による象牙質表面の脱灰抑制効果
日歯保存誌60(6)：273～281, 2017

●販売名 MSコート Hysブロックジェル ●一般的な名称 歯科用知覚過敏抑制材料 ●医療機器認証番号 227AFBZX00084000 ●医療機器の種類 管理医療機器(クラスⅡ) ■「MSコート」・「MS Coat」・「Hysブロック」・「Hys Block」はサンメディカル株式会社の登録商標です。
●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。 ●ご使用に際しては、必ず添付文書等をお読みの上、正しくお使いください。 ●製品の仕様、デザインにつきましては予告なく変更になることがあります。
●掲載商品の標準価格は2026年7月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。 ●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。

製造販売 サンメディカル株式会社
滋賀県守山市古高町 571-2 〒524-0044

発売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
<歯科医療従事者様専用>
www.dental-plaza.com