SD オートクリーン サンクスセール [2026－2027冬]

オートクレーブ専用液＆洗浄液

セール期間：2026年11月24日～2027年1月20日

オートクレーブ滅菌に使用する水道水または精製水の代わりに使い続けることで…

■ チャンバー内の硬度成分（カルシウム、マグネシウム）等の付着を解消！
■ 滅菌する器具を防錆＆洗浄！

オートクリーンを使用するだけ・・・

オートクレーブの洗浄 / オートクレーブの消臭 / 滅菌する器具の防錆 / 滅菌する器具の洗浄 が可能！

SD オートクリーン サンクスセール 新規導入パック

初めてのご購入にオススメ



頑固な汚れが蓄積したオートクレーブ内を強力洗浄

オートクリーン ディスポ 500mL
オートクレーブ専用強力洗浄液



オートクリーン 5L
オートクレーブ専用液

オートクリーン ディスポ 500mL
通常価格 ¥2,400
＆
オートクリーン 5L
通常価格 ¥4,500
＝
合計 ¥6,900（税別）のところ…

セール価格 **¥5,700**（税別）

SD オートクリーン サンクスセール お徳用パック





継続的な使用によりオートクレーブ内の汚れ・臭いを防止

通常価格 ¥4,500×2個で ¥9,000（税別）のところ…

セール価格 **¥8,100**（税別）

※ 限定セットにつき、商品がなくなり次第終了とさせていただきます。

SD サンデンタル株式会社
本社：大阪市中央区南船場 4-8-9 06.6245.0950
営業所：東京 03.3836.9347 福岡 092.482.2318

2611G18

SD AUTO CLEAN

オートクレーブ内のメンテナンスフリー洗浄液!!

AUTO CLEAN DISPO

頑固な汚れが蓄積した オートクレーブ内を強力洗浄!!


3ヶ月に1回、オートクリーンディスポを使用することにより
チャンバー内の酸化被膜や金属焼けを簡単に除去します。

強力洗浄




500mL　1,200mL
〈SDオートクリーン ディスポ〉


ご使用方法

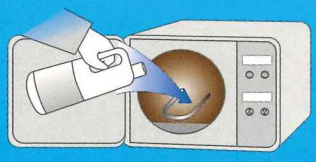


〔1〕SDオートクリーンディスポを直接チャンバー内の水量センサーにかかるまで入れます。

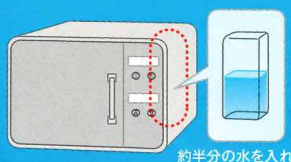

〔2〕貯水タンクに通常の約半分の水を入れた状態でオートクレーブを作動してください。（約20分）※乾燥工程は省略してください。

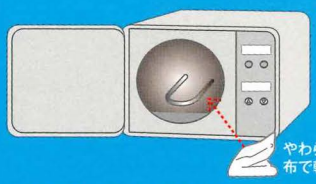

〔3〕終了後、汚れのひどいところは柔らかい布などで軽く擦ってください。
※チャンバー内は非常に熱くなっているのでご注意ください。

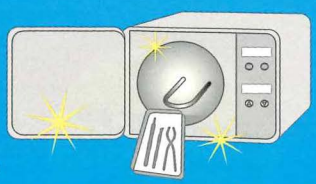

〔4〕作業完了後、貯水タンクの水をすべて捨て※、その後、SDオートクリーンを入れ通常の滅菌作業を行ってください。
※貯水タンク内に汚れが溜まるため、再度水をタンク内にためて、排水してください。

〈SDオートクリーン ディスポ〉
医院価格：500mL **2,400**円（税別）／1,200mL **3,900**円（税別）
成　　分：酒石酸・pH調整剤

AUTO CLEAN

チャンバー内の洗浄と 滅菌する器具の防錆洗浄!!

通常、オートクレーブ滅菌に使う水道水又は
精製水の代わりに使用することでチャンバー内の
硬度成分（カルシウム、マグネシウム）等の付着を解消します。

洗浄
消臭
防錆




〈SDオートクリーン 5L〉





SDオート
クリーンに
切り替え30日後

ご使用方法

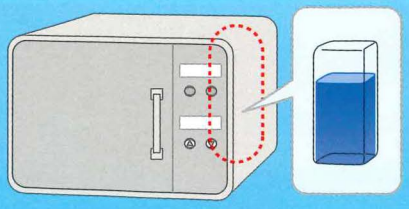

●オートクレーブ内の液体をすべて排水し、SDオートクリーンを薄めずに貯水タンクに適量入れてください。
●貯水タンク内液量が減った場合はSDオートクリーンを補充してください。
●1ヶ月に1回、貯水タンク内の液を抜き、新たにSDオートクリーンを入れてください。

○天然成分タンニンが持つ脱酸素力が防錆力を発揮します。
○オートクレーブ内の臭い、汚れの蓄積を防ぎます。
○高性能分散剤の効果で、硬度成分・シリカ・鉄分による湯垢などの付着を防止します。

〈SDオートクリーン 5L〉
医院価格：**4,500**円（税別）
成　　分：天然高分子タンニン・分散剤・pH調整剤

SD サンデンタル株式会社

〈本　　社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号　Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号　Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉〒812-0008 福岡市博多区東光1丁目3番8号　Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
https://www.sundental.jp

■本製品のお買い求め・ご相談は

2610G04