秋冬 大感謝キャンペーン

特価対象期間：2026年11月21日（土）～2027年1月20日（水）

WAM key


ワムキークラウンリムーバー

スムーズな処置をサポート



3STEP 3ステップでクラウンをスムーズに除去


STEP 1 カーバイドバーでクラウンに穴を開け、ワムキークラウンリムーバー No. 1 を入れる

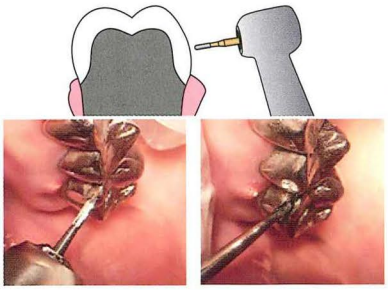

STEP 2 ワムキークラウンリムーバー No.1 をひねってクラウンを除去する



STEP 3 除去後もクラウンの形状は穴以外変わらない

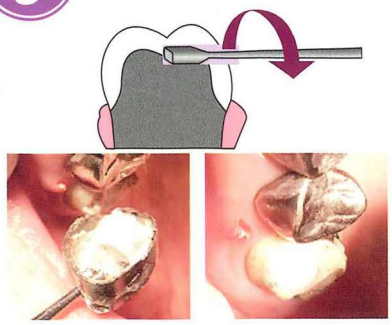

ワムキークラウンリムーバーは以下の事例に適しています。

- クラウンの中を確認して治療方法を確定したい時に効果的です。
- ブリッジの除去においてはクラウンを分割する必要はありません。

絶対に持ち上げる動きはしないでください。
必ずNo. 1から始めてください。

製品情報

商品名　ワムキークラウンリムーバー

セット内容（単品販売あり）
ワムキークラウンリムーバー No. 1
ワムキークラウンリムーバー No. 2
ワムキークラウンリムーバー No. 3　各１本、計３本





先端拡大図

注文欄　販売名：ワムキー クラウンリムーバー　医療機器届出番号13B1X00133000032

ワムキークラウンリムーバー３本セット＿＿セット　単品　No. 1 ＿＿本　No. 2 ＿＿本　No. 3 ＿＿本

セット、単品ともに特別価格にてご提供。詳細はお出入りのお取引店ご担当様にお問い合わせください。

お客様記入欄　ご希望の数量とお客様情報をご記入のうえ、FAXにてご注文ください。

お名前		貴医院名			
ご住所　〒					
Email		お電話番号			
お取引店		支店名		ご担当者	

有効期限：2027年1月20日まで

お問い合わせは

FAX:03-3635-1060

商品の内容・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

ご提供いただいた個人情報につきましては、弊社ホームページに掲載の個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。詳細は、弊社ホームページ（https://www.crossf.com/policy/）をご参照ください。ご使用の際は、添付文書等をよくお読みください。

販売元:クロスフィールド株式会社
〒130-8516　東京都墨田区江東橋1-3-6
TEL　03-5625-3306
製造販売元：株式会社吉田製作所