



歯科用電動式ハンドピース
NiTiプロ

安全なエンド治療をサポート
Smarter and Safer




SHOFU INC.

安全性の追求

アラーム機能とオートリバース機能で
ファイルの破折リスクを大幅に軽減

設定したトルク値に対して、2種類のアラーム音でファイルに対する
負荷状況を的確に伝えます。また、設定したトルク値に負荷が達すると
オートリバース機能が働きファイルの破折リスクを軽減し、治療の
安全性を高めます。

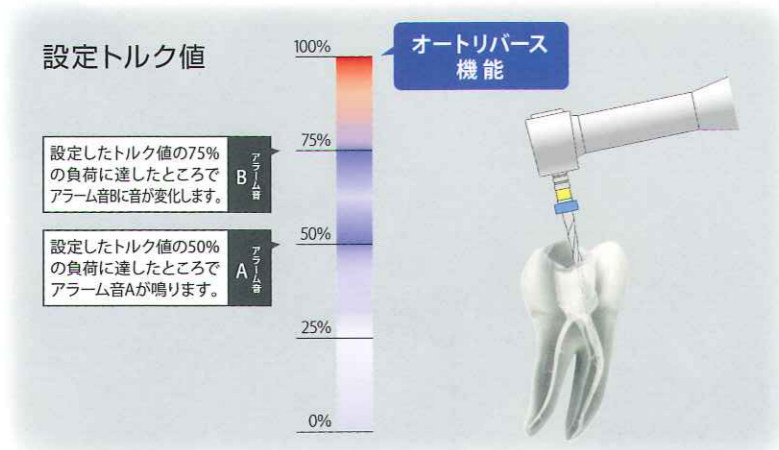

直感的でスピーディーな
操作を実現



大きくフラットなボタン
ボタンが大きく操作性が向上します。


コードレスで快適な操作
コードがないので、
自由自在な操作が可能です。

見やすい液晶パネル
治療に必要な内容を一目で
確認できます。

治療効率の追求


回転速度、トルク、ギヤ比、オートリ
バースモードの組み合わせを5パターン
までメモリーしてお使いいただけます。

プログラム設定パネル

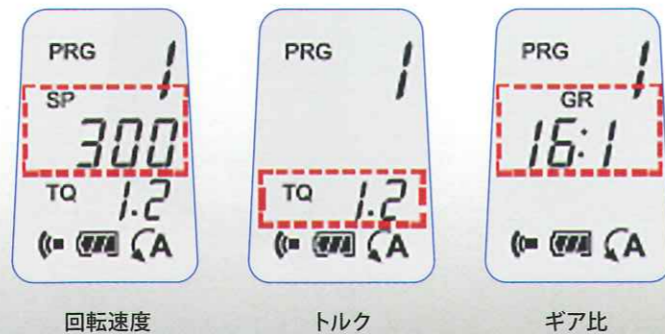

可変できるヘッド

治療部位に応じてヘッドの向きを
6方向に変更できます。

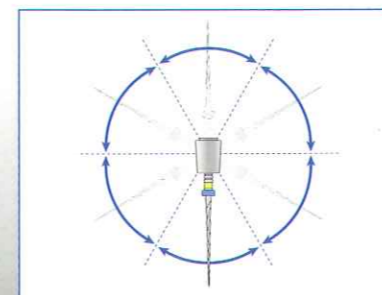

広がる視野

ミニヘッドとスリムなネックの
コントラアングルを採用することで、
広い視野を確保できます。



短時間で充電可能

1.5時間の急速充電が可能です。
また、無接点充電のため、接触不良がなく
確実な充電が可能です。
端子がないので、清掃しやすく衛生的です。



販売名・一般的名称

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
エンドメイト TC2	歯科用電動式ハンドピース	管理医療機器 医療機器認証番号 222ALBZX00018000 特定保守管理医療機器

包装・価格

歯科用電動式ハンドピース
NiTiプロ (エンドメイト TC2)
〈一式〉 ¥128,000

【内容】
モーターハンドピース、
コントラングルヘッド (MP-Y SHO)、
1/16減速シャング (F16R SHO)、
TC2用充電器、充電器用電源コード 各1



仕様

モーター

定格電圧	DC2.4V ±20%
電源入力	0.3VA
回転速度*	2,000 ~ 9,000min ⁻¹
連続使用時間*	約1.2時間

*電池の充電容量によって回転速度、連続使用時間が変化することがあります。

充電器

定格電圧	AC100V±10% 50/60Hz
電源入力	12VA
充電時間	約1.5時間

別売品

モーターハンドピース
¥68,500



1/16減速シャング
(F16R SHO)
¥15,500



NiTiファイル用
コントラングルヘッド
(MP-Y SHO)
¥18,000



根管長測定器接続用
(ロングシャング用)
コントラングルヘッド
(MPA-Y)
¥28,000



NiTiファイル用 (ミニヘッド用)
コントラングルヘッド
(NML-Y)
※ラッチ式
¥15,500



根管長測定器接続用
(ショートシャング用)
コントラングルヘッド
(MPAS-Y)
※シャング長12mmまでのNiTiファイルに使用可
¥28,000



TC2用 充電器
¥26,000

充電器用電源コード
¥580

関連商品

手用ファイルに近い術式で使える電動式歯科用NiTiファイル
Mtwoファイル


【セット】
6本 ¥7,000
種類:2種

Mtwo ファイルベーシックアソート 21mm、
Mtwo ファイルベーシックアソート 25mm
セット内容:右の表を参照してください。



写真はベーシックアソートです。

【単品】
6本 ¥7,000
種類:24種

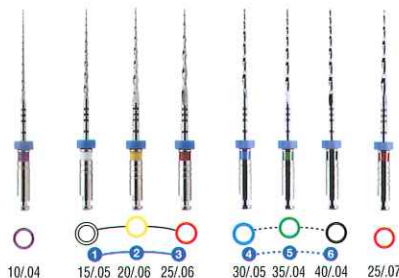

先端径 (ISO)	刃部	針部	テーバー	先端径 (ISO)							
				010 (#10)	015 (#15)	020 (#20)	025 (#25)	030 (#30)	035 (#35)	040 (#40)	
レギュラー (R) 16mmタイプ	2種 21mm 25mm		.04	● (◆)						● (◆)	● (◆)
			.05		●				● (▲)		
			.06				●				
			.07					● (■)			
ロング (L) 21mmタイプ	2種 25mm 31mm		.04	●							
			.05		●						
			.06			●					

●印はベーシックアソートに含まれるファイルです。
(◆)は刃部長さ=15mm、(▲)=14mm、(■)=13.5mm となります。

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使いください。

本カタログに記載の仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。
価格は2013年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社:〒605-0983京都市東山区福稲上高松町11・TEL(075)561-1112 (代)

●支社:東京(03)3832-4366 ●営業所:札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

http://www.shofu.co.jp

1309DHJSI