



ナイロン筆

ユニブラシ オーバルタイプ

ユニブラシシリーズに「オーバルタイプ」が新登場。

「丸型毛先」^{ダブル}「W筆先」という新発想！

二刀流



2タイプの筆先を同時にお試いただける

初回数量限定品

ユニブラシオーバルタイプ 限定セット

Sタイプ筆先 5本、
Lタイプ筆先 5本、
柄 1本

標準医院価格

¥1,200

SHOFU INC.


1 柄の両端が使用できる「W筆先仕様」



柄の両端に筆先が装着できる「W筆先仕様」のため、柄を逆にすれば素早く異なる太さの筆先が使用できます。
また柄の「Sタイプ」を装着する部分は「ユニブラシ No.4」の筆先も装着することが可能です。
使用用途に応じて「Sタイプ」と「No.4」の使い分けも可能です。

ユニブラシ No.4とオーバル「S」タイプが装着可能

オーバル「L」タイプのみ装着可能

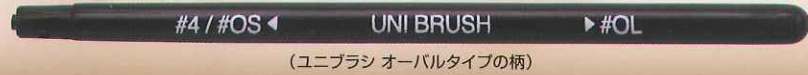


(ユニブラシ オーバルタイプの柄)

2 新発想! 塗りムラ低減、丸型毛先

平筆の毛先を水平にカットせず、丸型に調整しました。筆先が必要以上に広がらず、筆の辺縁にペーストが広がるのを抑えるため、スムーズな塗布性を実現しました。

弊社従来品 ユニブラシ No.4 と 新製品ユニブラシ オーバルタイプ「S」の筆先の広がり比較

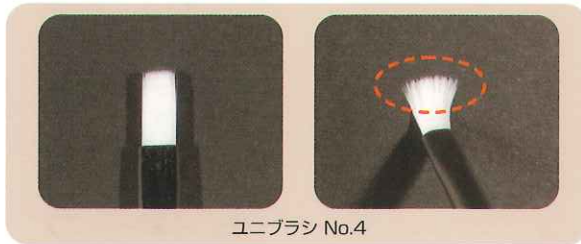

ユニブラシ No.4



ユニブラシ オーバルタイプ「S」

3 広い面の塗布に便利な「Lタイプ」の筆先

表面滑沢硬化材や広範囲へのオパーク塗布など広い面への塗布には「Lタイプ」の使用が効果的です。



ユニブラシ No.4 使用



ユニブラシ オーバルタイプ「L」使用

■ 使用材料：レジングレーズ リキッドタイプ [歯科レジン系補綴物表面滑沢硬化材]

4 使用例



オーバルタイプ「L」使用
表面滑沢硬化材「レジングレーズ」を広範囲に塗布。



オーバルタイプ「L」使用
セラマージュ GUM オパークを広範囲に塗布。



オーバルタイプ「S」使用
ソリデックス ハーデュラ オパークを塗布。筆の側面を使用することで隣接部などの細部にも対応できます。

包装・価格

ユニブラシ オーバルタイプ

Lタイプ


内容: 柄 1本 筆先/10本 (Lタイプ筆先)

Sタイプ

内容: 柄 1本 筆先/10本 (Sタイプ筆先)

価格 各¥1,500

※Lタイプまたは、Sタイプのみでは「W筆先」での使用はできません。

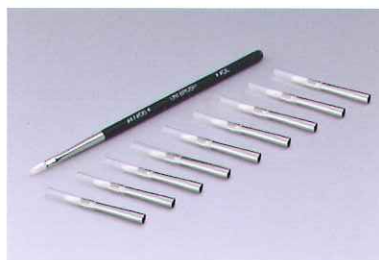

写真はSタイプです。

このカタログに記載の価格は2014年1月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112 (代)

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595

<http://www.shofu.co.jp>