

山ハCAD/CAMミリングバー

CAD/CAMによる切削加工用のミリングバー


- 一般的なコーティング(チタンコーティング)と比べ **耐久性が約2倍のDLCコートと約10倍のダイヤモンドコート**の2種類をラインナップ!!
- ラジアスを併用することにより加工効率がアップ!!



DLCコートタイプ

ラジアス (φ3mm) φ2mm φ0.8mm φ0.4mm



耐久性は一般的コーティングと比べ
DLCコート…約2倍 ダイヤコート…約10倍

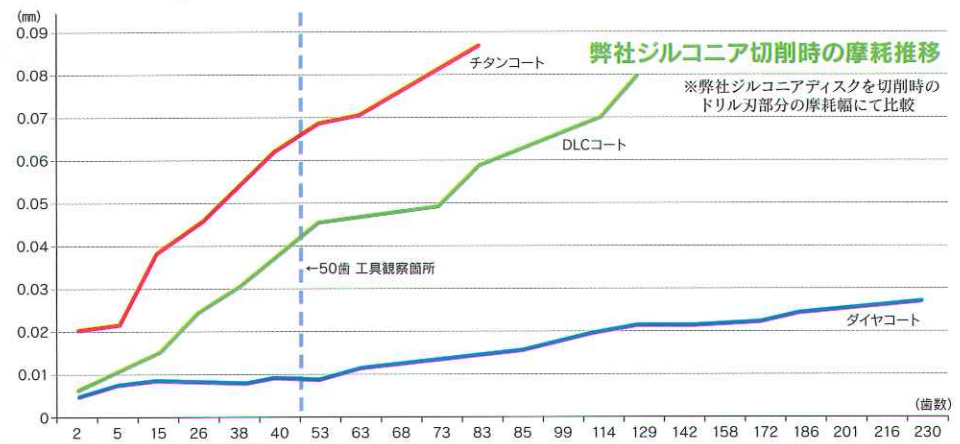

ダイヤモンドタイプ

ラジアス (φ3mm) φ2mm φ0.8mm φ0.4mm

ラジアス使用により、
加工効率アップ

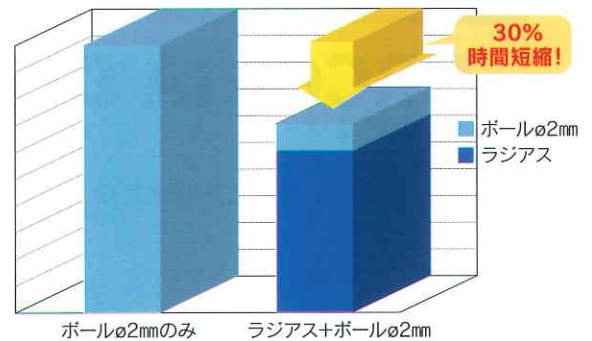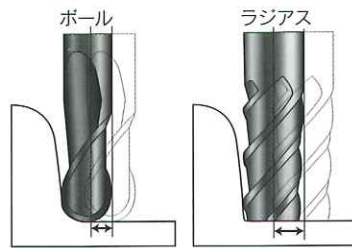

ラジアスを使用することにより、切削面積を広くとることができ加工効率がアップ。
ラジアスとボールφ2mmの併用で、ボールφ2mm単独使用時と比べ、加工時間が30%短縮。

種類	刃形状	標準価格(税抜き) 1本/ケース	首下長(mm)	シャンク径(mm)	全長(mm)
DLC ラジアス	ラジアス	7,500円	16	4	45
DLC φ2mm	ボール		16		
DLC φ0.8mm			12		
DLC φ0.4mm			6		

種類	刃形状	標準価格(税抜き) 1本/ケース	首下長(mm)	シャンク径(mm)	全長(mm)
ダイヤ ラジアス	ラジアス	15,000円	16	4	45
ダイヤ φ2mm	ボール		16		
ダイヤ φ0.8mm			12		
ダイヤ φ0.4mm			6		

山ハCAD/CAMミリングバー適応システム

加工機: DWX-50/DWX-4 (製造販売元 ローランド ディー.ジー.(株))
〒431-2103 静岡県浜松市北区新都田1-1-3

CAMソフト: worknc Dental (発売元 (株)データ・デザイン)

一般医療機器 歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット



歯科切削加工用レジン材料

RESIN DISK

レジンドイスク

CAD・CAMによる
切削加工用のPMMAディスク。



高い審美性を有し
研磨や艶出しが
容易です。



管理医療機器 医療機器認証番号 224AFBZX00015000

用途	暫間クラウン・暫間ブリッジの製作
サイズ	T15 (Ø98.5mm×15mm) .T20 (Ø98.5mm×20mm)
色調	A1 . A2 . A3
材質	PMMA (アクリル樹脂)
包装単位	1枚/箱
標準価格	¥5,000

■ 製造販売元 山八歯材工業株式会社 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

歯科用キャストイングワックス

WAX DISK

ワックスディスク

CAD・CAMによる
切削加工用のワックスディスク。



良好な切削性を有し
焼却後の残渣も
ほとんどありません。



一般医療機器 医療機器届出番号 23B1X10001C07016

用途	クラウン・ブリッジ・フレームワーク用のろう型の製作
サイズ	T14 (Ø98.5mm×14mm) .T20 (Ø98.5mm×20mm)
色調	グリーン
使用埋没材	リン酸塩系・クリストバライト系 ※クリストバライト系埋没材を使用する場合は、強度の高い埋没材をご使用のうえ、 パターン両士の間隔を十分にお取り下さい。
包装単位	1枚/箱
標準価格	¥3,000

■ 製造販売元 山八歯材工業株式会社 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

歯科切削加工用セラミックス

ZIRCONIA DISK

ジルコニアディスク

CAD・CAMによる
切削加工用のジルコニア ディスク



高圧プレス成型により
高密度で綺麗な
表面性状を実現!!



管理医療機器 医療機器認証番号 224AKBZX00132000

用途	インレー・クラウン・ブリッジのフレームの作成		
収縮率	焼成温度	熱膨張係数	
約20%	1450°C	10.5×10 ⁻⁶ /°C	
密度^{※1}	ビッカースHV硬度^{※1}	曲げ強度^{※2}	
6.08g/cm ³	1250HV ¹⁰	1100MPa	

※1 密度・硬度・曲げ強度は焼成後の数値です。
※2 [JIS R 1601 3点曲げ強さ]

直径:98mm		厚み:10~25mm(8種)	
厚み	標準価格(1枚/箱)	厚み	標準価格(1枚/箱)
10mm	¥30,000	18mm	¥38,000
12mm	¥32,000	20mm	¥40,000
14mm	¥34,000	22mm	¥42,000
16mm	¥36,000	25mm	¥45,000

■ 発売元 山八歯材工業株式会社 〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

■ 製造販売元 アダマンド工業株式会社 東京都足立区新田1-16-7

※記載価格には消費税は含まれておりません。 ※価格は予告なく変更する場合があります。

山八歯材最新情報はホームページで... ~健康は歯から~ (お問い合わせ・ご購入等もお待ちしております)

www.yamahachi-dental.co.jp/

●ご用命は...



製造販売元

山八歯材工業株式会社

〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1

TEL (0533) 57-7121 FAX (0533) 57-1764

Home Page <http://www.yamahachi-dental.co.jp/>

E-mail box@yamahachi-dental.co.jp