

スッと流れる接着剤


Versa Glue PX

バーサ グルーPX シリーズ



米国「Dental Lab Products」
による「Best of the Best
Products 2008」を受賞

石膏、金属、アクリル、ポーセレンなど、あらゆる歯科材料を
接着することが可能です。
用途やお好みに応じて3種類の粘稠度からお選びいただけます。
未開封なら冷蔵庫で3年間保存することが可能です。

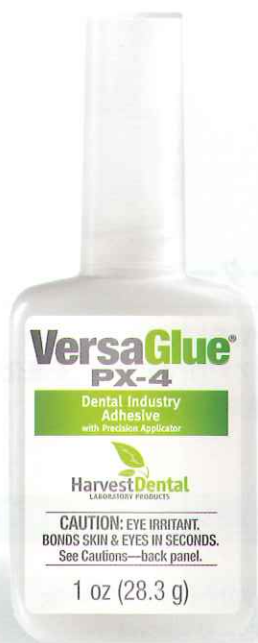

PX-4 アドヒシブ

低粘度

特性

粘性が低いため、塗布するのが難しい
箇所に適しています。

硬化時間

1~5秒

用途

石膏模型の表面コーティング剤
石膏模型の修復
入れ歯の修復



PX-40 アドヒシブ

中粘度

特性

石膏模型の割れ目、裂け目などの修復
に適しています。

硬化時間

10~15秒

用途

ダウエルピンの植立
石膏模型や支台の修復
ろう付け用(クラウン&ブリッジ等)



PX-400 アドヒシブ

高粘度

特性

大きなひび割れなどの修復に適しています。
厚みがありしっかりとした修復面にはより多くの補修
時間を考慮してください。

硬化時間

30~60秒

用途

ダウエルピンの植立
アンダーカット部や部分床義歯を安定させるための
隙間の充填など

商品名	標準価格(税別)
バーサ グルーPX-4低粘度28g	¥2,900
バーサ グルーPX-40中粘度28g	¥2,900

商品名	標準価格(税別)
バーサ グルーPX-400高粘度28g	¥2,900
バーサ グルーアプリーケーターチューブ	¥1,050



製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。▶▶ www.tokyodental.co.jp

東京歯科産業

検索

ZBase Zベースシリーズ

HarvestDental
LABORATORY PRODUCTS

高い汎用性で
サポートいたします。

Zベース ブロックアウト マテリアル

使いやすい粘稠度の
模型修復剤です。
気泡充填も簡単で、素早く、
イメージ通りに模型を
復元できます。



ベースジェル「Zベース ブロックアウト
マテリアル」と硬化促進スプレー「Zベース
アクセレーター」の組み合わせにより主に
石膏模型の復元剤として使用します。
気泡充填、アンダーカットのブロックアウト、
面荒れなど、あらゆる場面で使用できます。

Zベース アクセレーター



硬化促進剤で、噴霧と同時に
「Zベース ブロックアウトマテリアル」を硬化させます。
ダウエルピンの植立も可能です。

商品名	標準価格 (税別)
Zベース セット	¥6,000
Zベース ブロックアウトマテリアル10g	¥3,200
Zベース アクセレーター60ml	¥2,820
Zベース アプリケーターチップ10入り	¥1,370


※ソルベント(チップクリーナー)2oz.のご用意もごございます。

あらゆる場面で使用できます。

気泡充填に

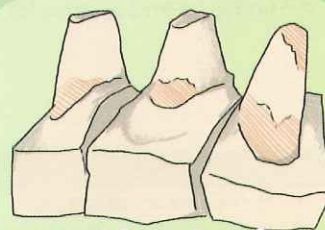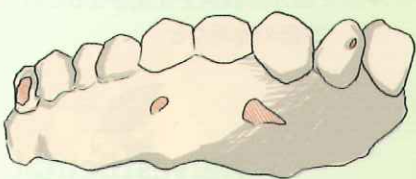

アンダーカットの
ブロックアウトに

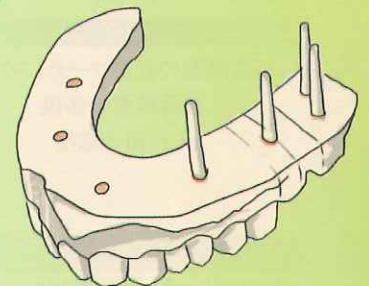

ダウエルピンの
植立に



東京歯科産業株式会社