

Heraeus Kulzer

Mitsui Chemicals Group

Translux®



歯科重合用光照射器

トランスルックス® 2ウェーブ

Translux® 2Wave

新しい光重合システム

従来のLED光源に新しいLED光源(紫)を追加し、ピーク波長を分散させました

■4個のLED光源により均一な光重合が可能



●照射光量が均一なため偏りなく光重合ができます。

■先端角70度、直径8mm、360度回転可能、 使い易いファイバースティック

●人間工学に基づくデザインにより臼歯部照射も容易です。

■トランスルックス® 2ウェーブ1つで 幅広い重合開始剤に対応

●波長域385~510nmの高性能2色発光LED光源だから
幅広い重合開始剤に対応できます。

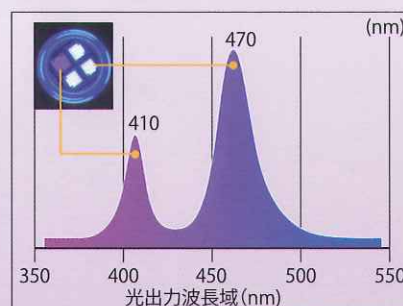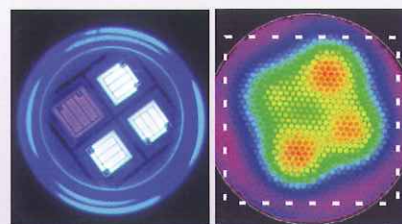

ソフトスタートを含む選べる4つの照射モード

■20秒ソフトスタート

光出力がゆっくりと増加するため、CRの初期重合収縮を低減します

■照射モード

用途に合わせて4種類の照射モードをお選び頂けます



20秒
ソフトスタート

20秒

10秒

5秒



仕様

充電器本体	100-240V(AC),50/60Hz 12-18VA
ハンドピース	電源:リチウムイオン3.6V 2,000mAh 重量:150g 寸法:直径24mm×長さ275mm (ファイバースティック含む)
ファイバースティック	ø8mm
光学特性	最大光量:1,400mW/cm 波長域:385~510nm
照射時間	5秒 10秒 20秒 20秒(ソフトスタート)
滅菌	ファイバースティックとライトガード 最高135°C 4分 オートクレープで滅菌

■トランスルックス 2ウェーブセット

・充電器本体1個 ・ハンドピース1個 ・ファイバースティック1個
・ライトガード1個 ・充電器ACコード1本 ・リチウムイオン電池1個

販売名:トランスルックス 2ウェーブ
一般的名称:歯科重合用光照射器
分類:一般医療機器・特定保守管理医療機器
届出番号:27B1X00060900017

商品コード	商品名	標準価格(円)
D9015	トランスルックス 2ウェーブ	146,900円

お問い合わせ、ご用命は

製造販売元

ヘレウス クルツァー ジャパン 株式会社

本社:〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
札幌営業所:〒003-0825 札幌市白石区菊水元町五条2-9-1 TEL.090-7555-8560
仙台営業所:〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
名古屋営業所:〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
大阪営業所:〒541-0046 大阪市中央区平野町2-1-14 TEL.06-6233-2500
福岡営業所:〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
フリーダイヤル:0120-230-331 (受付時間:10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

<http://www.heraeus-kulzer.co.jp/>