

歯肉にやさしい!

# 歯周ポケット内洗浄に

VISTA™  
Dental Products

洗浄針 & 歯科用シリンジ

## ポケットプローブ シリンジキット




内容

- ・ポケットプローブチップ 6本
- ・ルアーロックシリンジ (1.2mL) 6本

歯科医院様参考価格

¥1,500

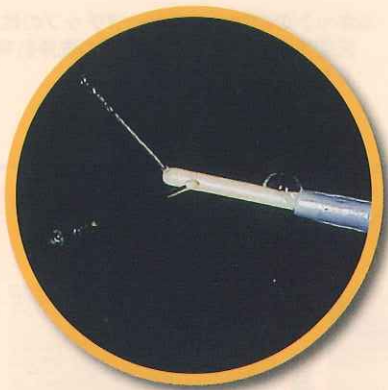

歯肉にやさしいソフトチップ

歯肉の損傷を防ぐラウンドタイプ先端部

側面の孔から洗浄液が注出

デリケートな  
歯肉をやさしく洗浄




### ご使用例

#### 大臼歯根分岐部の洗浄



フィットした感触がソフトのため、歯肉にやさしい洗浄を行うことができます。

#### 智歯周囲炎の洗浄

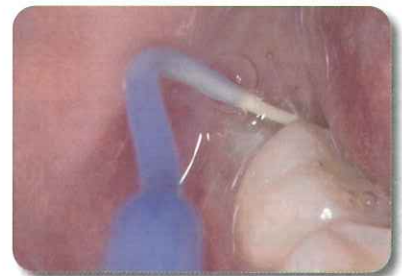

水圧を弱めに調整しながら洗浄を行うことができます。

# 歯周ポケット内洗浄に！！



## ポケットプローブチップ

・6本入 歯科医院様参考価格 ¥1,200

・12本入 歯科医院様参考価格 ¥2,300




ソフトチップは適用部位に応じて伸縮可能


通常：約11mm

最長：約17mm

最短：約3mm

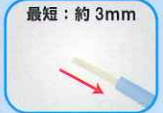

※キットのルアーロックシリンジの他、汎用のロックタイプ歯科用シリンジ、スリットタイプ歯科用シリンジ等に装着できます。

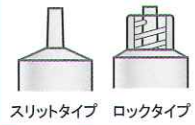

スリットタイプ ロックタイプ

## ルアーロックシリンジ (1.2mL)

・6本入 歯科医院様参考価格 ¥350

・12本入 歯科医院様参考価格 ¥650



容量1.2mL  
ルアーロック式歯科用シリンジ

※キットのポケットプローブチップの他、汎用のルアーロックタイプの洗浄針等を装着することができます。

### 『ポケットプローブシリンジキット』と『ペリオリフレッシュ』を併用した歯面清掃の応用例

歯面をコンディショニングする歯面研磨材

#### ペリオリフレッシュ




歯面とバイオフィルム、歯石等の間に浸透して、汚れを浮き上がらせ、ダメージの少ない歯面清掃・研磨を容易にします。

医療機器届出番号: 13B1X1009800007 一般医療機器 歯面研磨材  
製造業者: Concept Two Solution L.L.C. (コンセプト ツーソリューション エルエルシー)  
製造国: アメリカ合衆国 (USA)



ポケットプローブチップを歯周ポケット内に挿入し、ペリオリフレッシュを必要量塗布し、15秒間以上放置します。

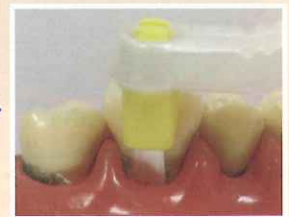

インスツルメンテーションまたはポケットクリーナーにて歯面清掃し、洗浄します。

医療機器届出番号 13B1X1009800001 一般医療機器 洗浄針 歯科用シリンジ ※ポケットプローブチップおよびルアーロックシリンジは単回使用です。  
製造業者: Inter-Med/Vista Dental Products (インターメッド/ヴィスタ デンタル プロダクツ) 製造国: 中華人民共和国  
本紙に掲載されている価格は2014年7月のもの(税抜)です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

製品の特徴、ご使用方法などに関するお問い合わせは

お客様窓口フリーダイヤル

TEL. 0120-33-8020 FAX. 0120-66-8020

●製品に関するご用命は

製造販売業者 EIKO CORPORATION

販売業者 株式会社モリムラ

株式会社エイコー  
〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3834-5777 FAX.03-3837-2655

株式会社モリムラ  
本社: 〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10  
TEL.03-3836-1871 FAX.03-3832-3810  
大阪営業所: 〒564-0053 大阪府吹田市江の木町5-3  
レーベンハウス江坂405号  
TEL.06-6170-8239 FAX.06-6170-8249  
http://www.morimura-jpn.co.jp