

酵素HEPA搭載空気清浄機

ステラエア

空気中の細菌、真菌、ウイルスを強力に除去。

+脱臭機能搭載

商品コード: 160160

標準価格: 450,000円(税別)

- ◆ 酵素HEPAフィルタ・UVランプにより空気中の細菌・真菌・ウイルスを強力に捕集・除去します
- ◆ 待合室・介護現場の悪臭を除去する強化型脱臭フィルタをラインナップ

HEPAフィルタで「PM2.5」への対応(※1、※2、※3)
0.3 μ m粒子を99.97%以上除去



UVランプ
搭載

酵素HEPA
フィルタ採用

脱臭フィルタ


クリーン

コルゲートハニカム式
脱臭フィルタ

酵素HEPAフィルタ

UVランプ

プレフィルタ

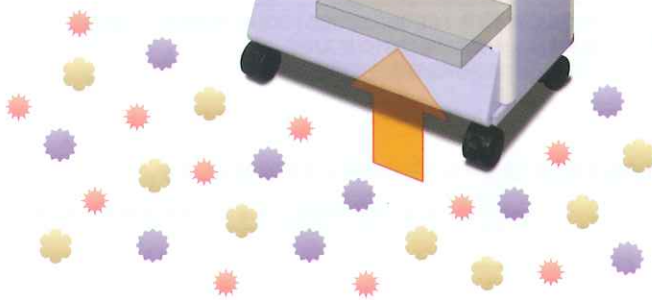


細菌・真菌

ウイルス

体臭・汗・し尿・糞便
などの悪臭

▶ 室内の実測による粒子数の減衰特性データ

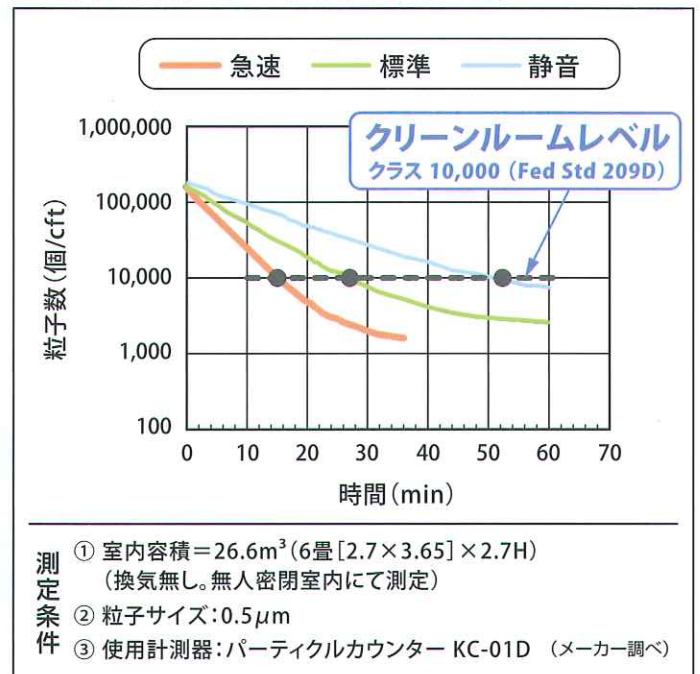

▶ 製品仕様

型式		CAU-05
定格電圧		AC100V 50 / 60Hz
消費電力		125W / 150W
処理風量 (m ³ /min)	標準	5(急) / 3(標準) / 1.5(静)
	脱臭フィルタ付	4(急) / 2.5(標準) / 1.5(静)
外形寸法 W×H×D		510mm × 900mm × 300mm
製品質量		約35kg

※1.上記数値は、フィルタの性能試験に基づく性能であり、実機の性能とは異なります。 ※2.このフィルタでは0.1 μ m未満の微小粒子状物質については、除去の確認ができていません。また、空気中の有害物質のすべてを除去できるものではありません。 ※3.「PM2.5」とは、2.5 μ m以下の微小粒子状物質の総称です。

救急酸素 オーツ- O₂パック

不慮の事故や発作など、一刻をあらそう呼吸困難時に。

いつ起こるかわからない呼吸困難。救急車を待つ数分間が明暗を分けます。

O₂パックは突発的な呼吸困難時に引き手を引き抜くだけで、ただちに毎分3ℓの酸素が発生し、13分間安定供給できる家庭用酸素吸入器(固形酸素使用)です。

1 純度の高い酸素を13分間安定供給
純度99.5%以上の酸素を、毎分3ℓの割合で供給します。

2 簡単操作
使い方は引き手を引き抜くだけ。ただちに酸素が発生します。



1.フタをはずす



2.弾き手を引き抜く



3.マスクをあてる

3 取り扱いも安全
固形酸素(クロレートキャンドル^{*1})を使用しておりますので、高圧ガス取締法の規制を受けません。
また家庭用酸素吸入器として承認を受けていますので、お子さまからお年寄りまで安心してご使用いただけます。

*1:クロレートキャンドルとは、NaClO₃を主剤にしたローソク状の固形発生剤で、熱反応によって酸素を発生します。
(2NaClO₃→2NaCl+3O₂)

4 軽量・コンパクトな使い捨てタイプ
わずか900gと軽量、しかもコンパクトなので収納スペースをとりません。
使用後は燃えないゴミとして廃棄できます。

5 3年間有効
3年間は有効です。その間の点検等は不要です。



応急用酸素吸入器

オーツ- O₂パックA型

本体サイズ	径90×高さ250(mm)
本体重量	900g
使用時間	13分(1回限り使い捨て)
酸素流出量	3ℓ/分
酸素総流出量	36ℓ以上

医療機器承認番号:16200BZZ00519000(医家向および家庭向)
医療機器区分:管理医療機器(クラスII)
一般的名称:単回使用酸素発生式供給器

商品コード:160005

標準価格:9,800円(税別)

JANコード:4979058512116

「保険点数」O₂パックは、歯科外来診療環境体制加算に於ける[施設基準]の“酸素ボンベ及び酸素マスク”に該当します。

●【ご使用に際して】ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●印刷物のため、実際の商品とは発色が異なる場合があります。

発売



株式会社モリタ

東京本社/〒110-8513 東京都台東区上野2-11-15 TEL(03)3834-6161
大阪本社/〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3-33-18 TEL(06)6380-2525

製造販売



ミドリ安全株式会社

〒340-0004 埼玉県草加市弁天4-12-27