

AROMA FINE PLUS

ALGINATE IMPRESSION MATERIAL
 ALGINAT-ABDRUCKMATERIAL
 ALGINATE POUR EMPREINTES
 ALGINATO, MATERIALE PER IMPRONTA
 ALGINATO, MATERIAL DE IMPRESIÓN



今までにない親水性を、プラス。

アロマファイン プラス (ノーマルセット)(ファストセット)(スローセット)

アルジネート印象材

NEW

硬化速度で選べる3タイプ



ジーシー アロマファイン プラス
ノーマルセット

管理医療機器 221AKBZX00075000

ジーシー アロマファイン プラス
ファストセット

管理医療機器 221AKBZX00077000


ジーシー アロマファイン プラス
スローセット

管理医療機器 221AKBZX00078000

地域や季節などによって硬化速度を選べるノーマル、ファスト、スローの3タイプ。さわやかなスペアミントの香りで快適な印象採得を。

包装 1函=粉末5kg(1kg5袋) ¥21,200

●操作時間

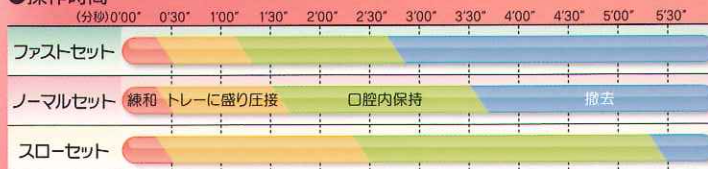

※室温及び水温が23℃の場合の操作可能な最大時間

アローマファインの親水性をさらに追求。

粉 × 水なじみ
わずか

3秒

※当社調べ

練和作業がよりスピーディーに。さらに使いやすくなりました。
成分の配合バランスを最適化したことにより、従来よりもすばやく、粉と水がなじむようになり、粉と水の混和時間を短縮しました。もちろん、粉の飛び散りもありません。練和作業がスピーディーに完了するので、脱ぼう作業に時間をかけられ、よりムラなく均一なペーストに練り上げることができます。

アローマファイン プラス




アローマファイン DFⅢ (当社従来品)



※表示時間は練和開始からの時間です。

もちろん、アローマファインの良さはそのままに。

印象の精度が高く、
寒天との相性も優れています。

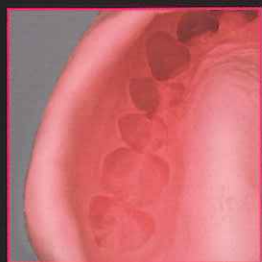

均一なペーストは細部まで緻密に印象が可能で、寒天との相性も優れています。


硬石こうとの相性もよく、
滑沢な模型面に仕上がります。



ニューブラストーンLEでの石こう模型

硬石こうとの相性もよく、模型表面はきわめて再現性が高く、滑らかな仕上がりに。また、超硬石こうを用いても面荒れの少ない模型面を作れます。

ちよう度と流動性のバランスがとれた
適度なチキソトロピー性。

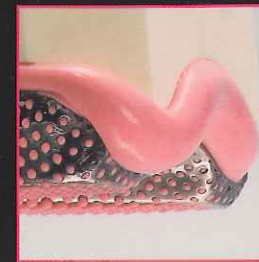

口腔内に挿入した際、印象材が咽頭部に垂れることない粘性と、圧接時には細部にまで到達する流動性を併せ持ち、精密な印象を採得することが可能です。

アローマファイン プラス物理的性質

	初期硬化時間 (室温 23℃ 水温 23℃)	口腔内保持時間	圧縮強さ [※]	弾性性質 [※]	
				弾性歪	永久歪
ファスト	1分40秒	約1分30秒	0.7MPa	14.6%	2.6%
ノーマル	2分10秒	約2分			
スロー	3分10秒	約3分			

※ JIS T6505 により測定

関連製品




寒天印象材(連合印象用)

アローマロイド

管理医療機器 219AFBZX00062000

包装 シリンジタイプ1瓶=90本入(5/16インチ)…¥5,760
シリンジタイプ1函=60本入(5/16インチ)…¥3,960
カートリッジタイプ1函=48本入…¥5,290
※ ストレージ温度60℃~63℃

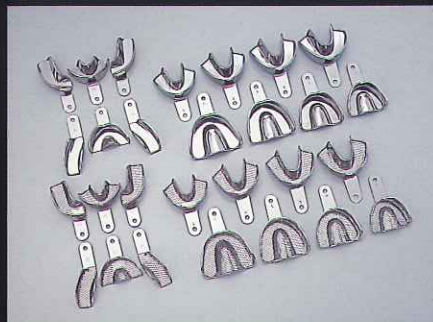

印象用トレー

イプレッショントレー/イプレッショントレー(穴あき)

一般医療機器 13B1X00155

包装 全額用セット1函=8個(全額用8形態各1個)…¥22,200
局部用セット1函=6個(局部用6形態各1個)…¥14,600
全額用単品包装1函=1個(各形態別)…¥2,890
局部用単品包装1函=1個(各形態別)…¥2,580
※ 包装・価格は穴なし、穴あき共通



カートリッジタイプ寒天印象材用コンディショナー
ツインコンディショナーTC-I

仕様 外形寸法=150mm(幅)×150mm(奥行)×130mm(高さ) ●重量=1.5kg ●電源電圧=AC100V 50/60Hz ●消費電力=220VA ●ヒューズ=3A ●収納カートリッジ本数12本(6本×2)
包装 本体1台…¥86,000



アルギン酸塩印象材清掃材

トレクリーン

包装 1函=粉末1.2kg…¥4,380



アルギン酸塩印象材清掃材

アローマクリーン

包装 1函=2L(2.3kg)1本…¥4,300



アルギン酸塩印象材用接着材

テクニコールボンド

包装 1函=液1本30g、希釈材1本10g、筆1本…¥1,590
別売 替え筆(テクニコールボンド・アローマボンド用)5本…¥540



アルジネート印象材・石こう自動練和器

スーパーらくねる Fine

管理医療機器 13B1X00155000022

包装 本体1台+付属品…¥272,000



自動練和機専用アルジネート印象材

アローマファインミキサータイプ

管理医療機器 219AFBZX00193000

包装 1函=粉末5kg(1kg5袋)…¥21,200



パウダーケース

チャッピー

仕様 外形寸法(最大)=160mm(幅)×170mm(高さ)×160mm(奥行)

包装 1個(ラベル枚付)…¥2,600

※ 色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
※ 掲載の価格とジーシー研究所測定値の参考データは、2009年7月現在のものです。
※ 価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

株式会社 ジーシー

DIC(デンタルインフォメーションセンター)

〒113-0033 東京都文京区本郷3-2-14

フリーダイヤル ☎0120-416480

〈受付時間〉AM9:00~PM5:00(土・日・祝を除く)

<http://www.gcdental.co.jp/>

支店

●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333

営業所

●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722

●東北(022)283-1751 ●九州(092)441-1286