

SD 印象ポリマースプレー

印象面の除菌・剥離性の向上のために!

【価格】

3,000円

(税別)

【用途】

印象表面、印象用トレーの除菌

※アルコールに耐性の無い材質には使用しないでください。

【特長】

1. 寸法精度に影響を与えず、印象表面を1分除菌。
2. 特殊ポリマーを配合する事により剥離性が優れています。

※寒天を使う印象法の場合、模型にこびりついた寒天の除去に手を焼いてきましたが特殊ポリマー配合により簡単に取り除くことが出来ます。


【使用方法】

1



印象体に付着した血液などを洗浄する。

2

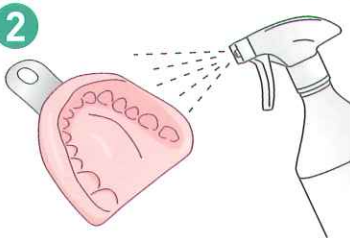


4~5cmの距離から印象面に十分スプレーし、1分間放置する。

4



術式に従いパイプレーター上で石膏を流し込む。

3

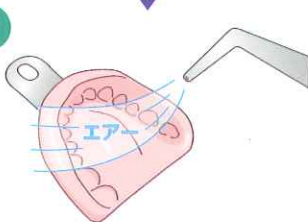

流水洗浄後、エアードで水を吹き飛ばす。

【成分】 エタノール(65~70%)、シリコン、アジピン酸、コハク酸、精製水

【容量】 500mL



SD サンデンタル株式会社

〈本 社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690
〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090
〈福岡営業所〉〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339
<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は