

スーパー鷹

SUPER-BLP5 + BLH1 (50,000R.P.M)



●安全のためR.P.M調節機能

Hand/Footのボタンで0~50,000R.P.Mまでの速度調節ができ、安全性と作業能率を最大化できます。また、使用停止すると、LEDディスプレイに前の作業速度が表示され便利です。

●AUTO CRUISE機能

自動回転設定時は手、足を置いても同じ速度が維持され、一定の速度を保つ作業ができます。

●再使用の際、基本モードで作動

電源をつけると、基本モードにセッティングされます。

- ・ R.P.M制御: Hand/Footを選んでから使用
- ・ 回転方法: 正回転
- ・ R.P.M: 安全のためハンド・ボリュームを"0"の状態にすると再使用できます。

●少ない騒音、低い振動

ノー・カーボンのモーターで静かで振動が少なく、精密な作業が容易です。

●優れた耐久性


ノー・カーボンのモーター使用で、カーボンの粉塵が発生しないためベアリングの寿命が長くなります。

●特殊なボールベアリングを使用


超高速用の特殊ボールベアリングを使用するので熱の発生と騒音が少なく寿命が長くなります。

●強力なトルク8.5

- ・ 低速及び高速で強力な力を発揮し、様々な作業もできるようになります。
- ・ センサーレスタイプのモーターで配線を最小にし、単線による故障を最小化します。

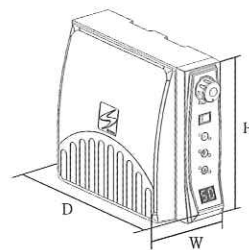

SUPER-BLP5

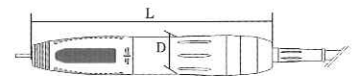

SUPER-BLH1 (50,000R.P.M)

【製品寸法】

モデル	横	縦	高さ	重量
SUPER-BLP5	W:96mm	D:263mm	H:230mm	2,710g
モデル	直径	長さ	重量	
SUPER-BLH1 (50,000R.P.M)	D:φ25mm	L:162mm	358g	

【製品仕様】

入力電圧	出力電圧
AC100/220V, 50Hz/60Hz	DC32V

※27B2X00041000168/ 歯科技工用電動式ハンドピース/ 一般医療機器

SD サンデンタル株式会社

〈本社〉〒542-0081 大阪市中央区南船場4丁目8番9号 Tel.06-6245-0950 Fax.06-6245-7690

〈東京営業所〉〒110-0005 東京都台東区上野3丁目7番3号 Tel.03-3836-9347 Fax.03-3836-2090

〈福岡営業所〉〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目3番9号 Tel.092-482-2318 Fax.092-482-2339

<http://www.sundental.jp>

■本製品のお買い求め・ご相談は