

PSP!X

HAKUSUI

PSピックス

コンピューテッドラジオグラフ

**AMAZING
SIZE**

省スペース

**SO
SIMPLE**

シンプル操作

**HIGH-
SPEED
SCAN**

高速スキャン





驚きのサイズ!



PSピックスのサイズを
スマートフォンのサイズと
比べてください。

省スペース
シンプル操作
高速スキャン

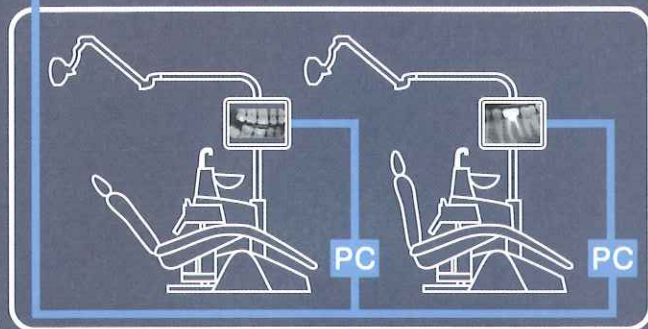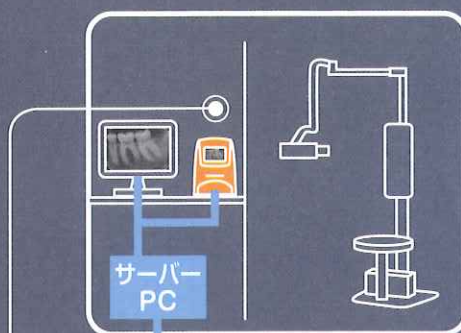

安心のシンプル操作

◎ 自動スタート

イメージングプレートが挿入された時のみ、本体の挿入口がオープンします。使用していない時は挿入口が閉じているので、ゴミ・埃等の侵入を予防します。

◎ 自動認識

イメージングプレートのサイズは、得られた画像から自動で認識します。

◎ 自動調整

得られた画像を自動で最適化します。

◎ 自動消去

スキャンを行ったイメージングプレートは、中のデータを消去された状態で排出されます。

スキャンタイム

約 **3秒**

スキャン開始から画像表示まで

約 **12秒**

ストレスフリーの高速スキャン
(サイズ2使用時)

実物大

快適で経済的 確かな高画質



現像液・定着液から
解放されます！

- ◎イメージングプレートは柔らかく、術者・患者ともに快適に使用することが出来ます。
- ◎イメージングプレートのサイズは5種類。幅広い症例に対応します。(サイズ:0・1・2・3・4*)
- *専用のテンプレート(近日発売予定)とサイズ3のイメージングプレートを2枚使用し、ソフトウェア上で作成します。
- ◎イメージングプレートは繰り返し使用でき、また現像コストも不要なため、経済的です。



サイズ 0
22×35mm



サイズ 1
24×40mm



サイズ 2
31×41mm




サイズ 3
27×54mm



サイズ 4
52×54mm

サイズ4は専用のテンプレート*とサイズ3のイメージングプレートを2枚使用し、ソフトウェア上で作成します。

*近日発売予定

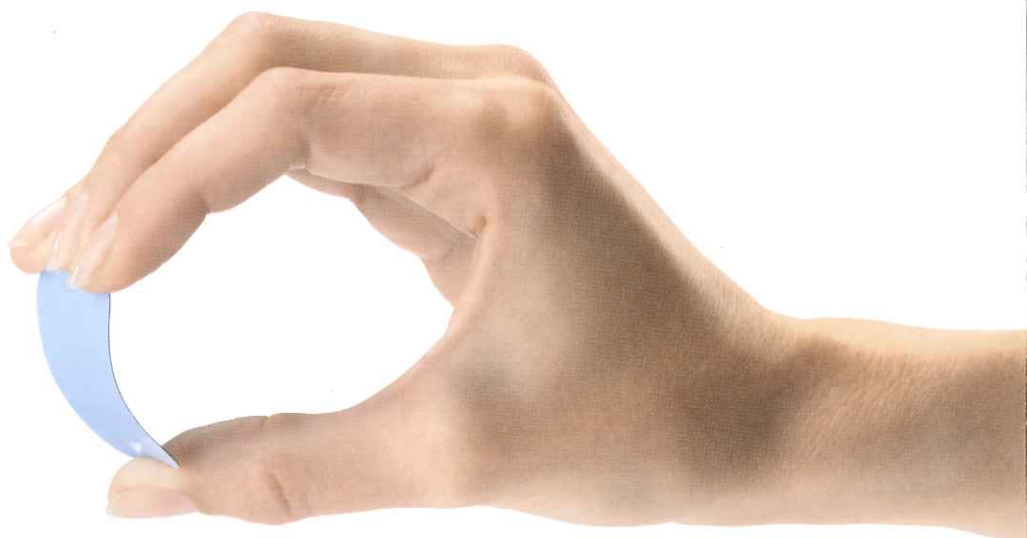

イメージングプレートは非常にフレキシブル。
フィルムと同じように曲げられますので、
快適に使用できます。

衛生的な システム設計

① ハイジーンバッグとプロテクタカバーの
2重プロテクションにより交差感染を予防



防水タイプのハイジーンバッグにより感染を防止し、プロテクタカバーがIPを保護します。



さらにプロテクタカバーでIPをサンドイッチすることで直接触れる必要がありません。



2重プロテクションされたIPのみがスキャナ内部に挿入されるため、スキャナ本体は常に衛生的に保たれます。

ほこり等が入らない開閉シャッター

スタンバイ状態の時のみ挿入口がオープンします。

標準カバー



ジェット
ウォッシャー可

別売にてオートクレープ可能なカバーもあります (近日発売予定)

マグネット式
かんたん脱着

防水タイプのハイジーンバッグにより
感染を防止し、プロテクタカバーが
イメージングプレートを保護します。

マグネット式
かんたん脱着

標準トレイ



ジェット
ウォッシャー可

別売にてオートクレープ可能なトレイもあります
(近日発売予定)



仕様



論理解像度	20lp/mm
スキャン時間 (ファストモード)	1.6秒~2.7秒
スキャン時間 (高解像度モード)	2.1秒~3.6秒
接続端子	イーサネット (RJ-45)
本体寸法	幅154mm×奥行204mm×高さ193mm
重量	2.6kg
電源電圧	100-240VAC、50/60Hz

● セット内容



イメージングプレート

サイズ0 …… 2枚
サイズ2 …… 2枚



ハイジーンバッグ・プロテクタカバーセット

ハイジーンバッグ サイズ0, 2 …… 各100枚
プロテクタカバー サイズ0, 2 …… 各100枚



IP保管用ボックス

IPを使用されない時はこのボックス内に保管することで常にノイズの無い画像に保つことが出来ます。
サイズ2のイメージングプレートが約20枚収納可能です。

● イメージングプレート

サイズ0	22×35mm
サイズ1	24×40mm
サイズ2	31×41mm
サイズ3	27×54mm
サイズ4 (サイズ3×2)	52×54mm

● 補充品



イメージングプレート

サイズ0, 1, 2, 3
各1枚入



ハイジーンバッグ (プロテクタカバー付)

サイズ0, 1, 2, 3
各300枚入



ハイジーンバッグ

サイズ0, 1, 2, 3
各250枚入

● 使用環境 (推奨)

- OS — Windows 7 Pro SP1、8、8.1
- CPU — Intel Core i シリーズ
- メモリ — 2GB以上
- HDD — 500GB以上
- ビデオボード — 512MB RAM (Nvidia or ATI) 以上
- 画面解像度 — 1280×1024以上
- イーサネットボード — 1GB/秒以上

薬事名: PSピックス2 一般的名称: コンピューテッドラジオグラフィ イメージングプレート (PSピックス2用)
 認証番号: 227ALBZX00009000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 届出番号: 27B1X00020227001 一般医療機器



アクテオングループ (ソプロ社)
フランス



千 064-0824 札幌市中央区北4条西20丁目2番1号 Nord 420BLD1F ☎(011)616-5814
 千 101-0052 東京都千代田区神田小川町1-11 千代田小川町クロス12F ☎(03)5217-4618
 千 464-0075 名古屋市千種区内山3-10-17 今池セントラルビル2F ☎(052)733-1877
 千 532-0033 大阪市淀川区新高1丁目1番15号 ☎(06)6396-4400
 千 812-0013 福岡市博多区博多駅東2-18-30八重洲博多ビル5F ☎(092)432-4618