

## KAI 替刃メス

販売名：KAI替刃メス 医療機器認証番号：219ABBZX00078000

### SURGICAL BLADE



- 《材質》  
 ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》  
 ・ディスプレイザブル（再使用禁止）  
 ・γ線滅菌済み  
 ・20枚入  
 ・10番台替刃の適合ハンドル：M3

20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)


	<b>NO.10</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.11</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.12</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.12B</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.15</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.15C</b>	1,000円(税別)

## KAI コーティング替刃メス

販売名：KAI替刃メス 医療機器認証番号：219ABBZX00078000

### DISPOSABLE COATED SURGICAL BLADE

低摩擦コーティングにより切れ味が向上し、脂肪の付着が低減されることで、優れた切れ味が持続します。

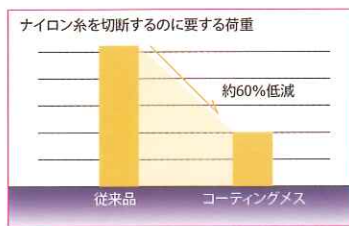

当社比

- 《材質》  
 ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》  
 ・ディスプレイザブル（再使用禁止）  
 ・γ線滅菌済み  
 ・20枚入  
 ・10番台替刃の適合ハンドル：M3

20枚入 1,000円(税別)

1枚あたり 50円(税別)

	<b>NO.10</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.11</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.12</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.12B</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.15</b>	1,000円(税別)
	<b>NO.15C</b>	1,000円(税別)

## KAI スカルペル

医療機器認証番号：219ABBZX00073000

### DISPOSABLE SCALPEL



- 《材質》  
 ・刃物用ステンレス鋼
- 《仕様》  
 ・ディスプレイザブル（再使用禁止）  
 ・EOG滅菌済み  
 ・20本/箱入


20枚入 2,000円(税別)

1枚あたり 100円(税別)

	<b>NO.10</b>	2,000円(税別)
	<b>NO.11</b>	2,000円(税別)
	<b>NO.12</b>	2,000円(税別)
	<b>NO.15</b>	2,000円(税別)

## KAI ブレードリムーバー

- ・誤って手をケガしないようガード付です。
- ・片手で操作出来る開閉式のカバーが、収納した刃を外に出しません。
- ・収納枚数10~15枚
- ・1個/箱入

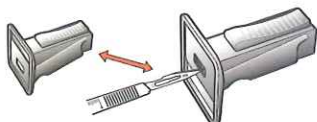

720円(税別)

## KAI ステンレス ナイフ ハンドル

医療機器届出番号 21B2X00002000003



- ・適合替刃NO: 10番台
- ・滅菌可
- ・1本入

M3 700円(税別)

## MI パンチ

販売名：MIパンチ 医療機器認証番号：226ABBZX00075000

### MI PUNCH STERILE • STAINLESS STEEL • SINGLE USE

#### 《特長》

- ・特殊刃先仕上げにより、切れ味が優れています
- ・広範囲のサイズを取り揃えています

#### 《材質》

- ・ブレード：ステンレス鋼

#### 《仕様》

- ・単回使用
- ・EOG滅菌済
- ・10本/箱入

#### 《適用》



- ・歯科

#### 《定価》

- ・1箱 5,000円 (税別)

10本入 5,000円(税別)

1本あたり 500円(税別)

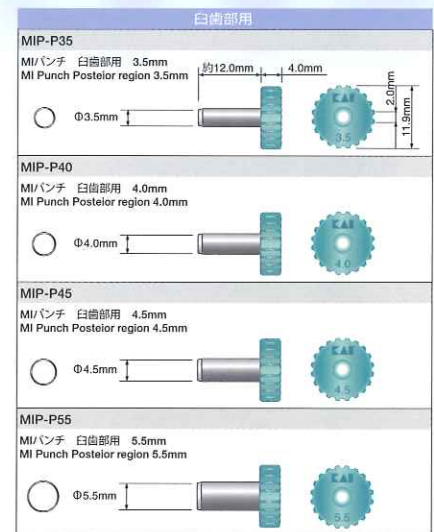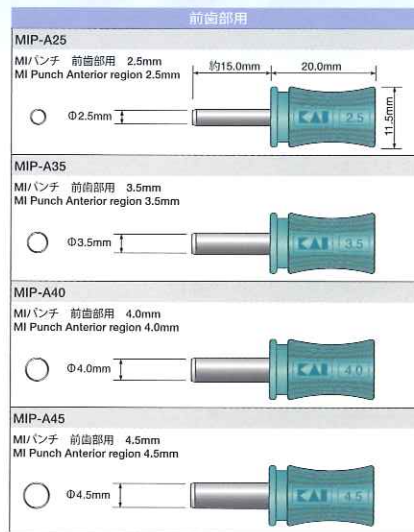


#### MIパンチについて

MIパンチはより安全で、低侵襲 (Minimal Intervention) なインプラント手術のために開発された歯内用パンチです。高い操作性を要求される口腔内での使用場所に応じて精密な治療ができるよう前歯部用と臼歯部用の2タイプを揃えました。臼歯部用は刃の全長を臼歯の高さに合わせ、ハンドルも短くすることで狭い空間での操作性を向上させています。また、ハンドル上部にテーパ形状の穴を開けており、パンチを回転させる際に練成充填器を当てて安定させることが可能です。前歯部用は刃の全長、ハンドルも臼歯部用より長くしており、広いスペースでの使用に適した形状となっています。操作性、使いやすさを追求したMIパンチが先生方の安全・低侵襲なインプラント手術のお役に立つことを願っております。

#### 使用例



1. MIパンチを器具 (エクスプローラ) に通し、センターの位置を決めます

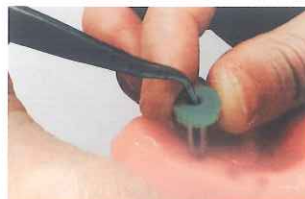

2. 器具 (鑷子) を上部の穴に入れて MIパンチを押しえます



3. 器具 (練成充填器) で安定させながら、手で回して切ります

## マイクロナイフ KAI エステティックナイフ

販売名：マイクロナイフ 医療機器認証番号：219ABBZX00196000

### ESTHETIC KNIFE STERILE • STAINLESS STEEL • SINGLE USE



結合組織の移植用ナイフ

エステティックナイフは結合組織移植術などの歯周形成外科用に適した形状のナイフです。先端の幅が1.5mm、最大幅2.0mmのテーパ形状のため刃先を繊細に動かすことが可能です。迅速な創治癒と審美的な結果を得るために是非お役立てください。

- 精密な加工技術で、精度が高く、安定した刃先形状
- 特殊刃先仕上げにより実現した、優れた切れ味

マイクロナイフ KAI エステティックナイフ EST-15/20

#### 《材質》

- ・刃 刃物用ステンレス鋼
- ・ハンドル ポリブチレンテレフタレート樹脂

#### 《仕様》

- ・ディスポーザブル(単回使用)
- ・EOG滅菌済み
- ・5本/箱入

5本入 13,250円(税別)

1本あたり 2,650円(税別)



記載されている価格に消費税は含まれません。また、商品の内容・価格・仕様・デザイン等を予告なく変更する場合があります。無断転載禁止。

お問い合わせは



販売元：クロスフィールド株式会社

〒130-8516 東京都墨田区江東橋1-3-6 TEL 03-5625-3306 FAX 03-3635-1060  
URL : <http://www.crossf.com> E-mail : [cf@yoshida-net.co.jp](mailto:cf@yoshida-net.co.jp)

製造販売元：カイ インダストリーズ株式会社