



S·P·E·C 3[®]
LED

- 3種類の硬化モード
- ハイパワーLEDで重合硬化
- 軽く、使いやすく、シンプルデザインの操作部

 COLTENE



高性能LED光照射器 ライトガイド2個付き

S.P.E.C. 3は、妥協なき性能を体現しています。
各種光重合型材料に対してすばやく深部まで重合硬化を行えるので、
硬化待ち時間を効果的に短縮できます。

さらに、S.P.E.C. 3のアルミニウム本体は密閉構造なので、患者間の消毒を簡単に行えます。
また、強力リチウムポリマー電池の採用により、1回の充電で10秒硬化300回以上に
相当する電池容量を得られます。3種類の硬化モード(3K、Standard、Ortho)を備えた
S.P.E.C. 3は、あらゆる臨床状況で最大の機能性を発揮します。

3種類の硬化モード

- ・スタンダードモード 想定されるほとんどの複合硬化に理想的なモードです。
- ・3Kモード 小児や絞扼反射患者など、時間が問題となる場合に重合硬化をすばやく行えます。
- ・Orthodonticモード ブラケット1つに対し3秒間隔を2回設け、ブラケットのフルアーチ全体を重合硬化します。

高光強度


- ・スタンダードモード： 5秒間で2mmの重合硬化
- ・3Kモード： 1秒間で2mmの重合硬化
- ・先端部からターゲットまで距離がある場合も効果的に重合硬化

■仕様

ハンドピース外形寸法	174.5 mm x 24.8 mm
ハンドピース重量	125 g
波長域	430 ~ 490 nm
光強度：	
スタンダードモード	1600 mw/cm ² ± 10%
3Kモード	3000 ~ 3500 mw/cm ²
照射回数：	
スタンダードモード	10秒の場合 約350回
3Kモード	3秒の場合 約300回

高出力ですばやく重合硬化結果

Coltene Synergy D6 A2/B2 シェード*

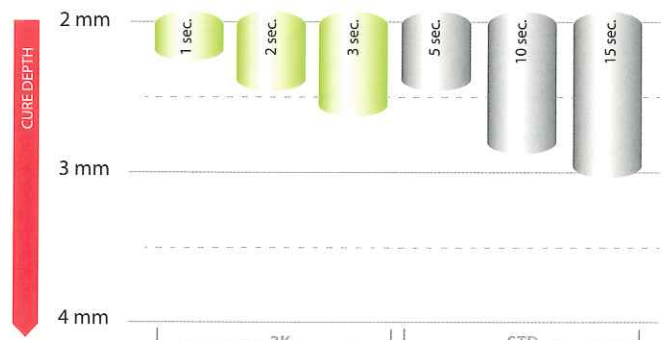

* 社内調べ

■S.P.E.C.3 LED光照射器一式

- ・ハンドピース本体 (バッテリー付き) 1個
 - ・ライトガイド 8mmターボ 1個
 - ・ライトガイド 11mmターボ 1個
 - ・ライトシールド 8x11mm 2個
 - ・衛生カバー 100枚
 - ・LED試験片 1個
 - ・チャージャーベース 1個
 - ・AC電源コード 1本
 - ・電源アダプター 1個
 - ・取扱説明書 1通
 - ・ドライバー (バッテリー交換用) 1個
- 歯科重合用光照射器 S.P.E.C.3 LED光照射器
一般医療機器 特定保守管理医療機器 13B2X10175000012

■スペアパーツ別売

商品名	
電源アダプター	1個
ライトシールド 8x11mm	20個
ライトシールド 11x11mm	20個
衛生カバー	100枚
ライトガイド8mmターボ	1個
ライトガイド11mm	1個
バッテリーパック	1個
チャージャーベース	1個
AC電源コード	1個

発売元



Coltene/Whaledent Inc.
235 Acot Parkway
Cuyahoga Falls, OH 44223 / USA
Tel. USA & Canada +1 800 221 3046
+1 330 916 880

Fax +1 330 916 7077



販売元



大阪本社：〒543-0062 大阪市天王寺区逢坂2丁目3番10号
TEL.(06) 6771-555 (代) FAX.(06) 6779-7518
名古屋営業所：〒464-0075 名古屋市中千種区内山1丁目2番6号
TEL.(052) 741-7011 (代) FAX.(052) 741-7014