



Pam

歯周ポケット測定器 パム

歯周検査がPamで変わる!

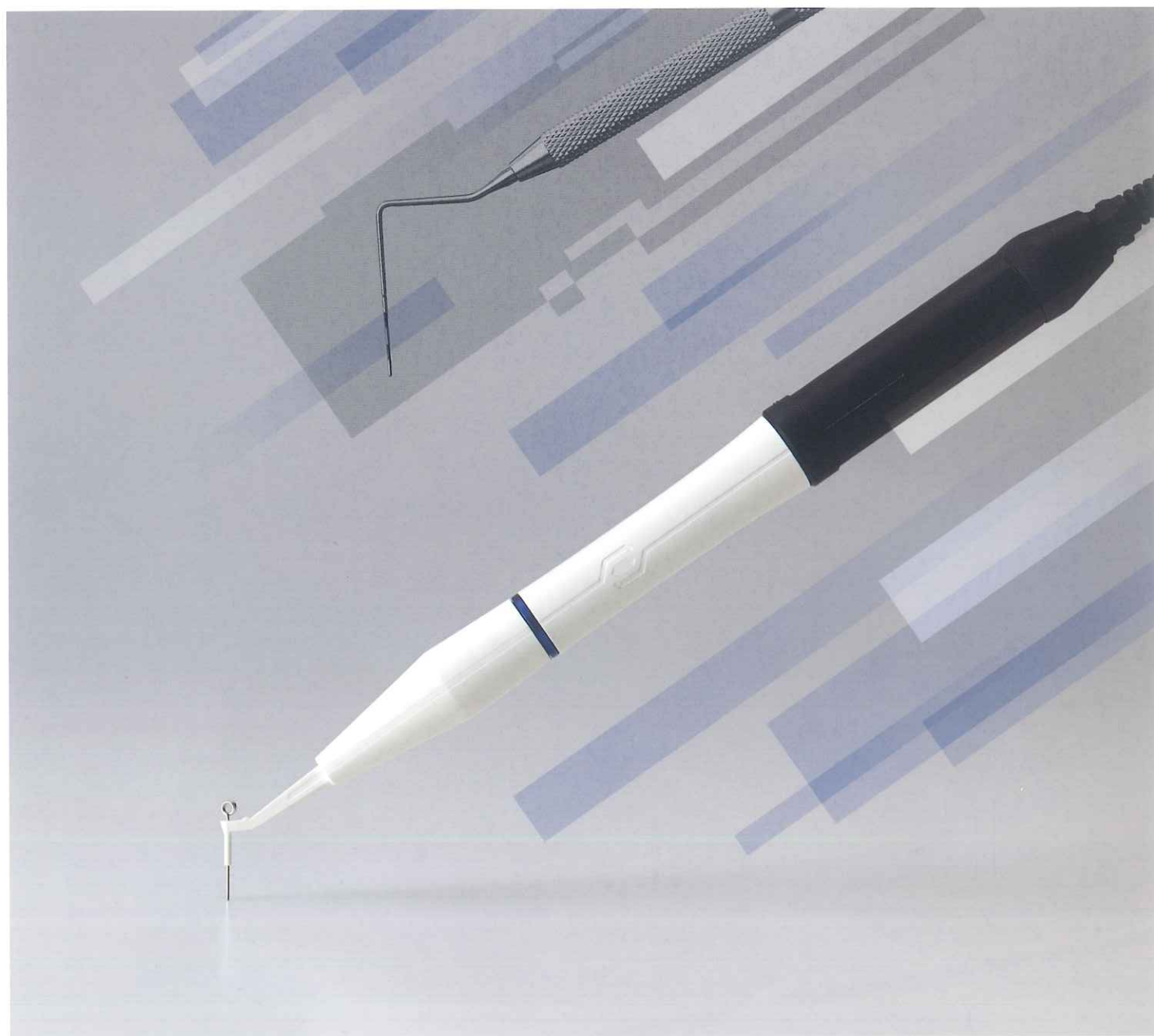


構成イメージ (USB無線フットスイッチを使用した場合)

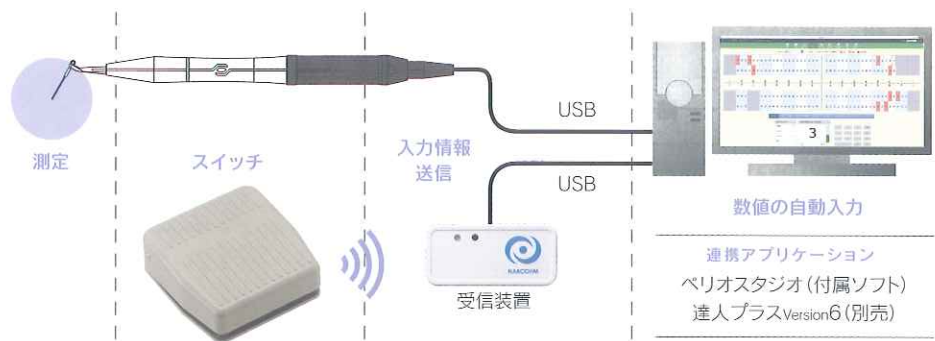

先端部は衛生的に優れたディスポチップ


先端部は取り外しが可能で、衛生面も考慮されたディスポタイプになっています。

また、患者さんの歯周ポケットの深さにあわせて使い分けできる7mmと13mmの2種類の長さをご用意しています。

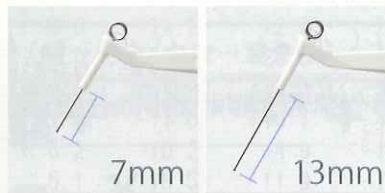

STEP3

連携したアプリケーションに自動入力

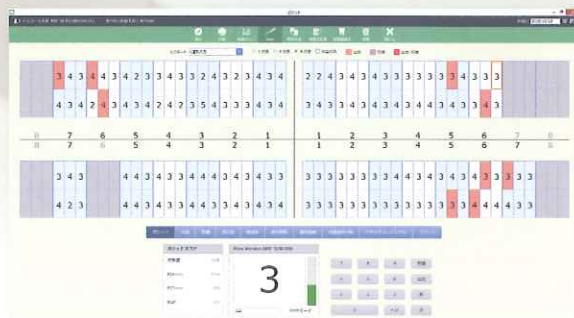


計測されたポケットの数値が付属の「ペリオスタジオ※」に自動的に入力されます。

※「達人プラスVersion6」(別売)と連携させることも可能です。

STEP4

印刷して活用

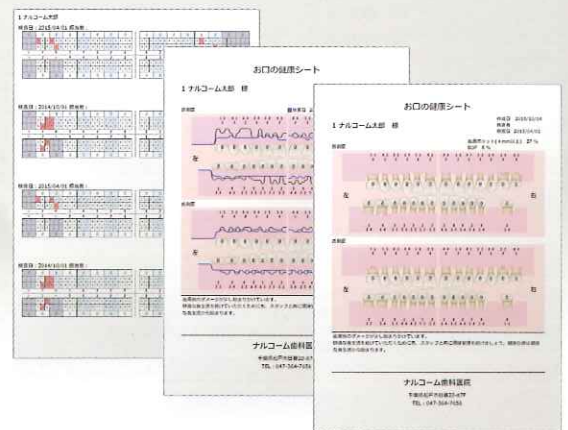

入力した数値はプリントアウトしてカルテに貼付したり、患者説明用として利用できます。

連携アプリケーションによってできること

	歯周データ管理	印刷可能パターン	レセコン 頭書きリンク	歯周データ カルテ連動
ペリオスタジオ (付属)	○	1点法 / 4・6点法 / 比較1点法 比較4・6点法 / カルテ用印刷 計5種類	—	—
達人プラスVersion6 (別売)	○	18種類 × 枠デザイン4種類 計72パターン	○※	○※

※頭書き、カルテ連動が可能なメーカー詳細は弊社までお問い合わせください。

歯周ポケット測定器

Pam

医院価格 128,000円

Pam 本体仕様


サイズ	16mm×185.8mm
重量	48g
定格電圧	DC 5V(USB/バスパワー)
消費電流	0.1A(最大)
USBコード長	2m

精度及び測定仕様

押し込み圧	最大25g以下
測定範囲	7mm 0~6mm
	13mm 0~12mm
最小表示単位	1mm
表示精度	±0.5mm

構成	・Pam本体	1本
	・Pamディスプレイヘッド7mm	2個
	・Pamディスプレイヘッド13mm	2個
	・ペリオスタジオ DVD	1枚

一般的名称 JMDN 70697000 歯周ポケット測定器
 機器の分類 特定保守管理医療機器 クラスII
 認証番号 228AIBZX00027000

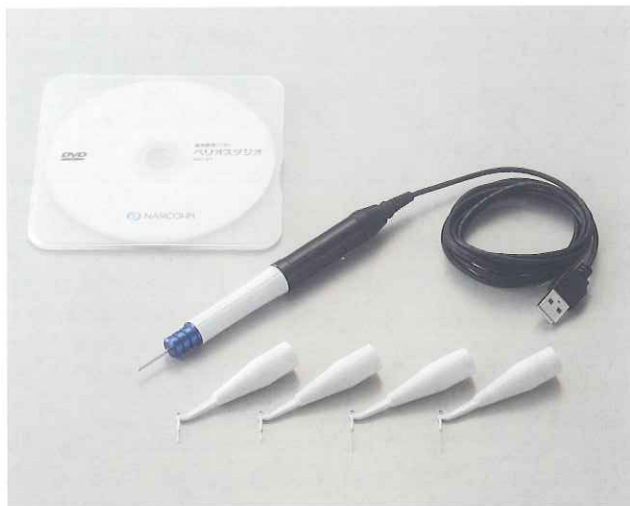

USB 1連有線フットスイッチ
 医院価格 10,000円

入力設定※1

通常	決定
長押し	出血



USB 2連有線フットスイッチ
 医院価格 20,000円

入力設定※1

	左	右
通常	仮入力	決定
長押し	戻る	出血



USB 1連無線フットスイッチ※2
 医院価格 40,000円

入力設定※1

通常	決定
長押し	出血



USB 2連無線フットスイッチ※2
 医院価格 70,000円

入力設定※1

	左	右
通常	仮入力	決定
長押し	戻る	出血

Pam本体
 +
 USB 1連有線フットスイッチ
 セット
 医院価格 138,000円

Pam本体
 +
 USB 2連有線フットスイッチ
 セット
 医院価格 148,000円

Pam本体
 +
 USB 1連無線フットスイッチ
 セット
 医院価格 168,000円

Pam本体
 +
 USB 2連無線フットスイッチ
 セット
 医院価格 198,000円

※1 初期設定の状態です。好みに合わせて変更できます。
 ※2 電源を必要としない通信技術[enoclean]を採用しています。

ペリオスタジオ 必要システム

対応OS	Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 ※XP、Vistaでは動作しません
ハードディスク	インストール用空きディスク 1GB 以上 ※登録データのための空きディスクは別途必要です。
画面解像度	1024 × 768 以上
その他	DVD-ROM ドライブ またはその互換ドライブ

※お使いのデータが増えた場合、そのデータを格納するためのハードディスクもしくはその他のメディアが別途必要になります。 ※ご使用の環境によっては、上記システムを満たしていても正常に動作しない場合がございます。 ※Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。

別売品

ディスプレイヘッド(100本入)
 Pamで使用するディスプレイタイプのヘッドです。

サイズ	医院価格
7mm	14,000円
13mm	14,000円



貸出機をご用意しています

Pamを使用感から入力までを実機でご確認いただけます。
 ご希望の方は弊社営業所までお問い合わせください。

製品の詳細は

※仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので予めご了承ください。
 ※価格は2016年11月現在のものです。消費税は含まれておりません。

本製品に関するお問合せ先

製造販売元

株式会社ナルコム

本社・工場 〒384-2107 長野県佐久市蓬田1251-239

TEL. 0267-51-5155 FAX. 0267-58-0577

松戸営業所 〒271-0091 千葉県松戸市本町20-8 松戸本町第二ビル7階 TEL. 047-364-7656 FAX. 047-364-7657

E-mail info@narcohm.co.jp URL http://www.narcohm.co.jp