

小型高圧蒸気滅菌器

セミオートタイプ

Nurse Ace
NA-220S

ナースエース
Nurse Ace

NA-220S

清潔

簡単

安全



シンプルな操作で高い信頼性と安全性を
実現したセミオートタイプ滅菌器

安全と安心の品質管理に徹し更なる品質向上を目指します

TOHOGIKEN Co Ltd.



ISO13485認証

清潔

滅菌処理を行うごとに、付属の計量カップで水を入れるため、常に清潔な水を使用することで衛生的です。



便利

精製水・蒸留水・水道水を使用することができます。精製水・蒸留水を使用する場合は200ccの水道水を貯水槽に注いで下さい。

<満水になると貯水槽満水ランプが点灯しますので排水ホースを使用して排水して下さい>

簡単で安全


スライド取っ手を使用したワンタッチ・ロック機構の採用で、ドアの開閉がスムーズです。



安全対策も万全

マイコンによるエラー診断・安全弁・漏電ブレーカー・温度ヒューズといった安全機能を装備し、トラブル発生時に適切な対処をすることができます。

■ 操作パネル名称

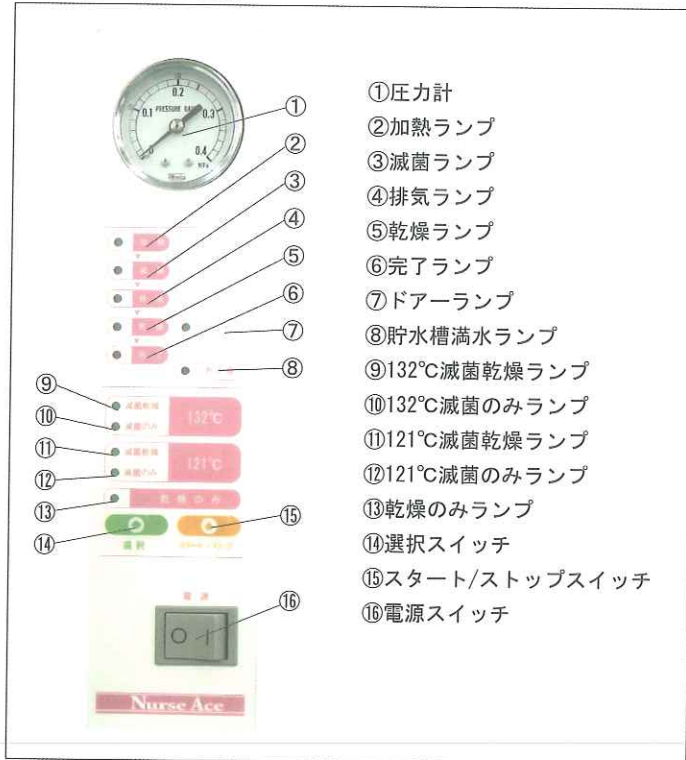

- ① 圧力計
- ② 加熱ランプ
- ③ 滅菌ランプ
- ④ 排気ランプ
- ⑤ 乾燥ランプ
- ⑥ 完了ランプ
- ⑦ ドアランプ
- ⑧ 貯水槽満水ランプ
- ⑨ 132℃滅菌乾燥ランプ
- ⑩ 132℃滅菌のみランプ
- ⑪ 121℃滅菌乾燥ランプ
- ⑫ 121℃滅菌のみランプ
- ⑬ 乾燥のみランプ
- ⑭ 選択スイッチ
- ⑮ スタート/ストップスイッチ
- ⑯ 電源スイッチ

■ 仕様

電源	AC/100V 50/60HZ
消費電力	1.3KVA
滅菌時間	121℃ : 20分 132℃ : 5分
乾燥方式	ドア開け乾燥
乾燥時間	30分
選択モード	121℃ 滅菌乾燥 132℃ 滅菌乾燥 121℃ 滅菌のみ 132℃ 滅菌のみ
使用水	精製水・蒸留水・水道水
外形寸法	W435×D530×H345
チャンバー寸法	φ220×355
重量	23kg
付属品	スノコ・計量カップ

※仕様、及び形状は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。

操作パネル・ロゴマークの色が選べる

操作パネルとロゴマーク(1セット)の色をピンクと青のそれぞれからお好みの色をお選びいただけます。

※ボディの色は同色(白)です。



日東産業株式会社

東京本社 〒132-0023 東京都江戸川区西一之江1-3-10
 TEL 03-5678-7191 FAX 03-5678-7193
 大阪営業所 〒571-0065 大阪府門真市垣内町4-21
 TEL 06-6900-1370 FAX 06-6900-1376
 福岡営業所 〒811-2413 福岡県糟屋郡篠栗町尾仲863-48
 TEL 092-948-3902 FAX 092-948-3903

代理店

