



歯科用ゴム製研磨材  
ジルコシャイン

# ZIRCOSHINE CA

ダイヤモンド  
砥粒含有


ジルコシャイン

口腔内装着後のジルコニアや二ケイ酸リチウムの研磨に  
ジルコニアを鏡面研磨し、表面を整えることが対合歯摩耗リスクの  
軽減につながると、近年、学会等で数多く報告されています。





NEW 3ステップ研磨 コース→ミディアム→ファインの順にジルコニアを研磨

試験条件：  
使用ポイント / #11  
回転速度 / 10,000min<sup>-1</sup>  
荷重 / 1N  
研磨時間 / 各1分 (トータル3分)

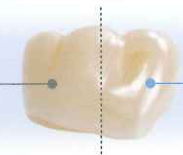

傷を少なく仕上げることが  
対合歯摩耗リスクの  
軽減につながります

試験条件：  
使用ポイント / #11  
回転速度 / 10,000min<sup>-1</sup>  
荷重 / 1N  
研磨時間 / コース1分、ファイン2分  
(トータル3分)

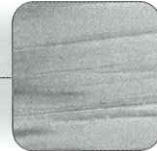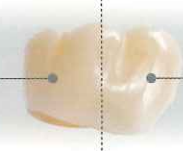

ツヤは出ているものの  
拡大してみると  
研磨傷が残っています

従来 2ステップ研磨 コース→ファインの順にジルコニアを研磨

※自社試験による

## 包装・価格


まずはお求め  
やすいキットで  
お試しください



### ジルコシャイン セレクトキット CA

1キット ¥5,600  
【キット内容】  
松風ビトリファイドダイヤ (28, 29) 各1  
ジルコシャイン コース (28) 2  
ジルコシャイン ミディアム (28) 1  
ジルコシャイン ファイン (28) 1  
パステーションII (ブルー、イエロー) 各1

【最高許容回転速度】  
ジルコシャイン: 20,000min<sup>-1</sup>  
松風ビトリファイドダイヤ: 30,000min<sup>-1</sup>

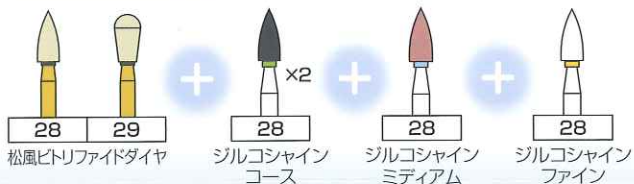

### ジルコシャイン CA

[28] 4本入 ¥3,300 [Cup] 3本入 ¥3,300

【形態】各種2形態  
【最高許容回転速度】20,000min<sup>-1</sup>  
【種類】3種  
● コース  
● ミディアム  
● ファイン  
■ 研磨材の色  
■ チューブの色

28 Cup

スムーズに  
形態修整が  
可能



### 松風ビトリファイドダイヤ CA

3本入 ¥2,900  
【形態】3形態  
【最高許容回転速度】30,000min<sup>-1</sup>

