



ケー・エックスIII [ケー・エックス スリー]

**KX-III**

Intraoral

### バッテリー内蔵の コードレスタイプなので 持ち運び・撮影も簡単

フル充電で100回以上の撮影が可能なバッテリーを内蔵し、電源のない場所でも撮影が可能です。

### かんたん操作で スピーディーな撮影が可能

撮影条件の設定がかんたんにでき、撮影準備にかかる時間を短縮できます。

### イメージングプレート、 CCDセンサ、 デンタルフィルム\*に対応

\*E・F感度推奨

### 軽量&コンパクトデザイン

持ち運びと撮影時の操作性を考えた軽量&コンパクトデザインは、訪問診療などの場面でのスムーズな撮影を可能にします。

バッテリー内蔵のコードレスタイプなので  
持ち運び・撮影も簡単

かんたん操作で  
スピーディーな撮影が可能

イメージングプレート、  
CCDセンサ、デンタルフィルム\*に対応

軽量&コンパクトデザイン

\*E・F感度推奨




ケース付き

ハンドスイッチ付き

一 般 的 名 称	ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置
販 売 名	ケー・エックスⅢ
型 式	KX-Ⅲ
電 源	LiPoバッテリー DC 22.2V
電 源 容 量	0.12kVA
高 電 圧 発 生 器	インバータ直流方式、先点火方式
最 大 定 格	60kV、2mA、2.0sec
管 電 圧	60kV(固定)
管 電 流	2mA(固定)
X 線 管 球	D-081B
焦 点 寸 法	0.8mm
照 射 野	φ60mm(照射筒先端)
照 射 回 数	29回/時間
焦点～照射筒先端	150mm
総 濾 過	1.5mmAl(min)

一 般 的 名 称	ポータブルアナログ式汎用一体型X線診断装置	
撮 影 モ ー ド	Film(ADULT、CHILD)、Digital(ADULT、CHILD)	
撮 影 時 間	0.01～2.00(sec) 0.01～0.20は 0.01secステップ 0.20～2.00は 0.05secステップ	
寸 法	(W)174×(D)200×(H)144	
重 量	2.4kg ケース収納時 約6kg	
医 療 機 器 の 分 類	管理医療機器、特定保守管理医療機器、設置管理医療機器	
認 証 番 号	226AABZX00049000	
構 成 品	KX-Ⅲ本体、ハンドスイッチ、収納ケース、 充電アダプター・電源ケーブル、ハンドストラップ、 本体首掛け・収納ケース用ベルト、三脚(オプション)	
充 電 器	入 力 電 圧	AC 100～240V、50～60Hz
	入 力 電 流	0.6～0.4A
	出 力 電 圧	DC 25.2V
	出 力 電 流	1.19A(最大)

寸法図(mm)

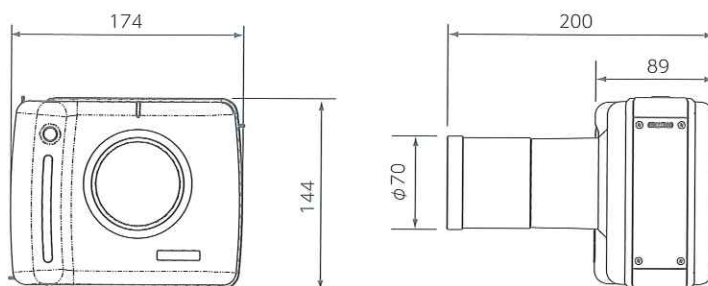

Imaging new visions. ▼ 見えるをかえる。▼



朝日レントゲン工業株式会社

<http://www.asahi-xray.co.jp>

〒601-8203 京都府京都市南区久世築山町376番地の3 TEL:075-921-4330 FAX:075-921-6675

※札幌・仙台・東京・名古屋・金沢・京都・大阪・高松・広島・福岡にショールームを開設しております。

※日本国内の各拠点の詳細につきましてはWEBサイトに掲載しております。

※仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。



朝日レントゲンメールマガジン

最新の製品情報・展示会情報・セミナー情報等をお送りします。

登録方法：asahi@f.blayn.jp に  
空メールを送信してください。