

レジン・石膏の研磨革命

WSPTスムーズバー

好評発売中

快適な切削力が
持続

熱伝導性が低い

目詰まりしにくい

チップがなく
切れ味が滑らか

研磨面が絹のような滑らかさ

ロングフルートはツーウェイ機能を持ち、局面、フラットな面両方に対応できる形態的にも使いやすいバーです。使い始めたら気に入って手放せなくなります。



オールラウンドタイプ
ジルコニアビット

コーンタイプ
ジルコニアビット

フルートタイプ
ジルコニアビット

WAX用TOOL
フルジルコニア


ショートストレートタイプ
フルジルコニア

ラウンドタイプ
フルジルコニア

ショートコーンタイプ
フルジルコニア

ニードルタイプ
フルジルコニア

ストレートタイプ
フルジルコニア

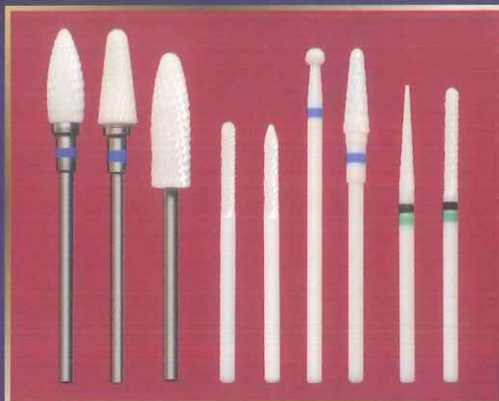

WSPTスムーズバーは…

1. 高精度クロスカット採用でノンクラスペンチャー・レジ床・歯科用焼石膏・石膏埋没材に効果発揮
2. 耐熱性・耐久性・耐腐食性・耐摩耗性・靱性が極めて高い
3. 形状が豊富ですから様々な場面で威力を発揮
4. 切削面は滑らかな光沢を放ち即ツヤ出しで滑沢な仕上がり
5. 目詰まりしにくく、切削物にあたったときに色がつかず圧倒的な清潔感で衛生的
6. 帯電しづらいので静電気を帯びづらい

WSPTスムーズバーシリーズ

オールラウンドタイプ ジルコニアビット

Z1



¥3,000

石膏とレジン切削するのに適していますが、その研磨面は驚くほどスムーズな面です。超硬石膏を削りましても、石膏が全くチップしませんし、レジンの場合もスムーズな面で、シリコンポイントを用いなくとも、すぐに仕上げ研磨に入れるほどです。

全 長：52.6mm
最大φ径：6.0mm
刃部長さ：14.5mm

コーンタイプ ジルコニアビット

Z2



¥3,000

切削した際の熱伝導性が低く熱くなりにくいいため、長時間使用でき、熱によって切削面が溶けだれせず滑らかに削れます。

全 長：52.6mm
最大φ径：6.0mm
刃部長さ：14.5mm

フルートタイプ ジルコニアビット

Z3



¥3,000

研削面積が広く、研磨が難しいナイロン系をはじめ、アクリル系・ポリエステル系などレジン全般や歯の模型などの焼石膏の形態修正や荒研磨に最適で切れ味が持続し寿命が長いです。

全 長：51.0mm
最大φ径：6.0mm
刃部長さ：20.0mm

WAX用TOOL フルジルコニア

Z4



¥3,000

金属床のデンチャーベースコネクター（上下顎スケルトン部）のWAX圧接と表面のスティップル（Stipple）いわゆる点描（細かい凹凸）形成に用います。

全 長：38.5mm
最大φ径：2.3mm
刃部長さ：13.0mm

ショートストレートタイプ フルジルコニア

Z5



¥3,000

主にレジン床の小帯部や結節部の研磨に用いたり、人工歯の咬合調整にも良い。クラウンブリッジワークのハードレジンの歯冠部形態修正用にも適しています。

全 長：38.1mm
最大φ径：2.3mm
刃部長さ：14.0mm

ラウンドタイプ フルジルコニア

Z6



¥4,500

石膏マージンのトリミングや金属床のフィニッシュライン部やメジャーコネクター（大連結子）やマイナーコネクター（小連結子）の表面にスティップル（Stipple）を施す場合に用いる。連続性のある細かな凹凸を簡単に付けられる。仕上げる繊細な美しいスティップル表面になる。石膏マージンのトリミングも繊細にできます。

全 長：50.0mm
最大φ径：3.0mm
刃部長さ：2.8mm

ショートコーンタイプ フルジルコニア

Z7



¥4,500

切れ味がよく、持続性も高いので熱可塑性レジンの研磨に最適です。研磨面が絹のような滑らかさですからすぐに仕上げ研磨ができ省力化にもつながります。

全 長：50.0mm
最大φ径：4.0mm
刃部長さ：13.0mm

ニードルタイプ フルジルコニア

Z8



¥3,000

先端が細くなっていますから射出成形時のバリを取り除いたり、スプリントの切り出し等、細部の研磨に最適です。

全 長：44.5mm
最大φ径：2.3mm
刃部長さ：17.0mm

ストレートタイプ フルジルコニア

Z9



¥3,000

目詰まりしにくく焼き付きがないため、手に引っかからず削りやすい。レジン・石膏にチップがなくスムーズに削れます。

全 長：44.5mm
最大φ径：2.3mm
刃部長さ：16.0mm

●一般医療機器 歯科用研削器材 70908000 ●製造販売届出番号：11B3X10042000001

記載されている価格は標準価格です。

《製造販売元》 合同会社 WSPT ジャパン

〒341-0018
埼玉県三郷市早稲田 3-7-2 カーサ吉岡 102
TEL&FAX：048-954-5636
携帯：090-1803-1565
E-mail：mqxjb@ybb.ne.jp
http://wspt-japan.com/

お問い合わせ

