

New Product

October 23st, 2017 YDM

ファイバーカッター タイプ2

標準価格 ¥11,000

コード No.08071

ファイバーポストを切りたい長さに簡単にカット!

Renewal

穴のサイズが6種類に増えて、対応するファイバーポストのサイズが広がりました。




※全長 / 130mm



穴径 (mm)
 Φ 0.8
 Φ 1.05
 Φ 1.25
 Φ 1.5
 Φ 1.65
 Φ 2.1

●透明な【メモリ付ホルダー】でファイバーポストを“測れる”“飛ばさない”

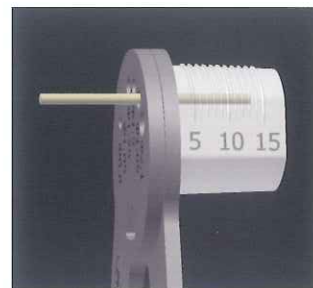

- カットしたい長さをメモリで確認できます。(範囲 / 5 ~ 15mm)
- カットしたポストは、ホルダーの中に入ります。

別売品 ホルダー
 コード No.90458 標準価格 ¥2,700

●ファイバーポストの外周に沿うようにカットする
 【ホールカッター式】で、切断面が“毛羽立ちにくい”



ファイバーカッタータイプ2
 で切断



ラウンドバー
 で切断



カッティングディスク
 で切断





ニッパー
 で切断

New Product

Add lineup

先端精度・操作性を細部までこだわり誕生した
マイクロインストルメント【MDS-180 シリーズ】にラインナップが追加!

マイクロスコープ下での使用に適した 180 mmシリーズ。視界に手指が入り込みやすく視野を妨げません。持針器、歯肉バサミについて、ピンセットがラインナップされました。

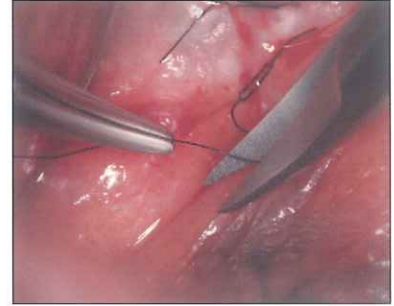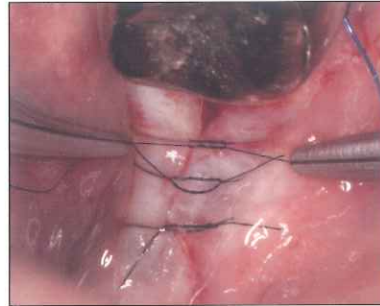

写真提供：千栄寿先生（せん歯科医院／CID-club,SJCD）

ピンセット MDS-180



標準価格 各¥68,000

先端精度



●先端が点ではなく、面で合わせり微細な組織、縫合糸を確実に保持します。

保持力



●保持部に滑り止めの超硬を溶射しており、高い保持力が得られます。

操作性




●ハンドル部に開閉距離を一定に保つストッパーがついています。過度な先端の開きと握りこみを防ぎ、スムーズに操作できます。



直
コード No.32421

縫合糸保持許容サイズ/6-0~8-0

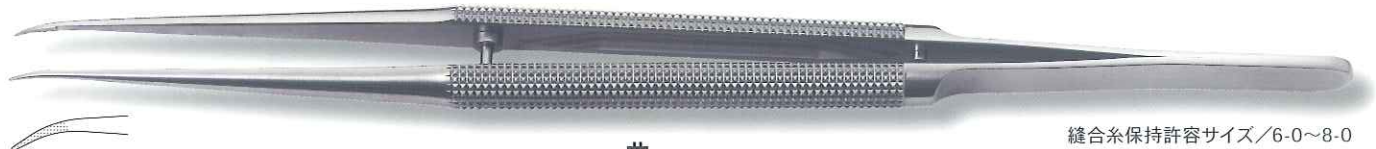

曲
コード No.32422

縫合糸保持許容サイズ/6-0~8-0



リング直
コード No.32423



リング曲
コード No.32424

※全長/180mm

アライナー用プライヤー

標準価格 各¥24,000

マウスピース型矯正装置【アライナー】を治療状況に合わせて、形状加工できます。

穴あけタイプ

- スムーズな切れ味!
- バリが残らず後処理不要!

切断時、凹側と凸側の全周が同時にあたるのではなく、先端側の1点のみが先にあたります。

切断のきっかけとなる力が1点に集中するため、切れ味が良く、きれいな切り口になります。

ティアドロップ コード No.22210


- アライナーの歯頸部辺縁にエラスティックをかけるための、ティアドロップ状の穴をあけることができます。

ホールパンチ コード No.22213

- リングボタンやブラケットを併用する際、アライナーの辺縁に装着位置を確保するための、半月状の穴をあけることができます。その際、凸側の中央ラインで中央位置を特定できます。



【ティアドロップ】

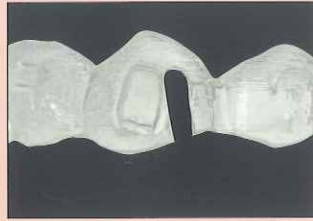

【ホールパンチ】



※全長 / 130mm

くぼみ付タイプ

- 先端部の厚みが薄いため切縁近くまで入ります。
- 切縁近くにくぼみを付与することができます。



バーティカル コード No.22211

- 頬側、舌側の近遠心に垂直的なくぼみを付与できます。

ホライズンタル コード No.22212


- 頬側、舌側に水平的なくぼみを付与できます。



【バーティカル】



【ホライズンタル】

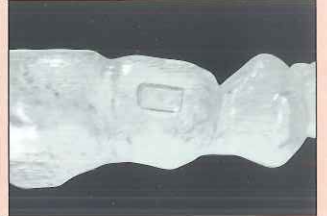

New Product

クラウンリムービングプライヤー PRO 上顎前歯用

標準価格 ¥24,000

コード No.21080

Add lineup

試適クラウンを壊さず・傷つけずに撤去!

破折やキズに細心の注意が必要なセラミッククラウン
やハイブリッドセラミッククラウン等に有効です。



臼歯部には「クラウンリムービング
プライヤー PRO」がオススメです。

PAT.P

ホールグリップ効果

唇側面 クラウンの豊隆部をつかみます。先端部のホール（穴）
が豊隆部を包みこみ、縁のグリップ効果により、
安定してクラウンを把持できます。

[正面観]



[側面観]



[断面観]



※イラストはチップ内で得られている効果のイメージです。

○ ホールグリップ


[先端部ホール]



チップ内面には窪みを
付与し、チップ上からでも
「ホールグリップ効果」
が得られます。

フレキシブルフィット効果

口蓋側面 舌側窩にあわせてチップが変形してフィットします。
さまざまな凹形状に対応。面で当たることで滑りにくく
安定して把持できます。

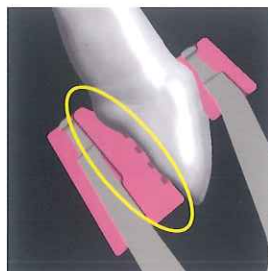


○ フレキシブルフィット



チップ内面に操作方向と逆に効く
滑り止めの溝がついています。

バネによる微調節効果

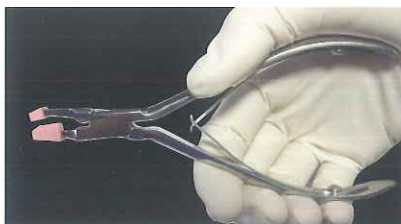


- バネの反発力により、過度な
ハンドルの握りこみを防ぎます。
- 力のコントロールがしやすく
クラウンの破折を防ぎます。

医療機器届出番号 11B1X1000642D034
一般的名称 歯科用起子及び剥離子



※全長 / 135mm

※付属品 / UAチップL(唇側用)P(口蓋側用)各5入 1セット

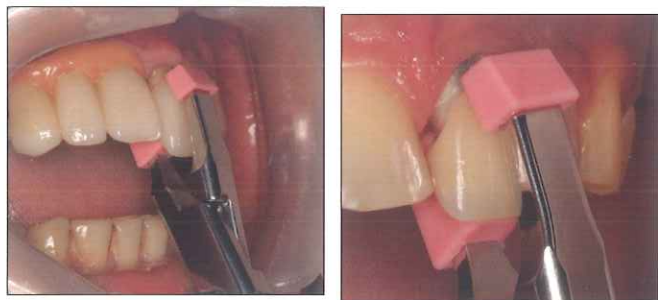

写真提供: 甘利佳之先生 (アマリ歯科クリニック 院長)

単品 UAチップL(唇側用)P(口蓋側用)各5入
コード No.90459 標準価格 ¥2,000

※チップ / 材質 Si 耐熱温度 260℃

※製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。

※掲載製品の標準価格は、2017年10月23日現在のものです。※標準価格に消費税は含まれておりません。

製造販売元 **株式会社YDM**

〒355-0042 埼玉県東松山市今泉28 医療機器許可番号 11B1X10006

問合先 デンタル事業部 〒114-0014 東京都北区田端6-5-20 TEL03-3828-3161 FAX03-3827-8991

http://www.ydm.co.jp/ E-mail ydm@ydm.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪 〒564-8650 吹田市垂水町3丁目33番18号 TEL06-6380-2525

東京 〒110-8513 台東区上野2丁目11番15号 TEL03-3834-6161

http://www.dental-plaza.com/