

Transform™

HEAT MOULDABLE IMPRESSION TRAYS

Astek
INNOVATIONS



1. お湯に浸漬



2. その場で形を調整



3. トランスフォーム完成

トレーの形
自由自在



製品動画はこちら

医療機器の分類：一般医療機器
一般的名称：歯科印象採得用トレー
販売名：Astek トランスフォームトレー
届出番号：27B2X00091000069

お湯で形を変えられる

70℃以上のお湯に 20 秒間漬けるだけ。

給湯ポットのお湯でも使えるので往診現場でも便利です。

変形させた形を 10 秒ほど維持すればトレーに硬さが戻ります。

(流水で流せばすぐに硬くなります。)



気軽に使える価格

1 個あたり約 108 円。

ディスプレイでも気軽に使える価格です。




印象材を保持しやすいデザイン

印象材の圧接時に圧を加えるためのフィンガーパッドを付与。

また印象材撤去時の歪みを減少させる維持溝をしっかりと付与。



LINE UP

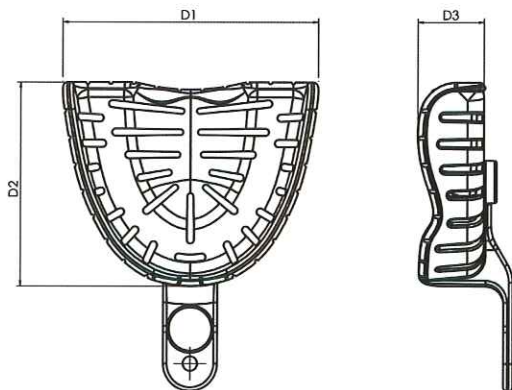

単位：mm

規格	番号	D1	D2	D3
有歯 下顎 ラージ	#1 (紫)	74	60	16
有歯 上顎 ラージ	#2 (紫)	79	60	21
有歯 下顎 ミディアム	#3 (青)	70	54	15
有歯 上顎 ミディアム	#4 (青)	71	56	18
有歯 下顎 スモール	#5 (緑)	66	50	14
有歯 上顎 スモール	#6 (緑)	66	49	20
有歯 アソート 12入	各規格 2入	—	—	—

単回使用 標準医院価格：12 個入 / **1,300 円**



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35
TEL 06-6773-3333 (代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2
TEL 03-3835-2653 (代)

九州営業所 〒816-0093 福岡市博多区那珂 6-24-21
URL : <http://www.momose-dm.co.jp/> TEL 092-575-6060 (代)

お問い合わせは