

アメリカンイーグル

ハンドインstrument

GC



AMERICAN EAGLE INSTRUMENTS® INC.



DAVIS 6/2015 FOR AET



American Eagle
INSTRUMENTS®

特許
技術

XP XP Pro Thin
XP series

あなたのSRPをサポート

XP

アメリカンイーグルXPシリーズはシャープニング直後のような
シャープさを持続できるシャープニングフリーのインスツルメントです。
超音波スケーラーの仕上げやSRPには
軽い力で効率良く作業ができる
アメリカンイーグルXPがお勧めです。

切れ味持続!

シャープニング不要!

ブレードの耐久性試験	
試験方法: 牛歯のエナメル質に100gの圧をかけて25mm幅でストローク。	
ステンレススチール	XP
1,500回のストローク	15,000回のストローク
 standard instrument	 XP series instrument



204SD XP

Independent tests performed at the University of Toronto
by Dr. Phillip A. Watson, Dept. of Biological and Diagnostic Sciences.

204SD XP



より質の高いSRPやSPTに

XP Pro Thin™

シャープニングフリーはそのままに、XPよりもさらに細くなった極細ブレードで、
歯周ポケットなどへの挿入を负担なくスムーズに行えます。
より質の高いSRPやSPT・メンテナンスには、
アメリカンイーグルXP Pro Thinがお勧めです。



切れ味持続!

シャープニング不要!

ブレードが極細!



ブラックジャック XP Pro Thin



GA13-14 XP Pro Thin

M23 XP Pro Thin

あなたのパートナーに最適な『アメリカンイーグル™』を選びましょう

グレーシーキュレット

ブレードの材質

- ステンレススチール
- XP
- XP Pro Thin

ステンレススチール

鋭い切れ味が持続する
“TALON TOUGH”



熱処理とアイステンパリングを施し誕生した、特殊ステンレス合金TALON TOUGH(タロン・タフ)。硬く鋭い鷲の爪の意味を持つこのブレードは、シャープな切れ味が持続し、高いレベルの耐久性と耐蝕性を実現します。

XPシリーズ

XP

XP Pro Thin

特許技術

特許技術「XPテクノロジー™」によってより質の高い歯周治療をサポート



独自の特許技術「XPテクノロジー™」によって誕生したXPシリーズは、ブレードのプラズマフュージョン(特殊加工)によってダイヤモンドのような硬い表面を持ち、ブレードの耐久性をアップ。シャープニング直後のような切れ味が持続できるシャープニングフリーのインストゥルメントを実現しました。

ブレードの幅

- ステンレススチール
- XP
- XP Pro Thin



ステンレススチール

硬い歯石や大きな歯石の除去に

XP

超音波スクレーラーの仕上げやSRPの処置に

XP Pro Thin

SPTやメンテナンスの処置に

10% 減 10% 減

ハンドルの種類

- S
- L
- X
- X



X X ハンドル(イーグルライト)の特長

識別しやすい全7色



正確に操作できる“SURE GRIP HANDLE”
フラットな3本リングとファインカットが施されたハンドルは、水分や血液・だ液が付着したグローブをしていても、滑りにくく繊細な作業を正確に行うのに適しています。

※ Xハンドルは形態別に色調が決まっています。

管理のポイント

洗浄・滅菌にカセット

包装・希望医院価格 ●
1個=¥11,300



※ 製品にインストゥルメントは含まれておりません。

管理方法

ハンドインストゥルメントは、刃部損傷、破折を防ぐためカセットに入れて刃部が当たらないことを確認し、洗浄(超音波、ウォッシュャディスタインフェクター)、滅菌(オートクレーブ)などを行い取り扱ってください。



※ カセットにインストゥルメントを入れて超音波洗浄している場面です。

切れ味の確認にテストスティック

包装・希望医院価格 ●
1本入=¥680 / 6本入=¥3,350



※ スクレーラーやキュレットの刃部の鋭利さを確認するためのスティックです。

使用方法

インストゥルメントの第一シャングをテストスティックに平行にし余分な力を入れず軽く圧をかけます。この時インストゥルメントは引きません。

第一シャングのエッジがテストスティックに

食い込むような引っかかり感がある(鋭利なカッピングエッジ) かみ合わず表面を滑ってしまう(鈍なカッピングエッジ)

- ステンレススチール
- XP
- XP Pro Thin

使用可能

シャープニング
買換え時期



シックルスクレーラー

その他のハンドインストゥルメント

鋭角な刃先は、根面にフィットし、シャープな切れ味が作業効率をアップさせます。

グレイシーキュレット(G)

スタンダード



グレイシーディープポケット(DP)

Gタイプよりも
第一シャンクが
3mm長い



5mm以上の
深い歯周ポケットや
根面に有効。

ステンレススチール

XP



G1-2 [前歯部]

[S L X] [X]



G3-4 [前歯部]

[S L X] [X]



G5-6 [前歯部]

[S L X] [X]



G7-8 [臼歯部]

[S L X] [X]



G9-10 [臼歯部]

[S L X] [X]



G11-12 [臼歯部(近心)]

[S L X] [X]



G13-14 [臼歯部(遠心)]

[S L X] [X]



G15-16 [臼歯部(近心)]

[S L X] [X]



G17-18 [臼歯部(遠心)]

[S L X] [X]

ステンレススチール

XP



G1-2DP [前歯部]

[S L X] [X]



G3-4DP [前歯部]

[S L X] [X]



G5-6DP [前歯部]

[S L X] [X]



G7-8DP [臼歯部]

[S L X] [X]



G11-12DP [臼歯部(近心)]

[S L X] [X]



G13-14DP [臼歯部(遠心)]

[S L X] [X]




G15-16DP [臼歯部(近心)]


[S L X] [X]

「G11-12」「G13-14」により角度をつけた「G15-16」「G17-18」

上顎にあたって操作がしにくい大臼歯部近心隣接面に

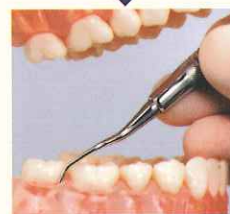

グレイシーキュレットG11-12

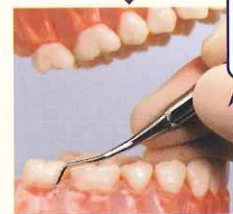

グレイシーキュレットG15-16

操作がしにくい
臼歯部に最適

アメリカンイーグルはG11-12、G13-14のシャンクの角度を強くしたG15-16、G17-18の形態を追加。操作がしにくい臼歯部でも容易に作業可能です。


グレイシアクセス(GA)

Gタイプよりも
第一シャンクが
3mm長く、
ブレード長が半分



深い歯周ポケットや
狭い根面・根分岐部に
有効。

グレイシークュレット ブレード形状の比較

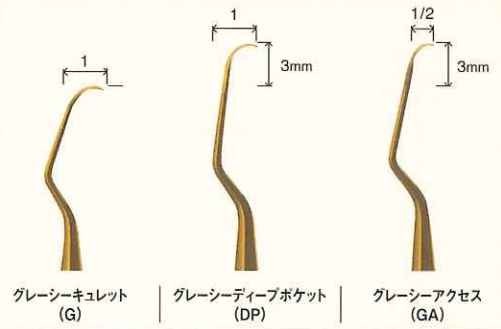

ステンレススチール XP NEW XP Pro Thin



GA00-0 [前歯部]

[S L X] [X] [—]



GA1-2 [前歯部]

[S L X] [X] [X]



GA3-4 [前歯部]

[S L X] [X] [—]



GA5-6 [前歯部]

[S L X] [X] [—]



GA7-8 [臼歯部]

[S L X] [X] [X]



GA11-12 [臼歯部(近心)]

[S L X] [X] [—]



GA13-14 [臼歯部(遠心)]

[S L X] [X] [X]



GA15-16 [臼歯部(近心)]

[S L X] [X] [X]

GA00-0

歯列不正の下顎前歯根面部や垂直性ポケットに
「グレイシアクセスGA00-0」



グレイシアクセスGA00-0

ブレードと第一シャンクの改良で、深くて狭い前歯部の垂直性
の歯周ポケットに有効です。



包装・希望医院価格●

ステンレススチール S L 1本=各¥3,310
 X イーグルライト 1本=¥3,630
 XP X イーグルライト 1本=¥5,900
 XP Pro Thin X イーグルライト 1本=¥6,500

Sickle Scalars

シッケルスケラー

ステンレススチール

XP

XP Pro Thin

S

L

ⓧ

ⓧ

歯肉縁上の歯石除去はもちろんXPシリーズは、ブレードが細いので特に狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすいです。
超音波スケラーでのスケリング実施後のチェック用インストゥルメントとしても使用できます。

ステンレススチール

XP

NEW

XP Pro Thin



H5-33 [前歯部]

[S L ⓧ] [ⓧ] [—]



H6-7 [前歯部]

[S L ⓧ] [ⓧ] [—]



J4-U5 [前歯部]

[S L ⓧ] [ⓧ] [—]



M23 [前歯部・臼歯部共用]

[—] [ⓧ] [ⓧ] [ⓧ]



ブラックジャック [前歯部・臼歯部共用]

[—] [ⓧ] [ⓧ]



204S [臼歯部]

[—] [ⓧ] [—]



204SD [臼歯部(遠心)]

[—] [ⓧ] [—]

M23 XP / M23 XP Pro Thin



M23 XP




M23 XP Pro Thin

M23 XP Pro Thinは、M23よりブレードが細いので特に狭窄した歯間部や歯肉溝などに挿入しやすくなっています。



M23 XP

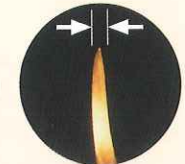

M23 XP Pro Thin

※M23 XP Pro ThinはM23Tの後継製品です。

ブラックジャック



ブラックジャック XP



ブラックジャック XP Pro Thin

適度な彎曲と角度があり、叢生部位の歯間部や臼歯部隣接面など、幅広く使用可能です。

204S / 204SD



204S XP



204SD XP

臼歯部に使いやすい204SDは、204Sより第一シャークが長いので、臼歯部・遠心にアクセスしやすいシッケルスケラーです。

包装・希望医院価格●

ステンレススチール

S

L

1本=各¥3,310

ⓧイーグルライト 1本=¥3,630

XP

ⓧイーグルライト 1本=¥5,900

XP Pro Thin

ⓧイーグルライト 1本=¥6,500

※スケラー-M23: ステンレススチールはXハンドルのみの販売です。

関連製品



シャープニングストーン

SHARPENING STONE

包装・希望医院価格●

1歯1個=¥13,650

ステンレススチールタイプのシャープニング用アーカンサスストーンです。オートクレーブ滅菌(140℃以下)、薬液消毒も可能です。

※XPシリーズ・チタンインストゥルメントはシャープニング不要です。

その他のハンドインスツルメント

Titanium Instruments チタンインスツルメント

チタン製のブレードにすることでチタン製アバットメントに引っかかり傷などの損傷を与えにくく、メンテナンスが行えます。
また、ブレードの幅は、挿入しやすいように薄くし日本オリジナルの設計にしました。



ネブラスカ ランガー N128-L5 [前歯部]



パーンハルト B5-6 [臼歯部]



ランガー L3-4 [臼歯部]



204S [臼歯部]



パーンハルト B5-6

包装・希望医院価格●
ⓧイーグルライト 1本=¥5,900


※チタンインスツルメントのハンドルは、Xハンドル(イーグルライト)のみです。

Explorers エクスプローラー



11-12

グレーシーキュレット11-12と同じ形態で、1本で全顎の根面全体を探知できます。ハンドルは、3/8インチXハンドルのため軽く使いやすいです。

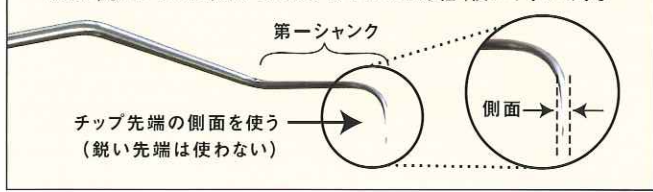

包装・希望医院価格●
片頭 1本=¥1,600
両頭 1本=¥1,940

11-12/11-12DP ⓧイーグルライト 1本=¥2,290

Probes プローブ



(ブラック)WHOB

(イエロー)12Y

(ブラック)12B

(ブラック)N2B

包装・希望医院価格●
片頭 1本=¥2,960
両頭 1本=¥3,310

TNT Composite Instruments TNTコンポジットインスツルメント



4 TN

5 TN

6 TN

9 TN

包装・希望医院価格●
4・5・6・9 TN 1本=¥4,430



臼歯咬合面への充填・形成に適しています。

NEW MCB21A TN

包装・希望医院価格●
MCB21A TN 1本=¥5,280

Interproximal Carvers インタープロキシマルカーバー





IPC

IPC THIN

包装・希望医院価格●
IPC 1本=¥2,730
IPC THIN 1本=¥4,430

<製品コード一覧>	ブレードタイプ	ステンレススチール			XP	XP Pro Thin
	ハンドルタイプ	S	L	X	X	X (XP Pro Thin タイプ)
グレーシーキュレット (G)	G1-2	0209B2140100	0209B2130100	0226B1150100	0234B0810010	-
	G3-4	0209B2140150	0209B2130150	0226B1150150	0234B0810020	-
	G5-6	0209B2140200	0209B2130200	0226B1150200	0234B0810030	-
	G7-8	0209B2140250	0209B2130250	0226B1150250	0234B0810040	-
	G9-10	0209B2140300	0209B2130300	0226B1150300	0234B0810050	-
	G11-12	0209B2140350	0209B2130350	0226B1150350	0234B0810060	-
	G13-14	0209B2140450	0209B2130450	0226B1150450	0234B0810090	-
	G15-16	0209B2140500	0209B2130500	0226B1150500	0234B0810100	-
	G17-18	0209B2140600	0209B2130600	0226B1150600	0234B0810110	-
グレーシーディープポケット (DP)	G1-2DP	0209B2180100	0209B2170100	0226B1170100	0234B0830010	-
	G3-4DP	0209B2180150	0209B2170150	0226B1170150	0234B0830020	-
	G5-6DP	0209B2180200	0209B2170200	0226B1170200	0234B0830030	-
	G7-8DP	0209B2180250	0209B2170250	0226B1170250	0234B0830040	-
	G11-12DP	0209B2180300	0209B2170300	0226B1170300	0234B0830050	-
	G13-14DP	0209B2180350	0209B2170350	0226B1170350	0234B0830060	-
	G15-16DP	0209B2180400	0209B2170400	0226B1170400	0234B0830070	-
グレーシーアクセス (GA)	GA00-0	0209B2160100	0209B2150100	0226B1160100	0234B0820010	-
	GA1-2	0209B2160150	0209B2150150	0226B1160150	0234B0820020	0138B1330010
	GA3-4	0209B2160200	0209B2150200	0226B1160200	0234B0820030	-
	GA5-6	0209B2160250	0209B2150250	0226B1160250	0234B0820040	-
	GA7-8	0209B2160300	0209B2150300	0226B1160300	0234B0820050	0138B1330020
	GA11-12	0209B2160350	0209B2150350	0226B1160350	0234B0820060	-
	GA13-14	0209B2160400	0209B2150400	0226B1160400	0234B0820070	0138B1330030
	GA15-16	0209B2160450	0209B2150450	0226B1160450	0234B0820080	0138B1330040
シクルスケーラー	H5-33	0209B2220050	0209B2210050	0226B1180050	0234B0840010	-
	H6-7	0209B2220100	0209B2210100	0226B1180100	0234B0840020	-
	J4-U5	0209B2220400	0209B2210400	0226B1180400	0234B0620000	-
	M23	-	-	0234B0520000	0234B0630000	0138B1340010
	ブラックジャック	-	-	-	0234B0610000	0138B1350010
	204S	-	-	-	0234B0530000	-
	204SD	-	-	-	0234B0540000	-

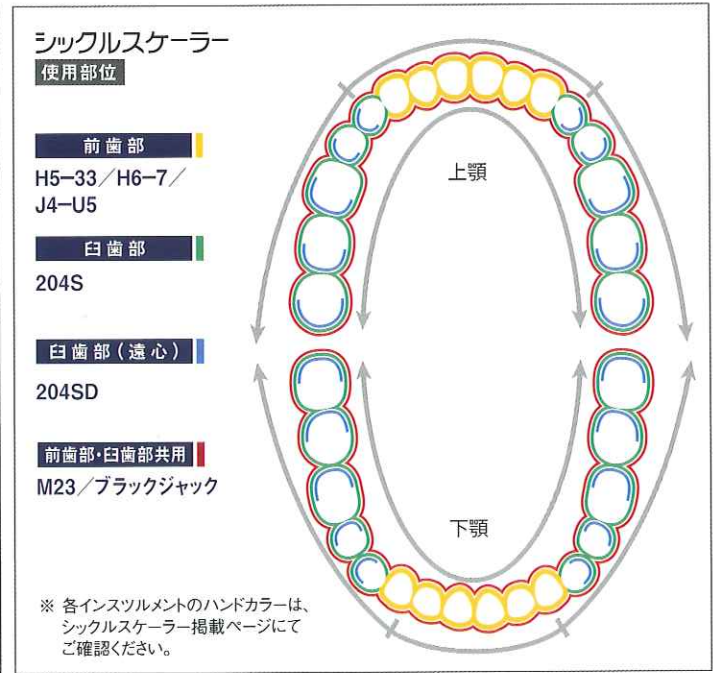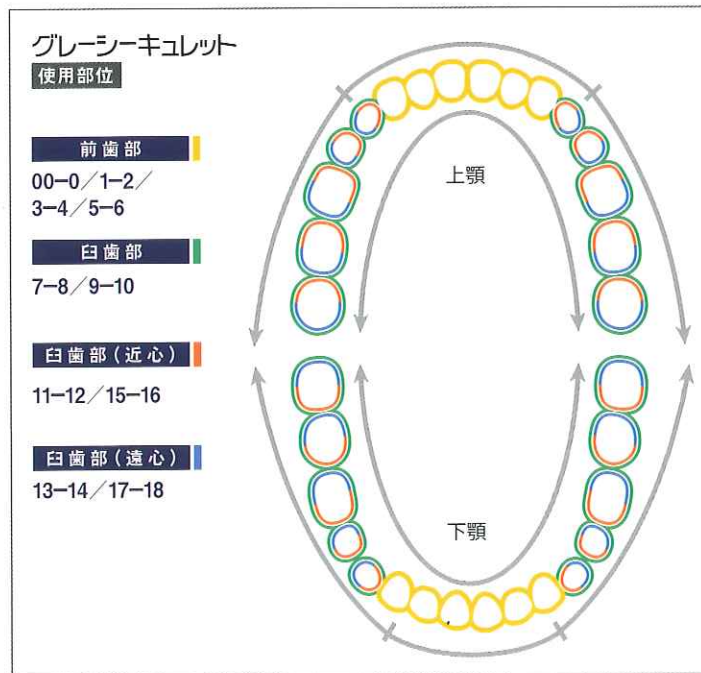

グレーシー キュレット	一般医療用具	13B1X00155000071	スケーラー	一般医療機器	13B1X00155000070	チタンインストルメント	一般医療機器	13B1X001550000264
XP グレーシー キュレット	一般医療用具	13B1X00155000254	XP スケーラー	一般医療機器	13B1X00155000263	エキスプローラー	一般医療機器	13B1X001550000046
グレーシー ディープポケット	一般医療用具	13B1X00155000072				プローブ	一般医療機器	13B1X001550000049
XP グレーシー ディープポケット	一般医療用具	13B1X00155000256				インタープロキシマルカーバー	一般医療機器	13B1X001550000065
グレーシー アクセス	一般医療用具	13B1X00155000073				TNTコンボジットインストルメント	一般医療機器	13B1X001550000057
XP グレーシー アクセス	一般医療用具	13B1X00155000255				カーバー/充填器	一般医療機器	13B1X001550000056

※ 色調は印刷のため、現品と若干異なることがあります。
 ※ 製品の仕様および外観等はお断りなく変更することがあります。
 ※ 掲載の価格は、2018年4月現在の希望医院価格です。(価格には消費税は含まれておりません)

ご使用に際しては、必ず製品の添付文書をお読みください。

製造販売元 **株式会社 ジーシー**
東京都板橋区連沼町76番1号

DIC(デンタルインフォメーションセンター)
 お客様窓口 ☎0120-416480
 受付時間9:00a.m.~5:00p.m.(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<http://www.gcdental.co.jp>

支店
 ●東京(03)3813-5751 ●大阪(06)4790-7333
 営業所
 ●北海道(011)729-2130 ●名古屋(052)757-5722
 ●東北(022)207-3370 ●九州(092)441-1286